

Инструкция

Массажер для ног Ergonova MaxiGO 4

Полезные ссылки:

[Массажер для ног Ergonova MaxiGO 4 - смотреть на сайте](#)

[Массажер для ног Ergonova MaxiGO 4 - читать отзывы](#)

ERGONOVA

MaxiGo 4

массажер для ног / foot massager



Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением массажера для ног Ergonova MaxiGo 4! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.


СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ	3
УПРАВЛЕНИЕ	4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6


Правила техники безопасности

- Пожалуйста, избегайте прямого контакта вашей кожи с продуктом.
- Изделие оснащено нагревательным устройством, поэтому имейте это в виду, если вы нечувствительны к теплу.
- Пожалуйста, не используйте изделие в среде с высоким содержанием бензина, разбавителя, спирта или других агрессивных моющих средств, таких как отбеливатель, чтобы избежать обесцвечивания, деформации, трещин или неисправностей.
- Пожалуйста, не садитесь на изделие и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Пожалуйста, не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей.
- Люди, перечисленные ниже, не должны использовать продукт:
 - беременные женщины;
 - люди, страдающие сердечными заболеваниями или другими проблемами со здоровьем.
- Рекомендуется использовать продукт не более 15 минут за раз. Чрезмерно длительное использование за один раз может вызвать мышечную или нервную боль.
- Детям не разрешается использовать изделие без присмотра взрослых.
- Перед или во время использования продукта, пожалуйста, не наносите медицинский / косметический крем или эмульсию на продукт или ваши ноги.
- Пожалуйста, не используйте изделие, если есть повреждения на съемных чехлах или кабеле питания.
- Пожалуйста, не используйте изделие, если вода случайно попала внутрь него.
- Пожалуйста, прекратите использование продукта, если возникает боль.

Наименование компонентов

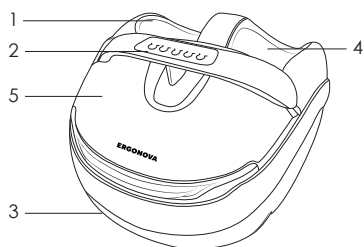

1. Застежка-молния
2. Панель управления
3. Нижняя часть корпуса
4. Съемные чехлы (отсоединение: расстегните молнию, чтобы отсоединить ножные чехлы / установка: прикрепите застежки на крючок и петлю, а затем застегните молнию)
5. Верхняя часть корпуса

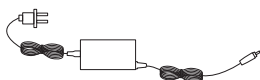

Управление



Панель управления

Питание

Когда устройство находится в режиме ожидания, мигает красный индикатор. Нажмите кнопку, чтобы включить устройство с активированными функциями, такими как автоматическая программа массажа, функция нагрева и постукивающий массаж (зеленый свет); Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить все функции.

Авто

Когда устройство работает, нажмите эту кнопку, чтобы переключиться между 3 автоматическими программами массажа (с чередованием зеленого, синего и красного света для каждой программы).

Режим

В программе автоматического массажа нажмите эту кнопку для управления постукивающим массажем, роликовым массажем и воздушно-компрессионным массажем. Когда устройство включено, будут активированы постукивающий массаж, воздушно-компрессионный массаж и роликовый массаж (зеленый свет). Нажмите кнопку, чтобы остановить постукивающий массаж, пока остаются воздушно-компрессионный и роликовый массаж (синий свет). Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы остановить роликовый массаж, пока остаются воздушно-компрессионный и постукивающий массаж (красный свет). Нажмите кнопку в третий раз, чтобы остановить роликовый и постукивающий массаж, пока сохраняется воздушно-компрессионный массаж (свет выключен).

Интенсивность

Нажмите кнопку, чтобы настроить один из 3 уровней интенсивности (низкий: зеленый свет / средний: синий свет / высокий: красный свет). Когда устройство включено, по умолчанию будет активирован низкий уровень интенсивности.

Примечание: Длительное нажатие кнопки «Режим» для активации только постукивающего массажа: нажмите кнопку «Интенсивность», чтобы настроить скорость постукивающего массажа на 3 уровнях; нажмите кнопку «Режим», чтобы выбрать один из 3 режимов постукивающего массажа. Если постукивающий массаж активируется не сам по себе, нажмите кнопку «Интенсивность», чтобы отрегулировать его между 3 уровнями интенсивности.

Техническое обслуживание

- Пожалуйста, отключите устройство от источника питания перед чисткой.
- Пожалуйста, чистите только мягкой и слегка влажной губкой.
- Пожалуйста, не чистите с помощью каких-либо агрессивных моющих средств (например, бензола и растворителя).

Устранение неисправностей

Проблема	Решение проблемы
Устройство перестает работать после подключения к источнику питания.	Пожалуйста, проверьте, находится ли кабель питания в хорошем состоянии без каких-либо повреждений.
	Пожалуйста, проверьте, правильно ли подключен штекер.
	После длительной работы температура устройства и двигателя может повыситься, и устройство автоматически перейдет в режим защиты. Пожалуйста, отключите устройство от источника питания и не используйте в течение 30-50 минут, чтобы дать ему остыть.
Продукт перестает работать во время использования.	Если таймер был активирован и время истекло, пожалуйста, перезапустите устройство.
	Отключите устройство от источника питания, снова подключите его к источнику питания, а затем перезапустите.

Если вам нужна помощь по вопросам, связанным с продуктом, послепродажным обслуживанием или другими соответствующими проблемами, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Технические характеристики

Наименование: массажер для ног

Модель: MaxiGo4

Напряжение: 100В-240В 50Гц/60Гц

Потребляемая мощность: 65Вт

Таймер: 15 мин

тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены



ERGONOVA



Designed by Ergonova Germany
www.ergonova.ru

