


Инструкция

Массажер ног 2 в 1 Fujimo Ingyang (Инь Ян) F158

Полезные ссылки:

[Массажер ног 2 в 1 Fujimo Ingyang \(Инь Ян\) F158 - смотреть на сайте](#)

[Массажер ног 2 в 1 Fujimo Ingyang \(Инь Ян\) F158 - читать отзывы](#)

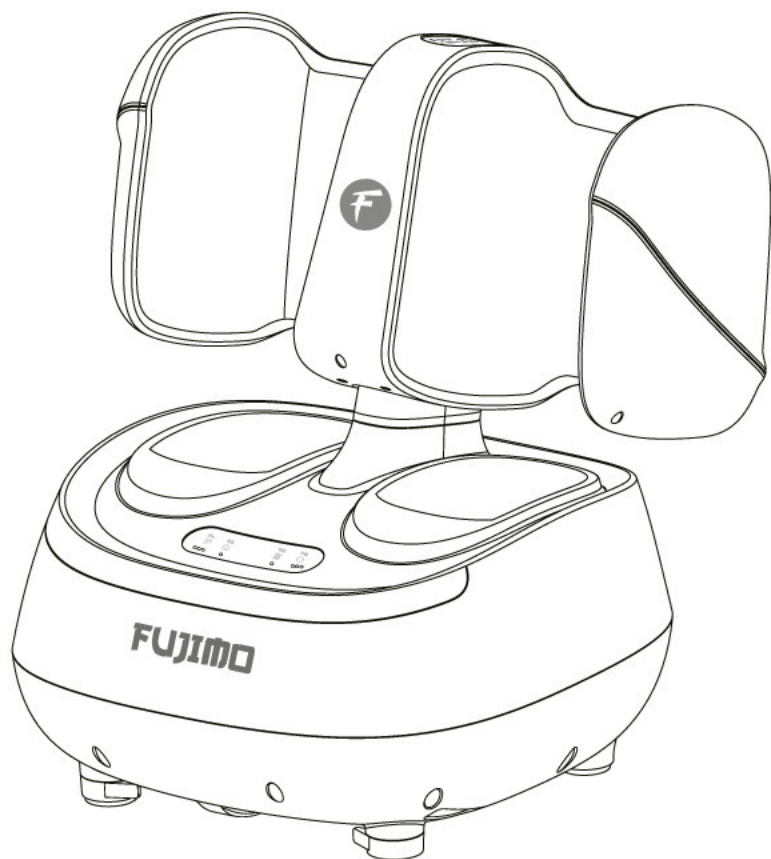

Инструкция пользователя

Перед использованием массажной накидки, обязательно прочитайте эту инструкцию.
версия 1.21



Инструкция пользователя

Перед началом использования FUJIMO ING YANG, пожалуйста внимательно прочитайте данное руководство пользователя.

**На момент печати данной инструкции
вся информация корректна**

Благодарим Вас за выбор массажера ног FUJIMO ING YANG для заботы о вашем здоровье. Тестирование массажера FUJIMO доказало его надежность и безопасность применения для индивидуального использования в домашних условиях.

Приготовьтесь откинуться на спинку кресла, расслабиться и отдохнуть. Массажер ног FUJIMO предназначен для полной релаксации вашего тела и души. Это позволит Вам окунуться в мир комфорта и отдыха с помощью встроенных автоматических программ расслабляющего массажа ног.

- Роликовый скраб массаж ГУАША воздействует на акупунктурные точки стопы, восстанавливая внутреннюю энергию и силы.
- Компрессионный массаж воздушными подушками снижает нервное напряжение и улучшает циркуляцию крови.
- Оздоровляющие свойства теплового воздействия усиливают эффект массажа и снимают болевые ощущения.
- Верхний блок массажера ног можно поворачиваться на 360° для массажа передней и задней части икр.
- Массажер ног имеет две панели управления, для нижнего и верхнего массажного блока.
- Верхний блок оборудован внутренним встроенным аккумулятором и может использоваться отдельно для массажа коленей, ног, рук и т. д.

Содержание

Содержание	1
Меры безопасности	2 - 3
Составные части	4
Порядок эксплуатации	5 - 8
Устранение проблем в работе	9
Чистка и уход	10
Спецификация	11
Условия гарантии	12 - 13

Меры безопасности

FUJIMO



Пожалуйста, внимательно прочитайте этот раздел перед использованием, для правильной эксплуатации массажера. Во избежание проблем и вопросов в будущем, сохраните данное руководство.

1. Следующие лица должны проконсультироваться со своим врачом перед использованием массажера ног:

- Если у вас установлен кардиостимулятор или какой-либо другой имплант, кроме зубного;
- Если у вас имеются проблемы с сердцем;
- Если у вас больная спина ;
- Если у вас слабые или поврежденные кости;
- Если вы недавно перенесли операцию;
- Во время беременности или сразу после родов;
- Если у вас сильные воспалительные процессы или опухоль;
- Если у вас остеопороз;
- Если у вас проблемы с кровообращением или имеется такое заболевание как тромбоз
- Если у вас кожная инфекция
- Если вы проходите медицинское или восстановительное лечение;
- Если у вас физические аномалии;
- Если у вас были травмы в результате несчастного случая или заболевания, связанные с позвоночником.


2. Не допускайте попадания жидкости на поверхность или внутрь массажера.
3. Не используйте массажер в помещениях с высокой влажностью (например : в ванной, бане или бассейне)
4. Используйте массажер только с указанным в инструкции напряжением питания.
5. Пожалуйста, не используйте массажер, если шнур питания, основной кабель или сам он повреждены.
6. Ради собственной безопасности не открывайте и не разбирайте массажер ног.

Меры безопасности

7. Этот массажер ног не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими и психическими способностями, пока они не получат необходимые рекомендации или консультации от лиц ответственных за их безопасность.
8. Если массажер или сетевой шнур повреждены, следуйте мерам безопасности и обратитесь в сервисный центр FUJIMO для проведения экспертизы или устранения дефекта. Не пытайтесь самостоятельно устранять поломку, в противном случае, гарантия будет не действительна.
9. Массажер ног не предназначен для использования детьми без присмотра взрослых.
10. Не используйте массажер ног, если его внешнее покрытие повреждено или если на него было оказано недопустимое механическое или электрическое воздействие. Свяжитесь для консультации с авторизованным сервисным центром.
11. Используйте массажер только по назначению, как указано в инструкции.
12. Не используйте массажер ног на стуле со слабой или подвижной спинкой.
13. Не используйте массажер в комнате с высокой влажностью и высокой температурой или рядом с нагревательными приборами (например электронагреватель)
14. Не наносите медицинские и косметические крема или лосьоны на ноги или другие массируемые части тела перед или во время использования.
15. Не трясите и не роняйте массажер ног. Не повреждайте, не изгибайте, не тяните, не скручивайте сетевой шнур питания. Защищайте его от давления тяжелых предметов, избегайте попадания шнура между предметами во время переноски массажера.
16. Повреждение шнура питания может привести к возгоранию или удару электрическим током

Составные части


FUJIMO

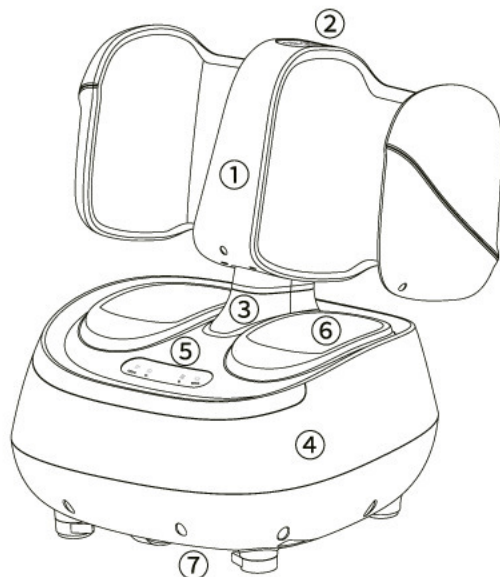

- ① Блок массажа икр
- ② Панель управления блока массажа икр
- ③ Суппорт блока для массажа икр
- ④ Блок массажа стоп
- ⑤ Панель управления блока массажа икр
- ⑥ Съемные чехлы
- ⑦ Опоры массажеры


Отдельный блок массажа икр

Возьмитесь за верхний блок массажа икр и поднимите его, чтобы разделить массажер для икр и массажер для стоп, которые могут использоваться отдельно.

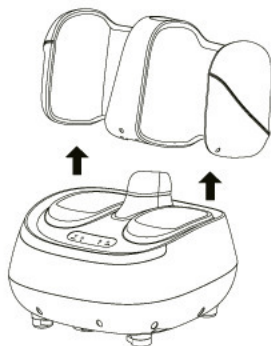

Вращения блока массажа икр

Поворачивайте блок массажа икр по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы легко регулировать зону массажа ног.

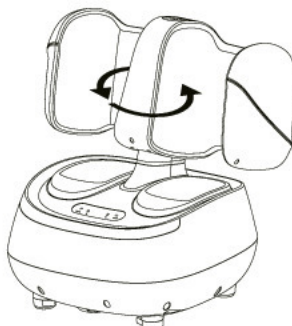



Порядок эксплуатации



Панели управления находятся в верхней и нижней частях массажера и могут управлять блоками массажа при отдельном или совместном использовании. Верхний блок массажа икр имеет функции разминающей воздушной компрессии и прогрева, а нижний блок массажа стоп функции роликового массажа стоп, разминающей воздушной компрессии и прогрева.

Кнопки управления массажем

1		<p>Питание: В выключенном состоянии нажмите эту кнопку для включения массажера, при этом загорится индикатор и массажер по умолчанию перейдет в режим 1. Нажмите эту кнопку еще раз для выключения массажера, при этом индикатор погаснет.</p>
2		<p>Прогрев: <i>Активна при включенном массажере</i> Нажмите эту кнопку, чтобы активировать функцию прогрева. Каждое нажатие циклически переключает прогресс между режимами: «Нет Прогрева» -> «Прогрев» -> «Нет Прогрева». Когда массажер включается, функция Прогрева активируется по умолчанию и загорается индикатор прогрева.</p>

3		Режим: <i>Активна при включенном массажере</i> Нажимайте кнопку для циклического переключения между режимами: режим 2 -> режим 3-> режим 1-> ... При этом загорается соответствующий индикатор. Режим 1 включается по умолчанию при включении массажера.		
		Описание трех режимов массажа	Режим 1: Комфорт	Комбинированный массаж чередует несколько техник воздействия на различные области ног с умеренной интенсивностью.
			Режим 2: Релаксация, подготовка ко сну	В основном сочетает воздушную компрессию с функцией прогрева
			Режим 3: Глубокое облегчение	Роликовый массаж стоп сочетается с воздушной компрессией, глубоким разминанием и сжатием.
4		Сила Аэро: <i>Во включенном состоянии</i> Нажмите кнопку для изменения силы компрессии массажа и скорости роликов. Каждое нажатие циклично меняет интенсивность в следующей последовательности: высокая -> низкая -> средняя -> высокая ... При этом загорается соответствующий индикатор. По умолчанию сила компрессии имеет средний уровень.		





Зарядка массажера

1. Совместите верхний блок массажа икр с нижним блоком массажа стоп и подключите сетевую вилку к розетке питания;
2. При зарядке, индикатор питания мигает. При полной зарядке массажера индикатор питания погаснет;
3. Массажер не может использоваться при зарядке, заряжайте его только в выключенном состоянии;
4. Для полной зарядки от слабого тока потребуется около 4 часов.

Порядок эксплуатации

Варианты использования

- Вставьте сетевую вилку в розетку. Этот массажер предназначен для работы от сети ~ 220-240 В Частотой 50-60 Гц. Проверьте заранее, совпадает ли напряжение в вашем доме с данными параметрами.
- Выберите зону для массажа в соответствии со своими личными предпочтениями.

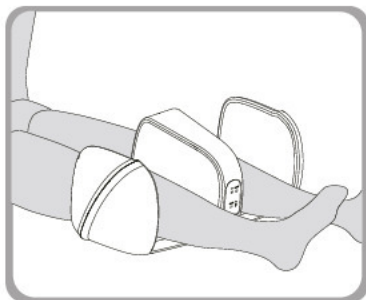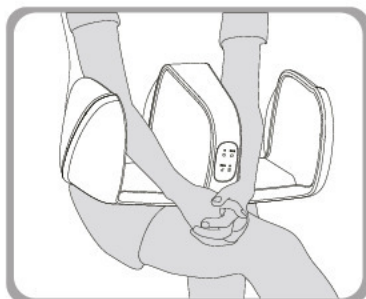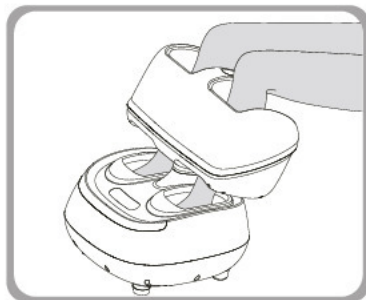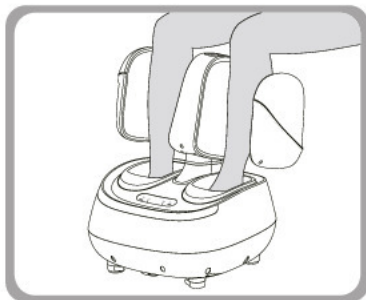

Примечание: во время использования массажера ног в раздельном или комбинированном виде, если вам необходимо изменить область массажа, пожалуйста, сначала выключите его перед изменением положения.

Устранение проблем

FUJIMO

Данная страница показывает наиболее распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при работе массажера. Если вы не можете решить проблему с помощью информации ниже, пожалуйста свяжитесь с представителями компании FUJIMO или ее авторизованными дилерами.

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажер не работает	Массажер не подключен к сети.	Подключитесь к сети. Убедитесь, что напряжение сети соответствует заявленным параметрам питания.
	Закончилось время сеанса и массажер автоматически перешел в режим ожидания.	Перезапустите массажер, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
	Вы использовали массажер длительное время, вызвав его перегрев и автоматическое срабатывание защиты.	Отключите массажер от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут. После этого вы можете использовать массажер заново.
	На массажер была оказана чрезмерная нагрузка, что привело к срабатыванию защиты.	Отключите массажер от сети и освободите его от нагрузки. После этого вы можете заново его использовать.
Массажер сильно нагрелся	Вы использовали массажер длительное время, вызвав его перегрев.	Отключите массажер от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут. После этого вы можете заново его использовать.
При работе массажера издается шум	Этот звук вызван работой мотора и компрессора массажера.	Звук механизмов не означает, что массажер неисправен.

Чистка и уход

Чистка массажера

1. Никогда не используйте абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона при чистке массажера.
2. Перед чисткой отключите вилку от розетки.
3. Протрите корпус массажера сухой тканью.
4. Не используйте влажную ткань или моющие средства.

Хранение

1. Храните массажер в выключенном состоянии.
2. Храните массажер в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей.
3. Не кладите поверх массажера тяжелый груз.



Если покрытие массажера повреждено или есть какие-либо механические неисправности, пожалуйста, прекратите его использование. Незамедлительно свяжитесь с сервисным центром FUJIMO или авторизованным дилером.

Спецификация

FUJIMO

Наименование	FUJIMO INGYANG
Модель	F158
Тип	Массажер ног
Входное напряжение питания	АС ~ 220 - 240 В, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	65 Вт
Автоматический таймер	15 минут
Габаритные размеры	475 (Д) x 380 (Ш) x 425 (В) мм
Вес Нетто	около 8,6 кг

Условия гарантии

Все товары торговой марки FUJIMO имеют сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 и одобрены для использования на территории стран Таможенного Союза. Мы гарантируем высокое качество товара при условии соблюдения правил его эксплуатации. Срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня покупки.

В течение гарантийного срока продавец берет на себя обязательства по бесплатному устранению неисправностей, возникших по вине завода производителя, при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в инструкции эксплуатации.

ЗОЗПП не обязывает проводить возврат исправного товара в течение 14 дней с момента покупки. Массажная накидка является технически сложным товаром и в соответствии с Постановлением Правительства от 19.01.1998 года № 55 не подлежат возврату или обмену.

Условия предоставления гарантии:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении условий:
 - Правильное и полное заполнение гарантийного сертификата;
 - Наличие кассового или товарного чека (кассового приходного ордера), позволяющих достоверно установить дату приобретения изделия.
2. Компания оставляет за собой право в отказе от бесплатного гарантийного обслуживания в случае не предоставления выше указанных документов или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой, что вызовет сомнения или затруднения в установлении факта приобретения товара по гарантии.
3. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей. Возмещение материального ущерба, компенсацию морального вреда или иных убытков, независимо от их происхождения, связанных с приобретением и эксплуатацией товара, настоящая гарантия не предусматривает.

4. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, а так же ремонт и замену деталей, являющихся расходными материалами (компонентами, периодическая замена которых необходима для поддержания работоспособности товара в течение срока эксплуатации).
5. Гарантия не распространяется на повреждения быстро изнашиваемые части (чехол и обивка).
6. Не подлежат гарантийному ремонту, а так же замене или возврату товар с дефектами, возникшими вследствие:
 - Неправильной установки, эксплуатации и обслуживания товара;
 - Умышленных или неумышленных действий покупателя и иных лиц, грубого обращения, использования товара не по прямому назначению, указанному в инструкции;
 - Неправильной транспортировки товара;
 - Механических повреждений, независимо от причин их происхождения;
 - Не соблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца, попадание внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - При ремонте или внесении конструктивных изменений не уполномоченными лицами;
 - В случае подключения к питанию не рекомендованному в инструкции по эксплуатации;
 - При использовании товара с аксессуарами и другим оборудованием, не предусмотренным для совместной эксплуатации;
 - Продолжение эксплуатации товара, несмотря на наличие очевидных признаков, свидетельствующих о неисправности (посторонних звуков, запаха, дыма и других);
 - Несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, природных явлений;
 - При нарушении рекомендуемого режима использования и бесперебойной работе, что приводит к сокращению срока его эксплуатации.
7. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных законодательством РФ и стран Таможенного Союза.

