

Инструкция

Массажер ног Hansun Footure FC8901 Золотой

Полезные ссылки:

[Массажер ног Hansun Footure FC8901 Золотой - смотреть на сайте](#)

[Массажер ног Hansun Footure FC8901 Золотой - читать отзывы](#)

HANSUN™ 韩尚®
ЭКСПЕРТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ



FOOTURE 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Массажер ног FC8901

версия 1.16

Ваше Здоровье - Наша Забота

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	01
Составные части	04
Функции массажера	05
Перед использованием	06
Порядок эксплуатации	08
Снятие тканевого чехла	09
Иллюстрации использования	10
Хранение и обслуживание	11
Устранение проблем	12
Спецификация	12

Меры Безопасности

Благодарим Вас за покупку массажера ног. Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами безопасности перед использованием массажера. Степень опасности разделяется на оповещения «Предупреждение» и «Внимание». Сохраните данное руководство для дальнейшего обращения к нему в случае возникновения вопросов.

Важные меры безопасности

Для обеспечения безопасной и правильной эксплуатации, пожалуйста, тщательно прочтите инструкцию перед использованием этого массажера.

- Используйте массажер только как описано в данном руководстве.
- Всегда отключайте массажер от электрической сети сразу после использования или перед очисткой.
- Не используйте массажер, если у Вас чувствительная кожа, нейропатия или плохое кровообращение.
- Не позволяйте детям или людям с психическими отклонениями использовать массажер без надлежащего контроля. Неправильное использование может быть опасно.
- Не используйте массажер под одеялом или другим покрывалом. Чрезмерный нагрев может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
- Не накрывайте массажер, чтобы избежать электрических неисправностей или повреждений из-за чрезмерно высокой температуры двигателя.
- Немедленно остановите массаж, если Вы чувствуете какой-либо дискомфорт.
- Никогда не используйте массажер, если он упал, поврежден сетевой шнур или вилка; если он неисправен, или если он упал в воду. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр, чтобы сделать необходимую проверку и ремонт.
- Не используйте компоненты, которые не были рекомендованы производителем.
- Не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия массажера.
- Если Вы хотите отключить питание, пожалуйста, убедитесь, что выключили все функции массажа на панели управления. После этого выньте вилку шнура питания из розетки.
- Пожалуйста, не используйте массажер в качестве медицинского аппарата. Если Вам необходимо профессиональное лечение, обращайтесь к медицинским работникам.

Меры Безопасности

Меры безопасности при эксплуатации

Не используйте массажер во влажных или чрезвычайно пыльных условиях во избежание возникновения неисправности.

- Не следует использовать этот массажер при температуре выше 40°C.
- Не используйте массажер на открытом воздухе, вне помещения.
- Избегайте размещения или эксплуатации массажера под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательными приборами, плитами.

Меры безопасности для пользователя

Убедитесь в том, что массажер расположен в удалении от горячей поверхности.

- Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера, если у Вас есть следующие заболевания:
 - Болезни сердца, злокачественные опухоли, боли в спине, сколиоз позвоночника, гипертония, остеопороз и т. д.
 - Физический дискомфорт, лихорадка, отеки и воспаления, ушибы, аллергия и т. д.
 - При предупреждении врача, о недопустимости массажа, чтобы избежать травмы или физических недомоганий, таких как сгустки крови (тромбоз), тяжелые аневризмы, острые венозные опухоли, все виды воспаления кожи, инфекционные заболевания кожи (в том числе воспаление подкожной клетчатки) и т. д.
 - Также, женщинам во время беременности или в менструальный период.
- **Предупреждение:** Нельзя использовать массажер вместе со следующими медицинскими аппаратами:
 - 1) При использовании кардиостимулятора или другого имплантируемого медицинского оборудования.
 - 2) При использовании искусственного сердца.
 - 3) При использовании электрокардиографа или аналогичного медицинского оборудования.

В противном случае это может привести к неисправности медицинского оборудования, поставив жизнь пользователя в опасность.


Меры по электробезопасности

- Не включайте электропереключатель мокрыми руками.
 - Не мочите и не распыляйте воду на электрпереключатель массажера.
- Важные предупреждения по электробезопасности**
- Не дотрагивайтесь до вилки влажными руками. В противном случае Вы можете пострадать от поражения электрическим током или сломать массажер.
 - Не тяните за провод при отключении вилки. Пожалуйста, держитесь за корпус вилки.
 - Время работы массажера по умолчанию составляет 15 минут, после чего все функции выключаются. Пожалуйста, отключите массажер от электросети сразу после использования.
 - Держите шнур вдали от горячей поверхности.
 - Не кладите вилку под массажер или какие-либо тяжелые предметы.
 - Не наматывайте сетевой шнур вокруг массажера, чтобы избежать поломок, удара электрическим током или пожара.
 - Не используйте массажер, если у него поврежден кабель питания или вилка.
 - Не используйте массажер, если розетка расшатана.
 - Не переносите массажер, взявшись за его шнур питания.
 - Если вилка питания повреждена, обратитесь в сервисный центр для необходимого ремонта.

Внимание

- Не засыпайте во время использования массажера.
- Не используйте массажер в состоянии алкогольного опьянения.
- Не вставляйте на массажер и не кладите на него тяжелые предметы.
- Не используйте массажер более 30 минут одновременно.
- Не используйте массажер, если тканевые чехлы изношены.
- Не используйте массажер в течение часа до или после еды.
- При использовании массажера при низкой комнатной температуре, не включайте сразу функцию прогрева. Сначала отрегулируйте температуру до комнатной, и только затем активируйте прогревающую функцию.
- При перемещении массажера из места хранения с низкой температурой в более теплое помещение, на его внутренних компонентах может образоваться конденсат. Оставьте массажер при комнатной температуре в течение трех часов перед использованием.
- Не используйте массажер, если он неисправен или некорректно работает.
- Если во время массажа произошло отключение электричества, отключите вилку от розетки, чтобы избежать поломки массажера при внезапном восстановлении питания.
- Прекратите использование массажера во время грозы.

Составные Части

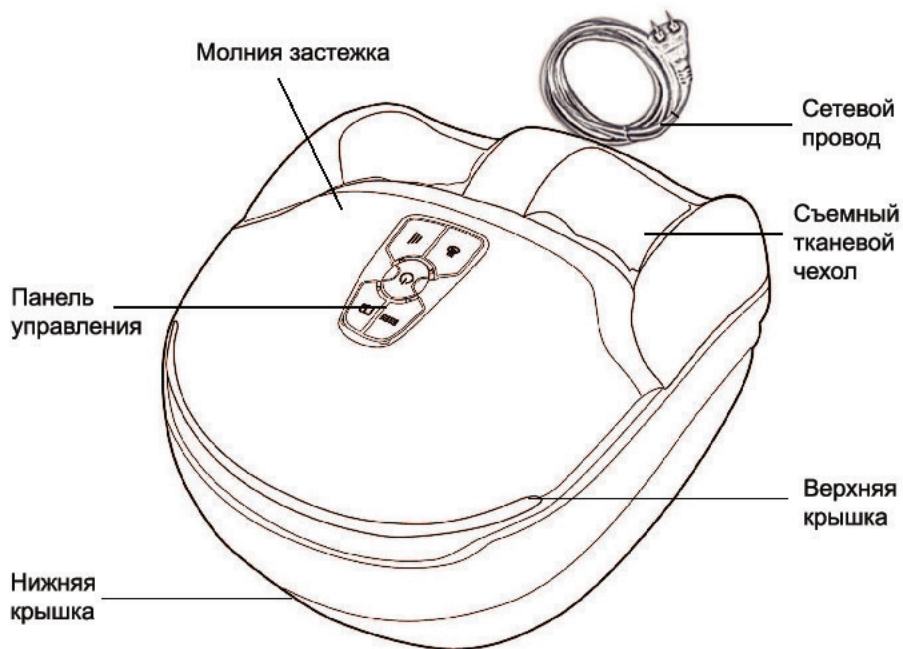

Функции Массажера

Инновационный дизайн

Впервые, специально разработанный инновационный дизайн корпуса, повторяющий формы современного автомобиля.



Специально разработан для ухода за ногами

Комбинирует два ряда разминающих роликов, Шиаци, воздушную компрессию, нагрева и вибрационной терапии. Предоставляет глубокий акупунктурный массаж ног.



Новая идея для улучшения кровообращения в массажере для ног

Вибрационный массаж ног, U-образная форма воздушных подушек с комфортной тепловой терапией, помогает снять боли и дискомфорт.



Съемные матерчатые чехлы

Тканевые чехлы для ног можно снимать и стирать.



Безопасность

В процессе массажа, при внезапном отключении электричества, массажер автоматически выпускает воздух, чтобы убрать давление.



Функции

Воздушные подушки для стоп и пяток имитируют акупунктурный надавливающий массаж, помогая улучшить кровообращение и снимая отечность ног.



360° воздушные подушки с обертывающим эффектом


Компрессионный массаж воздействует на различные рефлекторные зоны. Два комплекта воздушных подушек, установленных в области пяток и стоп, имеет обертывающий эффект глубокого массажа. Данная компрессия эффективно сочетается с разминающим и вибрационным воздействием, что дает более глубокий эффект массажа для оздоровления Ваших ног.

Перед Использованием

Перед использованием

Пожалуйста, храните и используйте массажер в сухом месте и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.

Поместите массажер на подстилку или коврик, чтобы уменьшить шум и вибрации от его работы.

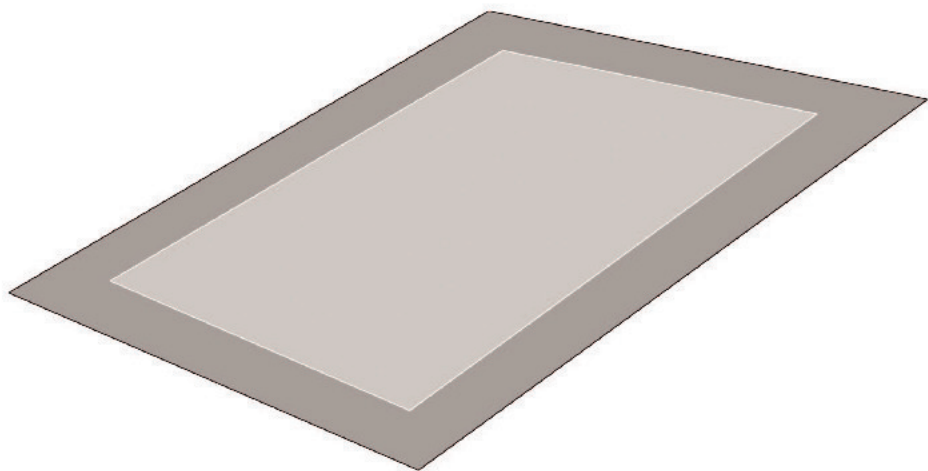

Порядок Эксплуатации

Пожалуйста, убедитесь, что поверхность и состояние сетевого провода в порядке.

Внимание! Не вставляйте и не вынимайте сетевую вилку мокрыми руками.



Питание массажера осуществляется только от сети переменного тока DC 110 В - 240 В, Частотой 50 / 60 Гц.

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует данным параметрам спецификации.

- Подключите адаптер переменного тока к розетке.
- При подключении питания, раздастся звуковой сигнал и индикатор кнопки питания на панели управления начнет моргать красным светом. Это означает что массажер находится в режиме ожидания.
- Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы начать выполнение массажа ног.
- Выберите другую программу, чтобы продолжить сеанс массажа.




Перед Использованием

Кнопки панели управления

Вибрация: Кнопка включает и выключает функцию вибрации. Она горит, когда вибрация включена и гаснет, когда выключена. Для перехода в ручной режим, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. После этого, каждое нажатие кнопки последовательно включает вибрацию в 3 режимах: 1 режим синий, 2 режим красный, 3 режим зеленый. Четвертое нажатие выключает функцию вибрации.

Прогрев: Нажмите кнопку для включения прогрева. При этом кнопка загорится красным светом. Нажмите кнопку еще раз для выключения прогрева.

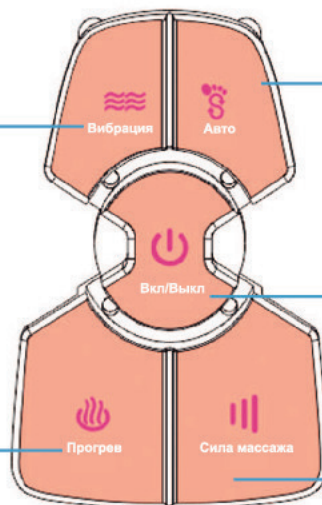

Авто: 3 автоматических режима массажа: Вставьте ноги в массажер перед нажатием этой кнопки. Каждое нажатие кнопки переключает 3 режима: Синий свет режим 1, Красный свет режим 2, Зеленый свет режим 3.

Вкл/Выкл: Кнопка включает и выключает массаж ног. В режиме ожидания кнопка мигает красным светом. Нажмите кнопку для начала массажа. Загорится зеленый свет и включится 1 режим вибрации, 1 авто режим и функция прогрева. Нажмите кнопку еще раз, для выключения массажа.


Сила массажа: Кнопка переключает 3 уровня интенсивности компрессии. Зеленый - низкий уровень, синий - средний уровень, красный - высокий уровень. При отключении массажа свет кнопки гаснет.

Примечание: 1) При включении функции вибрации кнопка "Сила массажа" регулирует три уровня интенсивности вибрации.
2) В автоматическом режиме массажа, кнопка "Сила массажа" регулирует интенсивность воздушной компрессии.

Снятие Чехла


Снятие тканевого чехла

1. Расстегните молнию.
2. Снимите тканевой чехол.

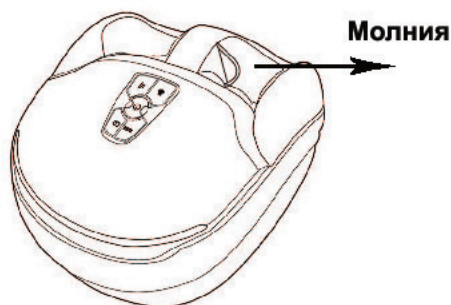


Установка тканевого чехла

1. Вставьте тканевой чехол в нишу для ног.
2. Закрепите язычок молнии в замке.
3. Застегните молнию.

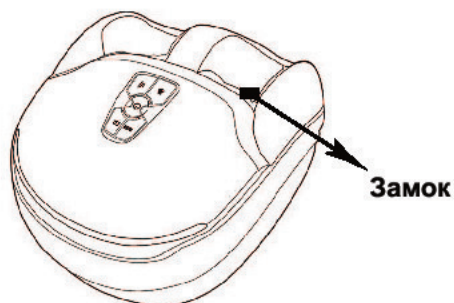

Иллюстрации Использования

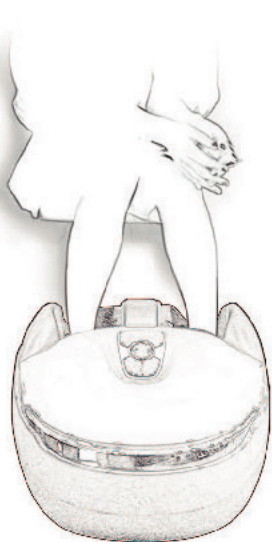

Не вставляйте руки внутрь ниши для ног.



Обслуживание массажера

Хранение

- Пожалуйста, уберите массажер в картонную коробку, и храните в безопасном, сухом, хорошо вентилируемом и темном месте.
- Не скручивайте сетевой провод вокруг массажера.
- Не вешайте массажер за сетевой провод и не держитесь за провод при перемещении массажера.
- Избегайте соприкосновения поверхности массажера с острыми предметами.
- Пожалуйста, не храните массажер под прямыми солнечными лучами или в местах с повышенной температурой.
- Храните массажер в чистом и сухом помещении.
- Когда массажер длительное время не используется, пожалуйста, накройте его чехлом от пыли.

Порядок чистки

- Перед очисткой убедитесь, что шнур питания отключен от электрической розетки и что массажер полностью остыл.
- Используйте влажную чистую ткань для очистки массажера. Убедитесь, что массажер полностью высох перед повторным использованием.
- Съемные тканевые чехлы можно стирать.

Предупреждение!

Избегайте использования бензина, растворителя или других агрессивных моющих средств для очистки массажера.

Устранение Проблем

Если у Вас возникли проблемы, описанные ниже, пожалуйста, попробуйте решить их следуя описанию. Если массажер все еще неисправен или не работает, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром или уполномоченным дилером для необходимых проверок и ремонта.

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажер не работает	Массажер не подключен к питанию правильно	Плотно вставьте вилку в розетку. Проверьте соответствие напряжения питания массажера напряжению питания местной электросети
	Не включен переключатель питания	Включите переключатель питания
	Вы использовали массажер без перерыва в течение 40 минут из-за чего сработала защита от перегрева	Отключите массажер от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут, после чего Вы можете включить его снова
	На массажер была оказана чрезмерная нагрузка	Уберите нагрузку с массажера и снова начните массаж
Массажер выключился	Пропало питание	Проверьте наличие питания
	Закончилось время сеанса 15 минут	Включите массажер заново
	Массажер работал без перерыва длительное время и перегрелся	Отключите массажер от сети и дайте ему остыть, после чего Вы можете включить его снова

Спецификация

Тип	Массажер ног HANSUN FC8901
Напряжение питания	DC 100 ~240 В, 50 / 60 Гц
Мощность	65 Вт
Таймер	15 минут

HANSUN™ 韩尚®
ЭКСПЕРТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ