

Инструкция

Массажер ног Hansun Snuggle Feet FC8526D Золотой


Полезные ссылки:

[Массажер ног Hansun Snuggle Feet FC8526D Золотой - смотреть на сайте](#)

[Массажер ног Hansun Snuggle Feet FC8526D Золотой - читать отзывы](#)

HANSUN 韩尚®
ЭКСПЕРТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

Массажер для ног Snugglefeet

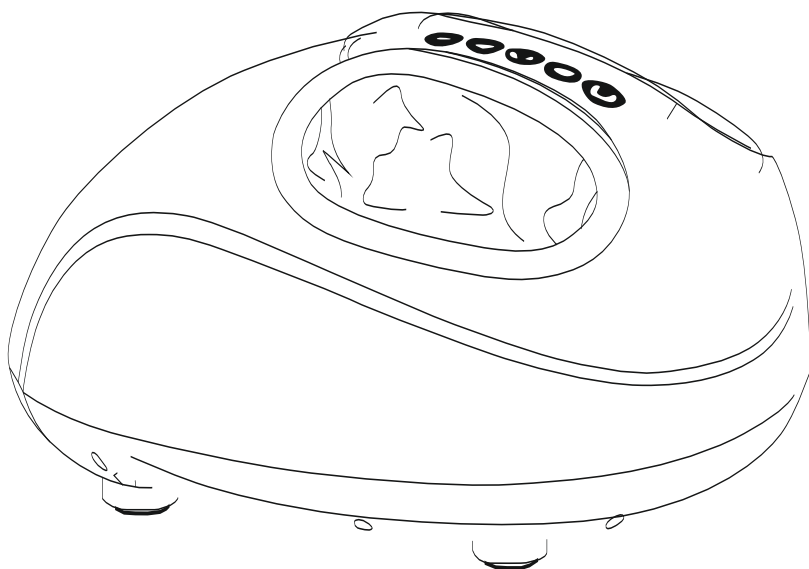

Руководство пользователя

FC8526D

Внимательно прочитайте руководство перед использованием и сохраните его для обращения в случае вопросов



Благодарим Вас за покупку массажера для ног. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием. Следует уделить особое внимание мерам безопасности при эксплуатации данного массажера, а также следить за его корректной работой.

▶ Содержание

| | |
|---|---|
| Меры безопасности | 1 |
| Состав массажера | 3 |
| Панель управления | 4 |
| Описание функций | 5 |
| Порядок использования | 6 |
| Порядок чистки и хранения | 7 |
| Поиск и устранение неисправностей | 8 |
| Технические характеристики | 9 |

► Меры безопасности

- Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить причинение вреда здоровью людей и ущерба имуществу.
- Риски нецелевого использования классифицируются по степени опасности и возможного ущерба.

| | |
|--|---|
|  Внимание | Указывает на риск получения серьезной травмы |
|  Предупреждение | Указывает на опасность получения травмы или повреждения имущества |

A. **Внимание!**

1. Пожалуйста, тщательно прочитайте руководство перед использованием для обеспечения безопасности.
2. Используйте массажер только согласно руководству.
3. Люди, имеющие следующие проблемы со здоровьем, должны проконсультироваться с врачом перед использованием массажера:
 - Люди с имплантированными медицинскими устройствами, чувствительными к электромагнитным помехам (кардиостимуляторы)
 - Люди со злокачественными опухолями
 - Люди с нарушениями сердечной деятельности
 - Беременные или только что родившие женщины
 - Люди с ограниченными сенсорными возможностями, из-за нарушений периферической нервной системы, диабета и др.
 - Люди с остеопорозом, с серьезными травмами позвоночника, вывихами, растяжением мышц и др.
 - Люди, имеющие открытые раны на теле
 - Люди, нуждающиеся в отдыхе или чувствующие себя уставшими
 - Люди с острым дефицитом кровообращения в ногах
 - Люди, страдающие от межпозвоночной грыжи
 - Люди, испытывающие другие проблемы со здоровьем
4. Обязательно вынимайте вилку из розетки после использования или перед чисткой массажера.
5. С осторожностью используйте функцию “нагрев”, чтобы избежать ожогов. Не используйте массажер на онемевших частях, слишком чувствительных или с плохим кровообращением. При неправильной эксплуатации могут возникнуть опасные последствия для здоровья.

► Меры безопасности


6. Не используйте массажер под подушкой или одеялом, иначе может возникнуть опасность возгорания и поражения электрическим током.
7. Не накрывайте массажер при использовании, что может послужить причиной выхода массажера из строя.
8. Использование массажера детьми и людьми с психическими или физическими нарушениями, возможно только под присмотром.
9. Сразу же выключите массажер, если почувствовали недомогание.
10. Не используйте массажер: если шнур питания или вилка повреждены, если он не функционирует должным образом, если он упал или попал в воду. Пожалуйста, сразу же обратитесь в сервисный центр для проверки массажера.
11. Не используйте не оригинальные детали при ремонте.
12. Не разбирайте массажер самостоятельно.
13. Перед отключением питания, выключите все кнопки массажера.
14. Массажер не используется для диагностики и лечения.

⚠ Предупреждение!


1. Если во время массажа возникло физическое недомогание, немедленно прекратите массаж и обратитесь к врачу. Игнорирование вышесказанного, может привести к серьезным травмам или заболеваниям.
2. Массаж не должен превышать 15 минут. Сделайте паузу 30 минут до начала второго сеанса.
3. Не вынимайте вилку из розетки, держась за шнур. Это позволит избежать поражения электротоком и поломки массажера.
4. Оберегайте массажер от контакта с водой.
5. При хранении не наматывайте шнур вокруг корпуса массажера, во избежание повреждения шнура питания.
6. Не используйте массажер в ванной или других местах с повышенной влажностью. Игнорирование вышесказанного может привести к поражению электрическим током или неисправности.
7. При чистке, обязательно обесточьте массажер, во избежание поражения электрическим током и ожога.
8. Когда массажер не используется, отключите вилку из розетки.
9. Не наступайте на массажер.
10. Не роняйте массажер, это может привести к травме или поломке.

► Состав массажера

Состав массажера

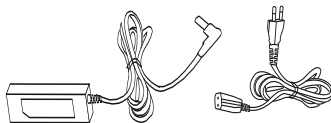

Адаптер питания

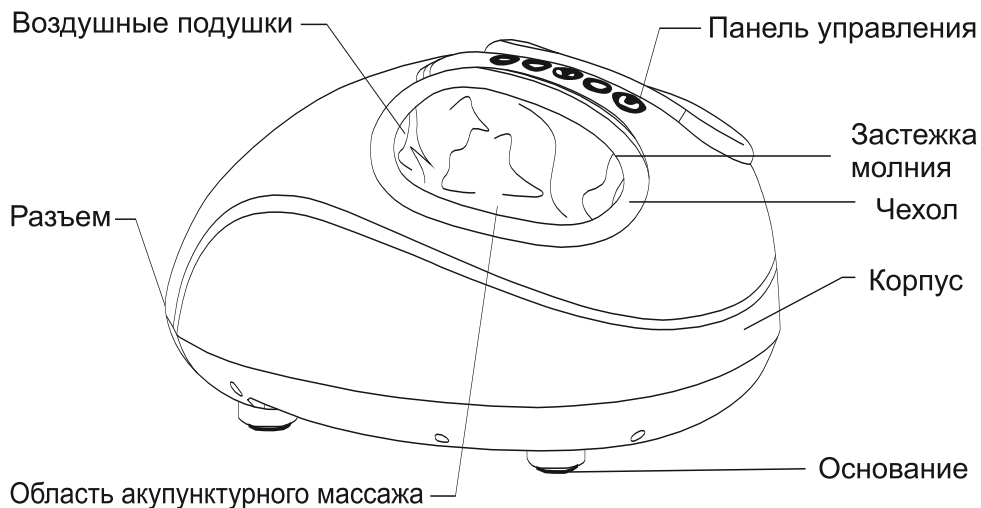

▶ Панель управления

Кнопки панели управления

Функция Ионизации — ● ИОН

Функция Нагрева — ● ТЕПЛО

Интенсивность — ● СИЛА
МАССАЖА

Выбор режима — ● РЕЖИМ

ВКЛ/ВЫКЛ питания — ● ПИТАНИЕ

Световой индикатор — ●

► Описание функций

Описание функций управления



Кнопка ионизации: Нажмите эту кнопку, чтобы активизировать функцию ионизации, при этом загорится индикатор. При нажатии этой кнопки второй раз, функция ионизации выключается и индикатор гаснет.



Кнопка нагрева: Нажмите эту кнопку, чтобы активировать функцию нагрева, при этом загорится красный индикатор. Повторное нажатие кнопки останавливает функцию нагрева и гаснет индикатор (по умолчанию нагрев включен).



Кнопка интенсивности: Для изменения силы массажа, нажмите эту кнопку во время массажа. По умолчанию установлен средний уровень и индикатор горит красным цветом; нажмите кнопку, чтобы изменить интенсивность до слабого уровня, при этом индикатор загорится синим цветом. Нажмите кнопку еще раз, чтобы изменить интенсивность до сильного уровня, при этом индикатор загорится одновременно красным и синим цветом.



Кнопка режима массажа: Для выбора режима, нажмите эту кнопку во время массажа. По умолчанию массажер ног выполняет 1 режим массажа и индикатор горит красным цветом; нажмите кнопку, чтобы включить 2 режим массажа, при этом индикатор загорится синим цветом. Нажмите кнопку еще раз, чтобы включить 3 режим массажа, при этом индикатор одновременно загорится красным и синим цветом (по умолчанию установлен 1 режим).



Кнопка питания: Нажмите эту кнопку чтобы начать массаж для ног. При этом загорится индикатор Питания. Нажмите кнопку еще раз для выключения массажера. Затем обесточьте массажер от сети и все индикаторы погаснут (по умолчанию таймер массажа установлен на 15 минут).

► Порядок использования


А. Перед использованием массажера

- Пожалуйста, проверьте что массажер исправен и готов к работе
- Пожалуйста, убедитесь что массажер установлен на ровную горизонтальную поверхность.

В. Использование массажера

Шаг первый:

- ❶ Подключите выходной штекер адаптера к массажеру
- ❷ Вставьте вилку в разъем адаптера
- ❸ Вставьте сетевую вилку в розетку

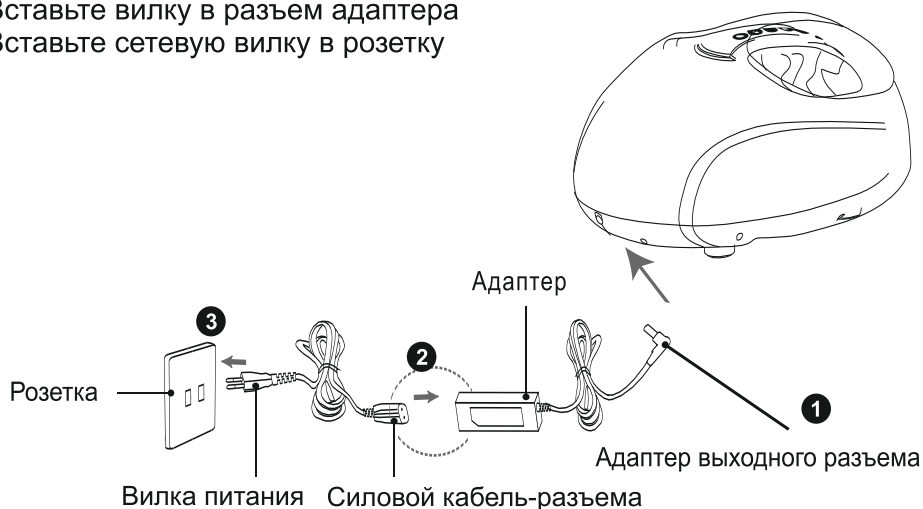

Шаг второй:

- Удобно сядьте на стул и поместите ноги в ниши для массажа.

Шаг третий:

- Нажмите кнопку “Питание” для начала массажа.

С. После использования массажера

1. Нажмите кнопку “Питание” еще раз, чтобы остановить массаж.
2. Выньте вилку из розетки.

► Порядок чистки и хранения

А. Порядок чистки

1. Выключите массажер и отсоедините его от сетевого питания, перед очисткой.
2. Для чистки используйте чистую и сухую ткань.
3. Никогда не используйте растворитель, бензин или спирт для чистки поверхности массажера..

В. Порядок хранения

1. Если массажер не используется, положите его в коробку. Храните массажер в прохладном, проветриваемом и сухом месте.
2. Следите за тем, чтобы питающий провод массажера не изгибался.
3. Не пытайтесь самостоятельно разбирать массажер.
3. Храните массажер в недоступном для маленьких детей месте.
4. Не храните массажер вместе с острыми или режущими предметами, иначе его поверхность может быть поцарапана или порезана.
5. При включении массажера, после долгого времени хранения, после включения кнопки питания убедитесь, что все индикаторы горят и массаж выполняется правильно .

► Устранение неисправностей

| Проблема | Возможная причина | Решение |
|----------------------|---|---|
| Массажер не работает | Массажер не подключен к питанию правильно | Плотно вставьте вилку в розетку. Проверьте соответствие напряжения питания массажера напряжению питания местной электросети |
| | Не включен переключатель питания | Включите переключатель питания |
| | Вы использовали массажер без перерыва в течении 40 минут из-за чего сработала защита от перегрева | Отключите массажер от сети и дайте ему остыть в течении 60 минут, после чего Вы можете включить его снова |
| | На массажер была оказана чрезмерная нагрузка | Уберите нагрузку с массажера и снова начните массаж |
| Массажер выключился | Пропало питание | Проверьте наличие питания |
| | Закончилось время сеанса 15 минут | Включите массажер заново |
| | Массажер работал без перерыва длительное время и перегрелся | Отключите массажер от сети и дайте ему остыть, после чего Вы можете включить его снова |



Если возникшая проблема не была решена вышеуказанными способами



Прекратите использование массажера и обратитесь в Сервисный центр

► Технические характеристики

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Наименование: | Массажер для ног |
| Модель: | FC8526D |
| Напряжение питания: | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Входное напряжение: | 24 В постоянного тока |
| Мощность: | 50 Вт |
| Вес нетто: | 5 кг |

HANSUN韩尚®
ЭКСПЕРТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ