

Инструкция

Массажер ног Hansun Vibraleg FC1001

Полезные ссылки:

[Массажер ног Hansun Vibraleg FC1001 - смотреть на сайте](#)

[Массажер ног Hansun Vibraleg FC1001 - читать отзывы](#)

МГНОВЕННОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ
ДЛЯ ВАШИХ СТОП, ИКР И БЕДЕР

HANSUN 韩尚



**VIBRATION
LEG MASSAGER**

ИНСТРУКЦИЯ | МАССАЖЕР
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | FC1001

ЗДОРОВЬЕ КАЖДОМУ



ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

- a) ущерб, вызванный не соблюдением инструкций, касающихся использования массажера или установки деталей и компонентов;
- b) ущерб, причиненный в результате злоупотребления, умышленного вреда, пожара, наводнений, землетрясения или других внешних причин;
- c) ущерб, причиненный сервисной службой, или любым лицом, не являющимся представителем компании HANSUN;
- d) аксессуары, используемые без рекомендации производителя с данным массажером;
- e) массажер или его часть, которая была изменена с целью изменения функциональности или возможностей;
- f) аксессуары и составные части, предназначенные для периодической замены покупателем в течение нормального срока службы массажера, включая, помимо прочего, батареи или лампочки;
- g) любой проданный массажер «с рук», включая, с ограниченным сроком гарантии, демонстрационные и отремонтированные; или
- h) массажер, который используется в коммерческих или для рекламных целей.

КОМПАНИЯ HANSUN НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО МАССАЖЕРА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЮБЫХ НАРУШЕНИЙ ЭТОЙ ГАРАНТИИ В ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ HANSUN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОГО И ВСЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	01
Спецификация	04
Составные части	05
Функциональные особенности	06
Порядок использования	07
Панель управления	08
Хранение и обслуживание	09
Устранение проблем	10
Ограничение гарантии	11

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание!

1. Пожалуйста, тщательно прочитайте руководство перед использованием массажера для обеспечения безопасности.
2. Используйте массажер только согласно руководству.
3. Люди, имеющие следующие проблемы со здоровьем, должны проконсультироваться с врачом перед использованием массажера:
 - Люди с имплантированными медицинскими устройствами, чувствительными к электромагнитным помехам, например кардиостимуляторы.
 - Люди со злокачественными опухолями
 - Люди с нарушениями сердечной деятельности
 - Беременные женщины или женщины в послеродовой период
 - Люди с ограниченными сенсорными возможностями, из-за нарушений периферической нервной системы, диабета и др.
 - Люди с остеопорозом, с серьезными травмами позвоночника, вывихами, растяжением мышц и др.
 - Люди, имеющие открытые раны
 - Люди, нуждающиеся в отдыхе или чувствующие себя уставшими
 - Люди с острым дефицитом кровообращения в ногах
 - Люди, страдающие от межпозвоночной грыжи
 - Люди, испытывающие другие проблемы со здоровьем
4. Обязательно отключайте массажер от сети питания после его использования или перед чисткой.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

На этой странице приведены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть с массажером. Если вы не можете решить проблему с помощью приведенной ниже информации, незамедлительно свяжитесь с компанией ОТО или ее официальным дилером.

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажер не работает	Массажер не подключен к питанию правильно	Плотно вставьте вилку в розетку. Проверьте соответствие напряжения питания массажера.
	Не включен переключатель питания	Включите переключатель питания
	Вы использовали массажер без перерыва в течении 40 минут из-за чего сработала защита от перегрева	Отключите массажер от сети и дайте ему остыть в течении 60 минут, после чего Вы можете включить его снова
	На массажер была оказана чрезмерная нагрузка	Уберите нагрузку с массажера и снова начните массаж
Массажер выключился	Пропало питание	Проверьте наличие питания
	Закончилось время сеанса 15 минут	Включите массажер заново
	Массажер работал без перерыва длительное время и перегрелся	Отключите массажер от сети и дайте ему остыть, после чего Вы можете включить его снова

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Хранение

- Пожалуйста храните массажер в упаковочной коробке, в безопасном, сухом, хорошо проветриваемом и темном месте.
- Не перекручивайте шнур питания.
- Не вешайте массажер за шнур питания и не перемещайте его, держась за шнур питания.
- Избегайте соприкосновения поверхности массажера с острыми предметами.
- Пожалуйста, не храните массажер под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой.
- Держите массажер в чистоте и если он не будет использоваться в течение длительного времени, накройте его пылезащитным чехлом.

Порядок Чистки

Перед чисткой убедитесь, что шнур питания отсоединен от электрической розетки и что массажер полностью остыл после использования.

- Для очистки массажера используйте влажную ткань. После чего протрите массажер сухой салфеткой.
- Тканевые чехлы для ног могут сниматься и их можно стирать в стиральной машине.

Внимание!

- Не используйте бензол, растворитель и другие агрессивные моющие средства для очистки продукта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5. С осторожностью используйте функцию “прогрев”, во избежании ожогов. Не используйте массажер на онемевших частях, слишком чувствительных зонах или местах с плохим кровообращением. При неправильной эксплуатации могут возникнуть опасные последствия для здоровья.
6. Не используйте массажер под подушкой или одеялом, иначе может возникнуть опасность возгорания и поражения электрическим током.
7. Не накрывайте массажер при использовании, что может послужить причиной выхода массажера из строя.
8. Использование массажера детьми и людьми с психическими или физическими нарушениями, возможно только под присмотром.
9. Сразу же выключите массажер, если почувствовали недомогание.
10. Не используйте массажер: если шнур питания или вилка повреждены, если он не функционирует должным образом, если он упал или попал в воду. Пожалуйста, сразу же обратитесь в сервисный центр для проверки.
11. Не используйте не оригинальные детали при ремонте.
12. Не разбирайте массажер самостоятельно.
13. Перед отключением питания, выключите все кнопки массажера.
14. Массажер не является медицинским оборудованием и не может использоваться для замены полноценной медицинской помощи и лечения.
15. Не используйте массажер, если вы плохо себя чувствуете.
16. Массажер спроектирован для снятия напряжения мышц и боли в ногах.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

17. Не используйте массажер во время сна или если вы чувствуете сонливость.
18. Никогда не используйте массаж с опухшими или воспаленными ногами или если есть какие-либо повреждения кожи.
19. Не используйте массажер в сочетании с другим терапевтическим оборудованием или электрическим одеялом и т. д., так как это может привести к травме.
20. Не используйте массажер после принятия болеутоляющих средств или алкоголя.
21. Используйте массажер только так, как описано в инструкции.
22. Перед включением питания убедитесь, что шнур правильно подключен к розетке.
23. При попытке перемещения убедитесь, что шнур питания отключен.

Вилка питания

Если вилка полностью не входит в розетку переверните ее и попробуйте снова. В случае, если вилка по-прежнему не подходит, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту для установки нужной вилки.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопка Питание

Индикатор питания по умолчанию горит желтым и после нажатия загорается синим.

Кнопка Прогрев

Контролирует функцию прогрева, которая включается отдельно. При включении загорается красный или синий индикатор.

Кнопка Интенсивность

Контролирует интенсивность массажа. В режиме Колени и Терапия кнопка изменяет силу компрессии; в режиме Вибрация изменяет интенсивность вибрации (по умолчанию стоит средний уровень интенсивности: зеленый свет слабый уровень, синий свет средний, красный свет сильный уровень).

Кнопка Колени

Управляет функцией массажа коленей. Когда функция включена, индикатор светится синим.

Кнопка Терапия

Управляет автоматическим режимом массажа. Когда кнопка активирована индикатор светится синим.

Кнопка Вибрация

Управляет функцией вибрации стопы. При активной функции индикатор горит синим.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Размещение массажера

Используйте массажер в сухом помещении вдали от воздействия прямых солнечных лучей.

Для поглощения шума от работы массажера, подстелите под него коврик.

Порядок использования


а) Перед использованием

Разместите массажер на плоской горизонтальной поверхности и для поглощения шума от его работы, подстелите под него коврик.

б) Как пользоваться массажером

Массажер работает от сети 100-240В, 50-60Гц

- Подключите кабель питания к розетке.
- Переверните переключатель питания на задней части массажера в положение «I» и его индикатор загорится красным. На панели управления начнет мигать желтым светом кнопка Питание, что означает нахождение массажера в режиме ожидания.

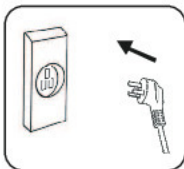

Не вставляйте и не вынимайте шнур питания мокрыми руками

1. Перед включением в розетку убедитесь, что переключатель питания находится в положении «O».

После выполнения данных требований, можно приступить к эксплуатации массажера.

в) Эксплуатация массажера

Перед тем как включить массажер поместите в него ноги, после чего активируйте массаж кнопкой Питание на панели управления.

Переключайте режимы массажа кнопками на панели управления.

После окончания массажа выньте ноги и переведите переключатель питания в положение «O», после чего отсоедините вилку из розетки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!

- Управляйте массажером и переключателями, как описано в данном руководстве.
- Перед включением питания убедитесь, что шнур питания правильно подключен к электрической розетке.
- При перемещении массажера обязательно отсоедините шнур питания от розетки.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЩЕНИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ!

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип: Массажер ног

Модель: FC1001

Напряжение питания: 100-240В, 50-60Гц

Мощность: 95 Вт



Вес Брутто: 20 кг

Вес Нетто: 18 кг

Габариты упаковки: 565 x 505 x 590 мм

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Размещение частей и управления

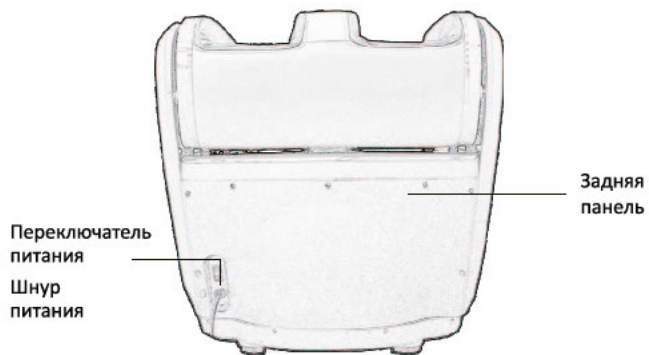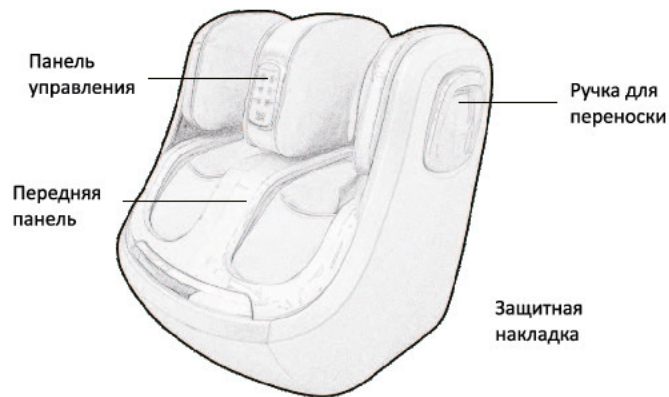

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

3D массаж

Совмещен с несколькими видами массажа, такими как разминающий, Шиatsu, воздушно-компрессионный, вибрационный и массаж с прогревом.

Новые методы массажа

Массаж стоп с вибрацией, убирает боль в мышцах, икрах и суставах.

Регулировка угла наклона блока массажа коленей

Регулируется от 0 до 140 градусов для достижения наиболее удобной позиции массажа.

Подогрев и полная массажная терапия

Массаж с расширенным диапазоном, который позволяет охватить такие области, как икры ног, колени и зону бедренной кости.

Основные особенности массажёра

Улучшает гибкость мышц, нормализует кровообращение, снимает боль и усталость, стимулирует все необходимые акупунктурные точки, чтобы улучшить не только физическое здоровье, но и психологическое. Успокаивает нервную систему, снимает усталость и нормализует сон.