

Инструкция

Массажер ног Lotus Ultra Tens YS-005-НВ

Полезные ссылки:


[Массажер ног Lotus Ultra Tens YS-005-НВ - смотреть на сайте](#)

[Массажер ног Lotus Ultra Tens YS-005-НВ - читать отзывы](#)



YS-005HB

Инструкция по применению

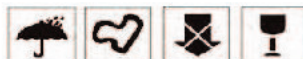



www.lotus.ru



ГАРАНТИЯ

Компания предоставляет гарантию на продукцию в соответствии с законом по защите прав потребителя.

Если возникли какие-либо проблемы с продукцией, позвоните в демонстрационный центр, в котором вы приобрели данное оборудование или в ближайший центр

Наименование		ДИЛЕР (СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР)
Серийный номер модели		
Покупатель		
Адрес		
Телефон		
Дата покупки		ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД _____ с момента покупки

Гарантийный ремонт продукции осуществляется в течение **1 года**. Продолжительность гарантии может быть ограничена, если оборудование использовалось в коммерческих целях.

Гарантия не распространяется в следующих случаях.

1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
2. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
3. Механические повреждения.
4. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
5. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.


Производитель: DONGGUAN YAOSHANG ELECTRIC APPLIACE CO.,LTD.

Address: No.5, HongYe Road South, The 138th Industrial Zone, Tangxia Town, DongGuan, Guangdong Province, P.R. China

По заказу: ООО "Лотос", 119602, Москва, ул. Академика Анохина-38/1, www.lotus.ru



ТОЧКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

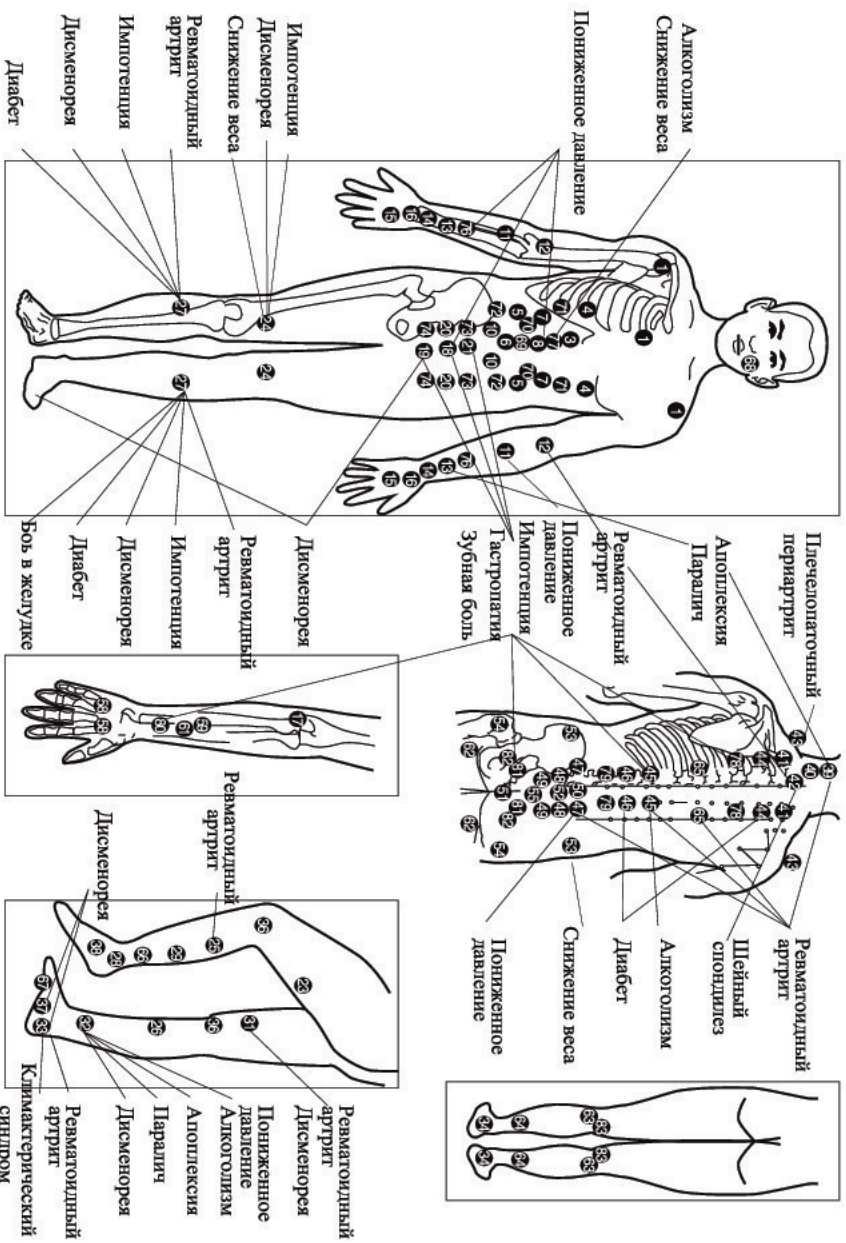



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. При использовании, интенсивность импульса должна быть скорректирована в соответствии с пользовательской необходимостью, не устанавливайте слишком сильный или слишком слабый уровень интенсивности для получения желаемого эффекта.
2. Если ваша кожа покраснела в области присоединения электродов, уменьшите интенсивность импульсов или прекратите использование аппарата.
3. Во время массажа, если вы чувствуете покалывание-это нормально. Покалывание пройдет после сеанса.
4. При использовании пояса для рефлексотерапии, используйте прокладку (входящую в комплектацию), избегая контакта металлических деталей с кожей напрямую.
5. Перед установкой электродов, убедитесь, что ваша кожа чистая. Ставьте только чистые и сухие стопы на панели для рефлексотерапии перед использованием аппарата.
6. После использования аппарата, отключите адаптер от аппарата и от розетки питания 220В.
7. Держите аппарат вдали от детей или людей с ограниченными возможностями.
8. Не используйте аппарат во время сна.
9. Не используйте аппарат при головной боли, в алкогольном опьянении, голодным, после еды и в уставшем состоянии.
10. Прекратите использование аппарата при ощущении дискомфорта или тошноты.
11. Рекомендуемое время одноразового применения 25-35 минут.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. При чистке аппарата, пожалуйста, используйте сухую салфетку или полотенце. Части, имеющие прямой контакт с кожей можно чистить салфеткой с алкоголем. Не используйте бензин или другие растворители для чистки.
2. Храните аппарат в сухом, не пыльном месте. Не подвергайте аппарат воздействию вибрации, высокой температуры и прямых солнечных лучей.
3. Если вы не используете его в течение длительного времени, выньте батарейки из пульта дистанционного управления.
4. Пожалуйста, не садитесь или становитесь на аппарат. Не роняйте аппарат и не кладите на него тяжелые предметы.
5. После охлаждения аппарата, можете упаковать его в полиэтиленовый пакет.
6. Не используйте аппарат в ванной комнате, используйте в сухом и чистом помещении.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Проверка
Индикатор питания не горит.	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте эл.питание.2. Отключите и снова включите эл.питание.3. Проверьте контакт вилки с розеткой.4. Проверьте подключение адаптера к аппарату.
Нет сигнала с импульсного выхода на электроды	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что штекер провода электродов вставлен в разъем импульсного выхода полностью.2. Проверьте, что интенсивность включена.3. Проверьте, что уровень интенсивности не на нуле.4. Проверьте, что электроды подключены к проводу.5. Проверьте, что электрод плотно прилегает к коже.

ВНИМАНИЕ

Этот аппарат не предназначен для использования взрослыми людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями. Аппарат может использоваться только под наблюдением взрослых. Если у вас сильные боли при использовании аппарата, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

Пожалуйста, немедленно прекратите использование аппарата при обнаружении нижеперчисленных признаков, во избежание поломки или несчастного случая.

Выключите питание, извлеките вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром для консультации и ремонта. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аппарат.

1. Если аппарат упал и был поврежден или в нутрь аппарата попала вода.
2. Если аппарат не правильно работает.
3. Если поврежден сетевой шнур или эл.вилка.
4. Если присутствует запах гари или от массажера исходит дым.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Перед применением, стоит запомнить, что не всем показано проведение этой процедуры. Массаж стоп не рекомендуется людям с кожными заболеваниями, низким артериальным давлением, острыми воспалительными заболеваниями, сердечно-сосудистой недостаточностью и остеопорозом.

Кроме этого его нельзя делать во время беременности, при менструации и в случае повышения температуры тела.



- контролю над весом,
- лимфодренажу,
- стимуляции гладкой мускулатуры.

Подключите кабель с разъемами к поясу и к выходу С на аппарате.

Установите ремень на нижней части спины, животе или косых мышцах живота.

Для каждой из вышеуказанных областей, начните с самой низкой интенсивности увеличивая интенсивность постепенно до нужного уровня.

Для достижения наилучших результатов необходимо убедиться, что мышцы не только покалывает но они также сокращаются.

Интенсивностью на выходах А / В / С можно управлять отдельно. Установите необходимый уровень интенсивности импульса, нажав кнопку "+" или "-" выхода «С» .

Вы должны иметь приятное ощущение.

Автоматическая / Ручная программы



Кнопка Авто/Ручн переключает в Автоматический или Ручной режим.

В ручном режиме можно настроить нужную интенсивность через нажатие "+" или "-"

В автоматическом режиме аппарат будет работать циклично используя 25 программ по 1 мин.

Это рекомендуемый режим.

Установка времени



По умолчанию 30 минут.

90 минут таймер с шагом пять минут. Нажмите "+" для увеличения, "-" для снижения.

Рекомендуемое время применения аппарата 25-35 минут каждый раз.

ИК тепло



Включение функции инфракрасного тепла позволяет увеличить циркуляцию крови и приятное ощущение тепла в стопах. Нажмите кнопку "ИК тепло" для включения функции и загорится свет в середине стопы на стимулирующих панелях. Для выключения функции нажмите кнопку «ИК тепло» еще раз.

Активация клеток, в естественных условиях молекулярного резонанса воды, увеличивает содержание кислорода в крови.

Улучшается микроциркуляции.

Улучшение кровообращения способствует улучшению обмена веществ.

Использование пульта дистанционного управления

Пульт ДУ управляет всеми функциями, так же, как кнопки на панели управления аппарата.

Снимите прозрачную защитную вкладку с батареи перед использованием.

Вставьте прозрачную защитную изоляцию после использования, чтобы продлить срок службы батареи.

Направьте пульт ДУ на аппарат и выберите необходимый режим и интенсивность для применения аппарата, нажав соответствующие кнопки.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Подключите адаптер переменного тока к гнезду постоянного тока на аппарате. Подключите адаптер к эл. питанию 220В. Нажмите кнопку "Вкл/Выкл" для включения аппарата. Экран подсветится на 1 ~ 2 секунды и погаснет, прозвучит один звуковой сигнал.
2. Аппарат готов к использованию.

Рефлексотерапия ног



Поставьте стопы на панели рефлексотерапии аппарата. Используйте аппарат на босу ногу. Если вам нужно включить функцию Ик тепла, нажмите на кнопку "ИК тепло" на аппарате или пульте дистанционного управления (ПДУ), светодиоды засветятся указывая на работу данного режима. Выберите режим или переключитесь в автоматический режим. Все режимы могут работать отдельно.

Установите необходимый уровень интенсивности импульса на панелях рефлексотерапии, нажав кнопку "+" или "-" в зоне управления панелями рефлексотерапии. Вы должны иметь приятное ощущение. (Замечание: две стопы должны стоять на панелях рефлексотерапии, в противном случае Вы не почувствуете воздействие аппарата.)

Рефлексотерапия тела



С помощью прилагаемых в комплектации электродов, аппарат предоставляет одновременное воздействие на акупунктурные точки различных групп мышц верхней части тела, делая воздействие рефлексотерапии более полным для всего тела.

Подключите кабель с клипами к электродам, снимите защитную бумажную прокладку и поместите на мышцы тела электроды для рефлексотерапии.

Для группы больших мышц можно использовать несколько электродов.

Интенсивность на выходах А / В / С можно управлять отдельно. Установите необходимый уровень интенсивности импульса, нажав кнопку "+" или "-" выхода «А» и «В» (в случае использования 2-го комплекта электродов). Вы должны иметь приятное ощущение.

(Примечание: установите на мышцы одну пару электродов для рефлексотерапии. При использовании 1 электрода Вы не почувствуете воздействие аппарата.)

Использование пояса для рефлексотерапии



Пояс прежде всего предназначен для укрепления мышц брюшного пресса, которые поддерживают внутренние органы и позвоночный столб в правильном положении. Одновременно стимулируется перистальтика желудочно-кишечного тракта и восстанавливается сократительная способность желчевыводящих путей. Используйте три различных положения пояса на животе, чередуя их: – выше пупка для воздействия на желудок, для профилактики застоя желчи и образования камней в желчном пузыре;

- по центру пупка для тех, кто страдает ожирением;
- ниже пупка для борьбы с запорами, для профилактики заболеваний мочевого пузыря.

Применение пояса способствует:

- снятию болей,
- восстановлению мышц,
- борьбе с целлюлитом,



ОПИСАНИЕ

Комплектация:

1. 4-ре электрода.



2. Пояс.

3. 2-а провода для электродов.



4. Адаптер.


5. Аппарат:

- ① Вход адаптера
- ② Вход электрода А
- ③ Вход электрода В
- ④ Вход электрода С
- ⑤ Зуммер
- ⑥ LCD экран
- ⑦ Панель управления
- ⑧ Пульт управления
- ⑨ ИК зона
- ⑩ Панель рефлексотерапии для стоп
- ⑪ Дисплей интенсивности эл.магнитных волн



УПРАВЛЕНИЕ

- ① Вкл/выкл
- ② Управление А каналом
- ③ Управление В каналом
- ④ Управление С каналом
- ⑤ Авто/Ручн
- ⑥ Вкл/Выкл функции ИК тепла
- ⑦ Управление панелями рефлексотерапии
- ⑧ Установка времени

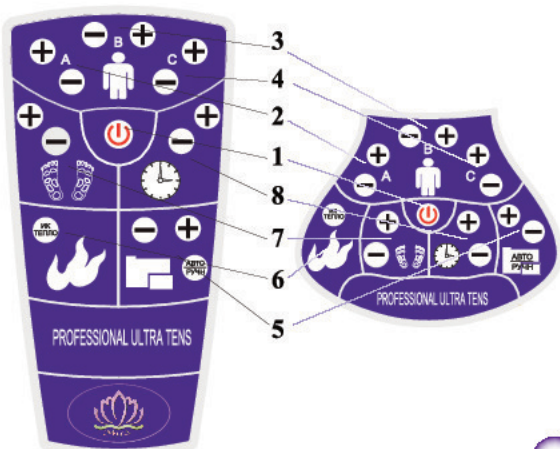



ОСОБЕННОСТИ

Pro Ultra Tens annapam – это инновация и прорыв новых технологий в использовании электрических импульсов в связи с традиционной китайской медицинской теорией точечной терапии, посредством компьютерного моделирования человеческого тела, приспособления 25 программ и 99 интенсивностей электрических импульсов к удовлетворению различных потребностей потребителя.

Pro Ultra Tens annapam обеспечивает рефлексотерапию разных частей тела: Ступни, подошвы, лодыжки и пятки ног. Руки и запястья. Икры. Спину. Живот.

25 автоматических программ.

99 уровней интенсивности.

Тепловая терапия.

Дополнительные электроды для использования на различных частях тела.

Пояс рефлексотерапии для воздействия на область живота и спины.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Annapam Pro Ultra Tens стимулирует множество точек, расположенных на стопе. С помощью аппарата можно не только снять синдром хронической усталости и улучшить общее самочувствие, но и избавиться от отечности ног, уменьшить боли в суставах. Кроме этого он поможет улучшить микроциркуляцию и устранил бессонницу. Результатом проведенной процедуры станет повышение жизненного тонуса и появление ощущения внутреннего комфорта.

Применение аппарата:

- снимает и облегчает боли различного происхождения;
- активизирует обменные процессы;
- восстанавливает крово- и лимфообращение тканей;
- способствует снятию воспалительного процесса, уменьшению отека, интоксикации;
- способствует размягчению образовавшихся рубцов;
- оказывает антибактериальное и антивирусное действие;
- повышает иммунитет;
- разжижает и очищает кровь;
- выводит токсины и яды из организма;
- стимулирует выработку эндорфинов и мелатонина;
- восстанавливает общий баланс энергии организма (пояс – «электрическая батарейка» для подзарядки организма жизненной энергией, за счёт устранения энергетических блокировок);
- обладает эффектом синергии (многократное усиление терапевтического и профилактического эффекта из-за совместного взаимодействия и взаимодополнения функций аппарата).



СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Технические характеристики
- 02 Особенности
- 03 Показания к применению
- 04 Описание
- 05 Управление
- 06 Использование
- 07 Устранение неисправностей
- 08 Внимание
- 09 Противопоказания
- 10 Меры Предосторожности
- 11 Обслуживание и хранение
- 12 Основные акупунктурные точки
- 13 Гарантия

Благодарим за использование аппарата. Для получения максимального эффекта от использования Pro Ultra Tens аппарата компании Лотос, внимательно изучите инструкцию по использованию. Внимание: компания оставляет за собой право по внесению изменений в инструкцию без уведомления потребителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- НАИМЕНОВАНИЕ: PRO ULTRA TENS АППАРАТ
- МОДЕЛЬ: YS-005NB
- НАПРЯЖЕНИЕ: 9 В
- НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК: 1,2 А
- ЧАСТОТА: 1-50 Гц
- РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ: 25 МИН



Annapam Pro Ultra Tens использует электромагнитные сигналы для улучшения циркуляции крови через мышцы, что снимает усталость и облегчает боль в ногах и ступнях.

Ноги - самый отдаленный орган от сердца, являясь окончанием нервных волокон. Для ног чаще всего характерно недостаточное кровоснабжение, медленный ток крови. В то же время, вредные вещества и продукты обмена веществ легче оседают в ступнях, что также мешает кровообращению. Стопа является наиболее чувствительной и сложной частью тела. На ступнях ног находятся рефлекторные зоны почти всех внутренних органов. На ступнях располагается 66 активных точек, 12 меридиан. Среди них наиболее важными являются 6 - селезенка, желудок, мочевого пузырь, почки, печень и желчный пузырь. Рефлекторные зоны ступней являются точками скопления нервных окончаний и уменьшенной проекцией строения всего тела. Их нервные окончания расположены в органах по всему телу, включая внутренние органы, головной мозг, мозжечок, эндокринные железы, мышцы, суставы и т.д. Нервное окончание каждого органа в ступнях имеет строго определенное место. Внутренние органы и рефлекторные зоны очень тесно взаимосвязаны между собой. Например, у кого-то появилось патологическое изменение в печени, если нажать рефлекторные зоны печени, расположенные на его ступнях, будет ощущение боли. Если же печень работает нормально, как ни нажимаи, болевых ощущений не будет.

