

# **Инструкция**

## **Массажер ног Magic Legs FC1009A**

Полезные ссылки:

[Массажер ног Magic Legs FC1009A - смотреть на сайте](#)

[Массажер ног Magic Legs FC1009A - читать отзывы](#)

**Массажер для ног**



**FC1009A**

## **Инструкция по применению**





## СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Технические характеристики
- 01 Особенности
- 02 Описание аппарата
- 03 Эксплуатация
- 04 Меры Предосторожности
- 06 Обслуживание и гарантия

Благодарим за использование аппарата. Внимательно читайте инструкцию по применению перед использованием. Внимание: компания оставляет за собой право по внесению изменений в инструкцию без уведомления потребителя.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- НАИМЕНОВАНИЕ: МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
- МОДЕЛЬ: FC1009A
- НАПРЯЖЕНИЕ АДАПТОРА: 100-220В/24В 50Гц
- МОЩНОСТЬ: 50Вт
- РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ: 15 МИН
- ВЕС НЕТТО: 6,2 КГ

## ОСОБЕННОСТИ

1. Данный массажёр использует принцип ножной рефлексотерапии, воздействия на акупунктурные точки на ступнях для достижения расслабления, донесения действия акупрессуры для уставших и болезненных ступней, голеней и избавления от усталости.
2. Верх и бока ступней массируются и нагреваются.
3. Эргономичный, лёгкий и портативный аппарат.
4. Лёгок в эксплуатации и обслуживании.




## ОПИСАНИЕ АППАРАТА

Панель управления Аккупрессурные манжеты



## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

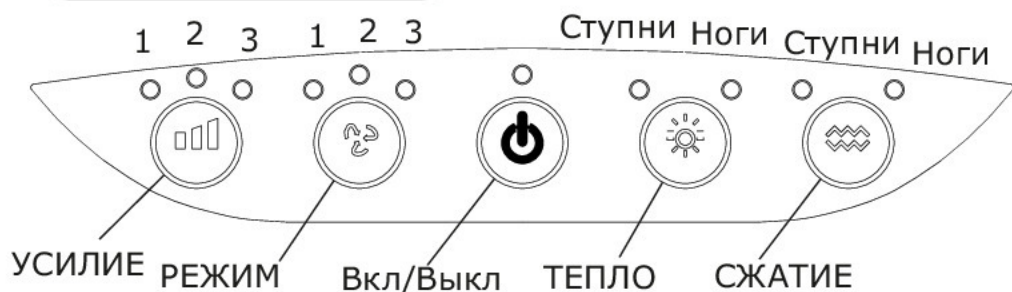

Кнопка УСИЛИЕ-3-и степени усилия (1-слабый, 2-средний и 3-сильный).

Кнопка РЕЖИМ - 3-и режима (по умолчанию 1-й режим).

Кнопка Вкл/Выкл-ключение и выключение массажера.

Кнопка ТЕПЛО - переключение подогрева ног и ступней.

Кнопка СЖАТИЕ - выбор работы аккупрессуры (ступни или голень).



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**ВАЖНО:** Не становитесь на массажёр и не создавайте избыточное давление на него (не вставляйте во время массажа или по окончании его, прежде чем встать - вытащите ступни из слотов массажёра). Это может замедлить или остановить мотор, а также вызвать его перегрев или поломку.

1. Подсоедините адаптер из комплекта к массажёру и вставьте его в розетку. Кнопка питания мигнёт красным цветом.
2. Устройтесь поудобнее в кресле или подобной высокой мебели. Расстегните молнию и вставьте ступни в слоты массажёра. Застегните молнию и расслабьтесь.
3. Нажмите кнопку питания и включите массажёр.
4. Массажёр начнёт процедуру автоматически.
5. Кнопкой **УСИЛИЕ** вы можете регулировать усилие массажа: слабый-средний-сильный. Кнопкой **РЕЖИМ** вы можете выбрать один из трех режимов массажа. Кнопкой **ТЕПЛО** вы можете включить подогрев ступней или голеней. Кнопкой **СЖАТИЕ** вы можете переключать акупрессурный режим со ступней на голени.
6. Во время работы массажёра, Вы почувствуете увеличение давления акупрессурных манжет. Выбирайте интенсивность массажа по своим ощущениям. Если чувствуете, что массаж слишком сильный или слишком слабый, переходите на режим по вашим ощущениям.
7. Для выключения массажера нажмите на кнопку Вкл/Выкл.
8. Отсоедините штекер из розетки, когда не используете массажёр.





## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### **В процессе использования.**

Не используйте массажёр в помещениях с высокой влажностью или в ванной комнате.

Не используйте массажёр на мокрое тело, это может вызвать замыкание или удар электротоком.

### **С осторожностью к применению.**

**Перед использованием обязательно проконсультируйтесь со специалистом при наличии:**

Остеопороза

Злокачественных опухолей

Беременности или прохождения менструального цикла

Нечувствительности к нагреву

### **Техника безопасности при использовании.**

Не используйте массажёр не по назначению, это может привести к травмам.

Не используйте массажёр при повреждении заводской упаковки, его частей или комплектности.

Не позволяйте детям или не умеющим обращаться с подобным оборудованием, проводить процедуры. Храните массажёр вдали от детей.

Не становитесь и не садитесь на массажёр.

Не помещайте металлические и воспламеняемые материалы на корпус массажёра.

Не используйте массажёр менее, чем за час до еды.

Не накрывайте массажёр во время процедуры. Это может привести к перегреву двигателя, его поломке или пожару.

Не выключайте и не выдёргивайте штекер из розетки во время процедуры. Это может привести к поломке массажёра или к травмам.

Не засыпайте во время массажа.





## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### **Сборка и ремонт массажёра.**

Массажёр должен обслуживаться и ремонтироваться только в Сервисном Центре. Самостоятельная разборка и ремонт не допускаются.

### **Когда нельзя применять массажёр.**

**При этих событиях, немедленно выключите аппарат и отсоедините шнур адаптера питания от розетки.**

Если вода попала в массажёр. Это может вызвать удар элетротоком.

Если чувствуете аномальные боли во время массажа, немедленно прекратите его и проконсультируйтесь с врачом.

Если обнаружите любую поломку или ненормальное состояние массажёра в процессе работы.

Если внезапно пропало электричество, возможны травмы при внезапном восстановлении питания.

Если массажёр начал искрить.

### **Штекер и шнур питания.**

Проверьте напряжение Вашей сети и сравните его с рабочим напряжением, указанным в характеристиках.

Не выдёргивайте резко штекер из розетки.

Не подсоединяйте и не отсоединяйте штекер мокрыми руками, это может вызвать поражение электротоком и поломку аппарата.

Когда штекер отсоединяете, тяните его на себя за штекер, а не за провод.

Не кладите на штекер массажёр или любой другой тяжёлый объект.

Не оборачивайте шнур питания вокруг массажёра, это может повредить шнур и вызвать пожар или удар электротоком.

Не используйте массажёр с повреждённым шнуром или штекером питания, обратитесь в Сервисный Центр для проверки.

Используйте аппарат и его комплектующие только по инструкции.



## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Используйте только сухую ткань при чистке массажера или силового кабеля.
2. В целях гигиены, периодически стирайте чехол, сняв его с аппарата.
3. Обязательно выньте вилку шнура питания из электрической розетки перед чисткой аппарата.
4. Не используйте бензин, растворитель или любые другие абразивные растворители для чистки аппарата.
5. Храните аппарат в сухом и не пыльном помещении, аккуратно свернув кабель питания.
6. Не оставляйте аппарат под воздействием прямых солнечных лучей или высокой температуры.
7. Не подключайте или отключайте аппарат от розетки мокрыми руками, может привести к удару электрическим током или выходу массажера из строя.

## ГАРАНТИЯ

Компания предоставляет гарантию на продукцию в соответствии с законом по защите прав потребителя.

Если возникли какие-либо проблемы с продукцией, позвоните в демонстрационный центр, в котором вы приобрели данное оборудование или в ближайший центр

Наименование		ДИЛЕР (СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР)
Серийный номер модели		
Покупатель		
Адрес		
Телефон		
Дата покупки		ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД _____ с момента покупки

Гарантийный ремонт продукции осуществляется в течении **1 года**. Гарантия не распространяется на расходные материалы. Продолжительность гарантии может быть ограничена, если оборудование использовалось в коммерческих целях.

### Гарантия не распространяется в следующих случаях.

1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
2. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
3. Механические повреждения.
4. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
5. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

Производитель: NINGBO INNOHUT IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

ROOM 301, 3/F, BUILDING D, NO.90, LANE 655 QIMING ROAD, YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA

По заказу: ООО "Лотос", 119602, Москва, ул. Академика Анохина-38/1, [www.lotus.ru](http://www.lotus.ru)