

Инструкция

Массажная накидка Fujimo Lotos F177

Полезные ссылки:


[Массажная накидка Fujimo Lotos F177 - смотреть на сайте](#)



ROMASU

F-177

Инструкция пользователя

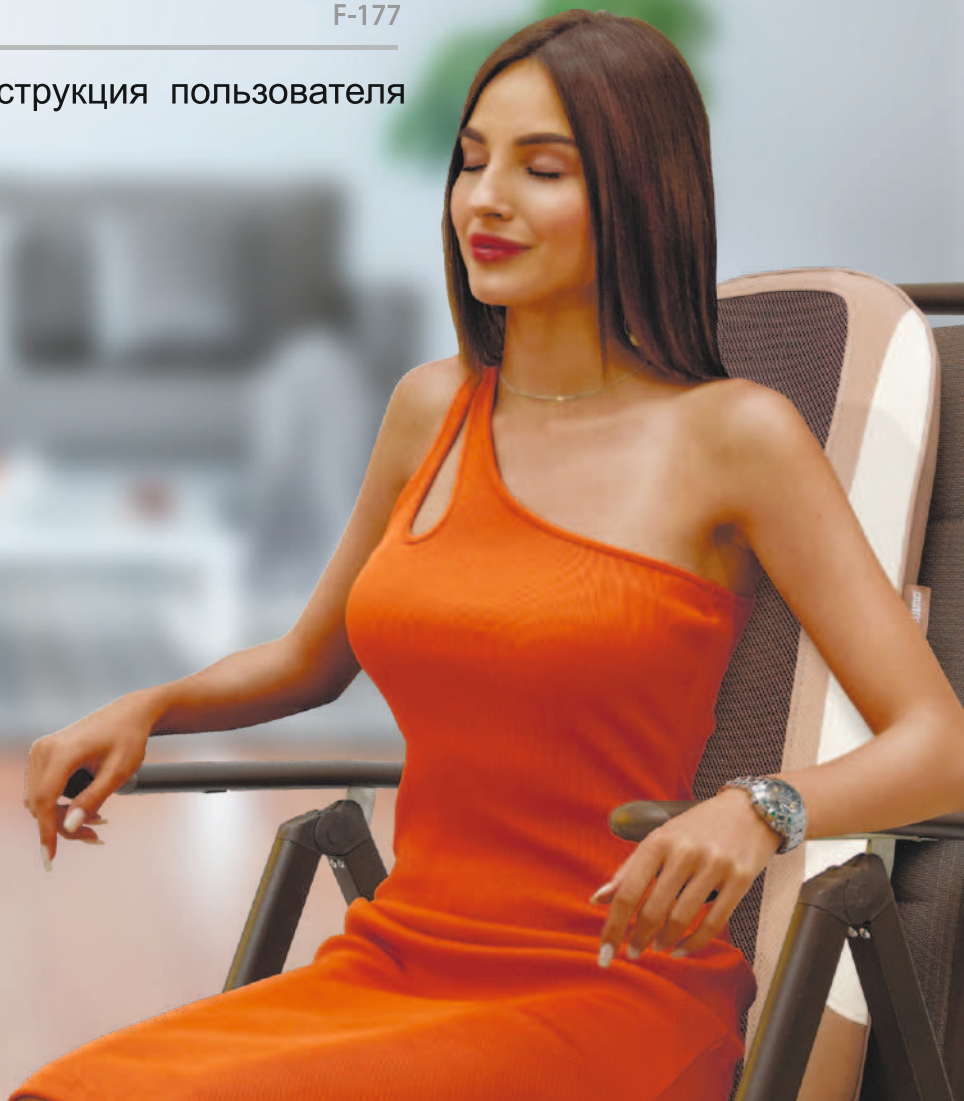

Перед использование массажной накидки, обязательно прочитайте эту инструкцию.
версия 1.20



LOTOS

F-177

Инструкция пользователя

Перед началом использования FUJIMO Lotos, пожалуйста внимательно прочитайте данное руководство пользователя.



Инструкция пользователя

На момент печати данной инструкции
вся информация корректна

Предисловие



Благодарим Вас за выбор массажной накидки FUJIMO Lotos для заботы о вашем здоровье. Тестирование массажера FUJIMO доказало его надежность и безопасность применения для индивидуального использования в домашних условиях.

Приготовьтесь откинуться на спинку кресла, расслабиться и отдохнуть. Массажная накидка FUJIMO предназначена для полной релаксации вашего тела и души. Это позволит Вам окунуться в мир комфорта и отдыха с помощью встроенных автоматических программ расслабляющего массажа спины.

- Точечный японский массаж ШИАЦУ воздействует на акупунктурные точки спины, восстанавливая внутреннюю энергию и силы.
- Раскатывающий массаж ПРОКАТ снижает нервное напряжение и улучшает циркуляцию крови.
- Оздоровляющие свойства теплового воздействия усиливают эффект массажа и снимают болевые ощущения.

С помощью программируемых функций, массажер FUJIMO может сосредоточить массаж в выбранной зоне спины. Это дает глубокую проработку мышц и полный релакс, снимая стресс и улучшая Ваше самочувствие. Просто нажмите кнопку СТАРТ и отдыхайте с комфортом!

Благодаря компактным размерам и легкому весу накидки FUJIMO Вы насладитесь массажем дома, в офисе и даже в автомобиле.

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ FUJIMO LOTOS F-177:

- Шиаци и Раскатывающий массаж спины с тепловой терапией
- Вибрационный массаж бедер
- Ручной режим Шиаци массажа для выбранной зоны спины
- Регулировка ширины Раскатывающего массажа
- 3 автоматические программы массажа спины
- 3 скорости вибрационного воздействия
- Работает от автоприкуривателя вашего автомобиля (12В).

Содержание

Содержание	1
Меры безопасности	2 - 3
Составные части	4
Пульт управления	5 - 6
Устранение проблем в работе	7
Чистка и уход	8
Спецификация	9
Гарантийный сертификат	10
Условия гарантии	11 - 12

Меры безопасности



Пожалуйста, внимательно прочитайте этот раздел перед использованием, для правильной эксплуатации массажера. Во избежание проблем и вопросов в будущем, сохраните данное руководство.

1. Следующие лица должны проконсультироваться со своим врачом перед использованием массажной накидки:


- Если у вас установлен кардиостимулятор или какой-либо другой имплант, кроме зубного;
- Если у вас имеются проблемы с сердцем;
- Если у вас больная спина ;
- Если у вас слабые или поврежденные кости, особенно позвоночник и кости спины;
- Если вы недавно перенесли операцию;
- Во время беременности или сразу после родов;
- Если у вас сильные воспалительные процессы или опухоль;
- Если у вас остеохондроз;
- Если у вас проблемы с кровообращением или имеется такое заболевание как тромбоз
- Если у вас кожная инфекция
- Если вы проходите медицинское или восстановительное лечение;
- Если у вас физические аномалии;
- Если у вас были травмы в результате несчастного случая или заболевания, связанные с позвоночником.

2. Не допускайте попадания жидкости на поверхность или внутрь массажной накидки.
3. Не используйте массажную накидку в помещениях с высокой влажностью (например : в ванной, бане или бассейне)
4. Используйте накидку только с указанным в инструкции напряжением питания.
5. Пожалуйста, не используйте накидку, если шнур питания, основной кабель или сама она повреждены.
6. Ради собственной безопасности не открывайте и не разбирайте массажную накидку.

Меры безопасности

7. Эта накидка не предназначена для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими и психическими способностями, пока они не получат необходимые рекомендации или консультации от лиц ответственных за их безопасность.
8. Если накидка или сетевой шнур повреждены, следуйте мерам безопасности и обратитесь в сервисный центр FUJIMO для проведения экспертизы или устранения дефекта. Не пытайтесь самостоятельно устранять поломку, в противном случае, гарантия будет не действительна.
9. Массажная накидка не предназначена для использования детьми без присмотра взрослых.
10. Не используйте накидку, если ее внешнее покрытие повреждено или если на нее было оказано недопустимое механическое или электрическое воздействие. Свяжитесь для консультации с авторизованным сервисным центром.
11. Используйте накидку только по назначению, как указано в инструкции.
12. Не используйте накидку на стуле со слабой или подвижной спинкой.
13. Не используйте накидку в комнате с высокой влажностью и высокой температурой или рядом с нагревательными приборами (например электронагреватель)
14. Не наносите медицинские и косметические крема или лосьоны на накидку или на свое тело перед или во время использования.
15. Не трясите и не роняйте накидку. Не повреждайте, не изгибайте, не тяните, не скручивайте сетевой шнур питания. Защищайте его от давления тяжелых предметов, избегайте попадания шнура между предметами во время его переноса. Повреждение шнура питания может привести к пожару или удару электрическим током

Составные части

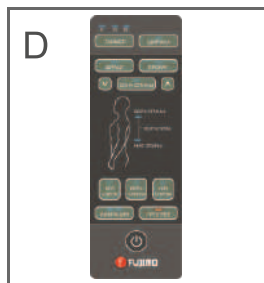

- A - Адаптер питания
- B - Сетевой шнур
- C - Адаптер для прикуривателя
- D - Пульт управления
- E - Массажная накидка

Пульт управления

A) ВКЛ/ВЫКЛ (ПИТАНИЕ)

- После подключения массажера к питанию, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. На пульте загорится светодиодный индикатор Таймера «15» и массажер перейдет в режим ожидания.
- Выберите вид и зону массажа, нажав соответствующие кнопки, чтобы начать сеанс.
- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз, чтобы выключить массажер.
- Светодиодные индикаторы выбора зоны массажа замигают и массажные ролики вернуться в исходное нижнее положение.

B) ШИАЦУ - разминающий массаж


- Нажмите кнопку ШИАЦУ для активации разминающего массажа.
- Нажмите кнопку ШИАЦУ еще раз, чтобы выключить эту функцию.

C) ПРОКАТ - раскатывающий массаж

- Нажмите кнопку ПРОКАТ для активации раскатывания.
- Нажмите кнопку ПРОКАТ еще раз, чтобы отключить эту функцию.

D) ЗОНА СПИНЫ - точечный массаж (Применяется в режиме ШИАЦУ)

- Нажмите кнопку ЗОНА СПИНЫ в режиме работы массажа Шиаци, чтобы зафиксировать массаж в выбранной зоне.
- Нажмите и удерживайте кнопку стрелки вниз ▼ или вверх ▲ для перемещения массажных роликов.
- Отпустите кнопку при достижении роликов требуемой зоны массажа.

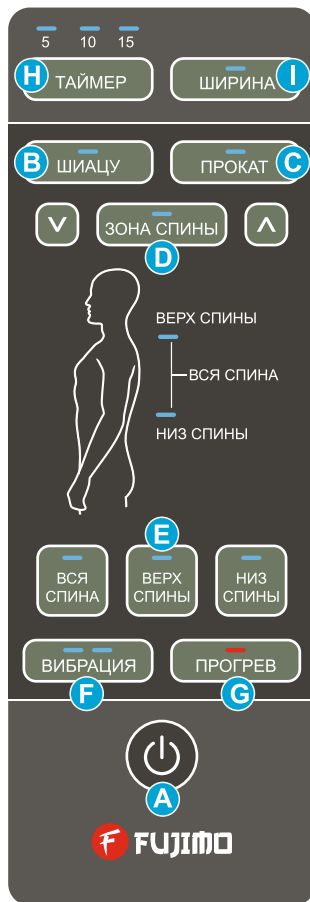

- Е) **АВТО ПРОГРАММЫ** - Вся Спина; Верх Спины; Низ Спины (используются в режиме Шиацу и Раскатывающего массажа)
- Кнопка ВСЯ СПИНА активирует массаж всей спины
 - Кнопка ВЕРХ СПИНЫ активирует массаж верхней части спины
 - Кнопка НИЗ СПИНЫ активирует массаж в области поясницы

- Ф) **ВИБРАЦИЯ** - вибрационный массаж бедер
- Нажмите кнопку ВИБРАЦИЯ один раз чтобы активировать непрерывный вибрационный массаж бедер.
 - Нажмите кнопку ВИБРАЦИЯ второй раз чтобы активировать ритмичный вибрационный массаж бедер.
 - Нажмите кнопку ВИБРАЦИЯ третий раз чтобы выключить вибрационный массаж.

- Г) **ПРОГРЕВ** - прогрев массажных роликов
- Нажмите кнопку ПРОГРЕВ для активации функции прогрева. При этом массажные ролики начнут светиться оранжевым светом.
 - Нажмите кнопку ПРОГРЕВ еще раз для выключения прогрева. При этом массажные ролики начнут светиться зеленым светом.
 - При завершении времени массажа функция прогрева выключается автоматически.

- Н) **ТАЙМЕР** - выбор времени сеанса (по умолчанию 15 мин)
- Последовательно нажимайте кнопку ТАЙМЕР для выбора времени массажа в последовательности 5 - 10 - 15 минут.

- И) **ШИРИНА** - выбор ширины раскатывающего массажа
- В активном режиме раскатывающего массажа, нажмите кнопку ШИРИНА для изменения размещения массажных роликов. Ширина изменяется последовательно и имеет четыре различные позиции.

По окончанию сеанса массажа, ролики автоматически возвратятся в нижнее положение. После этого отключите массажную накидку от питания и выньте вилку из розетки.

Устранение проблем

Данная страница показывает наиболее распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при работе массажера. Если вы не можете решить проблему с помощью информации ниже, пожалуйста свяжитесь с представителями компании FUJIMO или ее авторизованными дилерами.

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажная накидка не работает	Массажер не подключен к сети.	Подключитесь к сети Убедитесь, что напряжение сети соответствует заявленным параметрам питания.
	Закончилось время сеанса и массажер автоматически перешел в режим ожидания.	Перезапустите массажер, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
	Вы использовали массажер длительное время, вызвав его перегрев и автоматическое срабатывание защиты.	Отключите массажер от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут. После этого вы можете использовать массажер заново.
	На массажер была оказана чрезмерная нагрузка, что привело к срабатыванию защиты.	Отключите массажер от сети и освободите его от нагрузки. После этого вы можете заново его использовать.
Массажная накидка сильно нагрелась	Вы использовали массажер длительное время, вызвав его перегрев.	Отключите массажер от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут. После этого вы можете заново его использовать.
При работе массажера издается шум	Этот звук вызван работой мотора массажера.	Звук механизма не означает, что массажер неисправен.

Чистка массажера

1. Никогда не используйте абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона при чистке массажера.
2. Перед чисткой отключите вилку от розетки.
3. Протрите корпус массажера сухой тканью.
4. Не используйте влажную ткань или моющие средства.

Хранение

1. Храните массажер в выключенном состоянии.
2. Храните массажер в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей.
3. Не кладите поверх массажера тяжелый груз.



Если покрытие массажера повреждено или есть какие-либо механические неисправности, пожалуйста, прекратите его использование. Незамедлительно свяжитесь с сервисным центром FUJIMO или авторизованным дилером.

Спецификация

Наименование	FUJIMO LOTOS
Модель	F-177
Тип	Массажная накидка
Входное напряжение питания	АС ~ 100 - 240 В, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	42 Вт
Автоматический таймер	5 / 10 / 15 минут
Габаритные размеры	760 (Д) x 165 (Ш) x 485 (В) мм
Вес Нетто	около 5 кг

Гарантийный сертификат




Наименование: Массажная накидка FUJIMO LOTOS F-177

Серийный номер: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ г.

Продавец: _____

Подпись продавца: _____

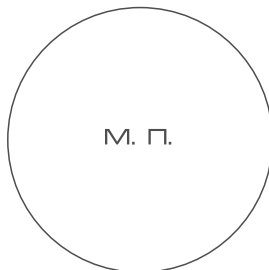

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

При возникновении проблем с купленным товаром, обращайтесь к авторизованному дилеру в Вашем регионе или центральный сервисный центр по адресу: 140002, Московская обл., г. Люберцы, Колхозная ул., д. 19А, офис 307, тел. 8-495-983-34-70

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ ТОВАРА

Подтверждаю получение исправного изделия в рабочем состоянии в полном комплекте. Претензий к внешнему виду товара не имею. С противопоказаниями товара, в том числе медицинскими ознакомлен. С условиями гарантийного и сервисного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя: _____

Условия гарантии

Все товары торговой марки FUJIMO имеют сертификат соответствия TP TC 004/2011 и одобрены для использования на территории стран Таможенного Союза. Мы гарантируем высокое качество товара при условии соблюдения правил его эксплуатации. Срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня покупки.

В течение гарантийного срока продавец берет на себя обязательства по бесплатному устранению неисправностей, возникших по вине завода производителя, при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в инструкции эксплуатации.

ЗОЗПП не обязывает проводить возврат исправного товара в течение 14 дней с момента покупки. Массажная накидка является технически сложным товаром и в соответствии с Постановлением Правительства от 19.01.1998 года № 55 не подлежат возврату или обмену.

Условия предоставления гарантии:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении условий:
 - Правильное и полное заполнение гарантийного сертификата;
 - Наличие кассового или товарного чека (кассового приходного ордера), позволяющих достоверно установить дату приобретения изделия.
2. Компания оставляет за собой право в отказе от бесплатного гарантийного обслуживания в случае не предоставления выше указанных документов или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой, что вызовет сомнения или затруднения в установлении факта приобретения товара по гарантии.
3. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей. Возмещение материального ущерба, компенсацию морального вреда или иных убытков, независимо от их происхождения, связанных с приобретением и эксплуатацией товара, настоящая гарантия не предусматривает.



4. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, а так же ремонт и замену деталей, являющихся расходными материалами (компонентами, периодическая замена которых необходима для поддержания работоспособности товара в течение срока эксплуатации).
5. Гарантия не распространяется на повреждения быстро изнашиваемые части (чехол и обивка).
6. Не подлежат гарантийному ремонту, а так же замене или возврату товар с дефектами, возникшими вследствие:
 - Неправильной установки, эксплуатации и обслуживания товара;
 - Умышленных или неумышленных действий покупателя и иных лиц, грубого обращения, использования товара не по прямому назначению, указанному в инструкции;
 - Неправильной транспортировки товара;
 - Механических повреждений, независимо от причин их происхождения;
 - Не соблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца, попадание внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - При ремонте или внесении конструктивных изменений не уполномоченными лицами;
 - В случае подключения к питанию не рекомендованному в инструкции по эксплуатации;
 - При использовании товара с аксессуарами и другим оборудованием, не предусмотренным для совместной эксплуатации;
 - Продолжение эксплуатации товара, несмотря на наличие очевидных признаков, свидетельствующих о неисправности (посторонних звуков, запаха, дыма и других);
 - Несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, природных явлений;
 - При нарушении рекомендуемого режима использования и бесперебойной работе, что приводит к сокращению срока его эксплуатации.
7. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных законодательством РФ и стран Таможенного Союза.

