

Инструкция

Массажное кресло Koenigsmann Fjord

Полезные ссылки:

[Массажное кресло Koenigsmann Fjord - смотреть на сайте](#)

[Массажное кресло Koenigsmann Fjord - читать отзывы](#)



KOENIGSMANN

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО
FJORD

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**


KOENIGSMANN.RU

- I.** ВНЕШНИЙ ВИД
- II.** ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- III.** ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
- IV.** ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
- V.** РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- VI.** ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- VII.** ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- VIII.** РУКОВОДСТВО ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ
- IX.** УСЛОВИЯ И ГАРАНТИЯ
- X.** ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

I. ВНЕШНИЙ ВИД



ВНЕШНИЙ ВИД

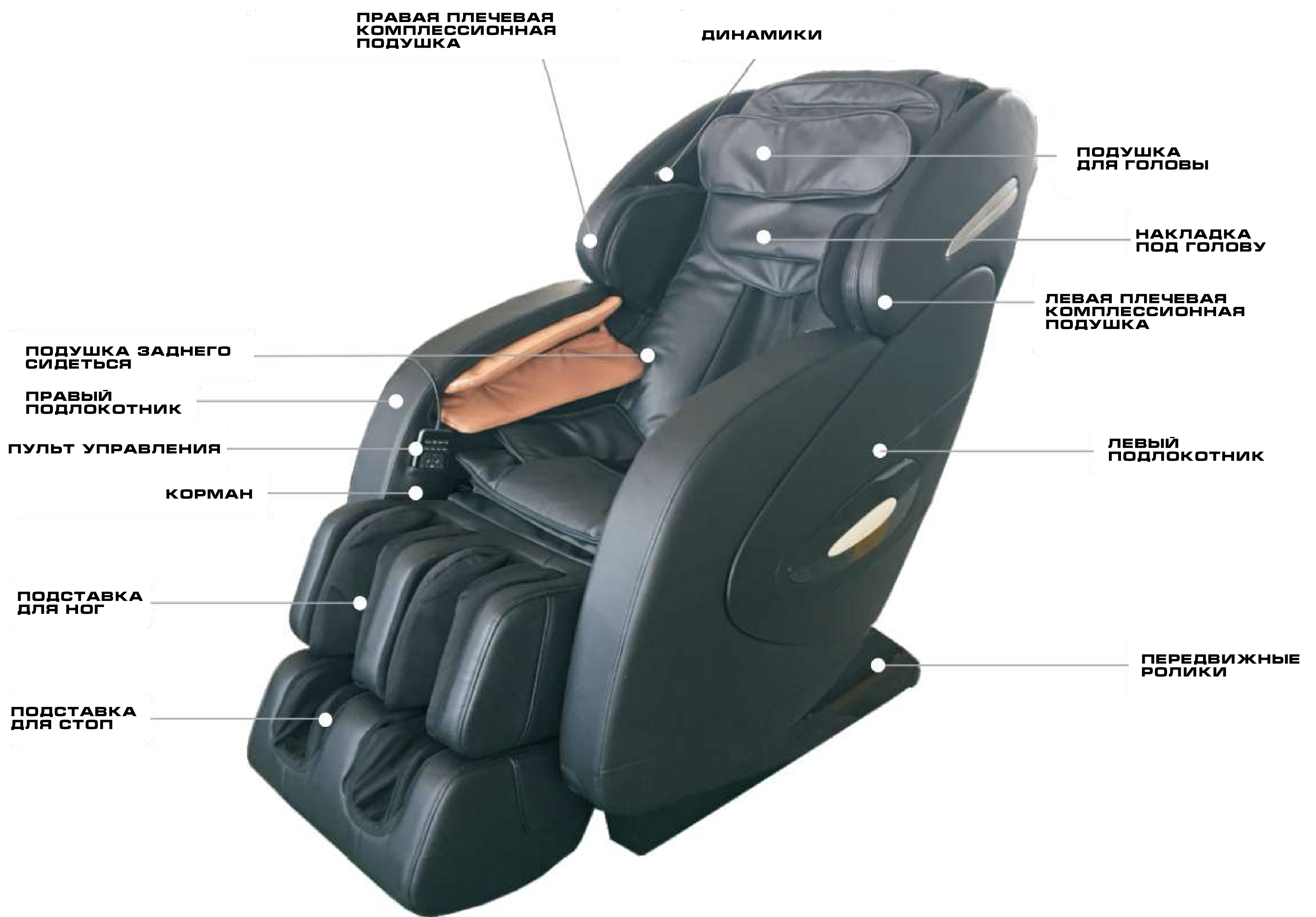

ВНЕШНИЙ ВИД



II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 1.** 3D МАССАЖ: ШЕИ, СПИНЫ, ПЛЕЧ И ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТАЛИИ. ПРОГРАММА ИМИТИРУЕТ МЕТОДИКИ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ.
- 2.** ФУНКЦИЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ АКУПУНКТУРНЫХ ТОЧЕК ПОМОГАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ТОЧНЫЙ МАССАЖ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕМ.
- 3.** УНИКАЛЬНАЯ КИТАЙСКАЯ РАЗОГРЕВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПОВЫШАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБЛЕГЧАЕТ БОЛИ В ТЕЛЕ.
- 4.** ПРИМЕНЯЯ ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА, ДАННОЕ КРЕСЛО ПОЗВОЛИТ ВАМ В ПОЛНОЙ МЕРЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ МЯГКИМ МАССАЖЕМ ВСЕГО ТЕЛА ОТ ГОЛОВЫ ДО НОГ.
- 5.** ФУНКЦИЯ "НЕВЕСОМОСТИ" МОЖЕТ ЭФФЕКТИВНО ОБЛЕГЧИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ, ПОЗВОЛИТ ОЩУТИТЬ НАСТОЯЩУЮ НЕВЕСОМОСТЬ.
- 6.** ФУНКЦИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ ВПЕРЕД НА 10 СМ ОТ СТЕНЫ. СПИНКА И РАМА СИДЕНЬЯ МОГУТ ДВИГАТЬСЯ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕСЛО С МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЕЙ ПРОСТРАНСТВА.
- 7.** BLUETOOTH ПОЗВОЛЯЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С МАССАЖНЫМ КРЕСЛОМ С ПОМОЩЬЮ МАБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА. ТАКЖЕ КРЕСЛО МОЖЕТ ВОСПРОИЗВОДИТЬ МУЗЫКУ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА.
- 8.** ФУНКЦИЯ ПОЛНОГО РАССЛАБЛЕНИЯ НОГ В КОМБИНАЦИИ С НЕЖНОЙ КОМПРЕССИОННОЙ ПОДУШКОЙ СТИМУЛИРУЮТ ВАШИ СТУПНИ.
- 9.** КОМПРЕССИОННЫЕ ПОДУШКИ MULTIPLE ВЫПОЛНЯЮТ ИМПУЛЬСИВНЫЙ МАССАЖ ДАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА НА НОГИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ И ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ.
- 10.** ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ В КРОВЕНОСНЫХ КАПИЛЛЯРАХ.
- 11.** НЕСКОЛЬКО ГРУПП КОМПРЕССИОННЫХ ПОДУШЕК В РАЙОНЕ ПОЯСА И СИДЕНЬЯ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБЕРТЫВАНИЯ ТАЛИИ, ЯГОДИЦ И БЕДЕР, ВЫПОЛНЯЮТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МАССАЖ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ НА РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ТЕЛА, ЧТО МОМЕНТАЛЬНО СНИМАЕТ УСТАЛОСТЬ.
- 12.** НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КРЕСЛА МОЖНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ, ОНА МОЖЕТ ВЫДВИГАТЬСЯ И ВТЯГИВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ 15 СМ, ЧТО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮДЯМ РАЗНОГО РОСТА.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 13.** МАССАЖ ГОЛОВЫ С КОМПРЕССИОННОЙ ПОДУШКОЙ СНИМАЕТ УСТАЛОСТЬ ГОЛОВЫ, ТЕЛА.
- 14.** УПРАВЛЯЙТЕ ВАШИМ КРЕСЛОМ С КОМФОРТОМ С ПОМОЩЬЮ ЖК-КОНТРОЛЛЕРА С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ.

ВНИМАНИЕ

- 1.** ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.
- 2.** СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ И СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

III. ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

! ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- ЛЮДЯМ С ОСТЕОПОРОЗОМ, ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНКОВ И ОСТРЫМИ БОЛЕЗНЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ТАКИЕ КАК РАСТЯЖЕНИЯ МЫШЦ.
- ЛЮДЯМ С СЕРДЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ ИЛИ ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРИ ТЕЛА.
- БЕРЕМЕННЫМ ИЛИ НЕЗДОРОВЫМ ЛЮДЯМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.
- ЛЮДЯМ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА.
- ЛЮДЯМ С НАРУШЕНИЯМИ ВОСПРИЯТИЯ.
- ЛЮДЯМ СТАРШЕ 80 ЛЕТ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
- ДЕТЯМ И ЛЮДЯМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ.
- ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СПИТЕ В КРЕСЛЕ
- НЕ САДИСЬ В КРЕСЛО МОКРЫМИ

! ТРАВМООПАСНОСТЬ:

- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЯДОМ С КРЕСЛОМ НЕТ ДЕТЕЙ, ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ.
- ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫ ПОЧУСТВОВАЛИ НЕДОМОГАНИЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ.
- ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ДЕЛАЙТЕ СИЛЬНЫЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ, НЕ МАССИРУЙТЕ ЖИВОТ И КОЛЕНИ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ МАССАЖЕ ШЕИ.
- ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДЕТЯМ И ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИГРАТЬ НА СПИНКЕ ИЛИ ПОДЛОКОТНИКЕ.
- ЛЮДЯМ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К ТЕПЛУ ИЛИ СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЕЙ, НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.

! ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

- ВСТАВЬТЕ ВИЛКУ КРЕСЛА В ИСПРАВНУЮ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВИЛКА ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЕНА В РОЗЕТКУ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ.
- ПЕРЕД ВЫКЛЮЧЕНИЕМ КНОПКИ ПИТАНИЯ, ОСТАНОВИТЕ ВСЕ ФУНКЦИИ МАССАЖА.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ, КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО.
- ШНУР ПИТАНИЯ, ВИЛКУ, РОЗЕТКУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ОБРЫВЕ ИЛИ НЕПЛОТНОМ КОНТАКТЕ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ МОЩНОСТЬ, КРОМЕ НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (100-240V).
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЮБОЙ ОБОРВАННЫЙ, ЗАВЯЗАННЫЙ, СКРУЧЕННЫЙ, С ВИДИМЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ИЛИ ЗАЖАТЫЙ ТЯЖЕЛЫМ ГРУЗОМ ШНУР ПИТАНИЯ.
- НЕ ДВИГАЙТЕ КРЕСЛО ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАССАЖНЫМ КРЕСЛОМ, ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДМЕТЫ ЗАКРЫВАЮТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ КРЕСЛА БЕЗ НАГРУЗКИ.



ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ УТЕЧКИ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ И НЕ ХРАНИТЕ КРЕСЛО ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ, НАПРИМЕР РЯДОМ С БАССЕЙНОМ ИЛИ ВАННОЙ КОМНАТОЙ.
- ДЕРЖИТЕ КРЕСЛО И ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВСЕ ВРЕМЯ СУХИМ.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

КОГДА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СГОРЕЛ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И ОТСОЕДИНИТЕ ШНУР. ОТКРЫВ КРЫШКУ, ЗАМЕНИТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ТАКОЙ ЖЕ РАЗМЕР ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ, ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ СТАРЫЙ, ЗАТЕМ ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ.

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫЗВАТЬ ЭЛЕКТРИКА, ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ОБРАТИТЕСЬ К ДИЛЕРУ ИЛИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
- ЕСЛИ ШНУР ПИТАНИЯ ИЛИ ВИЛКА ПОВРЕЖДЕННЫ, НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО, А ОБРАТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КРЕСЛО САМОСТОЯТЕЛЬНО.
- ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- УСТАНОВИТЕ КРЕСЛО НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА РАССТОЯНИИ 10 СМ ОТ СТЕНЫ, ЧТОБЫ БЫЛО ДОСТАТОЧНО МЕСТА ДЛЯ НАКЛОНА ВВЕРХ И ВНИЗ.
- МАКСИМАЛЬНОЕ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ - 20 МИНУТ. 5 МИНУТ НА КАЖДУЮ ПОЗИЦИЮ, НАЧИНАЯ С ЛЕГКОГО МАССАЖА. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ПОЗИЦИИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ.
- ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ ПОЛОЖИТЬ В КАРМАН ИЛИ НА КРОНШТЕЙН.
- ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВСТАВИТЬ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ВЫКЛ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО С РАСПУЩЕННЫМИ ВОЛОСАМИ
- НЕ КЛАДИТЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩИ В КАРМАН ПРИ МАССАЖЕ ЯГОДИЦ И СУСТАВОВ
- НЕ КЛАДИТЕ РУКИ МЕЖДУ РАБОТАЮЩИМИ МАССАЖНЫМИ ГОЛОВКАМИ
- НЕ ЗАСОВЫВАЙТЕ РУКИ ИЛИ НОГИ В ЗАЗОР МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕСЛО БЕЗ ОДЕЖДЫ ИЛИ В ТОНКОЙ ОДЕЖДЕ. ТОНКАЯ ОДЕЖДА МОЖЕТ УЛУЧШИТЬ МАССАЖНЫЙ ЭФФЕКТ, НО ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ.
- ДЕРЖИТЕ КРЕСЛО ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕПЛА, ВЛАГИ, ОСТРЫХ ИЛИ РАЗЪЕДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КРЕСЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОДЕЯЛО ИЛИ ДРУГИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА.
- НЕ ПОМЕЩАЙТЕ В ПРОСТРАНСТВО С БОЛЬШОЙ ЗАПЫЛЕННОСТЬЮ ИЛИ АГРЕССИВНОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ.
- НЕ СТАВЬТЕ КРЕСЛО В НЕБОЛЬШИЕ ПОМЕЩЕНИЯ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В МЕСТАХ С ПЛОХОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА.
- ДЕРЖИТЕ КРЕСЛО ПОДАЛЬШЕ ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.
- НЕ СТАВЬТЕ КРЕСЛО НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД СОЛНЦЕ ИЛИ В ДРУГИЕ МЕСТА С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕСЛО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.



IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 1. ДОСТАНЬТЕ КРЕСЛО И АКСЕССУАРЫ ИЗ КАРТОННОЙ КОРОБКИ.


1. СНАЧАЛА ДОСТАНЬТЕ КОРОБКУ С АКСЕССУАРАМИ И ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ.
2. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДОСТАТЬ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ИЗ КОРОБКИ, НЕОБХОДИМО ДВА ЧЕЛОВЕКА
3. УСТАНОВИТЕ ВСЕ АКСЕССУАРЫ.

ДОСТАНЬТЕ ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ ИЗ КАРТОННОЙ КОРОБКИ, ДЕРЖА ЕГО ДВУМЯ РУКАМИ С ОБЕИХ СТОРОН

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

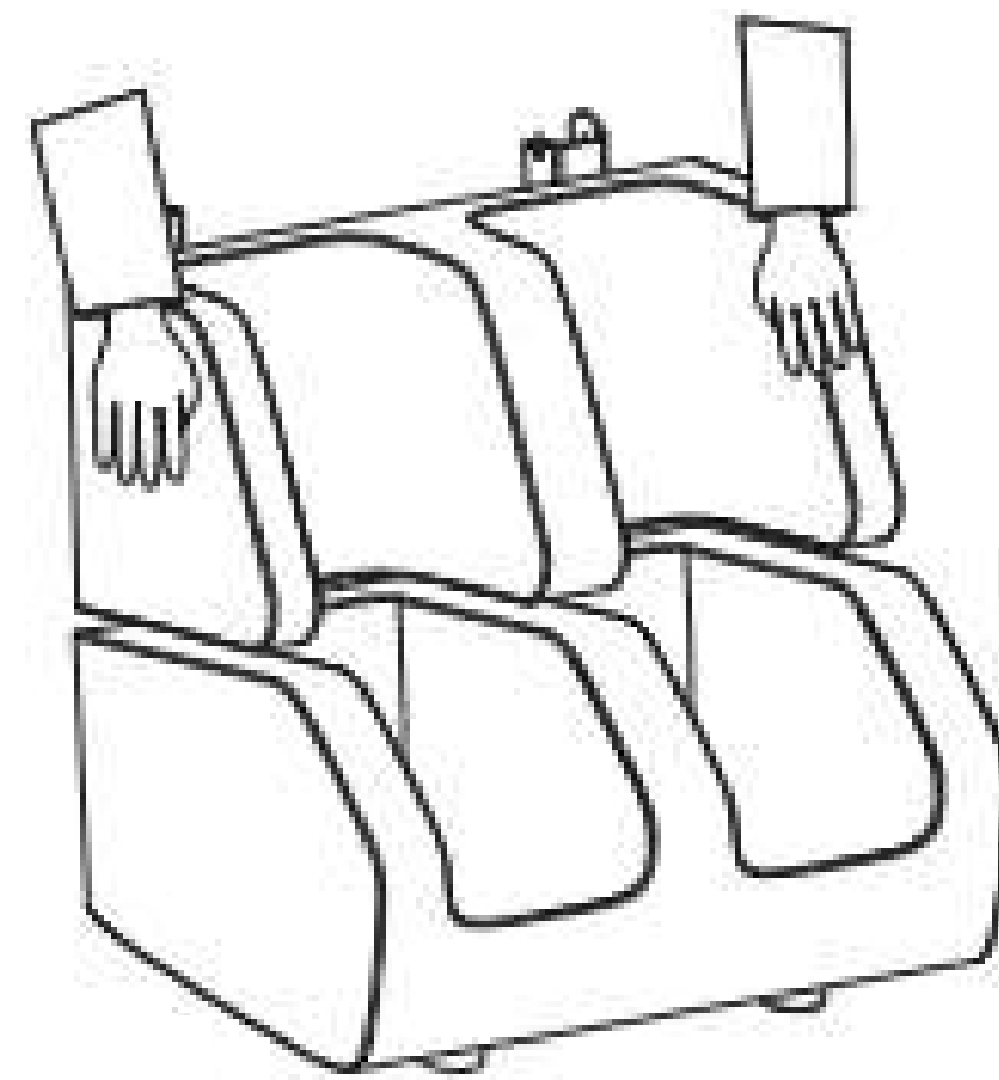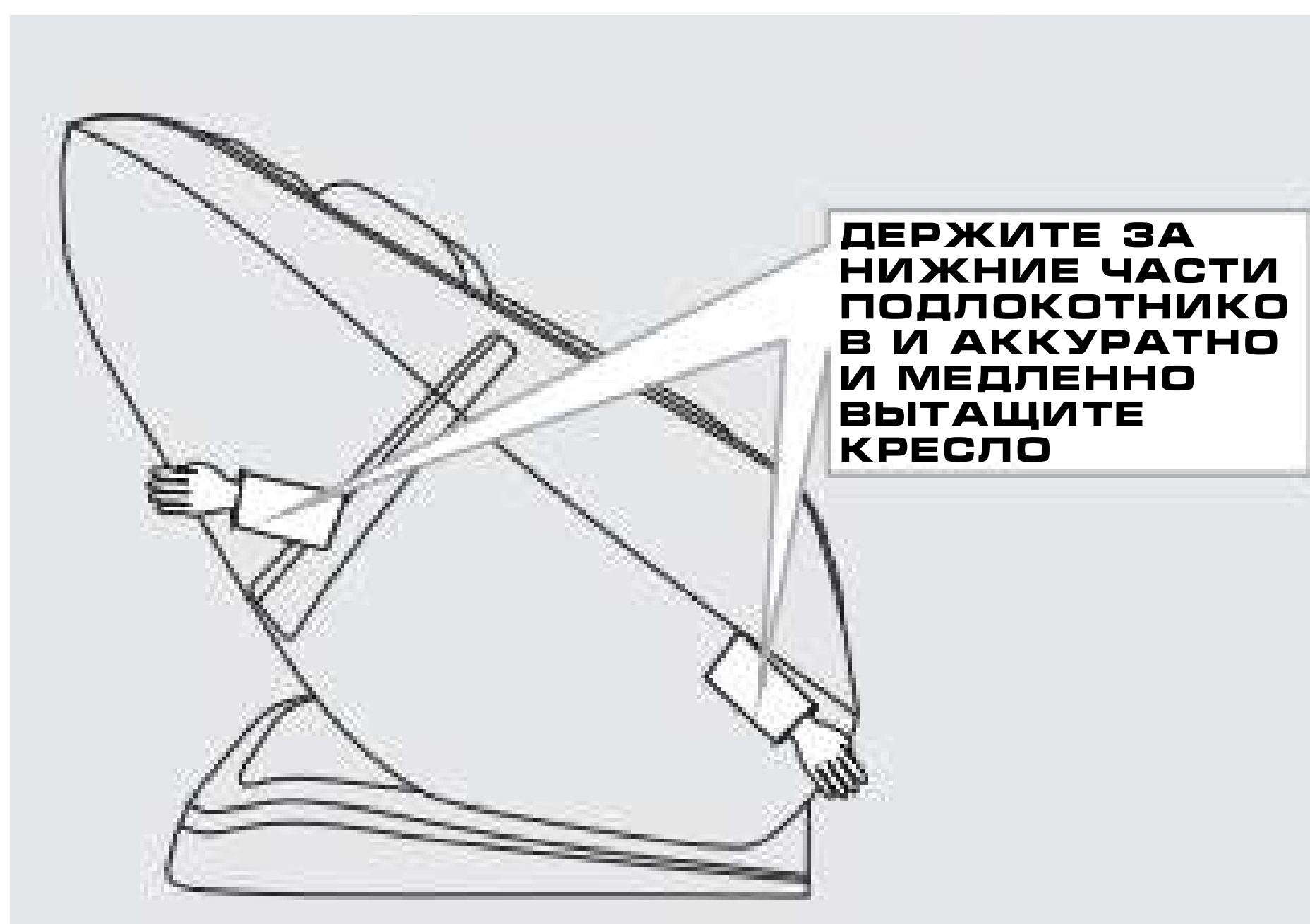

АКСЕССУАРЫ

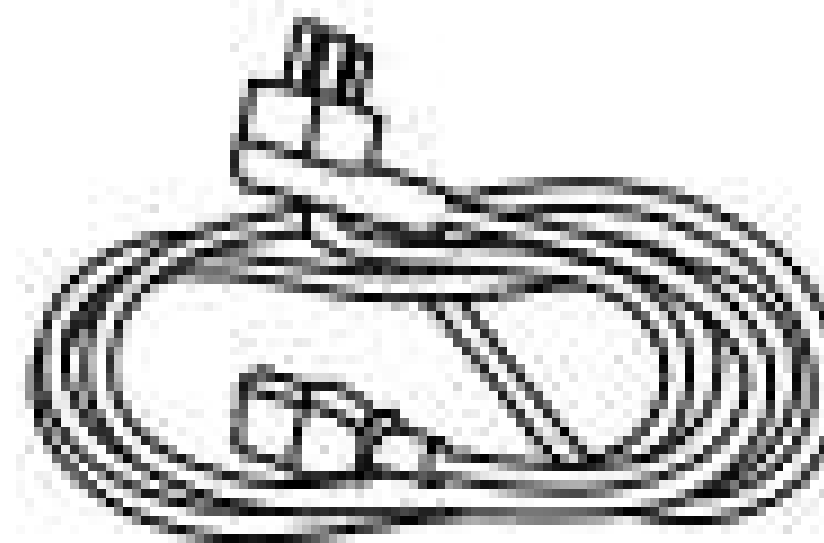


КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ




ШАГ 2. ПОЛОЖИТЕ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КАРМАН ДЛЯ ПУЛЬТА.

1. РАСПОЛОЖИТЕ КАРМАН ДЛЯ ПУЛЬТА ПОД ПРАВЫМ ПОДЛОКОТНИКОМ.
2. ПОЛОЖИТЕ ПУЛЬТ В КАРМАН.

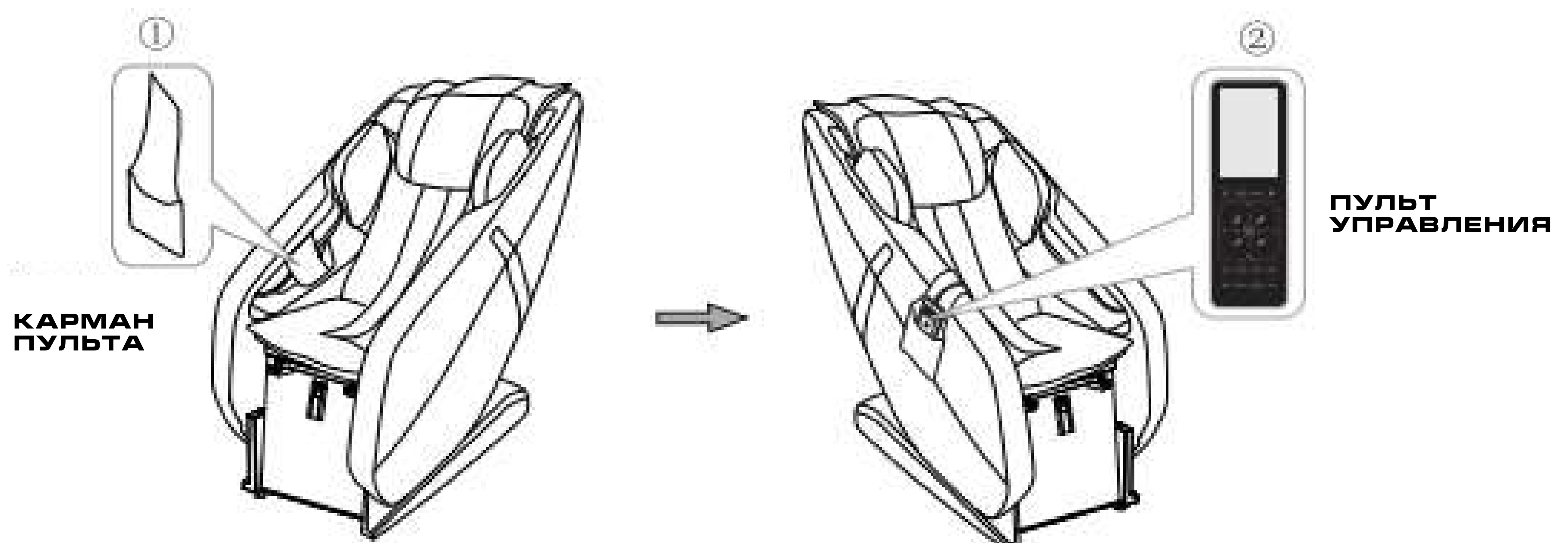

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВОКРУГ КРЕСЛА ДОСТАТОЧНО МЕСТО ДЛЯ ОТКИДЫВАНИЯ.

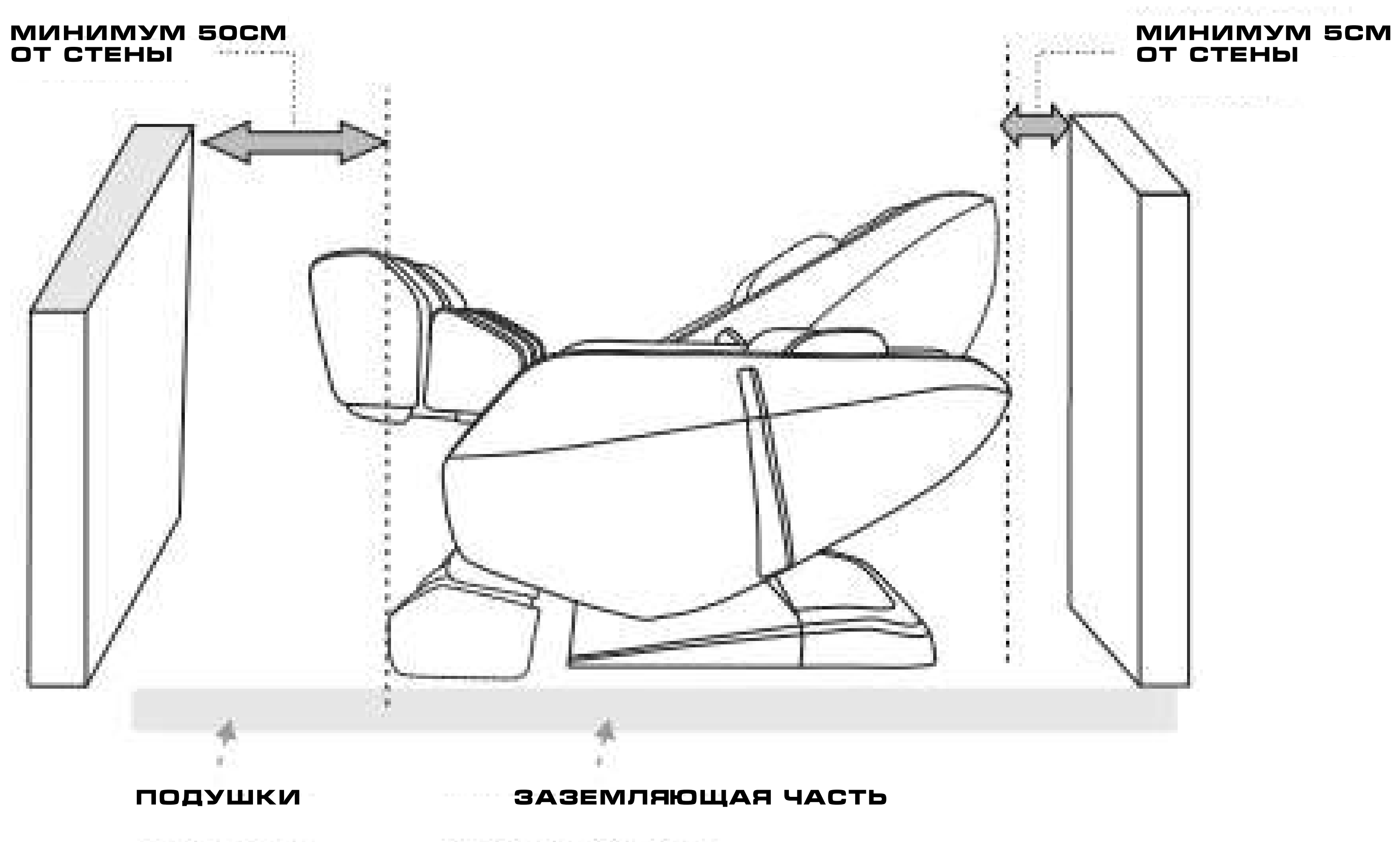

ТАК КАК МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ТЯЖЕЛОЕ, ОНО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ПОКРЫТИЕ ПОЛА С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

ПОЖАЛУЙСТА ПОДЛОЖИТЕ ОДЕЯЛО ИЛИ ДРУГУЮ МЯГКУЮ ВЕЩЬ ПОД МАССАЖЕР, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ПОЛ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТУЛ В ТАКИХ МЕСТАХ КАК БАССЕЙН, ВАННАЯ КОМНАТА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ УТЕЧКИ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

НЕ ЛЕЖИТЕ ПОД СОЛНЕЧНЫМ СВЕТОМ ИЛИ РЯДОМ С ПЛИТОЙ ИЛИ ДРУГИМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРЧИ ОБИВКИ. ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТУЛ НА РОВНОМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ СТУЛ НЕ УПАЛ, НЕ ШУМЕЛ ИЛИ НЕ ВОЗНИКЛИ ДРУГИЕ НЕОЖИДАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ШАГ 3. ЗАФИКСИРУЙТЕ ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ.


- 1.** СОЕДИНИТЕ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ С ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ СИДЕНЬЯ.
- 2.** СОЕДИНИТЕ ШТЕКЕР НОЖНЫХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ГНЕЗДОМ.
- 3.** ВСТАВЬТЕ ОДНУ ИЗ ВОЗДУШНЫХ ТРУБОК В ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ, ПЛОТНО В ВОЗДУШНУЮ ФОРСУНКУ НА ОСНОВНОМ КОРПУСЕ.
- 4.** ПОДНИМИТЕ ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ ОБЕИМИ РУКАМИ, НАДАВИТЕ НА ВАЛ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ ДО ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ ШТИФТА СТОЙКИ, ПОЛОЖИТЕ ВАЛ НА СТОЙКИ, СБРОСЬТЕ ШТИФТ ДО ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ.
- 5.** СОЕДИНИТЕ КОЖАНУЮ ЧАСТЬ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ С СИДЕНЬЕМ.
- 6.** СОЕДИНИТЕ КОЖАНУЮ МОЛНИЮ НА ПОДСТАВКЕ ДЛЯ НОГ С МОЛНИЕЙ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ВНИМАНИЕ:


ШТИФТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЕЖНО ПРИКРЕПЛЕН, ИНАЧЕ ОН УПАДЕТ ПРИ ВСТАВКЕ ВОЗДУШНОЙ ТРУБЫ И ПРОВОДОВ, НЕ СВОРАЧИВАЙТЕ ВОЗДУШНУЮ ТРУБКУ И ЖГУТ ПРОВОДОВ ВМЕСТЕ.

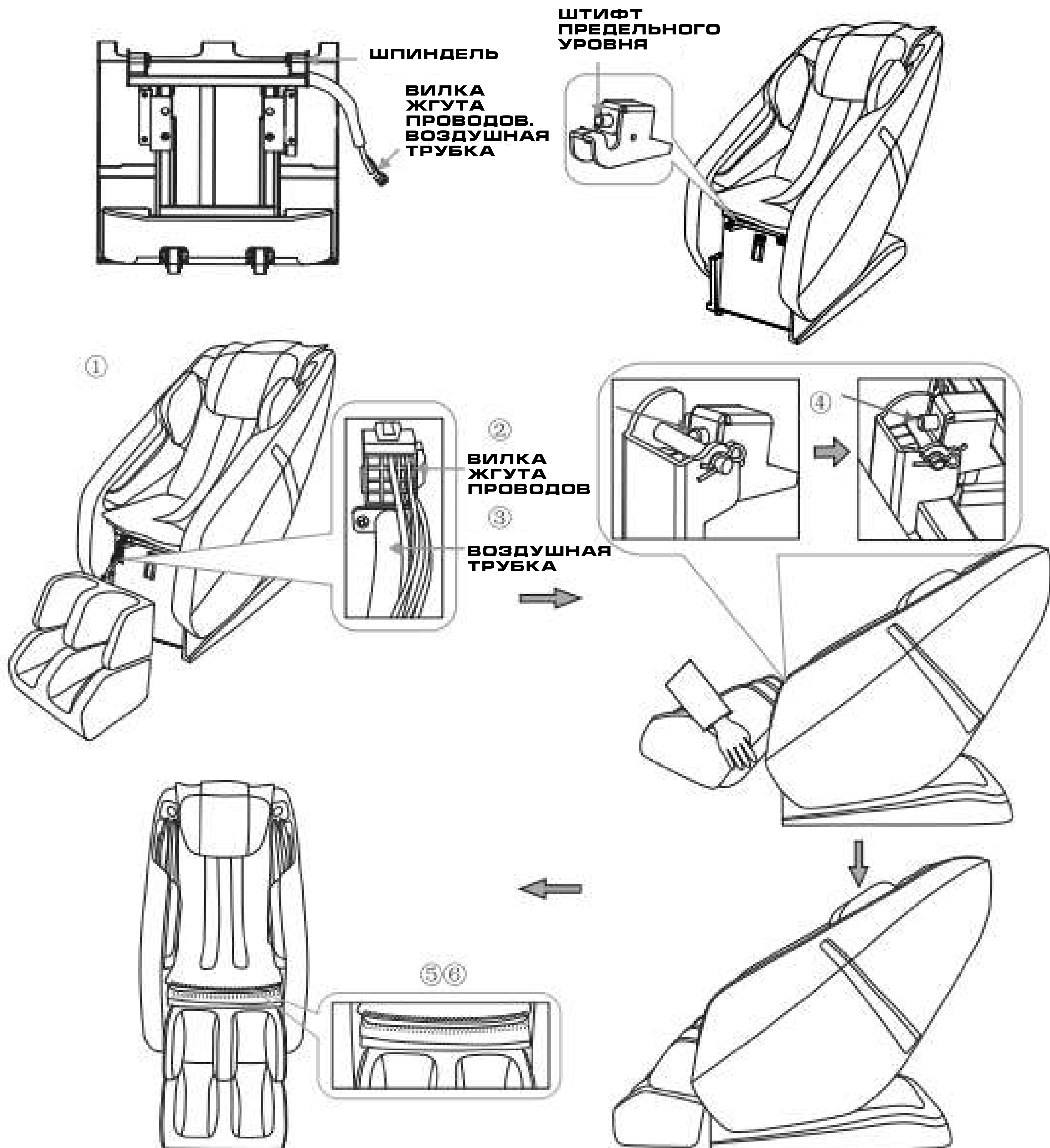

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 4. ЗАВЕРШЕНИЕ СБОРКИ

- 1.** ВСТАВЬТЕ КАБЕЛЬ В ОТВЕРСТИЕ НА БЛОКЕ ПИТАНИЯ, КАК ПОКАЗАНО НА ПРАВОМ РИСУНКЕ.
- 2.** ВСТАВЬТЕ ВИЛКУ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ В РОЗЕТКУ.
- 3.** ВКЛЮЧИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗА БЛОКОМ ПИТАНИЯ. (ВКЛЮЧИТЕ / ВЫКЛЮЧИТЕ «0 / 1», НАЖМИТЕ «1» ВНИЗ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ)
- 4.** ИСПОЛЬЗУЙТЕ РУЧНОЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ВЫБОРА ФУНКЦИЙ МАССАЖА, НАСЛАЖДАЙТЕСЬ РАССЛАБЛЯЮЩИМ И КОМФОРТНЫМ МАССАЖЕМ С ПОМОЩЬЮ НАШИХ ПРОДУКТОВ.

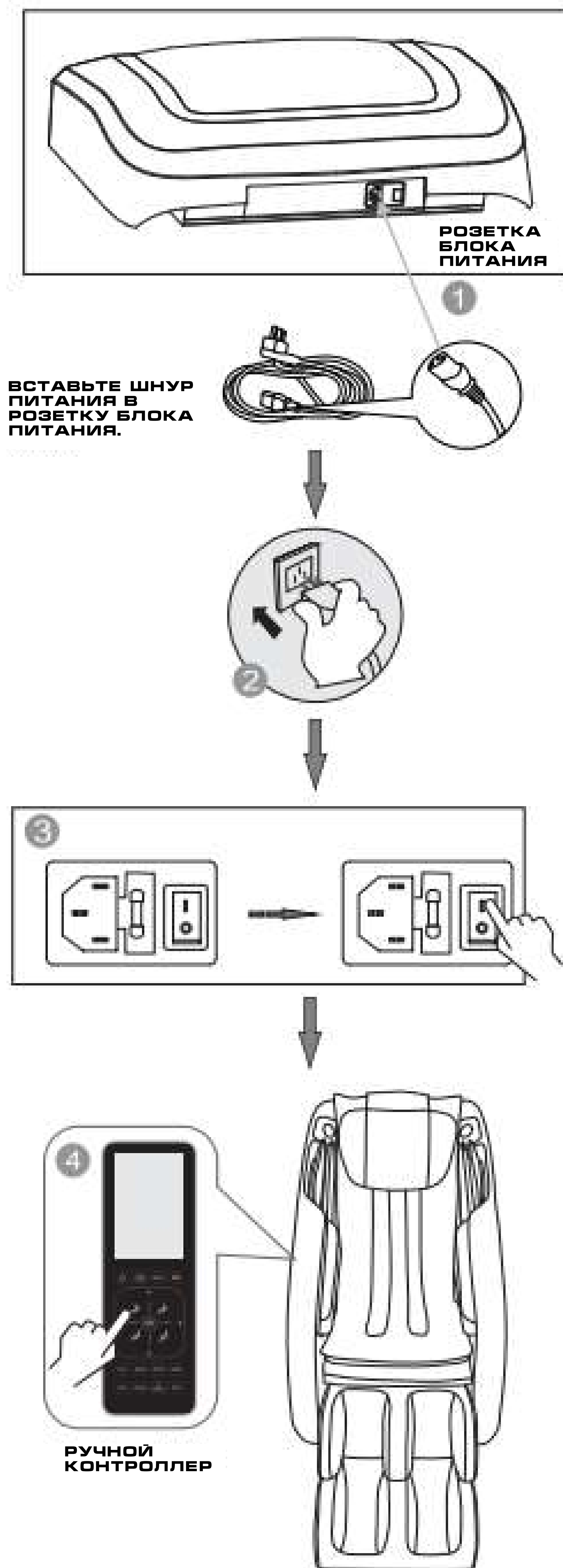

V. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕД МАССАЖЕМ



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТУЛ В ТАКИХ МЕСТАХ КАК БАССЕЙН, ВАННАЯ КОМНАТА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ УТЕЧКИ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.




НЕ ЛЕЖИТЕ ПОД СОЛНЕЧНЫМ СВЕТОМ ИЛИ РЯДОМ С ПЛИТОЙ ИЛИ ДРУГИМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРЧИ ОБИВКИ.



ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТУЛ НА РОВНОМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ СТУЛ НЕ УПАЛ, НЕ ШУМЕЛ ИЛИ НЕ ВОЗНИКЛИ ДРУГИЕ НЕОЖИДАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ


• ПРОВЕРЬТЕ МЕСТО:

ПРОВЕРЬТЕ ОБЛАСТЬ, КОГДА СПИНА И НОГИ ВЫТЯНУТЫ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВОКРУГ НЕТ ЛЮДЕЙ, ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ИЛИ ДРУГИХ ВЕЩЕЙ

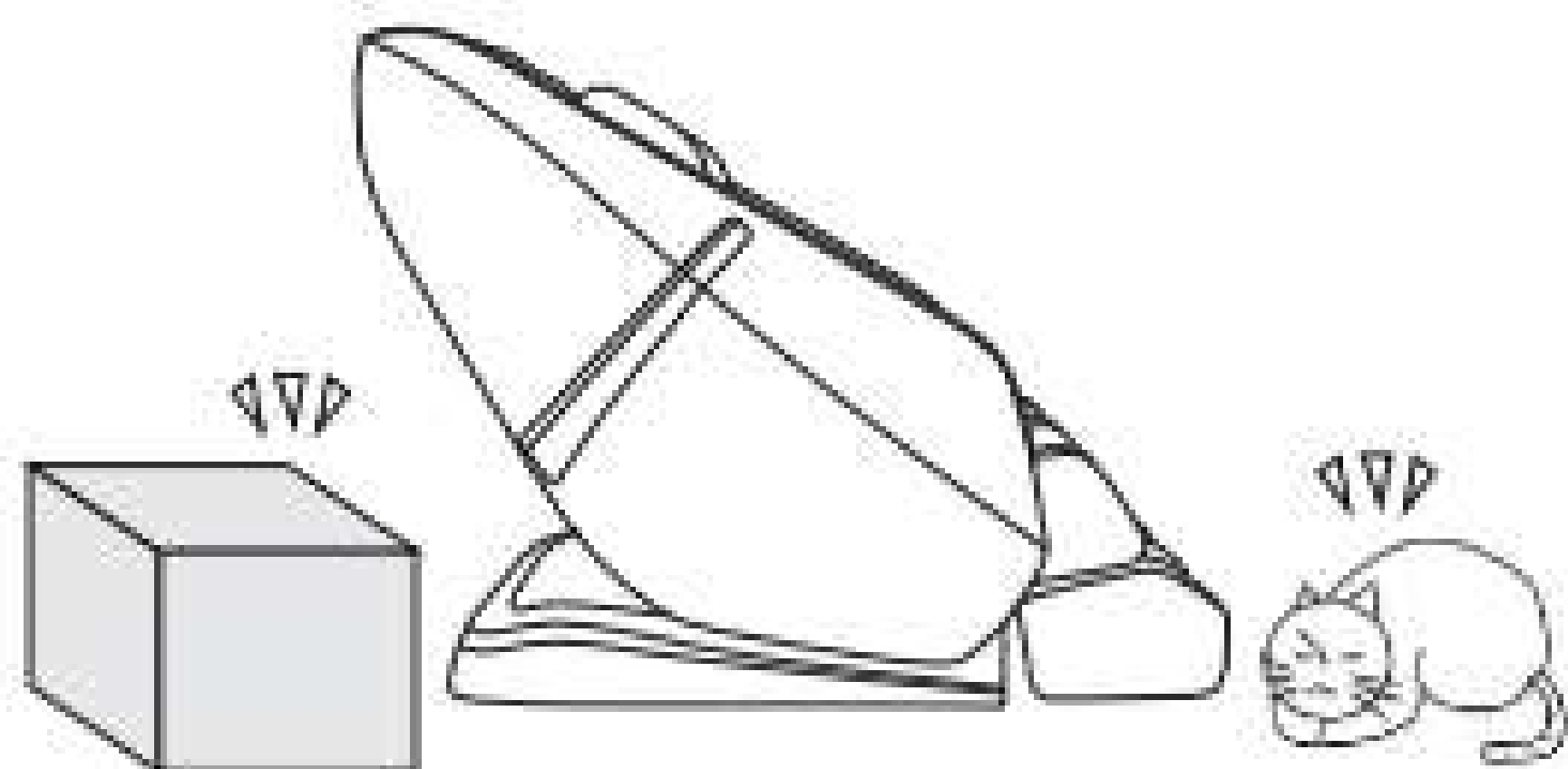

• ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, ШТЕКЕР:


1. ВОВРЕМЯ ОЧИЩАЙТЕ ВИЛКУ ОТ ПЫЛИ (ИСПОЛЬЗУЯ СУХУЮ ТКАНЬ)
2. ПРОВЕРЬТЕ ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ОБРЫВА, ИЗГИБА, РАСТЯЖЕНИЯ, ШНУРА ИЛИ ПРИЖИМАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ВЕЩЬЮ.

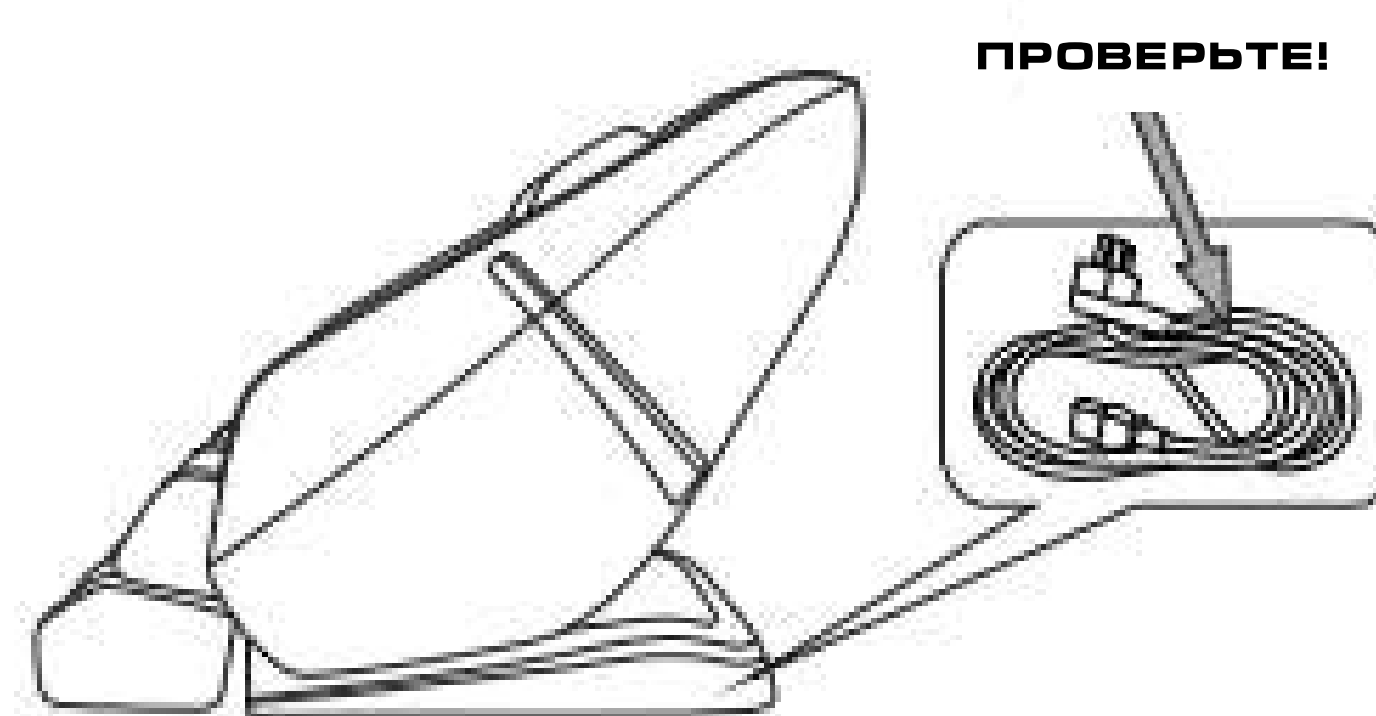

ПРОВЕРЬТЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ

- РАЗМЕР ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТУЛА.

МИНИМУМ 10СМ ОТ СТЕНЫ

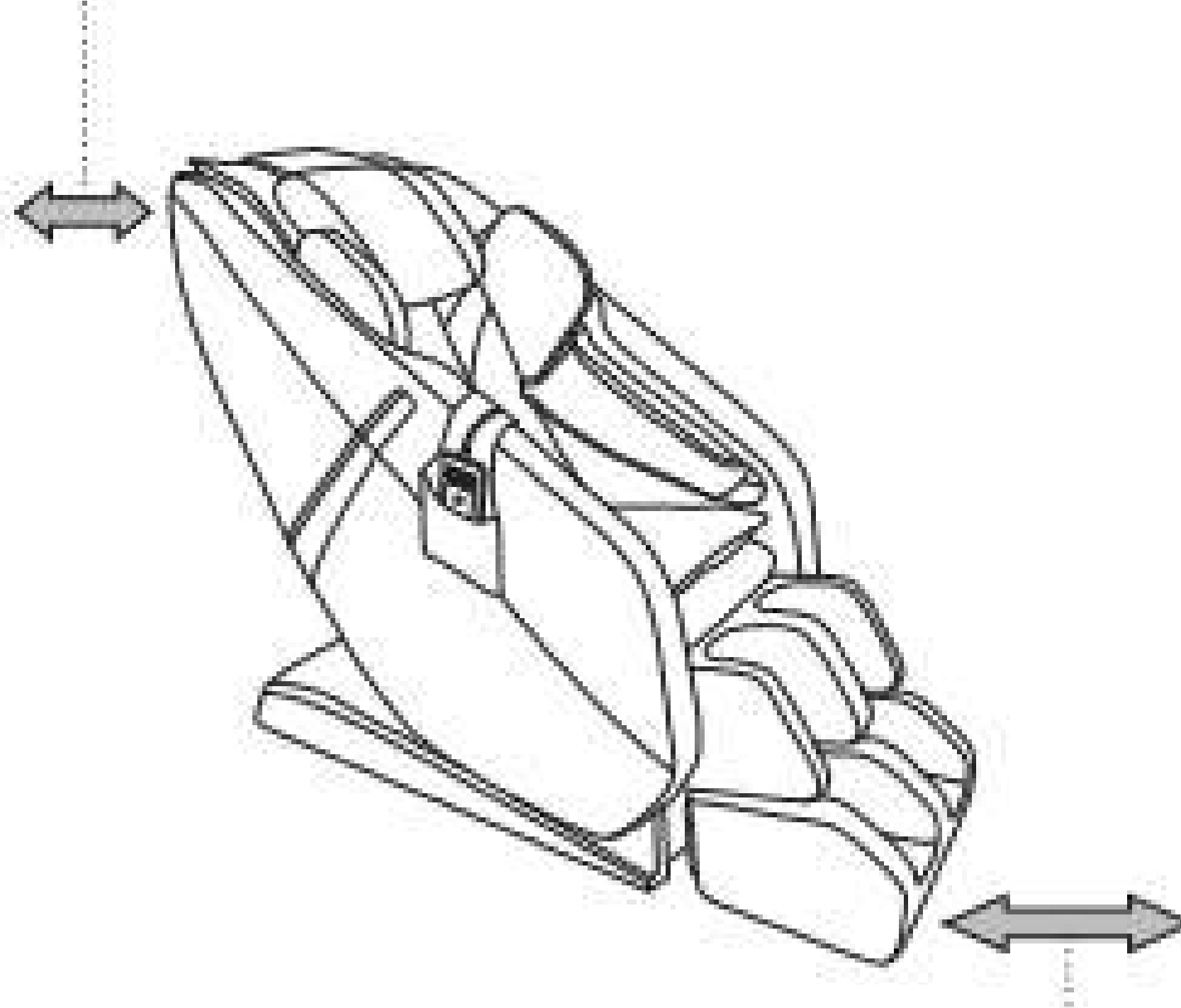

НЕ МЕНЕЕ 30СМ ПЕРЕД НОГАМИ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ

КОГДА СПИНКА ИЛИ ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ОТКИДЫВАЕТСЯ ИЛИ ВЫДВИГАЕТСЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА

1) ОТСУТСТВИЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ИЛИ ВЕЩЕЙ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

2) ПРОВЕРИТЬ РАЗМЕР МЕСТА

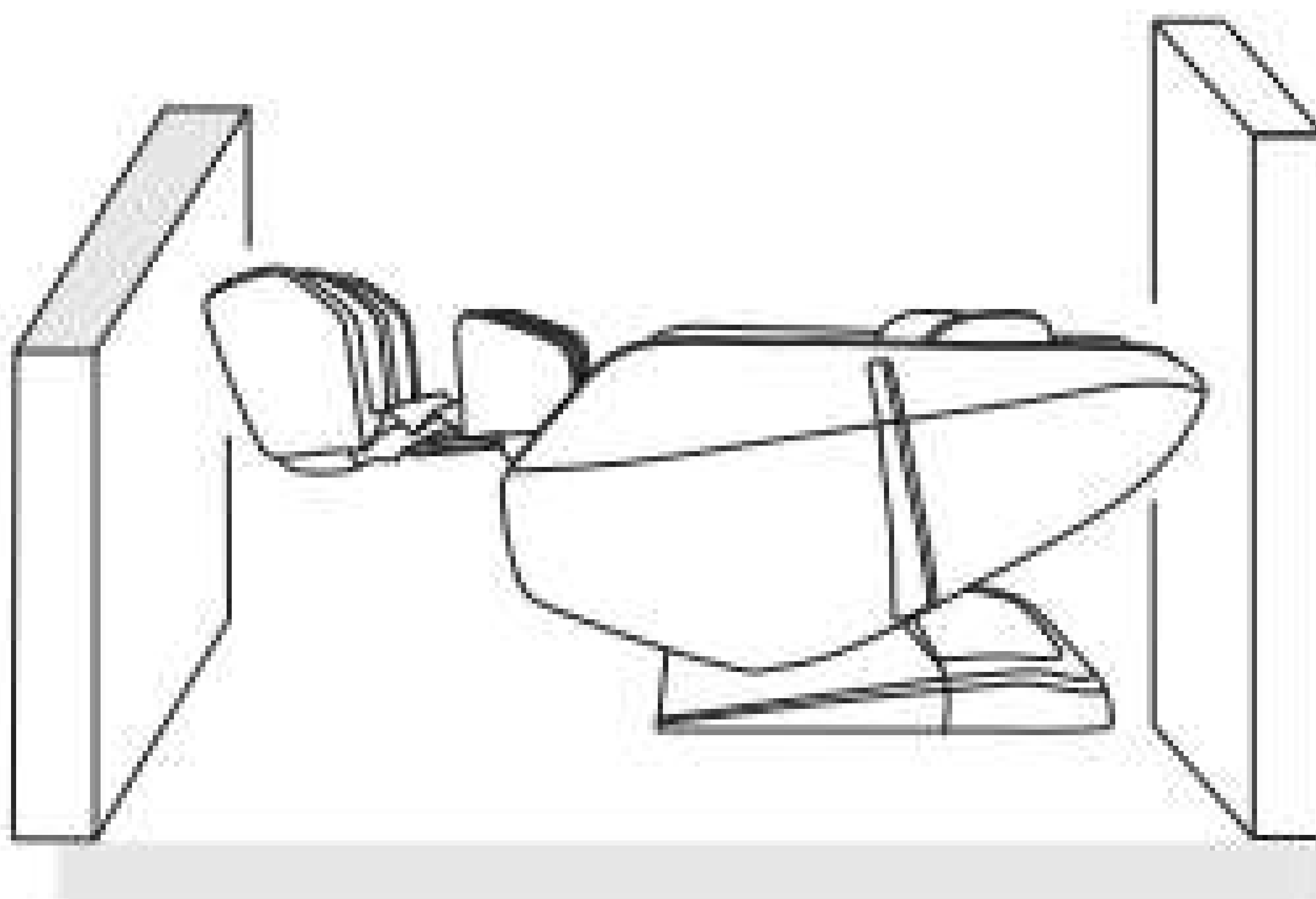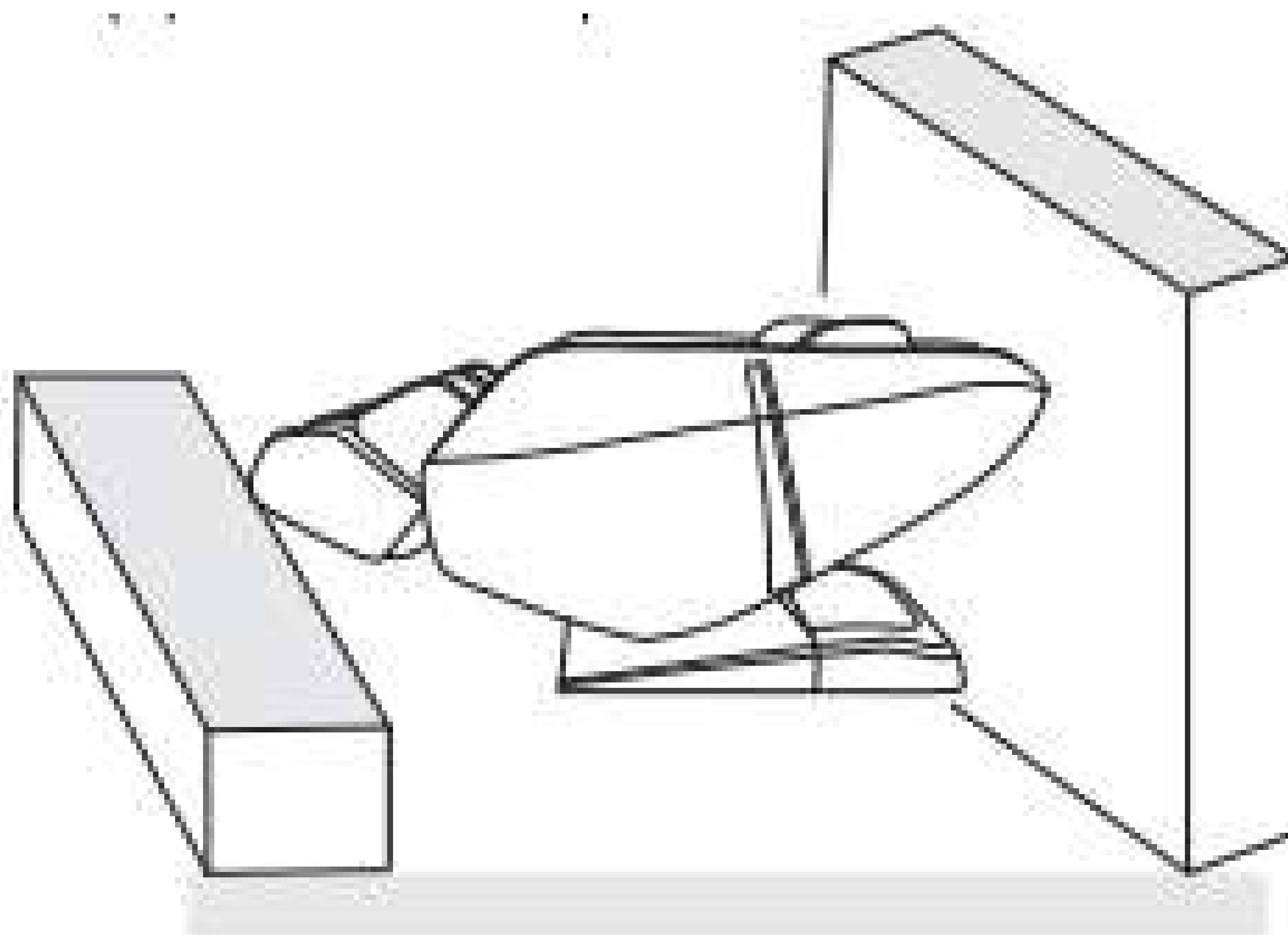

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КАК ПЕРЕДВИНУТЬ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО:

НЕ ДВИГАЙТЕ КРЕСЛО В ТО ВРЕМЯ КОГДА ОН РАБОТАЕТ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

КАК ДВИГАТЬ:

СВЯЖИТЕ КАБЕЛИ И ПОЛОЖИТЕ ИХ НА СИДЕНЬЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ДВИЖЕНИИ.


ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ТОЛКАТЬ СТУЛ, ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РОЛИКИ, ЕСЛИ ПОЛ ДЕРЕВЯННЫЙ ИЛИ ИЗ ДРУГОГО ЛЕГКО ПОВРЕЖДАЕМОГО МАТЕРИАЛА, ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ЕЩЕ 2 ЧЕЛОВЕКА.

УБЕДИТЕСЬ ЧТО ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО И ВИЛКА НЕ КАСАЕТСЯ ПОЛА

ВНИМАНИЕ!

ПОДНИМИТЕ ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ. ЗАТЕМ ПОДТОЛКНИТЕ СТУЛ К МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ И ПОСТАВЬТЕ ЕГО.

 **ПОЖАЛУЙСТА, ДЕРЖИТЕ ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ, КОГДА ПЕРЕМЕЩАЕТЕ СТУЛ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ КАКИХ-ЛИБО ЦАРАПИН НА КОЖЗАМЕНИТЕЛЕ**



РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕД МАССАЖЕМ:

- ПЕРЕД РЕГУЛИРОВКОЙ, ПОЖАЛУЙСТА, УБЕДИТЕСЬ ЧТО МАССАЖНАЯ ГОЛОВКА НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СИДЕНЬЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СЕСТЬ НА СТУЛ.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ, ВЫЗВАННЫХ НЕПРАВИЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ МАССАЖНОЙ ГОЛОВКИ.

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ АКУПУНКТУРНЫЕ ТОЧКИ


- ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК АКУПУНКТУРЫ, ЕСЛИ МАССАЖНАЯ ГОЛОВКА НЕ МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЫСОТЫ ПЛЕЧА, ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЫСОТЫ ПЛЕЧА ВЫБЕРИТЕ ПО УМОЛЧАНИЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ

ПРАВИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

ВАША СПИНА РАСПОЛОЖЕНА НА СПИНКЕ СТУЛА, ГОЛОВА РАСПОЛОЖЕНА НА ПОДУШКЕ. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗДАЕТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ТОЧКИ АКУПУНКТУРЫ, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ МИКРОРЕГУЛИРОВКА, ПРОСТО НАЖМИТЕ КНОПКУ ВВЕРХ / ВНИЗ


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ИЗБЕГАЙТЕ ТОГО, ЧТО МАССАЖНАЯ ГОЛОВКА ОПРЕДЕЛИЛА НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК АКУПУНКТУРЫ.

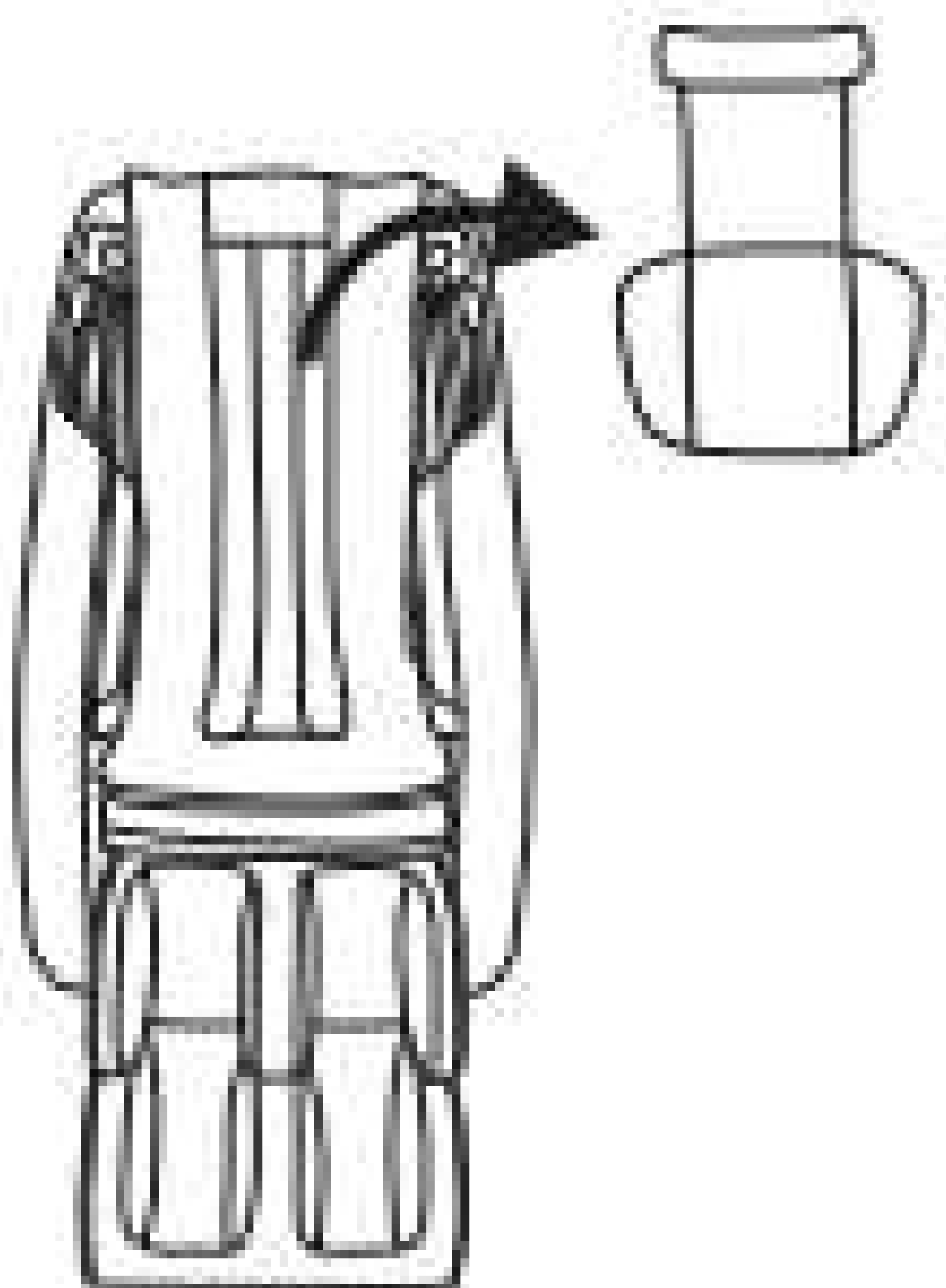

ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ИНТЕНСИВНОСТЬ НЕДОСТАТОЧНА, СНИМИТЕ ПОДУШКУ.

ПОСКОЛЬКУ КРЕСЛО ТЯЖЕЛОЕ, ОН МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ ВАШ ПОЛ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ТЕЧЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. ПОЛОЖИТЕ ОДЕЯЛО ИЛИ ДРУГИЕ МЯГКИЕ ВЕЩИ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ПОЛ.

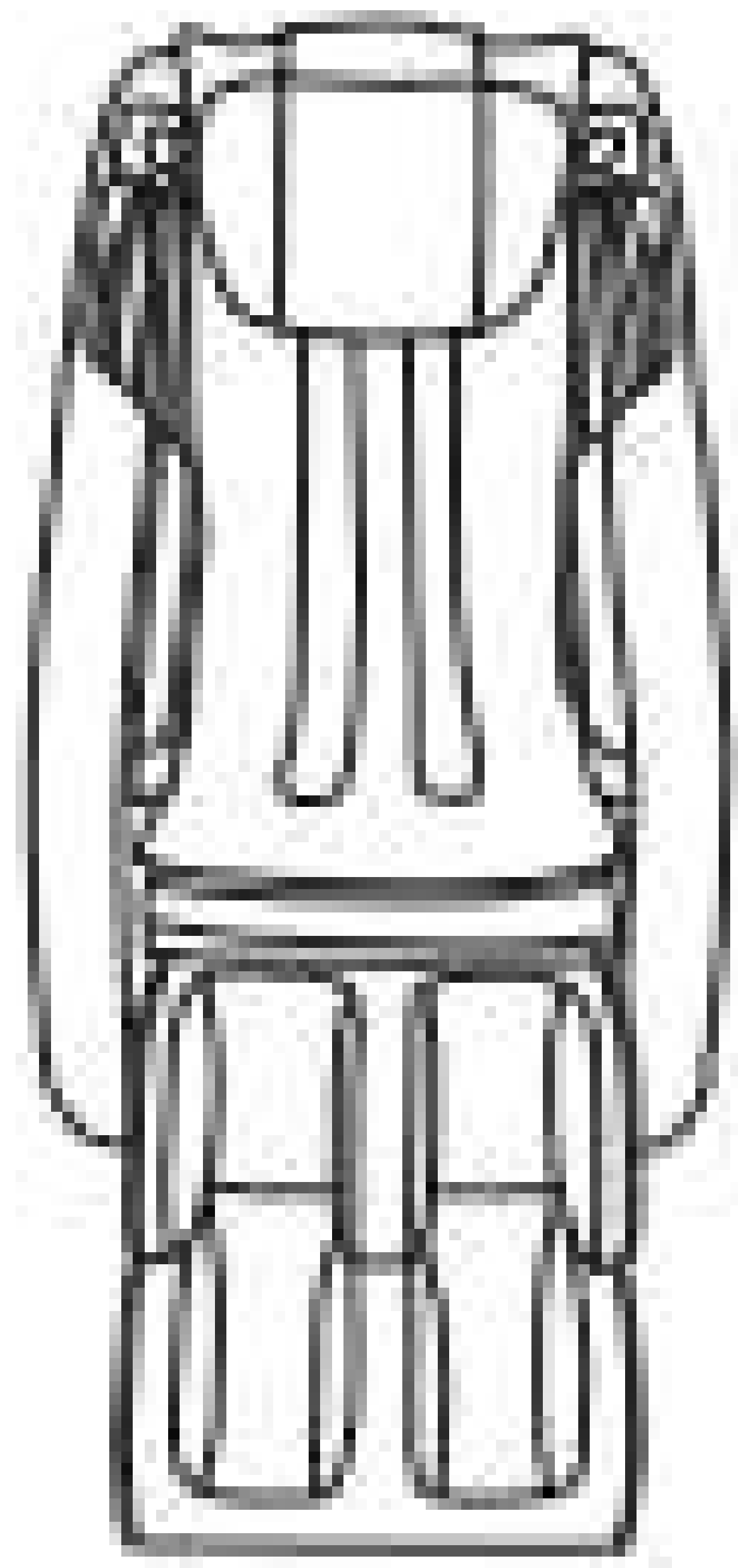

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

РЕЖИМ БЫСТРОЕ
РАССЛАБЛЕНИЕ

СПИНКА ОПУЩЕНА

КНОПКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ВЛЕВО

ОПУСТИТЬ
ПОДСТАВКУ
ДЛЯ НОГ

КНОПКА НАГРЕВА

КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ
ИНТЕНСИВНОСТИ

КНОПКА АВТО

КНОПКА РУЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ



Quick
relaxation

Menu



СТАРТ / ПАУЗА

КНОПКА ВРЕМЕНИ

КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ВВЕРХ

ПОДНЯТЬ СПИНКУ

КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ
ВПРАВО

ПОДНЯТЬ
ПОДСТАВКУ
ДЛЯ НОГ

КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ВНИЗ

КНОПКА НОЖНОГО РОЛИКА

КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ
ШИРИНЫ


КНОПКА ZERO-6

КНОПКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




1. НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ВОЙДЕТ В СОСТОЯНИЕ ON. НАЖМИТЕ МЕНЮ ИЛИ КНОПКУ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ МАССАЖА ИЛИ РУЧНОЙ ОБЩИЙ МАССАЖ, ЗАТЕМ МАССАЖНАЯ МАШИНА НАЧИНАЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ВЫСОТУ ПЛЕЧА И НАЧИНАЕТ МАССАЖ. В СОСТОЯНИИ ВКЛ НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ, МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ВЫКЛЮЧАЕТСЯ И ВЕРНЕТСЯ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, МАССАЖНЫЙ АППАРАТ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЕРНЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ, ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ОСТАНЕТСЯ В САМОМ НИЗКОМ ПОЛОЖЕНИИ И ВЕРНЕТСЯ, СПИНКА ОСТАНЕТСЯ В САМОМ ВЫСОКОМ ПОЛОЖЕНИИ, КОНТРОЛЛЕР ВЫКЛЮЧИТСЯ ПОСЛЕ ПОЛНОГО СБРОСА МАССАЖНОГО КРЕСЛА. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЕ, ЕСЛИ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ НЕ ПЕРЕВОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ ON ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ.

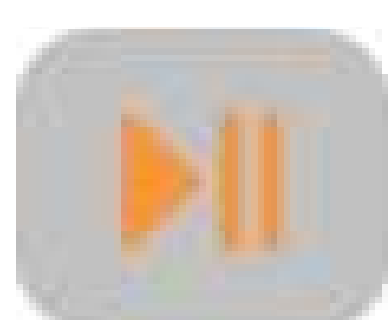

2. В СОСТОЯНИИ ON НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ЧТОБЫ НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ ВЕСЬ ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ МАССАЖ. ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ХОЧЕТ ПРОДОЛЖИТЬ МАССАЖ, НАЖМИТЕ ЭТУ КЛАВИШУ, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ МАССАЖ. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ПОСЛЕ ПАУЗЫ 30 МИНУТ.



3. В СОСТОЯНИИ ON НАЖМИТЕ ЭТУ КЛАВИШУ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ВРЕМЯ МАССАЖА 5 МИНУТ, 10 МИНУТ, 15 МИНУТ, 20 МИНУТ, 25 МИНУТ, 30 МИНУТ ПО ОЧЕРЕДИ.

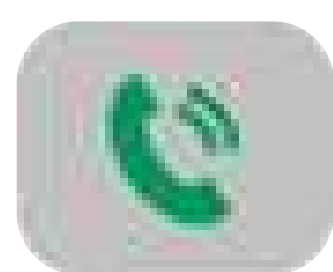

4. В СОСТОЯНИИ ON, КОГДА МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К МАССАЖНОМУ КРЕСЛУ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH, ЗНАЧОК BLUETOOTH ГОРИТ ЯРКО, НАЖМИТЕ ЭТУ КЛАВИШУ, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ ИЛИ ЗАВЕРШИТЬ ВЫЗОВ.



5. ПРОДОЛЖАЙТЕ НАЖИМАТЬ ЭТУ КНОПКУ, СПИНА ОПУСКАЕТСЯ, ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ПОДНИМАЕТСЯ, ОТПУСТИТЕ ЭТУ КНОПКУ, СПИНКА И ПОСТАВКА ДЛЯ НОГ ПЕРЕСТАЕТ ДВИГАТЬСЯ. ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ ОН ПОКАЗЫВАЕТ РЕГУЛИРОВКУ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ НА ЭКРАНЕ КОНТРОЛЛЕРА.



6. ПРОДОЛЖАЙТЕ НАЖИМАТЬ ЭТУ КНОПКУ, СПИНКА ПОДНИМАЕТСЯ, ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ОПУСКАЕТСЯ, ОТПУСТИ ЕЕ, СПИНКА И ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ПЕРЕСТАНУТ ДВИГАТЬСЯ. ЭКРАН КОНТРОЛЛЕРА ПОКАЖЕТ РЕГУЛИРОВКУ ПОЛОЖЕНИЯ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.




7. ПРОДОЛЖАЙТЕ НАЖИМАТЬ ЭТУ КНОПКУ, ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ОПУСКАЕТСЯ, ОТПУСТИ ЕЕ, ПОСТАВКА ДЛЯ НОГ ПЕРЕСТАНЕТ ДВИГАТЬСЯ, ЭКРАН КОНТРОЛЛЕРА ПОКАЖЕТ РЕГУЛИРОВКУ ПОЛОЖЕНИЯ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.



8. ПРОДОЛЖАЙТЕ НАЖИМАТЬ ЭТУ КНОПКУ, ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ПОДНИМАЕТСЯ ВВЕРХ, ОТПУСТИ ЕЕ, ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ПЕРЕСТАНЕТ ДВИГАТЬСЯ. ЭКРАН КОНТРОЛЛЕРА БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ РЕГУЛИРОВКУ ПОЛОЖЕНИЯ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.



9. В СОСТОЯНИИ ВКЛ. И В РЕЖИМЕ МЕНЮ НАЖМИТЕ ЕГО, ЧТОБЫ ПОДТВЕРДИТЬ ВЫБОР МЕНЮ И ВОЙТИ В СЛЕДУЮЩЕЕ МЕНЮ.

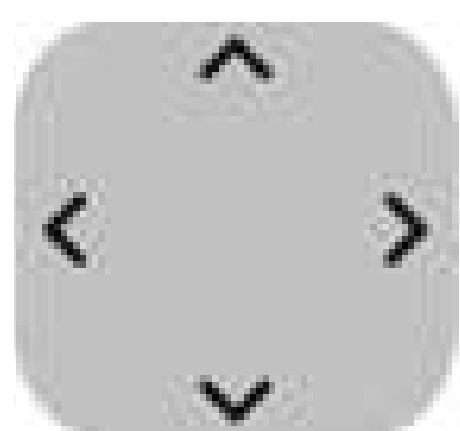

10. НАВИГАЦИОННАЯ КНОПКА ИМЕЕТ 4 КНОПКИ, ОНИ НАХОДЯТСЯ ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО. В ИНТЕРФЕЙСЕ МЕНЮ ЭТА КНОПКА НАВИГАТОРА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ НАЖАТЬ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ, ЧТОБЫ БЫСТРО ВЫБРАТЬ МЕНЮ, И НАЖАТЬ ВЛЕВО ИЛИ ВПРАВО, ЧТОБЫ ВОЙТИ В ПРЕДЫДУЩЕЕ ИЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ МЕНЮ. В РУЧНОМ РЕЖИМЕ КНОПКА ВВЕРХ И ВНИЗ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ МАССАЖНОГО АППАРАТА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЫСОТЫ ПЛЕЧА И ФИКСИРОВАННОМ ТОЧЕЧНОМ МАССАЖЕ. В НАСТРОЙКАХ СКОРОСТИ, ШИРИНЫ, ИНТЕНСИВНОСТИ И ТЕПЛА: ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ КНОПКИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ.



11. В СОСТОЯНИИ ВКЛ. НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ НАГРЕВА. ЕСТЬ 7 ПОЗИЦИЙ НАГРЕВА И ПРОГРАММА НА ВАШ ВЫБОР: ТАЛИЯ-СИДЕНЬЕ-ПОСТАВКА ДЛЯ НОГ-ТАЛИЯ И СИДЕНЬЕ, СИДЕНЬЕ И ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ-В ЦЕЛОМ-СТОП, ЦИКЛИЧЕСКИЙ НАГРЕВ.



12. В СОСТОЯНИИ ВКЛ. НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ЧТОБЫ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ СКОРОСТЬ МАССАЖА, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРУ НАГРЕВА ВЫБЕРИТЕ НУЖНЫЙ РЕЖИМ, И ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН БУДЕТ МЕРЦАТЬ, А ЗАТЕМ ВЫ МОЖЕТЕ НАЖАТЬ ЛЕВУЮ/ПРАВУЮ КНОПКУ, ЧТОБЫ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ СКОРОСТЬ МАССАЖА, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРУ НАГРЕВА.



13. В СОСТОЯНИИ ВКЛ. НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ЧТОБЫ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ШИРИНУ МАССАЖА, И ПОЯВИТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН, МЕРЦАНИЕ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ, А ЗАТЕМ ВЫ МОЖЕТЕ НАЖАТЬ ЛЕВУЮ/ПРАВУЮ КНОПКУ ЧТОБЫ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ШИРИНУ МАССАЖА.



14. В СОСТОЯНИИ ВКЛ. НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ЧТОБЫ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ СКОРОСТЬ МАССАЖА РОЛИКАМИ ДЛЯ НОГ: БЫСТРЫЙ, МЯГКИЙ И СТОП.



15. В СОСТОЯНИИ ВКЛ. НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ЧТОБЫ ВОЙТИ В МЕНЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ.



16. В СОСТОЯНИИ ВКЛ. НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ЧТОБЫ ВОЙТИ В МЕНЮ РУЧНОЙ ПРОГРАММЫ.




17. В СОСТОЯНИИ ВКЛ. НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ЧТОБЫ ВОЙТИ В МЕНЮ ВОЗДУШНОГО МАССАЖА.



18. В РЕЖИМЕ ВКЛ. ИЛИ ОЖИДАНИЯ НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ПЕРЕЙДЕТ В СОСТОЯНИЕ НЕВЕСОМОСТИ ПОЛОЖЕНИЕ, НАЖМИТЕ ЕГО ЕЩЕ РАЗ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ.

VII. ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ

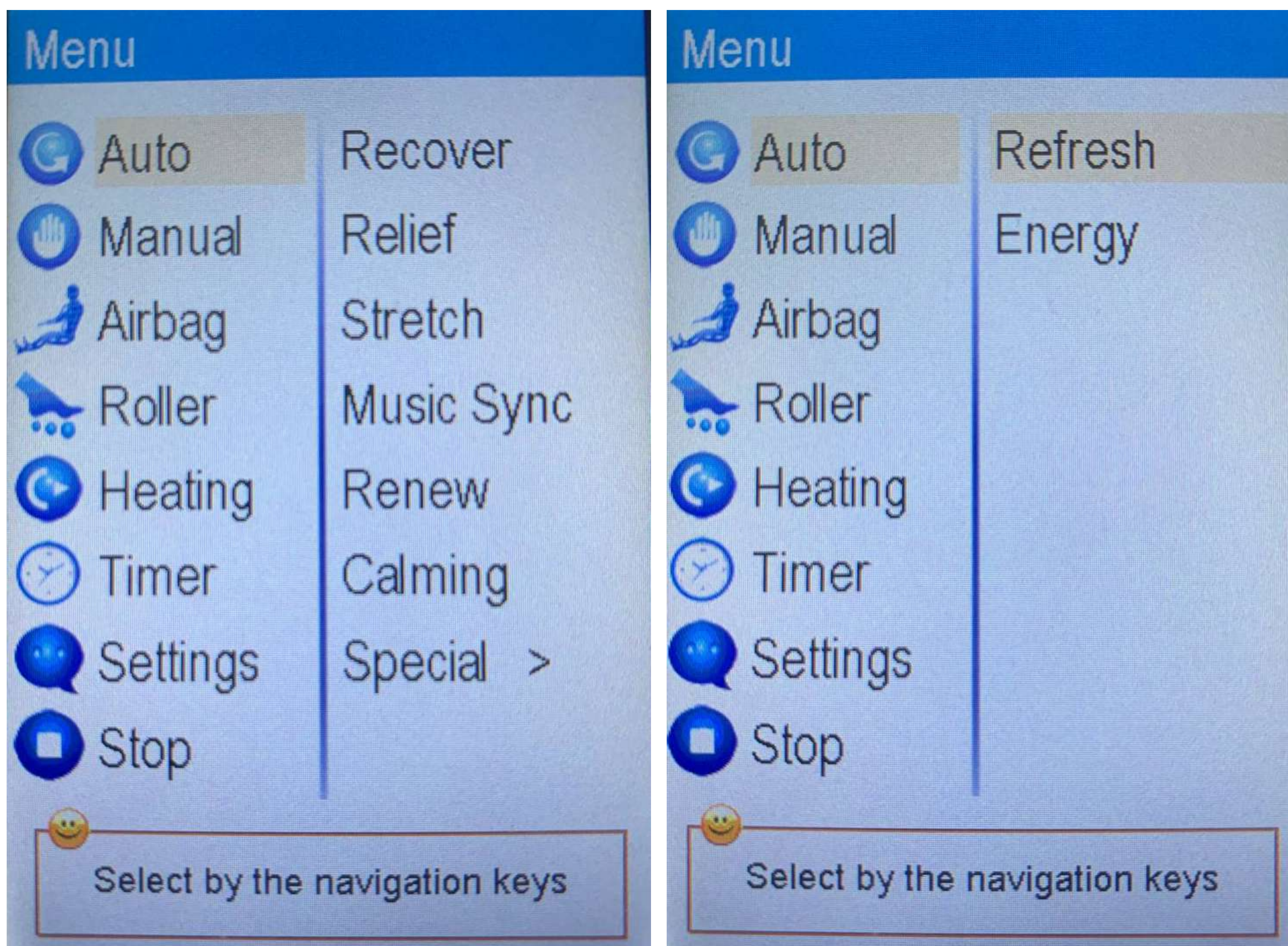

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ МАССАЖА.

НАЖМИТЕ «**MENU**», В ГЛАВНОМ МЕНЮ ВЫБЕРИТЕ «**AUTO**». ПЕРЕД ВАМИ ОТКРОЕТСЯ СПИСОК АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ:


1. ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
2. ПРОРАБОТКА РЕЛЬЕФА
3. РАСТЯГИВАЮЩИЙ
4. СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ С МУЗЫКОЙ
5. РАЗМИНАЮЩИЙ
6. УСПОКАИВАЮЩИЙ
7. ТОНИЗИРУЮЩИЙ
8. АКУПРЕССУРНЫЙ

РУЧНОЙ РЕЖИМ.

ВЫБЕРИТЕ «**MANUAL**». ПЕРЕД ВАМИ ОТКРОЕТСЯ СПИСОК ПРОГРАММ:

5 ВИДОВ РОЛИКОВОГО МАССАЖА

1. РАЗМИНАЮЩИЙ
2. ПОСТУКИВАЮЩИЙ
3. НАДАВЛИВАЮЩИЙ
4. РАЗМИНАЮЩИЙ + ПОСТУКИВАЮЩИЙ
5. ШИАЦУ

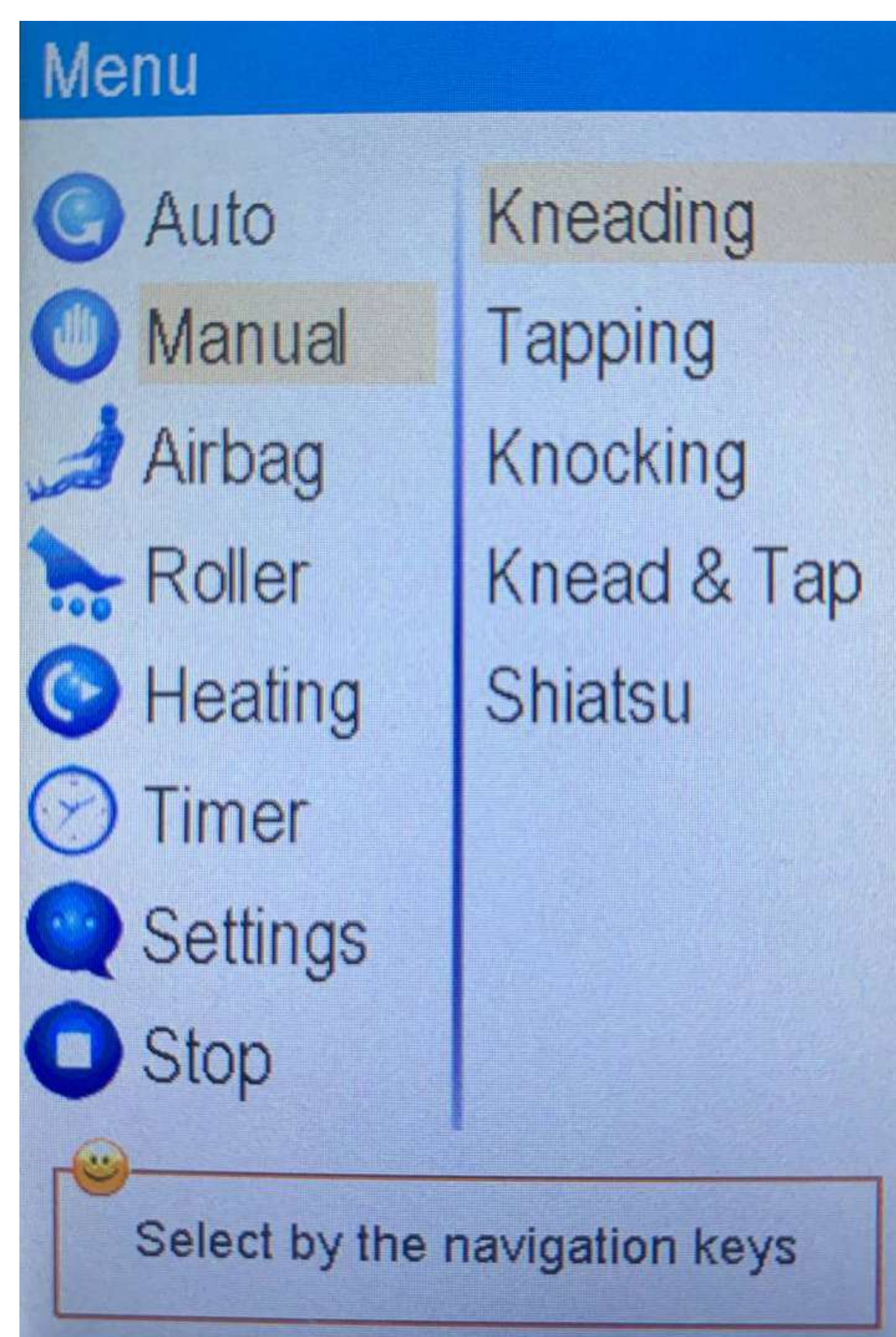


ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ

ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ.

ВЫБЕРИТЕ «**AIRBAG**». ПЕРЕД ВАМИ ОТКРОЕТСЯ СПИСОК ПРОГРАММ:

3 РЕЖИМА ЛИМФОДРЕНАЖНОГО МАССАЖА:

1. АЭРОМАССАЖ МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА
2. АЭРОМАССАЖ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТУЛОВИЩА
3. АЭРОМАССАЖ НОГ И СТУПНЕЙ

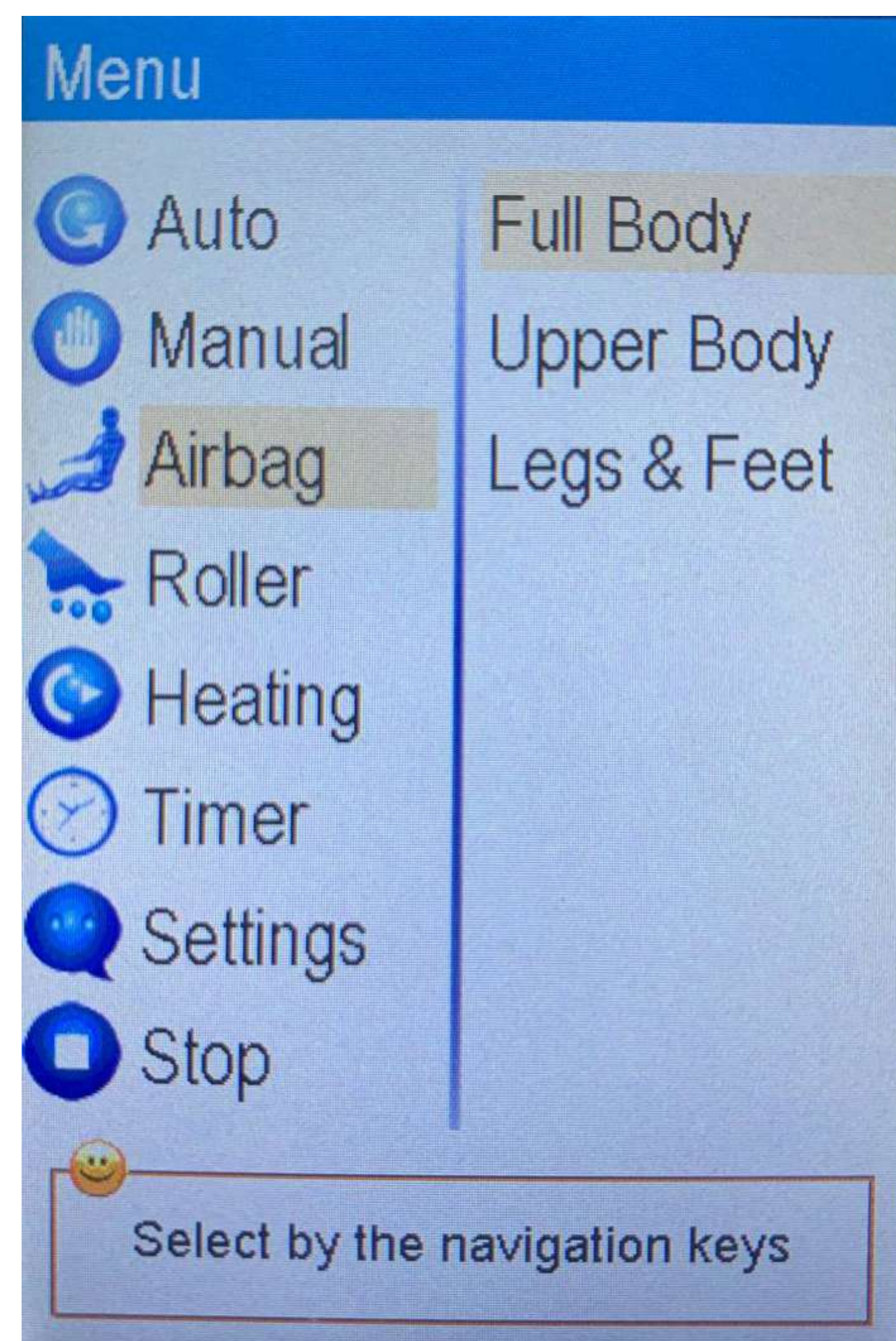

ФУНКЦИЯ ПРОГРЕВА

ВЫБЕРИТЕ «**HEATING**». ФУНКЦИЯ ПРОГРЕВА ВКЛ\ВЫКЛ.




ИНТЕНСИВНОСТЬ РОЛИКОВОГО МАССАЖА

ВЫБЕРИТЕ «**ROLLER**». ФУНКЦИЯ СКОРОСТИ РОЛИКОВОГО МАССАЖА:

1. БЫСТРЫЙ
2. МЯГКИЙ
3. СТОП



ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ

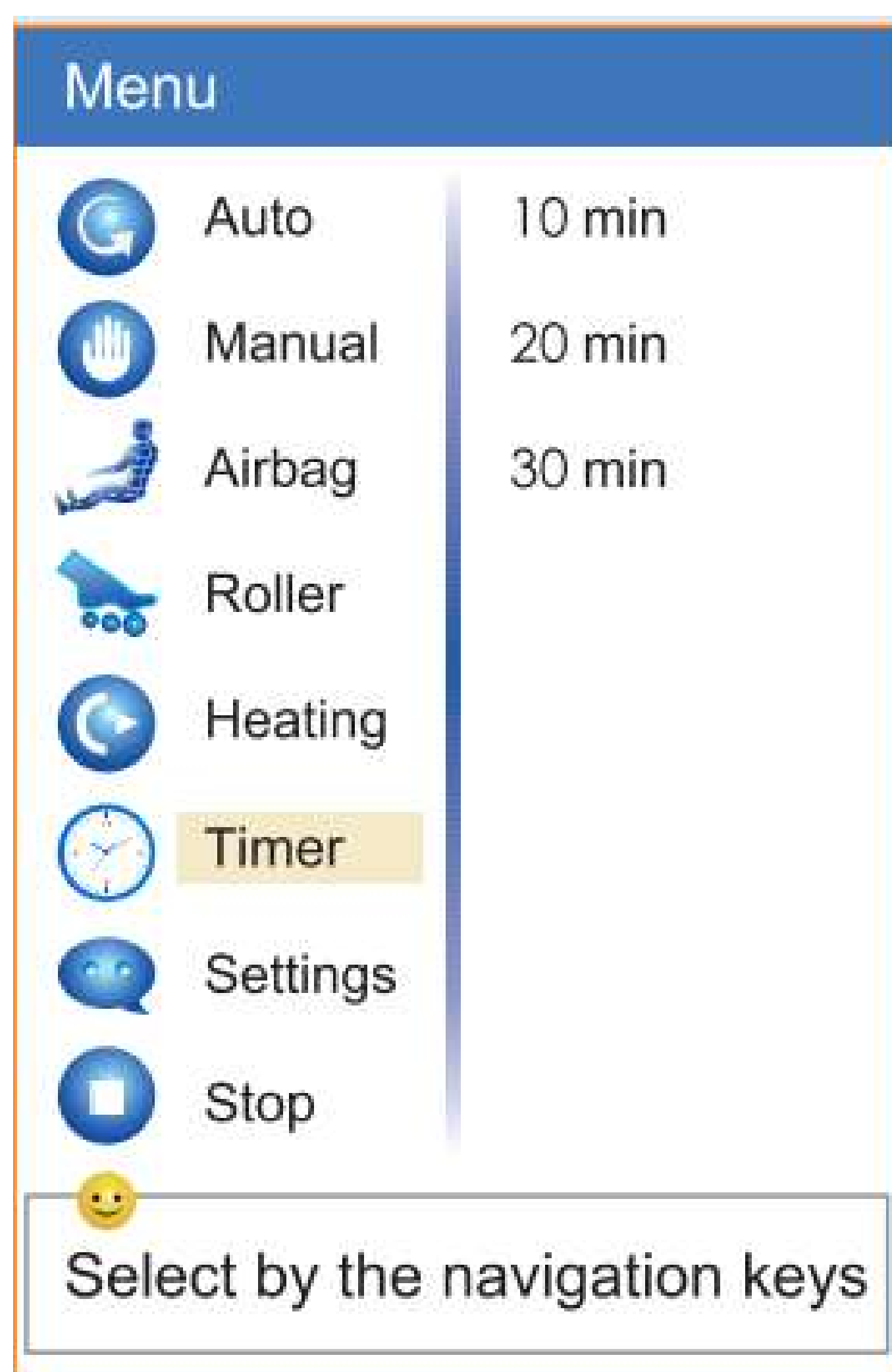


ВЫБОР ВРЕМЕНИ МАССАЖА:

- 10 МИНУТ
- 20 МИНУТ
- 30 МИНУТ.

ВРЕМЯ ПО УМОЛЧАНИЮ - 20 МИНУТ, КРЕСЛО АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ.

НАСТРОЙКИ.

- ВЫБОР ЯЗЫКА ИНТЕРФЕЙСА
- НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ

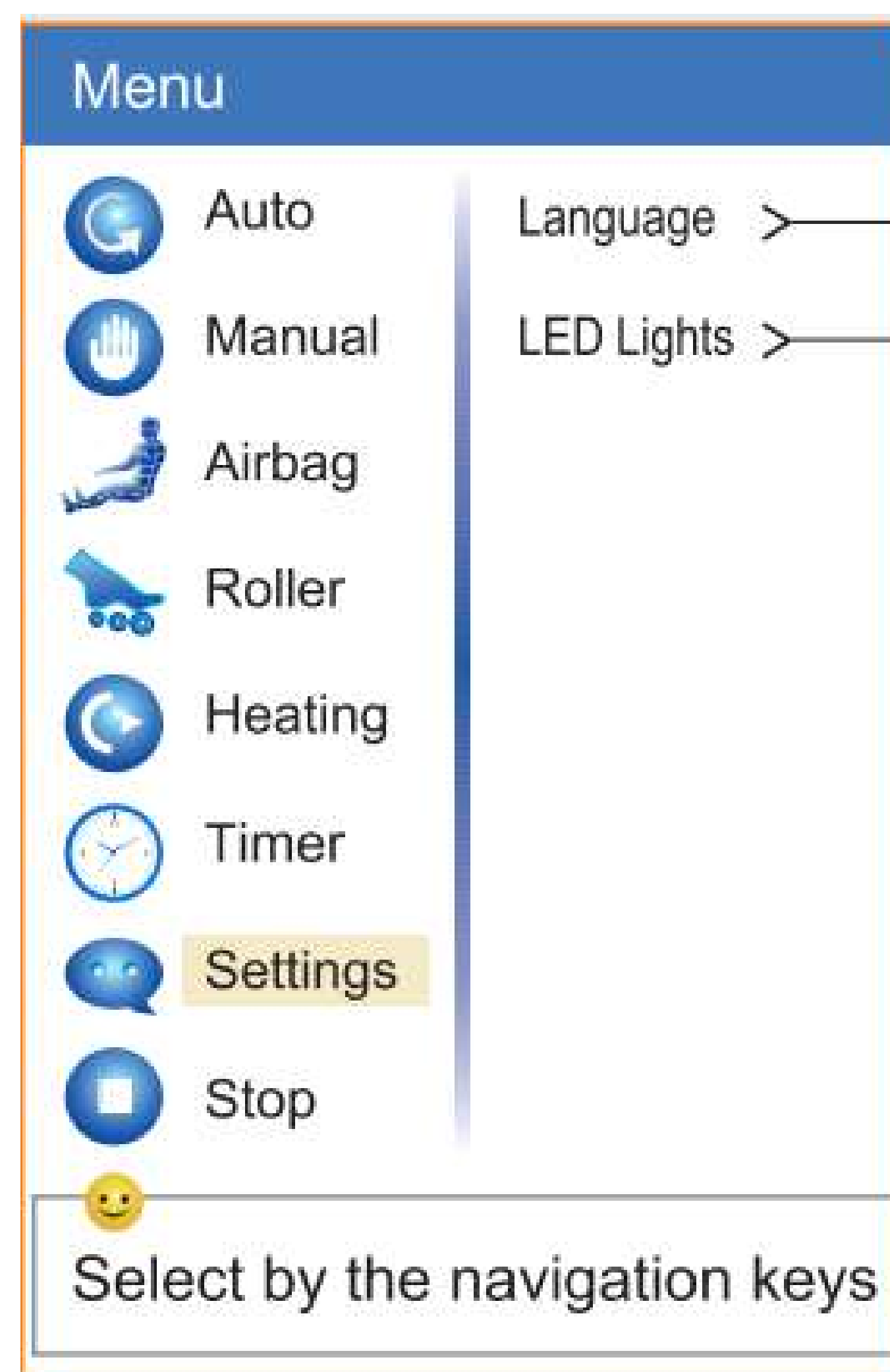


РЕЖИМ QUICK RELAXATION (БЫСТРОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ).



РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ ТЕЛА.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ЛЮБОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ МАССАЖА ЗАПУСКАЕТСЯ ФУНКЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ ВАШЕГО ТЕЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕК АККУПУНКТУРЫ. БЛАГОДАРЯ СКАНИРОВАНИЮ ТЕЛА ДОСТИГАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ МАССАЖА.

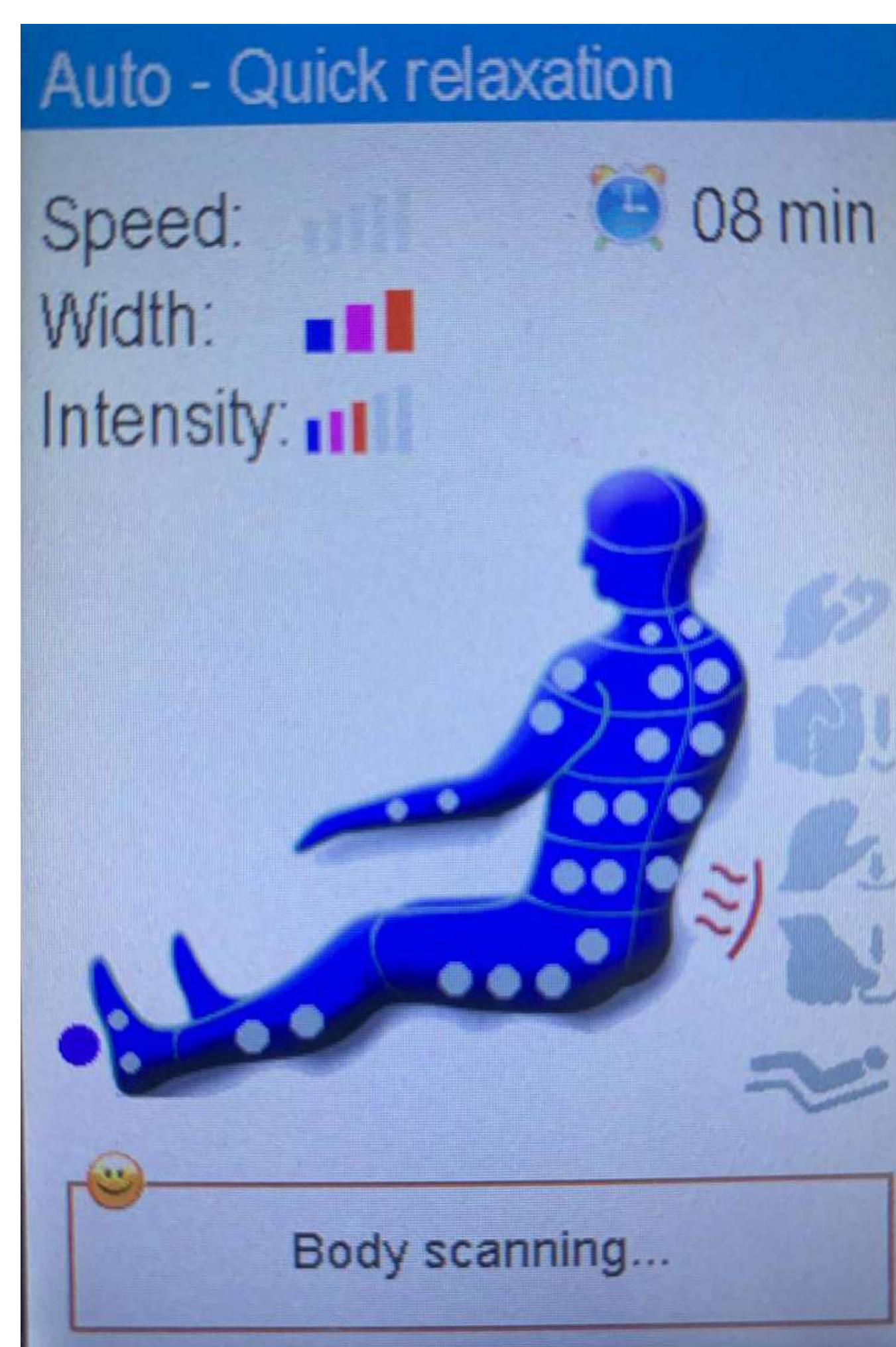

VI. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





ШАГ 1. ВКЛЮЧИТЬ

- 1) ВСТАВЬТЕ ОДИН КОНЕЦ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ В ОТВЕРСТИЕ "А".
- 2) УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ШНУР КОНТРОЛЛЕРА ВСТАВЛЯЕТСЯ В ОТВЕРСТИЕ «В».
- 3) ВСТАВЬТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ.
- 4) ВКЛЮЧИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ.
- 5) НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ НА КОНТРОЛЛЕРЕ.

ШАГ 2. МАССАЖ

- 1) РАБОТАЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА.
- 2) КОГДА МАССАЖ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ, ПРИ ЭТОМ НА КОНТРОЛЛЕРЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ «ВЫКЛЮЧЕНИЕ», КОНТРОЛЛЕР ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 3-5 СЕКУНД.

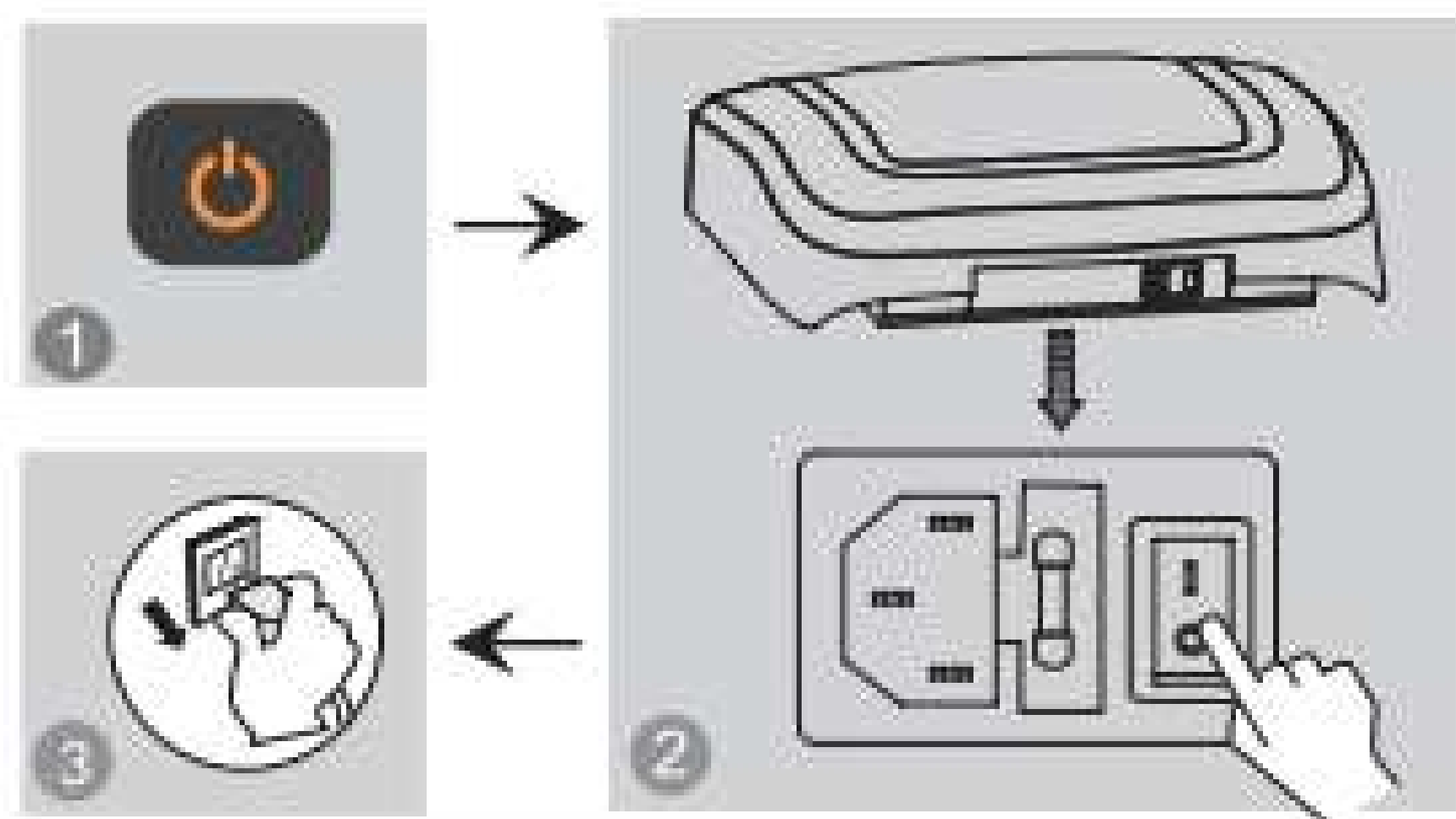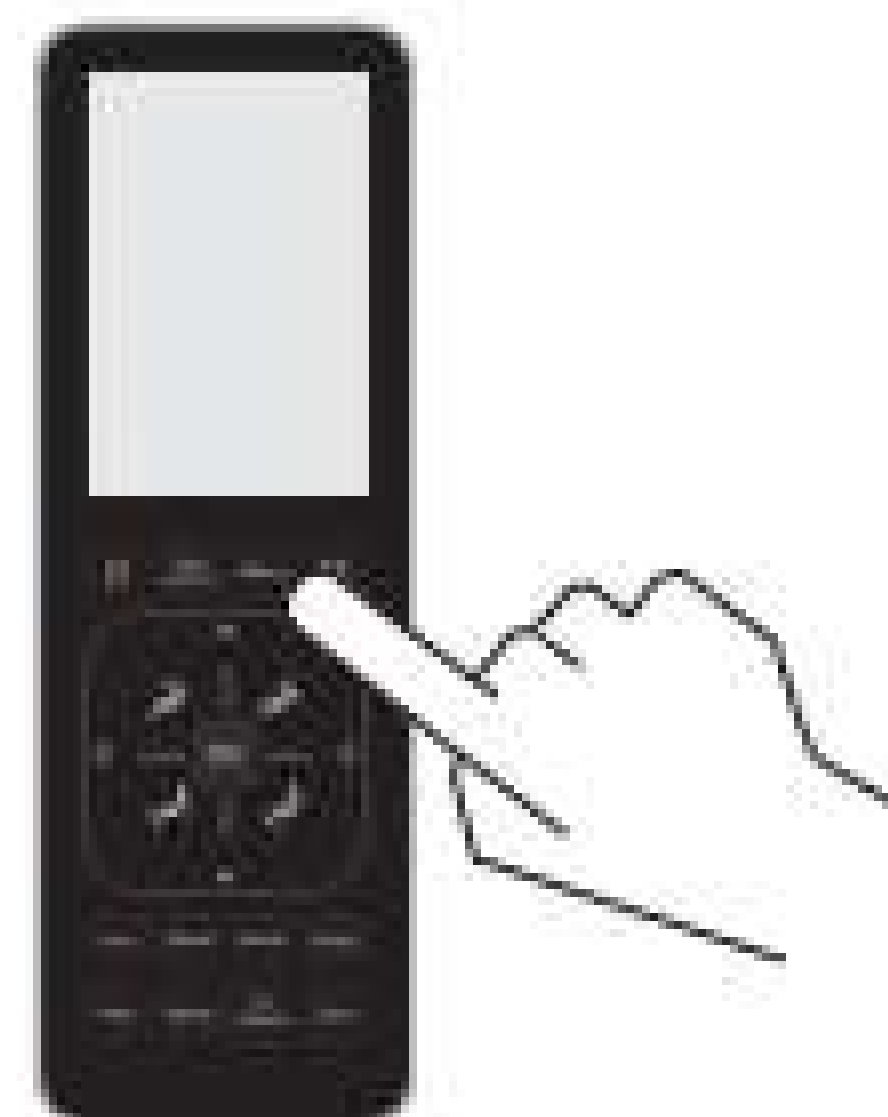

ШАГ 3. ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ

- 1) КОГДА КРЕСЛО ВКЛЮЧЕНО, НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ, ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО, И ОНО АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕЗАПУСТИТСЯ.
- 2) ВЫКЛЮЧИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНКИ КРЕСЛА ПОСЛЕ ТОГО, КАК РОЛИКИ ОСТАНУТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ХРАНЕНИЯ.
- 3) ВЫЙДИТЕ ВИЛКУ ШНУРА ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- 1) ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДТЯНИТЕ ПОДУШКУ, СПИНКУ И Т. Д., ЧТОБЫ МАТЕРИАЛ НЕ ПОВРЕДИЛСЯ, ЕСЛИ ЕСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОТКЛЮЧИТЕ КРЕСЛО И ПРОВЕДИТЕ РЕМОНТ.
- 2) ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО К ПРАВИЛЬНОЙ РОЗЕТКЕ.




ВНИМАНИЕ:


- 1) ПЕРЕД ТЕМ КАК СЕСТЬ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МЕЖДУ ПОДЛОКОТНИКОМ, СПИНКОЙ И СИДЕНЬЕМ КРЕСЛА НЕТ ЗАЩЕМЛЕНИЙ.
- 2) ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КРЕСЛО НАХОДИТСЯ В ИСХОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
- 3) НЕ СТОЙТЕ НА НЕМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ:


• ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ВВЕРХ И СПИНКА ВНИЗ (НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ НА КОНТРОЛЛЕРЕ, СПИНКА ОПУСКАЕТСЯ, А УПОР ДЛЯ НОГ ПОДНИМАЕТСЯ. ОСОЗНАЙТЕ, ЧТО ЭТА КНОПКА, СПИНКА И УПОР ДЛЯ НОГ ПЕРЕСТАЮТ ДВИГАТЬСЯ, УГОЛ ЗАФИКСИРОВАН В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ.)

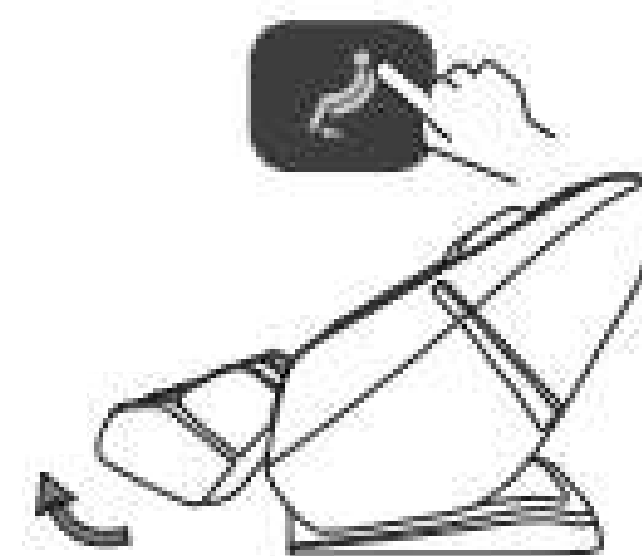


• ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ВНИЗ И СПИНКА ВНИЗ (НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ НА КОНТРОЛЛЕРЕ, СПИНКА ПОДНИМЕТСЯ, А УПОР ДЛЯ НОГ ОПУСТИТСЯ. ОСОЗНАЙТЕ, ЧТО ЭТА КНОПКА, СПИНКА И УПОР ДЛЯ НОГ ПЕРЕСТАЮТ ДВИГАТЬСЯ, УГОЛ ЗАФИКСИРОВАН В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ.)

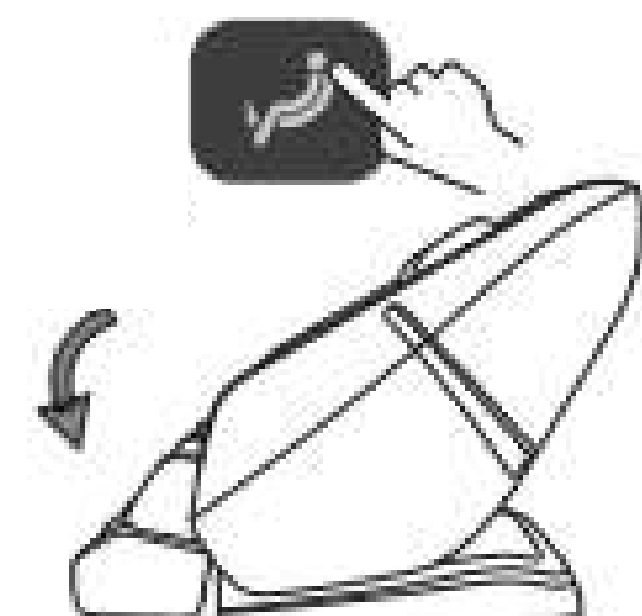

• ОПОРА ДЛЯ НОГ ВНИЗ (НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ НА ПОДСТАВКЕ ДЛЯ НОГ КОНТРОЛЛЕРА. ОТПУСТИТЕ КНОПКУ УПОРА ДЛЯ НОГ, ОСТАНОВИТЕ ДВИЖЕНИЕ, УГОЛ ЗАФИКСИРОВАН В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ)

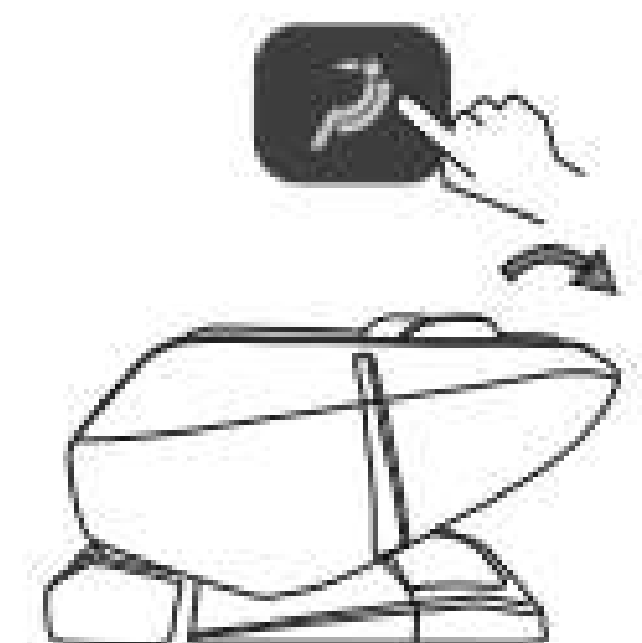


• ОПОРА ДЛЯ НОГ ВВЕРХ (НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ НА ПОДНЯТОЙ ПОДСТАВКЕ ДЛЯ НОГ КОНТРОЛЛЕРА. ОТПУСТИТЕ КНОПКУ УПОРА ДЛЯ НОГ, ОСТАНОВИТЕ ДВИЖЕНИЕ, УГОЛ ЗАФИКСИРОВАН В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ)

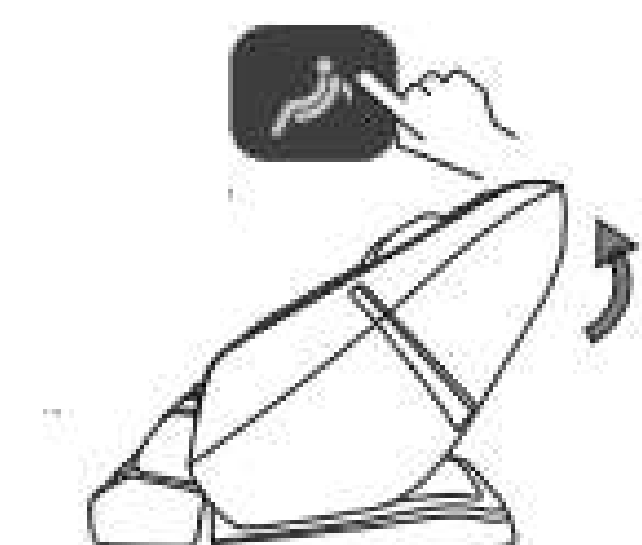


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



• ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ВНИЗ И СПИНКА ВНИЗ (НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ НА КОНТРОЛЛЕРЕ, СПИНКА ПОДНИМЕТСЯ, А УПОР ДЛЯ НОГ ОПУСТИТСЯ. ОСОЗНАЙТЕ, ЧТО ЭТА КНОПКА, СПИНКА И УПОР ДЛЯ НОГ ПЕРЕСТАЮТ ДВИГАТЬСЯ, УГОЛ ЗАФИКСИРОВАН В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ.)

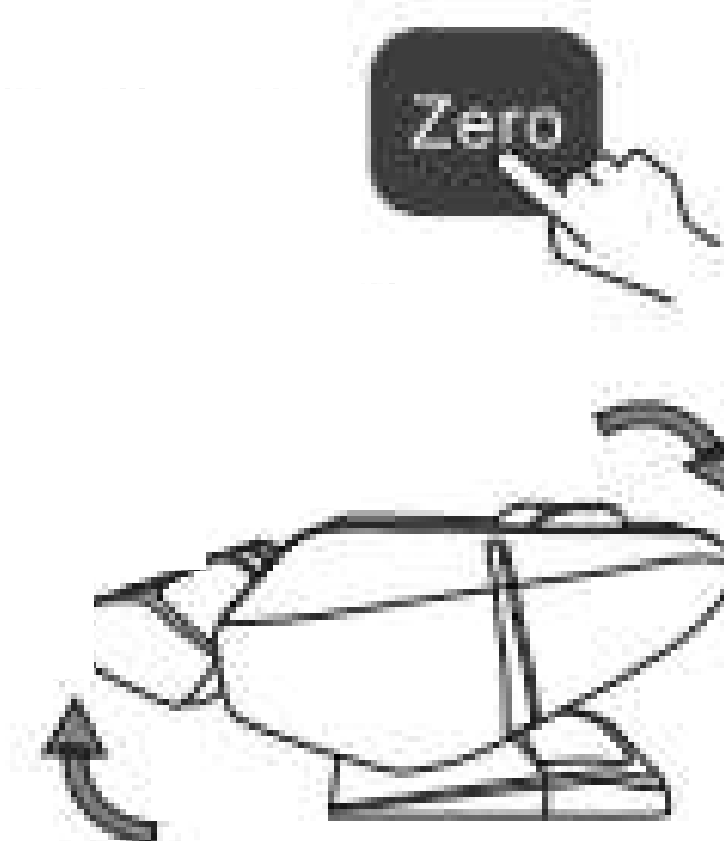


• ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ВНИЗ И СПИНКА ВНИЗ (НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ НА КОНТРОЛЛЕРЕ, СПИНКА ПОДНИМЕТСЯ, А УПОР ДЛЯ НОГ ОПУСТИТСЯ. ОСОЗНАЙТЕ, ЧТО ЭТА КНОПКА, СПИНКА И УПОР ДЛЯ НОГ ПЕРЕСТАЮТ ДВИГАТЬСЯ, УГОЛ ЗАФИКСИРОВАН В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ.)

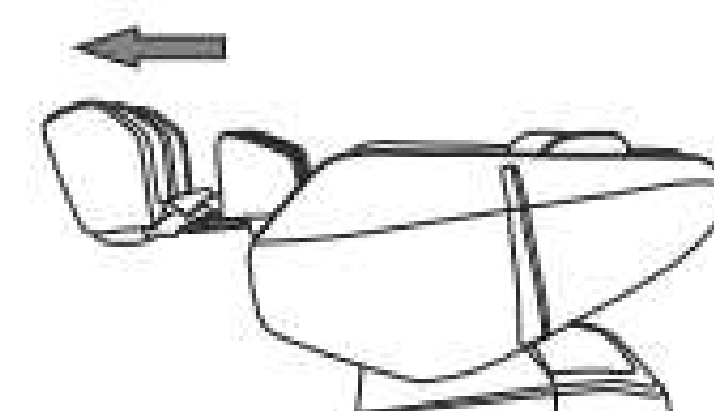

• МАССАЖ РУК (ПОМЕСТИТЕ РУКИ МЕЖДУ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ НА РУКАХ ДО ТОГО, КАК ВСТРОЕННЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ НАПОЛНЯТСЯ ВОЗДУХОМ. ОН БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЩИПКОВЫЕ МАССАЖИ РУК И КИСТЕЙ ПОСЛЕ НАДУВАНИЯ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ.)

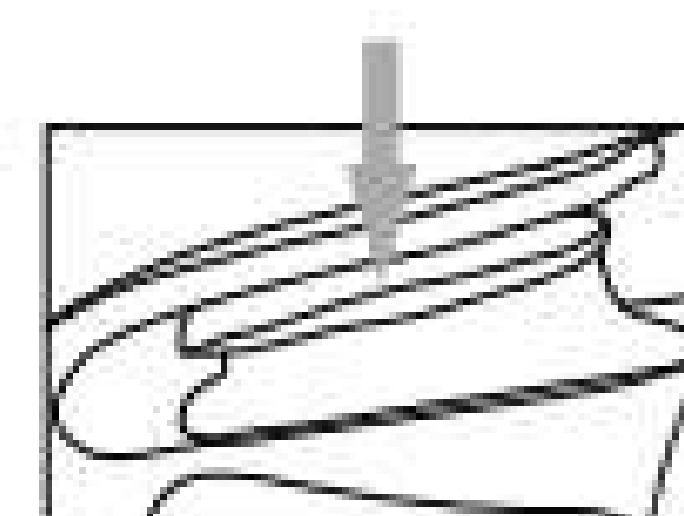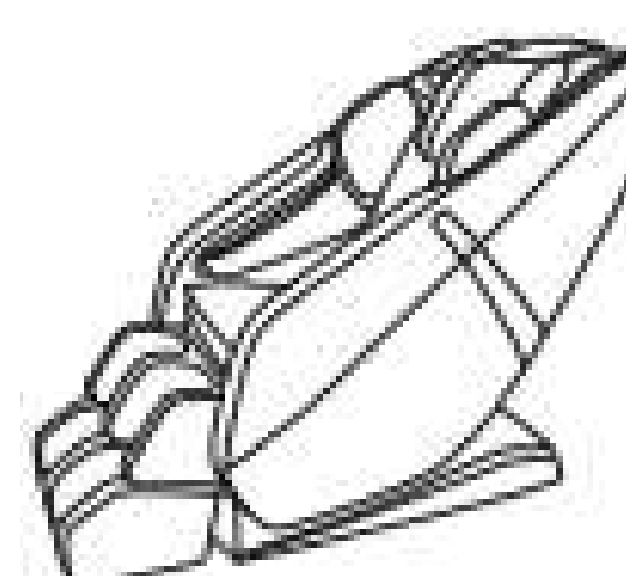

• МАССАЖ ПЛЕЧ (МНОГОСЛОЙНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗРАБОТАНЫ С ОБЕИХ СТОРОН ПЛЕЧА. ДОСТИГНИТЕ ДАВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО РАСТЯГИВАЮЩЕГО МАССАЖА, СНИМИТЕ УСТАЛОСТЬ В ПЛЕЧАХ.)

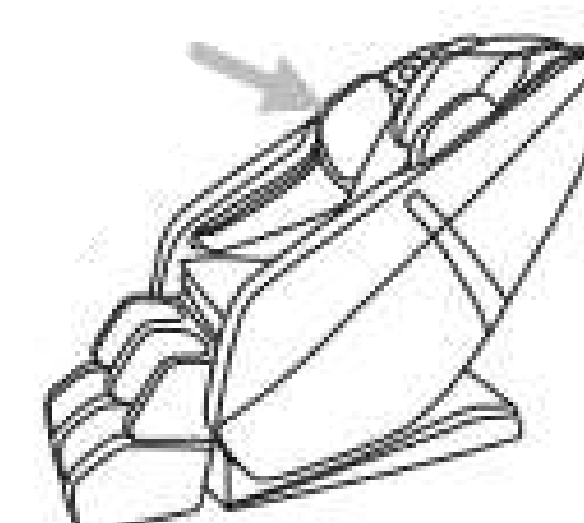

• РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ СТОП(ДЕТАЛИ ПОДНОЖКИ С РОЛИКОВЫМ МАССАЖЕМ И ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА ПОД ДАВЛЕНИЕМ. СТИМУЛИРУЕТ РЕФЛЕКТОРНЫЕ ЗОНЫ СТОП, РЕГУЛИРУЕТ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФУНКЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОРГАНОВ, ЭФФЕКТИВНО ПОВЫШАЕТ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ОРГАНИЗМА И ИММУНИТЕТ.)



1) ПОЖАЛУЙСТА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПРЕДЕЛАХ ДОСЯГАЕМОСТИ СПИНКИ НЕТ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ПРЕДМЕТОВ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕОЖИДАННОЙ ТРАВМЫ ИЛИ ПОТЕРИ ИМУЩЕСТВА.


2) ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ СПИНКИ СЛЕДИТЕ ЗА ЗАЗОРОМ МЕЖДУ СПИНКОЙ И ПОДЛОКОТНИКОМ.

3) КОГДА ОПОРА ДЛЯ НОГ ДВИЖЕТСЯ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВСТАВАЙТЕ И НЕ ОТХОДИТЕ ОТ СИДЕНЬЯ, НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ ДВИЖЕНИЕ ОПОРЫ ДЛЯ НОГ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЛУЧАЕВ ПОВРЕЖДЕНИЯ КРЕСЛА


4) ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

IX. ПОСЛЕ МАССАЖА


1) УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ЗОНЕ СПИНКИ И УПОРА ДЛЯ НОГ НЕТ ЛЮДЕЙ, ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ИЛИ ЧЕГО-ЛИБО ЕЩЕ.

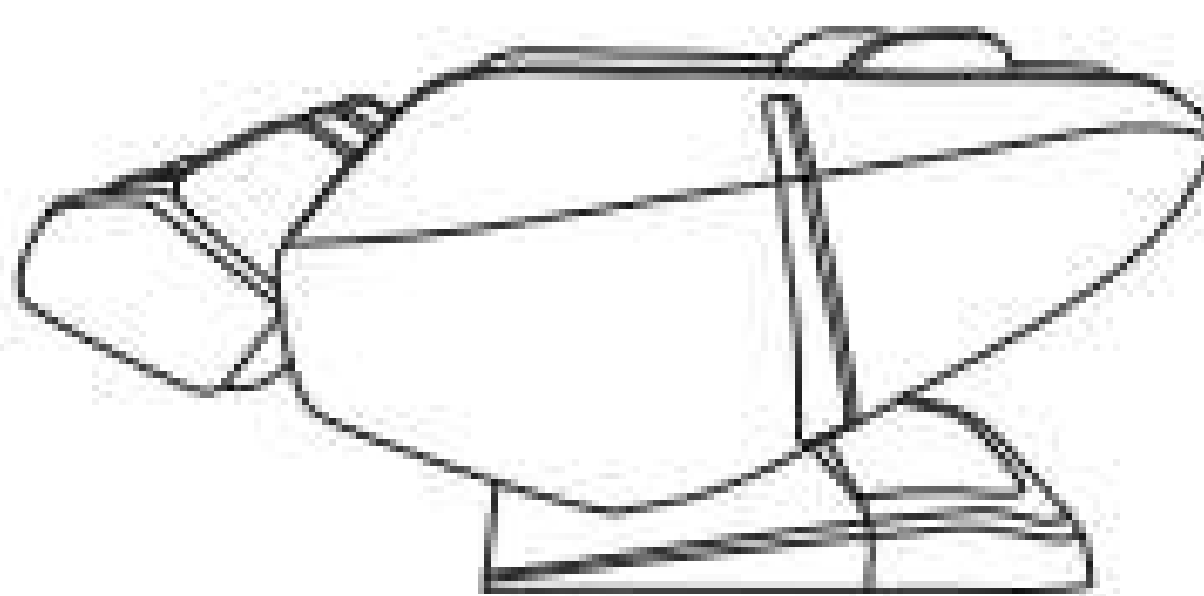

2) ВЕРНИТЕ СПИНКУ И ОПОРУ ДЛЯ НОГ В НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЛЕРА (ИЛИ НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛ / ВЫКЛ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ СПИНКУ И ОПОРУ ДЛЯ НОГ В НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)

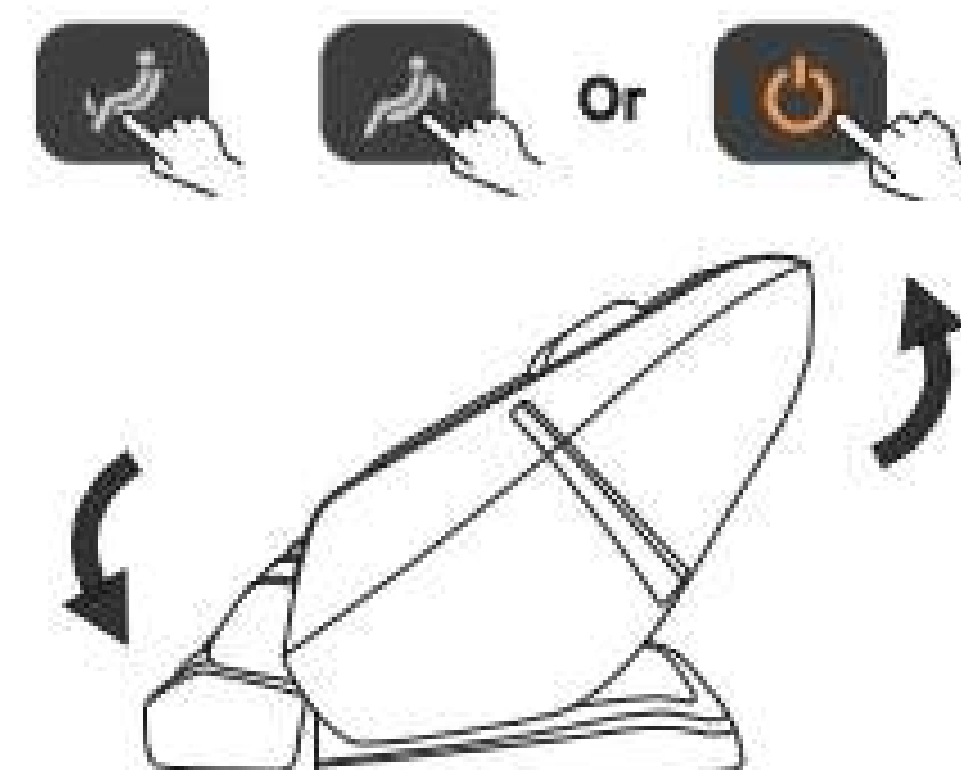


3) ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЛОЖИТЕ КОНТРОЛЛЕР ОБРАТНО В КАРМАН ПРАВОГО ПОДЛОКОТНИКА.

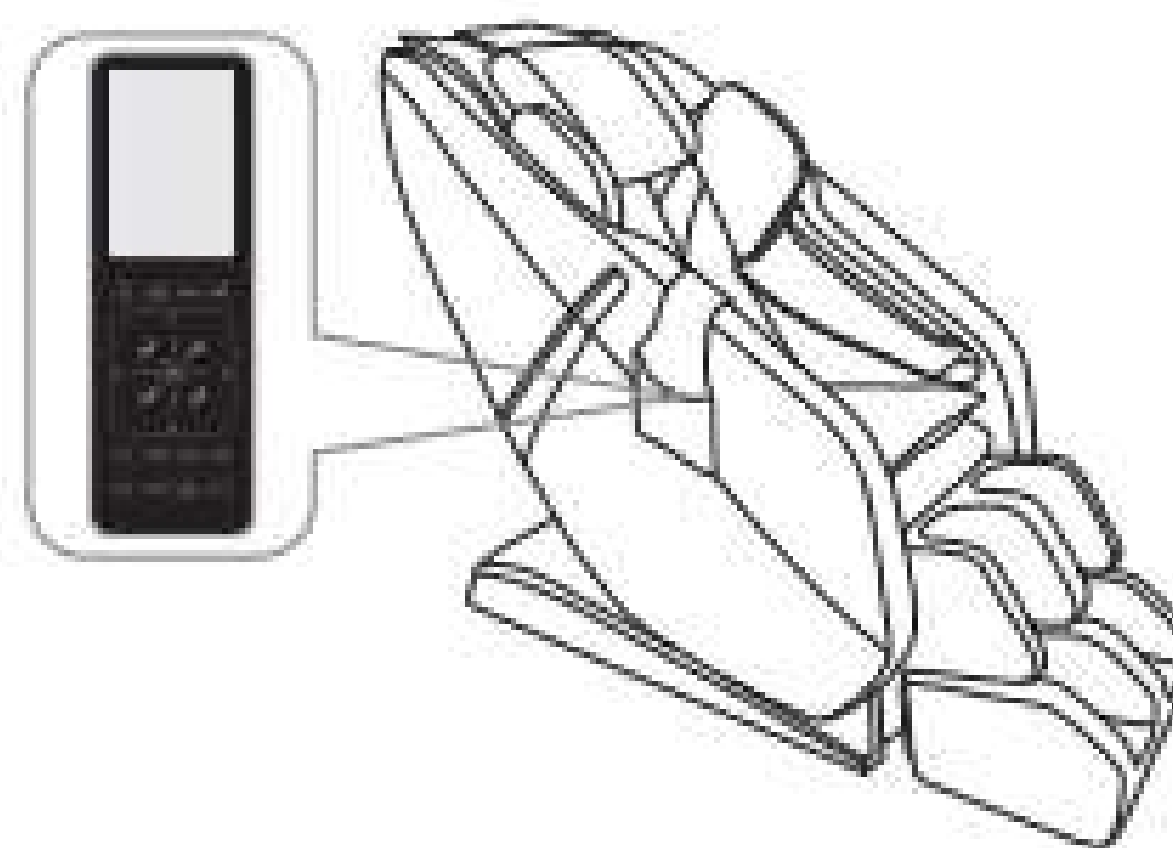


4) ПОЛОЖИТЕ ПОДУШКУ В ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

5) ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ

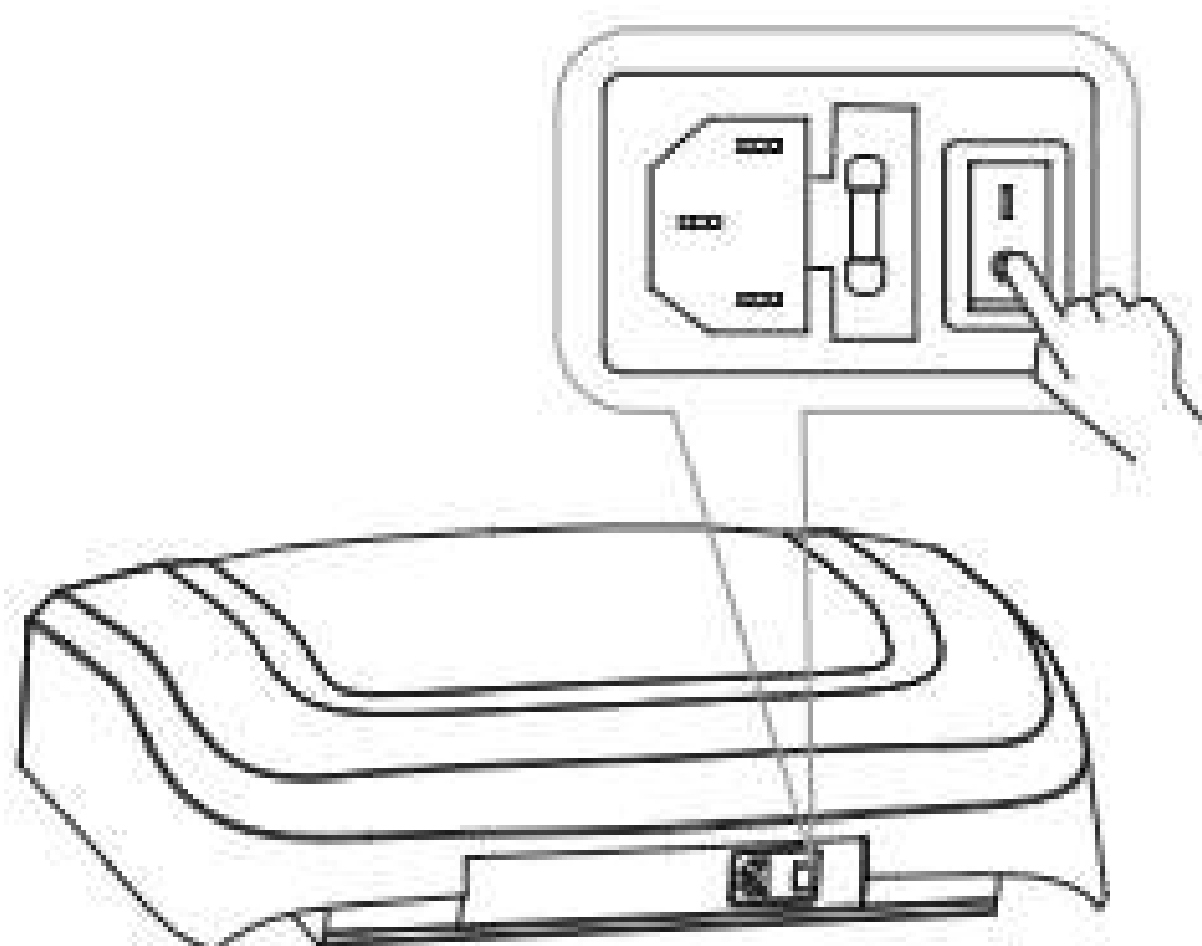

6) ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ РОЗЕТКИ (ВНИМАНИЕ: ДЕРЖИТЕ ВИЛКУ В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ)

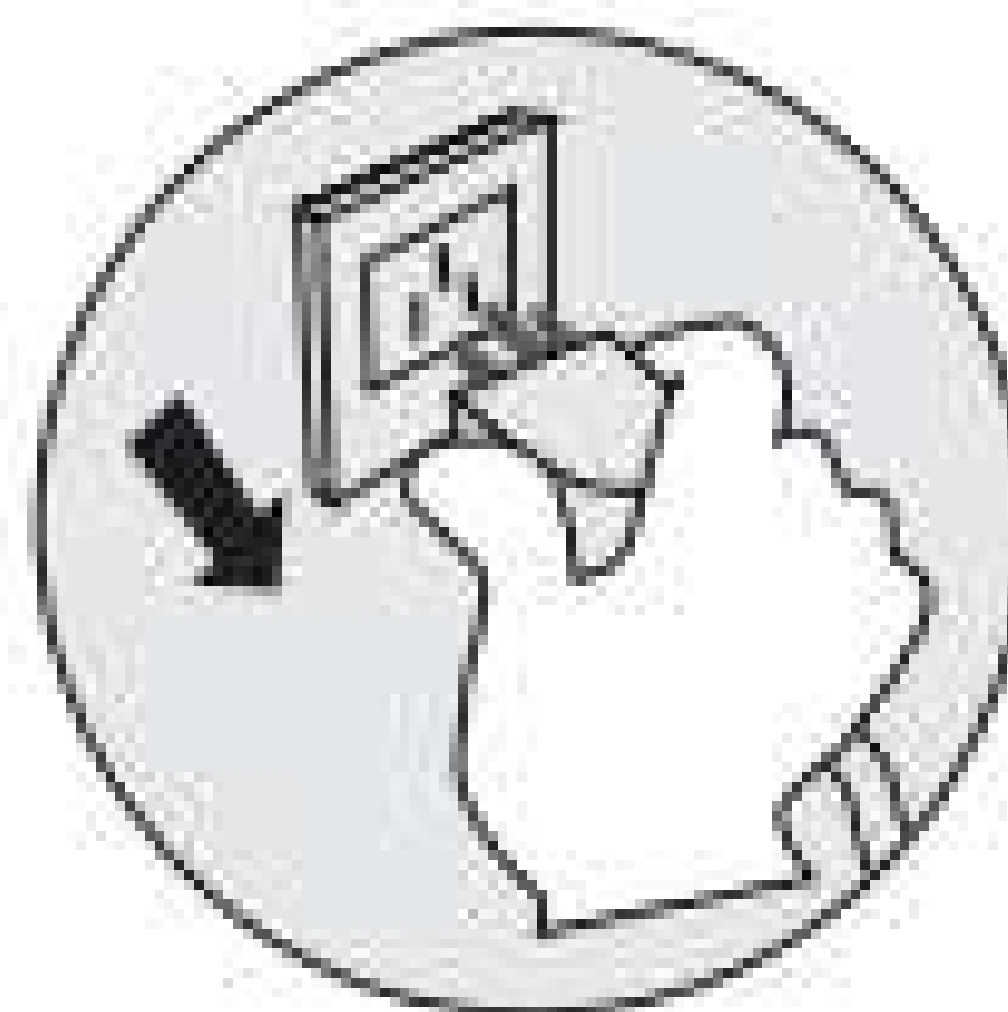

7) ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОЧИСТИТЕ СТУЛ.




ВНИМАНИЕ:

- ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЖМИТЕ ВКЛ / ВЫКЛ, ЧТОБЫ ЗАВЕРШИТЬ ВСЕ МЕТОДЫ МАССАЖА И ДОЖДАТЬСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ДЕТЯМ ИЛИ ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ.
- ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ, ГРЯЗИ, ИЗБЕГАЙТЕ ПОВРЕЖДЕНИИ ИЗОЛЯЦИИ.


VII. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ КОЖА

АККУРАТНО ПРОТРИТЕ МЯГКОЙ И СЛЕГКА СУХОЙ ТКАНЬЮ.

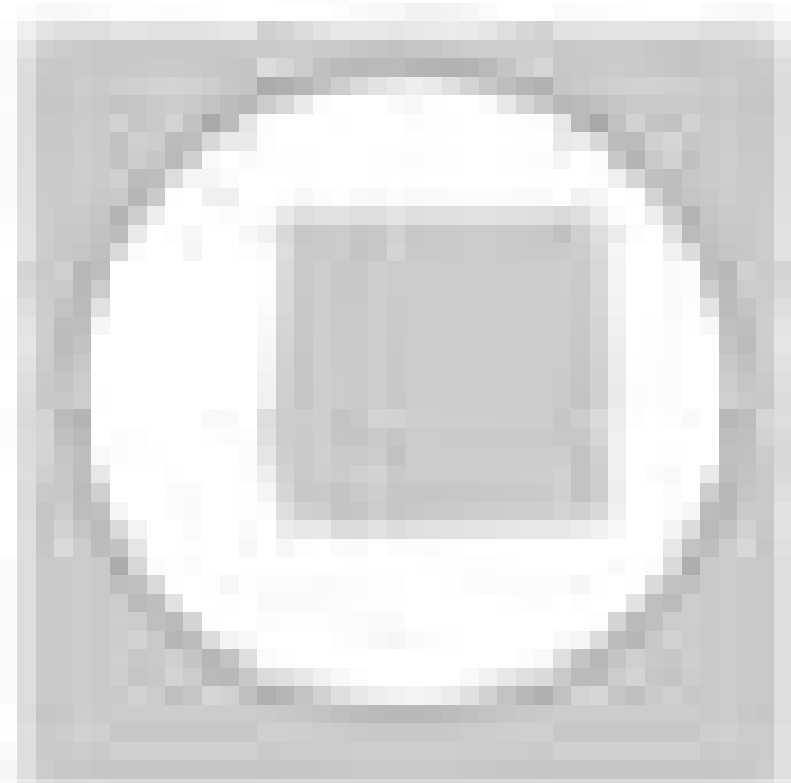

(ХИМИЧЕСКИЕ ИЛИ МЕДИЦИНСКИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ЗАПРЕЩЕНЫ)

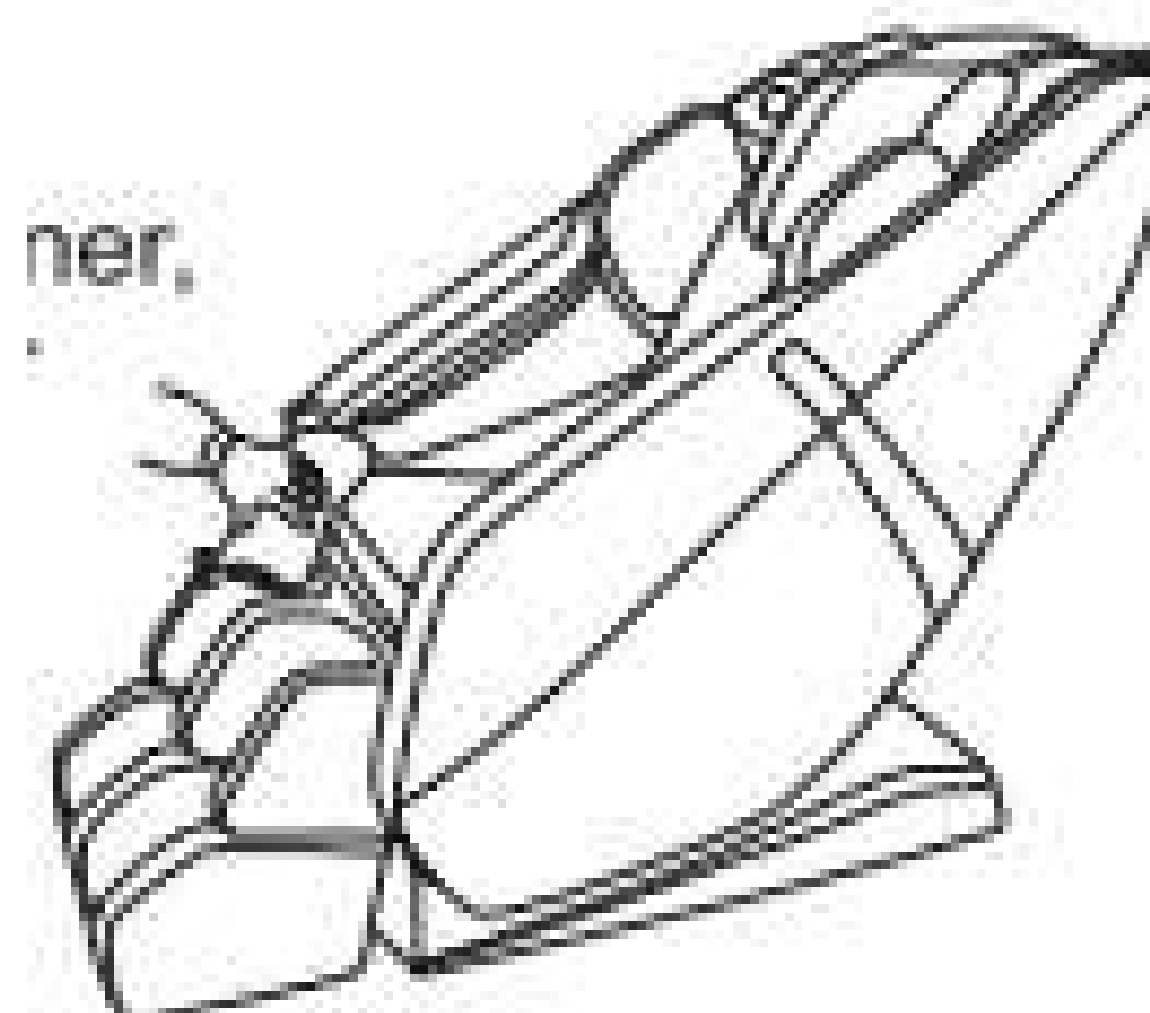

ЕСЛИ КОЖА ГРЯЗНАЯ

- 1) ОКУНИТЕ МЯГКУЮ ТКАНЬ В 3-5% РАСТВОР НЕЙТРАЛЬНОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА, ОТОЖМИТЕ И АККУРАТНО ОЧИСТИТЕ ПЯТНО НА ПОВЕРХНОСТИ.
- 2) ОБИВКУ ПОСТИРАТЬ, ОТЖАТЬ И ПРОТЕРЕТЬ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ.



- 3) ПРОТРИТЕ ЕГО МЯГКОЙ ТКАНЬЮ
- 4) ДАТЬ ВЫСОХНУТЬ (ВОЗДУХОДУВКА ЗАПРЕЩЕНА)

ТКАНЬ

- 1) СМОЧИТЕ ТКАНЬ СЛАБЫМ НЕЙТРАЛЬНЫМ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ, ОТОЖМИТЕ ЕЕ И ОЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРИАЛА.
 - (РАЗБАВИТЕЛЬ, ГАЗ, СПИРТ ЗАПРЕЩЕНЫ). ПОЧИСТИТЕ ГРЯЗНЫЕ ДЕТАЛИ СЛАБЫМ НЕЙТРАЛЬНЫМ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ (ИЗБЕГАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ ЧИСТКИ)
- 2) ЧРЕЗМЕРНАЯ ОЧИСТКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ТКАНЕВОГО МАТЕРИАЛА.
- 3) ПРОТРИТЕ СМОЧЕННОЙ ВОДОЙ, НО ВЫЖАТОЙ ТКАНЬЮ.
- 4) МОЖНО СУШИТЬ.



ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ

- 1) СМОЧИТЕ ТКАНЬ НЕЙТРАЛЬНЫМ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ, ОТОЖМИТЕ И ПРОТРИТЕ
- 2) ПРОТРИТЕ СМОЧЕННОЙ ВОДОЙ, НО ВЫЖАТОЙ ТКАНЬЮ.
- 3) МОЖНО СУШИТЬ




ОЧИСТИТЕ КОНТРОЛЛЕР

- 1) ПОСЛЕ ОТЖИМА ПРОТРИТЕ МЯГКОЙ ТКАНЬЮ
- 2) МОЖНО СУШИТЬ

ПРОПЕЛЛЕНТ, РАЗБАВИТЕЛЬ ИЛИ СПИРТ ЗАПРЕЩЕНЫ




О ЧИСТКЕ

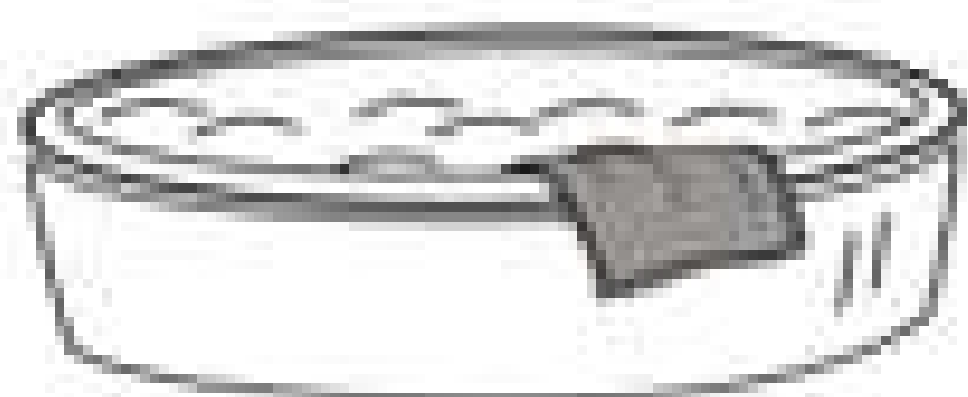

- ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ВИЛКЕ МОКРЫМИ РУКАМИ.
 - ВСТАВЛЯЯ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РУКИ СУХИЕ.
- В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ОЖОГ.

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

TELEGRAM:

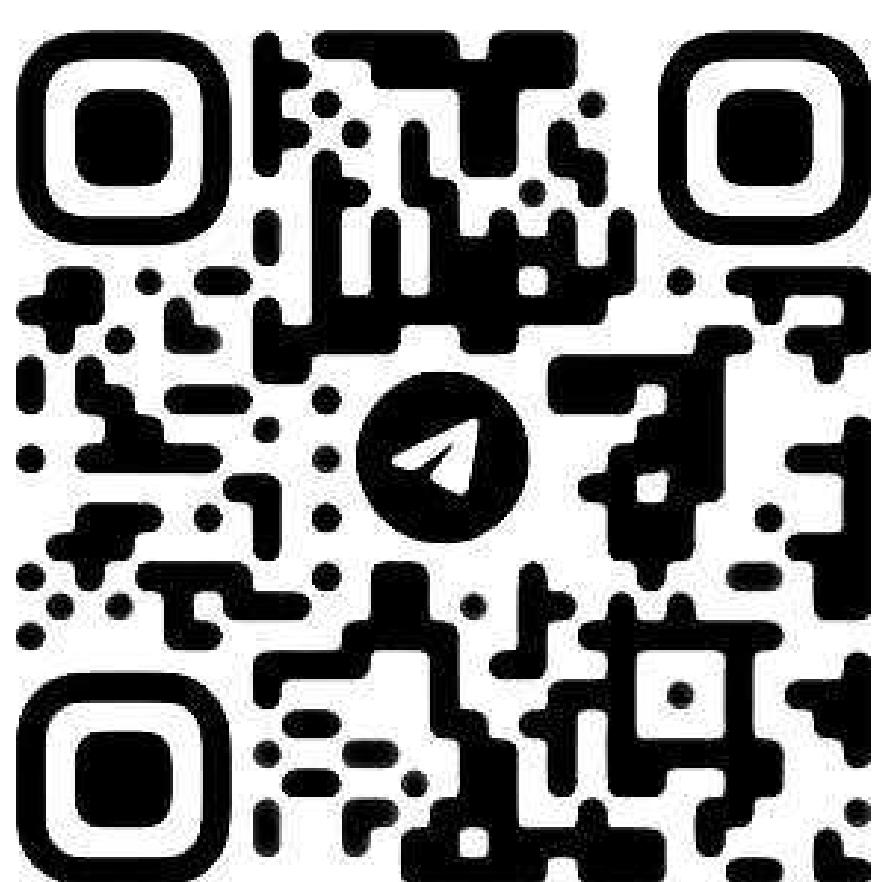

ВКОНТАКТЕ:



PINTEREST:



YOUTUBE:



VIII. РУКОВОДСТВО ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
МАССАЖНОЕ КРЕСЛО НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ.	ПРОВЕРЬТЕ, ВКЛЮЧЕН ЛИ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОГО УПРАВЛЕНИЯ
	НЕ ВЫБРАНА ФУНКЦИЯ МАССАЖА	ВЫБЕРИТЕ ФУНКЦИЮ МАССАЖА
	ПРОВЕРЬТЕ, ПЛОХОЙ ЛИ КОНТАКТ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ.	УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВИЛКА И РОЗЕТКА ПОДКЛЮЧЕНЫ
	ПРОВОД ИЛИ ВИЛКИ ПОВРЕЖДЕНЫ	ОБРАТИТЕСЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ИЛИ НАЗНАЧЕННОМУ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕМОНТА.
	СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	ЗАМЕНИТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТОЙ ЖЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.
	ЧТО-ТО НЕ ТАК С ВНУТРЕННЕЙ СХЕМОЙ	ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К НАЗНАЧЕННОМУ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕМОНТА.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ МАССАЖА СЛЫШЕН ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	ЭТО ЗВУК ВОЗДУШНОГО НАСОСА, ДВИГАТЕЛЯ И МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ	НОРМАЛЬНЫЙ ЗВУК, НЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬ НА НЕГО ВНИМАНИЕ.
РАЗЛИЧНАЯ ВЫСОТА ЛЕВОГО РОЛИКА И ПРАВОГО РОЛИКА	РОЛИКИ МАССАЖНЫЕ РАБОТАЮТ ПОСМЕННО	НОРМАЛЬНО, НЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬ НА ЭТО ВНИМАНИЕ
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗВУК ВНЕЗАПНО СТАНОВИТСЯ НАМНОГО ГРОМЧЕ	ПРОВЕРЬТЕ, НЕ СВЯЗАНО ЛИ ЭТО С ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ	ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ЧТОБЫ МАССАЖЕР ОСТАВАЛСЯ В ПОКОЕ БОЛЕЕ ПОЛУЧАСА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАБОТАТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ.
	ИЗ-ЗА ДОЛГОЙ РАБОТЫ ИЗНОШЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ. ЭТО НОРМАЛЬНО	ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К НАЗНАЧЕННОМУ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕМОНТА.

РУКОВОДСТВО ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ФУНКЦИЯ МАССАЖА ВНЕЗАПНО ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	ВНЕЗАПНО ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ	ПОДКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО СНОВА
	ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ ИСТЕКЛО	ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ЧТОБЫ МАССАЖЕР ОСТАВАЛСЯ В ПОКОЕ БОЛЕЕ ПОЛУЧАСА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАБОТАТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ.
НИ СПИНКУ, НИ ОПОРУ ДЛЯ НОГ НЕЛЬЗЯ ОПУСТИТЬ	ПРОВЕРИТЬ, НЕТ ЛИ ПРЕПЯТСТВИЙ; КРЕСЛО ПЕРЕГРУЖАЕТСЯ; В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ИНОГДА МАССАЖНЫЙ АППАРАТ МОЖЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕСТАТЬ РАБОТАТЬ	УСТРАНИТЕ ПРЕПЯТСТВИЯ; ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ЧТОБЫ МАССАЖЕР ОТДЫХАЛ БОЛЕЕ ПОЛУЧАСА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАБОТАТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ
КРЕСЛО НЕ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	ЧРЕЗМЕРНАЯ РАБОТА; ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ИСТЕКЛО	ОБРАТИТЕСЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ, НАЗНАЧЕННОМУ ИЛИ АВТОРИЗОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ЗАМЕНЫ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД, ВИЛКА ОТДАЕТ ТЕПЛО	КРЕСЛО МОЖЕТ РАБОТАТЬ С ПЕРЕГРУЗКОЙ	ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ЧТОБЫ МАССАЖЕР ОСТАВАЛСЯ В ПОКОЕ БОЛЕЕ ПОЛУЧАСА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАБОТАТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ.
	ДРУГОЙ НЕНОРМАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ	ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К НАЗНАЧЕННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.



ПРИМЕЧАНИЕ:

ЕСЛИ ПРОБЛЕМА НЕ ВЫЗВАНА ВЫШЕУКАЗАННОЙ ПРИЧИНОЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫКЛЮЧИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ И ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ЗАТЕМ ОБРАТИТЕСЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ИЛИ АГЕНТУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ РЕМОНТА ВАШЕГО КРЕСЛА.

IX. УСЛОВИЯ И СРОКИ ГАРАНТИИ

- 1.** УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ТОВАРА И ДОВОДЯТСЯ ДО ПОКУПАТЕЛЯ ПРОДАВЦОМ В НАСТОЯЩЕМ ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОВАРА.
- 2.** НА ВСЕ ТОВАРЫ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ ПРОДАВЦА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ НА ТОВАР УКАЗАН В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ, ВЫДАННОМ ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА.
- 3.** ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРИНЯТЬ ТОВАР У ПРОДАВЦА ПО КОМПЛЕКТАЦИИ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ, ЗАФИКСИРОВАВ ФАКТ ПРИЕМА В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ; ПРОВЕРИТЬ ПОЛНОТУ ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА. ПРЕТЕНЗИИ ПО НЕКОМПЛЕКТУ И МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ОБНАРУЖЕННЫМ ПОСЛЕ ПРИЁМА ТОВАРА У ПРОДАВЦА, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И БУДУТ УСТРАНЕНЫ ЗА СЧЁТ ПОКУПАТЕЛЯ.
- 4.** ГАРАНТИЯ НА ТОВАР ДЕЙСТВУЕТ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ВСЕХ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРИ УСЛОВИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕГУЛЯРНОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ВЛАДЕЛЬЦА ТРЕНАЖЕРА.
- 5.** СРОК СЛУЖБЫ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ СОСТАВЛЯЕТ 7 ЛЕТ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДУЕМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
- 6.** ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
 - НЕИСПРАВНОСТИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ, ВЫЗВАННЫЕ ВНЕШНИМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ И ХИМИЧЕСКИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ (СКОЛЫ, ЦАРАПИНЫ, ТРЕЩИНЫ, ПЯТНА И Т.П.);
 - КОМПОНЕНТЫ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ЕСТЕСТВЕННОМУ ИЗНОСУ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ КОТОРЫХ ВОЗНИКЛА ВСЛЕДСТВИЕ ИХ ИЗНОСА И СТИРАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НОРМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ПОРУЧНИ ИЗ ПЕНОРЕЗИНЫ, ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ И БАТАРЕЯ, НАКЛЕЙКИ, СПИНКИ, СИДЕНИЯ И ВАЛИКИ ИЗ КОЖЗАМЕНИТЕЛЯ (ПОРОЛОНА, ПЕНОРЕЗИНЫ), ЩЁТКИ И ПОДШИПНИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ПОДШИПНИКИ ВАЛОВ, КНОПОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ КОНСОЛИ И РУЧЕК УПРАВЛЕНИЯ;
 - ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ И ОПЕРАЦИИ РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ ОПЕРАЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ: СМАЗКА ПРИВОДОВ И ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, ЧИСТКА И СМАЗКА ДЕКИ, ЧИСТКА ВАЛОВ, ЧИСТКА ШКИВА И ПРИВОДНОГО РЕМНЯ, ЦЕНТРОВКА И НАТЯЖЕНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА И ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ, ЗАМЕНА ЩЁТОК, ПОДШИПНИКОВ И ЧИСТКА КОЛЛЕКТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ПРОТЯЖКА БОЛТОВ СОЕДИНЕНИЙ ТРЕНАЖЕРА, КАЛИБРОВКА (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ТАК КАК ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЁМ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕНАЖЕРА);
 - ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ТОВАРА: НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА КОНСОЛИ, ЦЕНТРОВКА И НАТЯЖЕНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА, УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ, ЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ;
 - ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ПОЖАР, НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ЗАТОПЛЕНИЕ, НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И Т.Д.).

УСЛОВИЯ И СРОКИ ГАРАНТИИ

7. ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ В ХОДЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ РЕМОНТА ТОВАРА;
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИБО В СВЯЗИ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ В ЦЕЛЯХ УДОВОЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО МОДЕЛЬЮ ТОВАРА;
- ПРОНИКНОВЕНИЕ ЖИДКОСТИ, ПЫЛИ, НАСЕКОМЫХ И ДРУГИХ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ ВНУТРЬ ТОВАРА (МОТОРНЫЙ ОТСЕК, КОНСОЛЬ, ДЕКА);
- ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА (ОТСУТСТВУЕТ НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ, ДАТА ПРОДАЖИ, ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ТОВАРА, ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ НЕ ОРИГИНАЛЬНОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА;
- ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЫЗВАНЫ НЕСООТВЕТСТВИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ДРУГИМИ ВНЕШНИМИ ФАКТОРАМИ (КЛИМАТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ);
- ЕСЛИ НЕДОСТАТОК ТОВАРА ЯВИЛСЯ СЛЕДСТВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ И/ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, АКСЕССУАРОВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ, НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИЛИ НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМАТОВ ИНФОРМАЦИИ.

8. ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОБМЕНЕ ИЛИ ВОЗВРАТЕ ТОВАРА НЕОБХОДИМО СОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

- КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА, ВКЛЮЧАЯ УПАКОВОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (КОРОБКА, ЭЛЕМЕНТЫ УПАКОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И Т.Д.);
- СОХРАНЕНИЕ ТОВАРНОГО ВИДА ТОВАРА (ОТСУТСТВИЕ ЦАРАПИН, ПОТЕРТОСТЕЙ И Т.Д.);
- НАЛИЧИЕ ОРИГИНАЛА ТОВАРНОГО ЧЕКА, ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

9. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СКРЫТЫМИ ДЕФЕКТАМИ ТОВАРА. ДАННЫЕ ВИДЫ РАБОТ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ПО УТВЕРЖДЕННОМУ ПРЕЙСКУРАНТУ. ДИАГНОСТИКА ЗАЯВЛЕННОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ПОКРЫВАЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ХАРАКТЕР ЗАЯВЛЕННОЙ НЕИСПРАВНОСТИ.

10. СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОВАРА, ОПИСАННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРИЛАГАЕМОЙ К НЕМУ, МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ КАК САМИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ТАК И СПЕЦИАЛИСТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

11. ЕСЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА В РЕГИОНАХ ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРА ИЛИ ЕГО ЧАСТЕЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПРОДАВЦА, ИЛИ ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ КОМАНДИРОВКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРОДАВЦА, ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ВОЗЛАГАЮТСЯ НА ПОКУПАТЕЛЯ.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ГАРАНТИИ



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТЕ В КАРТОЧКЕ ТОВАРА ПРИОБРЕТЕННОЙ МОДЕЛИ

- * **УЗЛЫ ДВИЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ** - ДЕКА, ВАЛЫ БЕГОВОГО ПОЛОТНА, ШКИВ С ОСЬЮ, СЕРВОПРИВОД, КОНСОЛЬ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ (ССВ, РСВ), ПУЛЬСОМЕРЫ, ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (МСВ, ИНВЕРТОР), ГЕНЕРАТОР, КАБЕЛИ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА, ШЛЕЙФЫ, ЭКСЦЕНТРИКИ, ПРИВОДЫ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЁРОВ: ШКИВ, ПОДШИПНИКИ, ВТУЛКИ, РОЛИКИ, СИЛОВЫЕ БЛОКИ, ГРУЗОВЫЕ СТОЙКИ; МАГНИТНАЯ СИСТЕМА НАГРУЗКИ, МАХОВИК, ФИКСАТОРЫ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЙ.
- ** **ДЕТАЛИ ИЗНОСА** - БЕГОВОЕ ПОЛОТНО, ПРЫЖКОВЫЙ МАТ, ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ, КНОПОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЖУХИ И ЗАГЛУШКИ, БОКОВЫЕ НАКЛАДКИ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК, ТРОСЫ И РЕМНИ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЁРОВ, ЭЛАСТОМЕРЫ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК, ЗАЩИТНАЯ СЕТКА БАТУТА, ТРОС РЕГУЛИРОВКИ НАГРУЗКИ.
- *** **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** - ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ И БАТАРЕИ, НАКЛЕЙКИ, ОБИВКА ИЗ КОЖЗАМЕНИТЕЛЯ, НАБИВКА СИДЕНИЙ И ВАЛИКОВ (ПОРОЛОН, ПЕНОРЕЗИНА), ЩЁТКИ И ПОДШИПНИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, КНОПОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ КОНСОЛИ И РУЧЕК УПРАВЛЕНИЯ.

ДОМАШНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЛИЧНОГО, СЕМЕЙНОГО, ДОМАШНЕГО ИЛИ ИНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

ПОЛУКОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ИЛИ В ИНЫХ ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИЧНЫМ, СЕМЕЙНЫМ, ДОМАШНИМ И ИНЫМ ПОДОБНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ: ОТЕЛИ, САНАТОРИИ, ШКОЛЫ, ДЮСШОР, ДОМА ОТДЫХА.

КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ИЛИ В ИНЫХ ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИЧНЫМ, СЕМЕЙНЫМ, ДОМАШНИМИ ИНЫМ ПОДОБНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ: ФИТНЕС-КЛУБЫ, СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ.

ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

ТЕЛЕФОН: 8 (800) 777-79-21
ПОЧТА: INFO@KOENIGSMANN.RU

ИЛИ НА САЙТЕ ПЕРЕИДЯ ПО QR-КОДУ





**BE FIT
BE KOENIGSMANN**

KOENIGSMANN.RU