

# **Инструкция**

## **Массажное кресло Koenigsmann Nogo**

Полезные ссылки:

[Массажное кресло Koenigsmann Nogo - смотреть на сайте](#)

[Массажное кресло Koenigsmann Nogo - читать отзывы](#)



**KOENIGSMANN**

**МАССАЖНОЕ КРЕСЛО**

**NOGO**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**KOENIGSMANN.RU**



- I.**      ВНЕШНИЙ ВИД
- II.**     ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- III.**    ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
- IV.**    ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
- V.**     ФУНКЦИИ
- VI.**    ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- VII.**   ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- VIII.**  РУКОВОДСТВО ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ
- IX.**    УСЛОВИЯ И ГАРАНТИЯ
- X.**     ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

# I. ВНЕШНИЙ ВИД

---



## **II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

---

- 1.** 3D МАССАЖ: ШЕИ, СПИНЫ, ПЛЕЧ И ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТАЛИИ. ПРОГРАММА ИМИТИРУЕТ МЕТОДИКИ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ.
- 2.** ФУНКЦИЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ АКУПУНКТУРНЫХ ТОЧЕК ПОМОГАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ТОЧНЫЙ МАССАЖ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕМ.
- 3.** УНИКАЛЬНАЯ КИТАЙСКАЯ РАЗОГРЕВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПОВЫШАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБЛЕГЧАЕТ БОЛИ В ТЕЛЕ.
- 4.** ПРИМЕНЯЯ ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА, ДАННОЕ КРЕСЛО ПОЗВОЛИТ ВАМ В ПОЛНОЙ МЕРЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ МЯГКИМ МАССАЖЕМ ВСЕГО ТЕЛА ОТ ГОЛОВЫ ДО НОГ.
- 5.** ФУНКЦИЯ "НЕВЕСОМОСТИ" МОЖЕТ ЭФФЕКТИВНО ОБЛЕГЧИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ, ПОЗВОЛИТ ОЩУТИТЬ НАСТОЯЩУЮ НЕВЕСОМОСТЬ.
- 6.** ФУНКЦИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ ВПЕРЕД НА 10 СМ ОТ СТЕНЫ. СПИНКА И РАМА СИДЕНЬЯ МОГУТ ДВИГАТЬСЯ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕСЛО С МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЕЙ ПРОСТРАНСТВА.
- 7.** BLUETOOTH ПОЗВОЛЯЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С МАССАЖНЫМ КРЕСЛОМ С ПОМОЩЬЮ МАБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА. ТАКЖЕ КРЕСЛО МОЖЕТ ВОСПРОИЗВОДИТЬ МУЗЫКУ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА.
- 8.** ФУНКЦИЯ ПОЛНОГО РАССЛАБЛЕНИЯ НОГ В КОМБИНАЦИИ С НЕЖНОЙ КОМПРЕССИОННОЙ ПОДУШКОЙ СТИМУЛИРУЮТ ВАШИ СТУПНИ.
- 9.** КОМПРЕССИОННЫЕ ПОДУШКИ MULTIPLE ВЫПОЛНЯЮТ ИМПУЛЬСИВНЫЙ МАССАЖ ДАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА НА НОГИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ И ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ.
- 10.** ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ В КРОВЕНОСНЫХ КАПИЛЛЯРАХ.
- 11.** НЕСКОЛЬКО ГРУПП КОМПРЕССИОННЫХ ПОДУШЕК В РАЙОНЕ ПОЯСА И СИДЕНЬЯ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБЕРТЫВАНИЯ ТАЛИИ, ЯГОДИЦ И БЕДЕР, ВЫПОЛНЯЮТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МАССАЖ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ НА РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ТЕЛА, ЧТО МОМЕНТАЛЬНО СНИМАЕТ УСТАЛОСТЬ.
- 12.** НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КРЕСЛА МОЖНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ, ОНА МОЖЕТ ВЫДВИГАТЬСЯ И ВТЯГИВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ 15 СМ, ЧТО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮДЯМ РАЗНОГО РОСТА.

## **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

---

- 13.** МАССАЖ ГОЛОВЫ С КОМПРЕССИОННОЙ ПОДУШКОЙ СНИМАЕТ УСТАЛОСТЬ ГОЛОВЫ, ТЕЛА.
- 14.** УПРАВЛЯЙТЕ ВАШИМ КРЕСЛОМ С КОМФОРТОМ С ПОМОЩЬЮ ЖК-КОНТРОЛЛЕРА С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ.

## **ВНИМАНИЕ**

- 1.** ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.
- 2.** СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ И СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

### III. ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

---

#### **ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

##### **! ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

- ЛЮДЯМ С ОСТЕОПОРОЗОМ, ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНКОВ И ОСТРЫМИ БОЛЕЗНЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ТАКИЕ КАК РАСТЯЖЕНИЯ МЫШЦ.
- ЛЮДЯМ С СЕРДЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ ИЛИ ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРИ ТЕЛА.
- БЕРЕМЕННЫМ ИЛИ НЕЗДОРОВЫМ ЛЮДЯМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.
- ЛЮДЯМ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА.
- ЛЮДЯМ С НАРУШЕНИЯМИ ВОСПРИЯТИЯ.
- ЛЮДЯМ СТАРШЕ 80 ЛЕТ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
- ДЕТЯМ И ЛЮДЯМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ.
- ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СПИТЕ В КРЕСЛЕ
- НЕ САДИСЬ В КРЕСЛО МОКРЫМИ

##### **! ТРАВМООПАСНОСТЬ:**

- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЯДОМ С КРЕСЛОМ НЕТ ДЕТЕЙ, ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ.
- ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫ ПОЧУСТВОВАЛИ НЕДОМОГАНИЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ.
- ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ДЕЛАЙТЕ СИЛЬНЫЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ, НЕ МАССИРУЙТЕ ЖИВОТ И КОЛЕНИ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ МАССАЖЕ ШЕИ.
- ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДЕТЯМ И ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИГРАТЬ НА СПИНКЕ ИЛИ ПОДЛОКОТНИКЕ.
- ЛЮДЯМ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К ТЕПЛУ ИЛИ СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЕЙ, НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.

##### **! ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:**

- ВСТАВЬТЕ ВИЛКУ КРЕСЛА В ИСПРАВНУЮ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВИЛКА ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЕНА В РОЗЕТКУ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ.
- ПЕРЕД ВЫКЛЮЧЕНИЕМ КНОПКИ ПИТАНИЯ, ОСТАНОВИТЕ ВСЕ ФУНКЦИИ МАССАЖА.



# ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

---

- ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ, КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО.
- ШНУР ПИТАНИЯ, ВИЛКУ, РОЗЕТКУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ОБРЫВЕ ИЛИ НЕПЛОТНОМ КОНТАКТЕ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ МОЩНОСТЬ, КРОМЕ НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (100-240V).
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЮБОЙ ОБОРВАННЫЙ, ЗАВЯЗАННЫЙ, СКРУЧЕННЫЙ, С ВИДИМЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ИЛИ ЗАЖАТЫЙ ТЯЖЕЛЫМ ГРУЗОМ ШНУР ПИТАНИЯ.
- НЕ ДВИГАЙТЕ КРЕСЛО ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:**

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАССАЖНЫМ КРЕСЛОМ, ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДМЕТЫ ЗАКРЫВАЮТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ КРЕСЛА БЕЗ НАГРУЗКИ.

## **ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ УТЕЧКИ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:**

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ И НЕ ХРАНИТЕ КРЕСЛО ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ, НАПРИМЕР РЯДОМ С БАССЕЙНОМ ИЛИ ВАННОЙ КОМНАТОЙ.
- ДЕРЖИТЕ КРЕСЛО И ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВСЕ ВРЕМЯ СУХИМ.

## **ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ**

КОГДА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СГОРЕЛ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И ОТСОЕДИНИТЕ ШНУР. ОТКРЫВ КРЫШКУ, ЗАМЕНИТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ТАКОЙ ЖЕ РАЗМЕР ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ, ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ СТАРЫЙ, ЗАТЕМ ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ.

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫЗВАТЬ ЭЛЕКТРИКА, ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

## **РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:**

- ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ОБРАТИТЕСЬ К ДИЛЕРУ ИЛИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
- ЕСЛИ ШНУР ПИТАНИЯ ИЛИ ВИЛКА ПОВРЕЖДЕННЫ, НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО, А ОБРАТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КРЕСЛО САМОСТОЯТЕЛЬНО.
- ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.



## ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- УСТАНОВИТЕ КРЕСЛО НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА РАССТОЯНИИ 10 СМ ОТ СТЕНЫ, ЧТОБЫ БЫЛО ДОСТАТОЧНО МЕСТА ДЛЯ НАКЛОНА ВВЕРХ И ВНИЗ.
- МАКСИМАЛЬНОЕ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ - 20 МИНУТ. 5 МИНУТ НА КАЖДУЮ ПОЗИЦИЮ, НАЧИНАЯ С ЛЕГКОГО МАССАЖА. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ПОЗИЦИИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ.
- ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ ПОЛОЖИТЬ В КАРМАН ИЛИ НА КРОНШТЕЙН.
- ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВСТАВИТЬ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ВЫКЛ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО С РАСПУЩЕННЫМИ ВОЛОСАМИ
- НЕ КЛАДИТЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩИ В КАРМАН ПРИ МАССАЖЕ ЯГОДИЦ И СУСТАВОВ
- НЕ КЛАДИТЕ РУКИ МЕЖДУ РАБОТАЮЩИМИ МАССАЖНЫМИ ГОЛОВКАМИ
- НЕ ЗАСОВЫВАЙТЕ РУКИ ИЛИ НОГИ В ЗАЗОР МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕСЛО БЕЗ ОДЕЖДЫ ИЛИ В ТОНКОЙ ОДЕЖДЕ. ТОНКАЯ ОДЕЖДА МОЖЕТ УЛУЧШИТЬ МАССАЖНЫЙ ЭФФЕКТ, НО ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ.
- ДЕРЖИТЕ КРЕСЛО ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕПЛА, ВЛАГИ, ОСТРЫХ ИЛИ РАЗЪЕДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КРЕСЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОДЕЯЛО ИЛИ ДРУГИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА.
- НЕ ПОМЕЩАЙТЕ В ПРОСТРАНСТВО С БОЛЬШОЙ ЗАПЫЛЕННОСТЬЮ ИЛИ АГРЕССИВНОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ.
- НЕ СТАВЬТЕ КРЕСЛО В НЕБОЛЬШИЕ ПОМЕЩЕНИЯ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В МЕСТАХ С ПЛОХОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА.
- ДЕРЖИТЕ КРЕСЛО ПОДАЛЬШЕ ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.
- НЕ СТАВЬТЕ КРЕСЛО НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД СОЛНЦЕ ИЛИ В ДРУГИЕ МЕСТА С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕСЛО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.

## IV. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



**КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ-ВЫКЛЮЧЕНИЯ:** НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ / ВЫКЛЮЧИТЬ МАШИНУ.

**СТОП:** ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ, МАССАЖНОЕ КРЕСЛО И ФУНКЦИИ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ.

**КНОПКА АВТО:** НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ 1 / РЕЖИМОМ 2.

**КНОПКА МАССАЖ / КАЧАНИЕ:** ПРИ НАЖАТИИ НА ЭТУ КНОПКУ, КРЕСЛО ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РЕЖИМА МАССАЖ, В РЕЖИМ КАЧАНИЕ.

**ТРИ СОСТОЯНИЯ МАССАЖА:** ФУНКЦИЯ МАССАЖА ВКЛЮЧЕНА / ФУНКЦИЯ КАЧАНИЯ ВКЛЮЧЕНА / ФУНКЦИИ МАССАЖА И КАЧАНИЯ ВЫКЛЮЧЕНЫ

**КНОПКА ПОСТУКИВАНИЯ:** НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ВКЛЮЧИТЬСЯ РЕЖИМ ПОСТУКИВАНИЯ

**ТРИ СОСТОЯНИЯ ПОСТУКИВАНИЙ:** ФУНКЦИЯ СТУКА ВКЛЮЧЕНА / ФУНКЦИЯ ПОСТУКИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНА / ФУНКЦИЯ СТУКА И ПОСТУКИВАНИЯ ВЫКЛЮЧЕНА.

**КНОПКА ПОЛОЖЕНИЯ:** НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ВЫБЕРЕТ ВСЕ ЧАСТИ ТЕЛА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫБРАННЫХ ФУНКЦИЙ МАССАЖА.

**КНОПКА СКОРОСТИ:** КОГДА ВЫБРАНА РУЧНАЯ ПРОГРАММА (КРОМЕ ШИАЦУ), НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ЧТОБЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ МЕЖДУ СРЕДНЕЙ, ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ СКОРОСТЬЮ.

**КНОПКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА:** НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ СИЛУ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА: СЛАБОЕ, СРЕДНЕЕ, СИЛЬНОЕ, ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА ВЫКЛЮЧЕНО.

**КНОПКА НАГРЕВА:** НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ / ВЫКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ НАГРЕВА.

**КНОПКА ФИКСИРОВАННОЙ ТОЧКИ:** ПРИ ВЫБОРЕ РУЧНОЙ ПРОГРАММЫ (КРОМЕ ШИАЦУ) ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКА ВВЕРХ / ВНИЗ, МАССАЖНЫЙ АППАРАТ БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ ВВЕРХ / ВНИЗ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ФИКСИРОВАННОЙ ТОЧКИ, ПРИ ОСЛАБЛЕНИИ КНОПКИ МАССАЖНЫЙ АППАРАТ ОСТАНОВИТСЯ НА ТЕКУЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО МАССАЖА.

**КНОПКА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ:** НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ВВЕРХ (НАЗАД), ЧТОБЫ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ СПИНКУ ПОЛОЖЕНИЕ ВВЕРХ (НАЗАД), ПРИ ОСЛАБЛЕНИИ КНОПКИ СПИНКА ОСТАНОВИТСЯ В ТЕКУЩЕЙ ПОЗИЦИИ.

## V. ФУНКЦИИ

### НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА

МАССАЖНЫЕ ПРОГРАММЫ	ОПИСАНИЕ
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	МАССАЖ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТЕМ, КТО УСТАЛ ИЛИ ПЛОХО СПИТ
ОСТАНОВКА	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОГДА МАССАЖНОМУ КРЕСЛУ НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ
ПОСТУКИВАНИЕ \ РАЗМИНАНИЕ	ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖНЫЕ РОЛИКИ ИМИТАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РУКИ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПОСТУКИВАЮЩИЙ \ РАЗМИНАЮЩИЙ МАССАЖ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА	ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕРХнюю И НИЖнюю КЛАВИШУ РЕГУЛИРОВКИ ДЛЯ ВЫБОРА ПЛЕЧА И ПОЛОЖЕНИЯ МАССАЖНОГО РОЛИКА ШЕИ \ СПИНЫ
ПОДОГРЕВ	РАЗМИНАЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ РОЛИК ИМЕЕТ ФУНКЦИЮ НАГРЕВА

### ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- НЕ НАЖИМАЙТЕ ДВЕ ИЛИ БОЛЕЕ КЛАВИШ ОДНОВРЕМЕННО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕИСПРАВНОСТИ
- ПЕРЕД ЗАПУСКОМ РЕЖИМА МАССАЖА, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБУДЬТЕ НЕМНОГО ПОСИДЕТЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ПРОГРАММ
- НЕ ПРОЛИВАЙТЕ ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ НА ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ ВНЕШнюю СИЛУ К КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ МАССАЖЕРА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ ИЛИ ПОЛОМКИ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

### ИНСТРУКЦИЯ

#### ПОДГОТОВЬТЕСЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ КРЕСЛА, ЕСТЬ ЛИ У НЕГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ НЕТ
- ПЕРЕМЕСТИТЕ ИЗДЕЛИЕ НА РОВный ПОЛ

## **VI. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

### **ВНИМАНИЕ**

- НЕ ДВИГАЙТЕСЬ, КОГДА МАССАЖНОЕ КРЕСЛО РАБОТАЕТ
- НЕ ТАЩИТЕ УСТРОЙСТВО ПО ЗЕМЛЕ И НЕ ТЯНИТЕ ЗА ШНУР ПИТАНИЯ
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ШНУР ПИТАНИЯ НЕ ПОВРЕЖДЕН
- ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА ВЫКЛЮЧЕН

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

#### **ВКЛЮЧИТЬ:**

- 1.1 ПОДКЛЮЧИТЕ ВИЛКУ ПИТАНИЯ К РОЗЕТКЕ
- 1.2 ВКЛЮЧИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ПОД СПИНКОЙ ИЗДЕЛИЯ
2. НАЖМИТЕ КНОПКУ ПРОГРАММЫ МАССАЖА НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОГО ПОДЛОКОТНИКА И ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ВАМ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ МАССАЖА
3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ ПОСЛЕ НАЧАЛА РАБОТЫ МАССАЖНОГО КРЕСЛА
4. ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ "СТОП" МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ОСТАНОВИТСЯ
  - ПЕРЕД ЗАПУСКОМ РЕЖИМА МАССАЖА, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ УДОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, А ЗАТЕМ ВКЛЮЧИТЕ ПРОГРАММУ МАССАЖА
  - НЕ НАЖИМАЙТЕ ДВЕ ИЛИ БОЛЕЕ КЛАВИШ ОДНОВРЕМЕННО
  - ИНДИКАТОР ВЫБРАННОЙ КЛАВИШИ РЕЖИМА ЗАГОРАЕТСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОГРАММЫ МАССАЖА И ГАСНЕТ ПРИ ЕЕ ЗАКРЫТИИ.
  - НОМИНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВСЕХ МАССАЖНЫХ ПРОГРАММ СОСТАВЛЯЕТ 15 МИНУТ. ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНО ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫКЛЮЧИТЕ КРЕСЛО, ЕСЛИ ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТКЛЮЧИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ В РОЗЕТКЕ.

#### **ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:**


**ДЕТИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПРОДУКТ ТОЛЬКО ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛОГО**

**НАЖАТИЕ КНОПКИ "ОСТАНОВКИ" ТОЛЬКО ОСТАНАВЛИВАЕТ МАССАЖ ТЕЛА, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧИТЬ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО, НЕОБХОДИМО ВЫТАЩИТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ.**

## VII. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### СИНТЕТИЧЕСКАЯ КОЖА

АККУРАТНО ПРОТРИТЕ МЯГКОЙ И СЛЕГКА СУХОЙ ТКАНЬЮ.

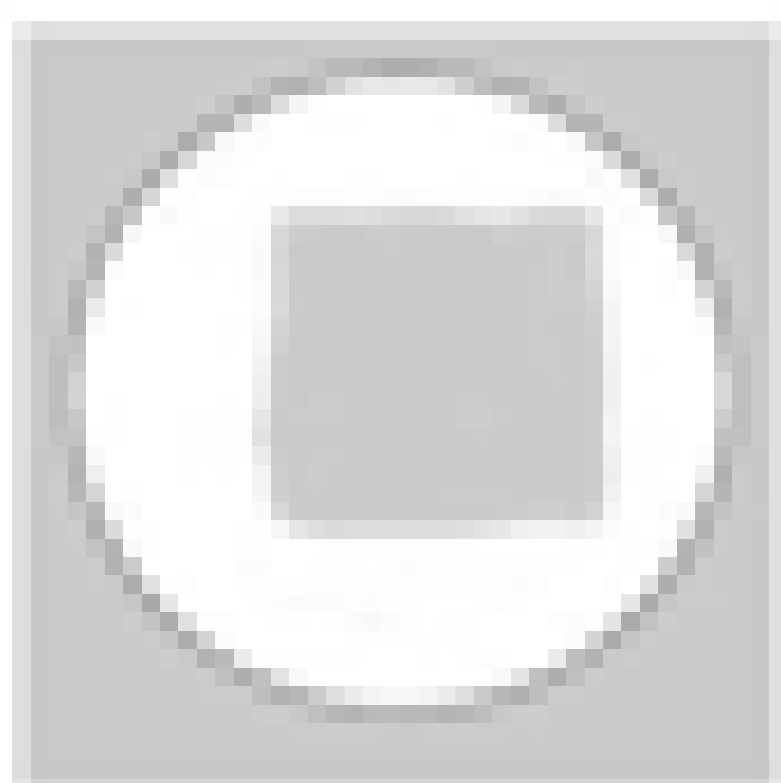

(ХИМИЧЕСКИЕ ИЛИ МЕДИЦИНСКИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ЗАПРЕЩЕНЫ)

### ЕСЛИ КОЖА ГРЯЗНАЯ

- 1) ОКУНИТЕ МЯГКУЮ ТКАНЬ В 3-5% РАСТВОР НЕЙТРАЛЬНОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА, ОТОЖМИТЕ И АККУРАТНО ОЧИСТИТЕ ПЯТНО НА ПОВЕРХНОСТИ.
- 2) ОБИВКУ ПОСТИРАТЬ, ОТЖАТЬ И ПРОТЕРЕТЬ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ.



- 3) ПРОТРИТЕ ЕГО МЯГКОЙ ТКАНЬЮ
- 4) ДАТЬ ВЫСОХНУТЬ (ВОЗДУХОДУВКА ЗАПРЕЩЕНА)

### ТКАНЬ

- 1) СМОЧИТЕ ТКАНЬ СЛАБЫМ НЕЙТРАЛЬНЫМ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ, ОТОЖМИТЕ ЕЕ И ОЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРИАЛА.
  - (РАЗБАВИТЕЛЬ, ГАЗ, СПИРТ ЗАПРЕЩЕНЫ). ПОЧИСТИТЕ ГРЯЗНЫЕ ДЕТАЛИ СЛАБЫМ НЕЙТРАЛЬНЫМ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ (ИЗБЕГАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ ЧИСТКИ)
- 2) ЧРЕЗМЕРНАЯ ОЧИСТКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ТКАНЕВОГО МАТЕРИАЛА.
- 3) ПРОТРИТЕ СМОЧЕННОЙ ВОДОЙ, НО ВЫЖАТОЙ ТКАНЬЮ.
- 4) МОЖНО СУШИТЬ.



## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ

- 1) СМОЧИТЕ ТКАНЬ НЕЙТРАЛЬНЫМ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ, ОТОЖМИТЕ И ПРОТРИТЕ
- 2) ПРОТРИТЕ СМОЧЕННОЙ ВОДОЙ, НО ВЫЖАТОЙ ТКАНЬЮ.
- 3) МОЖНО СУШИТЬ




### ОЧИСТИТЕ КОНТРОЛЛЕР

- 1) ПОСЛЕ ОТЖИМА ПРОТРИТЕ МЯГКОЙ ТКАНЬЮ
- 2) МОЖНО СУШИТЬ

ПРОПЕЛЛЕНТ, РАЗБАВИТЕЛЬ ИЛИ СПИРТ ЗАПРЕЩЕНЫ




### О ЧИСТКЕ

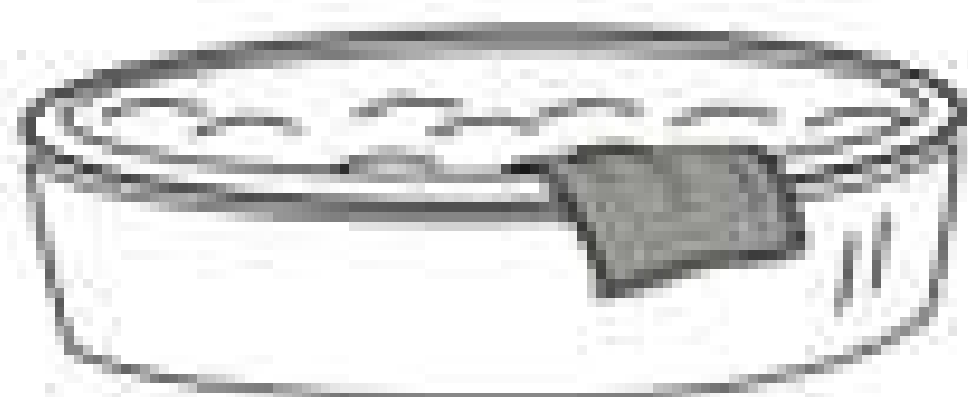

- ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ВИЛКЕ МОКРЫМИ РУКАМИ.
- ВСТАВЛЯЯ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РУКИ СУХИЕ.
- В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ОЖОГ.

## МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

TELEGRAM:

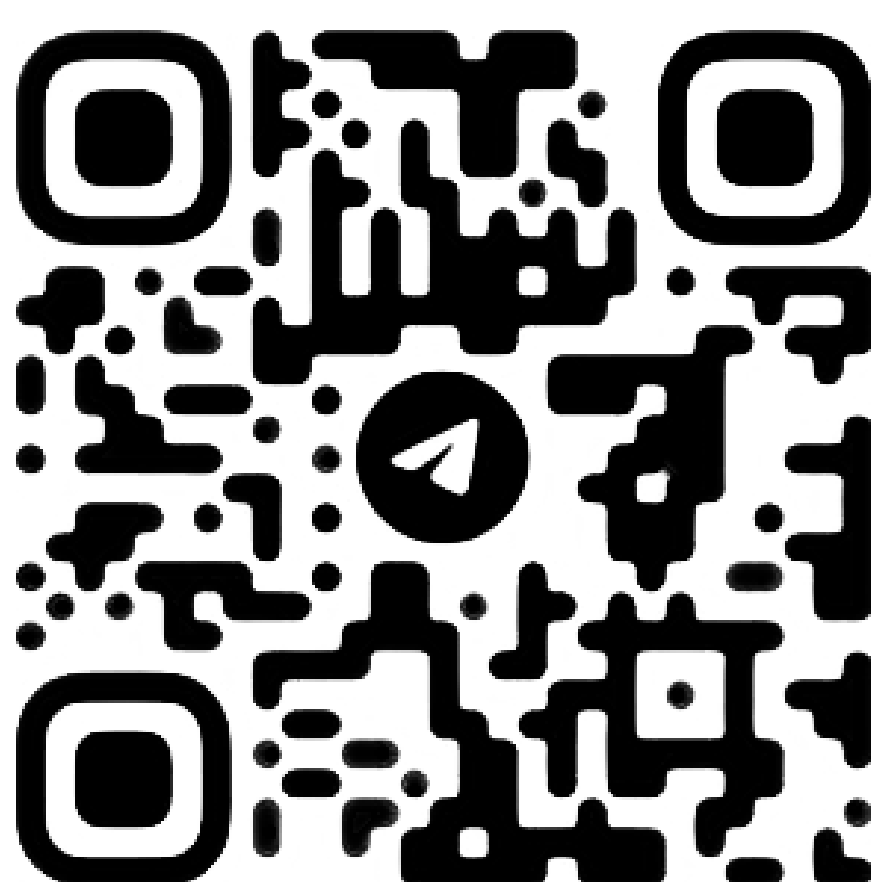

ВКОНТАКТЕ:



PINTEREST:



YOUTUBE:



## VIII. РУКОВОДСТВО ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ ЗА РЕМОНТОМ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПРОБЛЕМЫ. ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ПОПРОБОВАЛИ РЕШЕНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК, ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К ПОСТАВЩИКУ ИЛИ В БЛИЖАЙШИЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
ШУМ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	КОМПОНЕНТЫ РАБОТАЮТ	КОНСТРУКЦИЯ ПО СВОЕЙ СУТИ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА РАБОТУ
СТУЛ НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ	ШТЕКЕР НАХОДИТСЯ В СВОБОДНОМ СОЕДИНЕНИИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ "ВЫКЛ."	ВСТАВЬТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ ПИТАНИЯ
ОСТАНОВКА СТУЛА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	ВРЕМЯ ВЫШЛО, И ВСЯ ПРОГРАММА МАССАЖА ВЕРНУЛАСЬ В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ	ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ ПРОГРАММУ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ПРОИЗВОДИМЫЙ, КОГДА МАССАЖНАЯ МАШИНА РАБОТАЕТ ВВЕРХ И ВНИЗ	НАПРАВЛЯЮЩЕМУ РЕЛЬСУ НЕ ХВАТАЕТ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХОДА	НАНЕСИТЕ МАСЛО ИЗ ПРАВОГО БАКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕЙКИ НА БОКОВУЮ СТОРОНУ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕЙКИ

### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

- СВЯЗАННЫЕ С (ОБСЛУЖИВАНИЕМ В МАГАЗИНЕ) И (ПРИОБРЕТЕНИЕМ АКССЕСУАРОВ) ВОПРОСЫ АДРЕСУЙТЕ К ВЫШЕУКАЗАННЫМ СЕРВИСНЫМ ОКНАМ И СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ.
- ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ОТВЕТИТЬ КЛИЕНТУ, ЗВОНОК В КОМПАНИЮ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПИСАН.
- СОДЕРЖАНИЕ И ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ИЛИ ДЕЛЕГАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АФФИЛИРОВАННЫМ ОФИСАМ КОМПАНИИ.
- ЕСЛИ КЛИЕНТУ НУЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО, ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ЗАПРОС В ОТДЕЛ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.



## **IX. УСЛОВИЯ И СРОКИ ГАРАНТИИ**

---

- 1.** УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ТОВАРА И ДОВОДЯТСЯ ДО ПОКУПАТЕЛЯ ПРОДАВЦОМ В НАСТОЯЩЕМ ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОВАРА.
- 2.** НА ВСЕ ТОВАРЫ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ ПРОДАВЦА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ НА ТОВАР УКАЗАН В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ, ВЫДАННОМ ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА.
- 3.** ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРИНЯТЬ ТОВАР У ПРОДАВЦА ПО КОМПЛЕКТАЦИИ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ, ЗАФИКСИРОВАВ ФАКТ ПРИЕМА В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ; ПРОВЕРИТЬ ПОЛНОТУ ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА. ПРЕТЕНЗИИ ПО НЕКОМПЛЕКТУ И МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ОБНАРУЖЕННЫМ ПОСЛЕ ПРИЁМА ТОВАРА У ПРОДАВЦА, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И БУДУТ УСТРАНЕНЫ ЗА СЧЁТ ПОКУПАТЕЛЯ.
- 4.** ГАРАНТИЯ НА ТОВАР ДЕЙСТВУЕТ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ВСЕХ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРИ УСЛОВИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕГУЛЯРНОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ВЛАДЕЛЬЦА ТРЕНАЖЕРА.
- 5.** СРОК СЛУЖБЫ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ СОСТАВЛЯЕТ 7 ЛЕТ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДУЕМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
- 6.** ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
  - НЕИСПРАВНОСТИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ, ВЫЗВАННЫЕ ВНЕШНИМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ И ХИМИЧЕСКИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ (СКОЛЫ, ЦАРАПИНЫ, ТРЕЩИНЫ, ПЯТНА И Т.П.);
  - КОМПОНЕНТЫ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ЕСТЕСТВЕННОМУ ИЗНОСУ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ КОТОРЫХ ВОЗНИКЛА ВСЛЕДСТВИЕ ИХ ИЗНОСА И СТИРАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НОРМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ПОРУЧНИ ИЗ ПЕНОРЕЗИНЫ, ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ И БАТАРЕЯ, НАКЛЕЙКИ, СПИНКИ, СИДЕНИЯ И ВАЛИКИ ИЗ КОЖЗАМЕНИТЕЛЯ (ПОРОЛОНА, ПЕНОРЕЗИНЫ), ЩЁТКИ И ПОДШИПНИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ПОДШИПНИКИ ВАЛОВ, КНОПОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ КОНСОЛИ И РУЧЕК УПРАВЛЕНИЯ;
  - ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ И ОПЕРАЦИИ РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ ОПЕРАЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ: СМАЗКА ПРИВОДОВ И ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, ЧИСТКА И СМАЗКА ДЕКИ, ЧИСТКА ВАЛОВ, ЧИСТКА ШКИВА И ПРИВОДНОГО РЕМНЯ, ЦЕНТРОВКА И НАТЯЖЕНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА И ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ, ЗАМЕНА ЩЁТОК, ПОДШИПНИКОВ И ЧИСТКА КОЛЛЕКТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ПРОТЯЖКА БОЛТОВ СОЕДИНЕНИЙ ТРЕНАЖЕРА, КАЛИБРОВКА (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ТАК КАК ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЁМ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕНАЖЕРА);
  - ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ТОВАРА: НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА КОНСОЛИ, ЦЕНТРОВКА И НАТЯЖЕНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА, УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ, ЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ;
  - ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ПОЖАР, НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ЗАТОПЛЕНИЕ, НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И Т.Д.).

## УСЛОВИЯ И СРОКИ ГАРАНТИИ

---

### 7. ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ В ХОДЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ РЕМОНТА ТОВАРА;
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИБО В СВЯЗИ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ В ЦЕЛЯХ УДОВОЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО МОДЕЛЬЮ ТОВАРА;
- ПРОНИКНОВЕНИЕ ЖИДКОСТИ, ПЫЛИ, НАСЕКОМЫХ И ДРУГИХ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ ВНУТРЬ ТОВАРА (МОТОРНЫЙ ОТСЕК, КОНСОЛЬ, ДЕКА);
- ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА (ОТСУТСТВУЕТ НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ, ДАТА ПРОДАЖИ, ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ТОВАРА, ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ НЕ ОРИГИНАЛЬНОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА;
- ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЫЗВАНЫ НЕСООТВЕТСТВИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ДРУГИМИ ВНЕШНИМИ ФАКТОРАМИ (КЛИМАТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ);
- ЕСЛИ НЕДОСТАТОК ТОВАРА ЯВИЛСЯ СЛЕДСТВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ И/ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, АКСЕССУАРОВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ, НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИЛИ НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМАТОВ ИНФОРМАЦИИ.

### 8. ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОБМЕНЕ ИЛИ ВОЗВРАТЕ ТОВАРА НЕОБХОДИМО СОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

- КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА, ВКЛЮЧАЯ УПАКОВОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (КОРОБКА, ЭЛЕМЕНТЫ УПАКОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И Т.Д.);
- СОХРАНЕНИЕ ТОВАРНОГО ВИДА ТОВАРА (ОТСУТСТВИЕ ЦАРАПИН, ПОТЕРТОСТЕЙ И Т.Д.);
- НАЛИЧИЕ ОРИГИНАЛА ТОВАРНОГО ЧЕКА, ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

### 9. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СКРЫТЫМИ ДЕФЕКТАМИ ТОВАРА. ДАННЫЕ ВИДЫ РАБОТ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ПО УТВЕРЖДЕННОМУ ПРЕЙСКУРАНТУ. ДИАГНОСТИКА ЗАЯВЛЕННОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ПОКРЫВАЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ХАРАКТЕР ЗАЯВЛЕННОЙ НЕИСПРАВНОСТИ.

### 10. СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОВАРА, ОПИСАННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРИЛАГАЕМОЙ К НЕМУ, МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ КАК САМИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ТАК И СПЕЦИАЛИСТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

### 11. ЕСЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА В РЕГИОНАХ ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРА ИЛИ ЕГО ЧАСТЕЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПРОДАВЦА, ИЛИ ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ КОМАНДИРОВКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРОДАВЦА, ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ВОЗЛАГАЮТСЯ НА ПОКУПАТЕЛЯ.

## УСЛОВИЯ И СРОКИ ГАРАНТИИ



**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТЕ В КАРТОЧКЕ ТОВАРА ПРИОБРЕТЕННОЙ МОДЕЛИ**

- \* **УЗЛЫ ДВИЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ** - ДЕКА, ВАЛЫ БЕГОВОГО ПОЛОТНА, ШКИВ С ОСЬЮ, СЕРВОПРИВОД, КОНСОЛЬ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ (ССВ, РСВ), ПУЛЬСОМЕРЫ, ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (МСВ, ИНВЕРТОР), ГЕНЕРАТОР, КАБЕЛИ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА, ШЛЕЙФЫ, ЭКСЦЕНТРИКИ, ПРИВОДЫ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЁРОВ: ШКИВ, ПОДШИПНИКИ, ВТУЛКИ, РОЛИКИ, СИЛОВЫЕ БЛОКИ, ГРУЗОВЫЕ СТОЙКИ; МАГНИТНАЯ СИСТЕМА НАГРУЗКИ, МАХОВИК, ФИКСАТОРЫ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЙ.
- \*\* **ДЕТАЛИ ИЗНОСА** - БЕГОВОЕ ПОЛОТНО, ПРЫЖКОВЫЙ МАТ, ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ, КНОПОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЖУХИ И ЗАГЛУШКИ, БОКОВЫЕ НАКЛАДКИ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК, ТРОСЫ И РЕМНИ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЁРОВ, ЭЛАСТОМЕРЫ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК, ЗАЩИТНАЯ СЕТКА БАТУТА, ТРОС РЕГУЛИРОВКИ НАГРУЗКИ.
- \*\*\* **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** - ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ И БАТАРЕИ, НАКЛЕЙКИ, ОБИВКА ИЗ КОЖЗАМЕНИТЕЛЯ, НАБИВКА СИДЕНИЙ И ВАЛИКОВ (ПОРОЛОН, ПЕНОРЕЗИНА), ЩЁТКИ И ПОДШИПНИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, КНОПОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ КОНСОЛИ И РУЧЕК УПРАВЛЕНИЯ.

**ДОМАШНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** - ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЛИЧНОГО, СЕМЕЙНОГО, ДОМАШНЕГО ИЛИ ИНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

**ПОЛУКОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** – ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ИЛИ В ИНЫХ ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИЧНЫМ, СЕМЕЙНЫМ, ДОМАШНИМ И ИНЫМ ПОДОБНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ: ОТЕЛИ, САНАТОРИИ, ШКОЛЫ, ДЮСШОР, ДОМА ОТДЫХА.

**КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** – ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ИЛИ В ИНЫХ ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИЧНЫМ, СЕМЕЙНЫМ, ДОМАШНИМИ ИНЫМ ПОДОБНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ: ФИТНЕС-КЛУБЫ, СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ.

**ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

ТЕЛЕФОН: 8 (800) 777-79-21  
ПОЧТА: INFO@KOENIGSMANN.RU

ИЛИ НА САЙТЕ ПЕРЕИДЯ ПО QR-КОДУ







**BE FIT  
BE KOENIGSMANN**



**KOENIGSMANN.RU**