

Инструкция

Массажное кресло Koenigsmann Zen

Полезные ссылки:

[Массажное кресло Koenigsmann Zen - смотреть на сайте](#)

[Массажное кресло Koenigsmann Zen - читать отзывы](#)



KOENIGSMANN

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

ZEN

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**



KOENIGSMANN.RU

- I.** ВНЕШНИЙ ВИД
- II.** ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- III.** ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
- IV.** ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
- V.** РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- VI.** ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- VII.** ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- VIII.** РУКОВОДСТВО ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ
- IX.** УСЛОВИЯ И ГАРАНТИЯ
- X.** ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


I. ВНЕШНИЙ ВИД



ВНЕШНИЙ ВИД

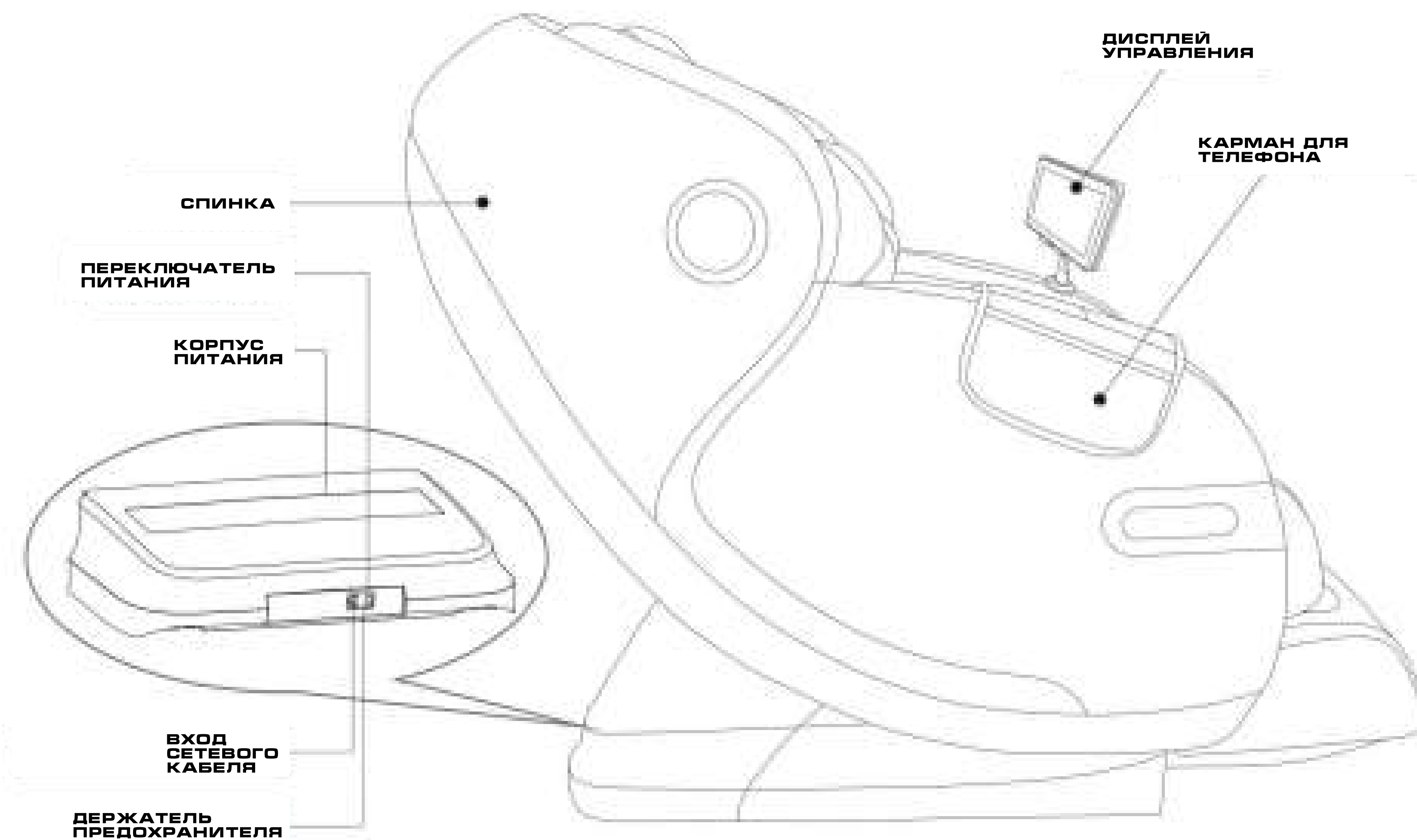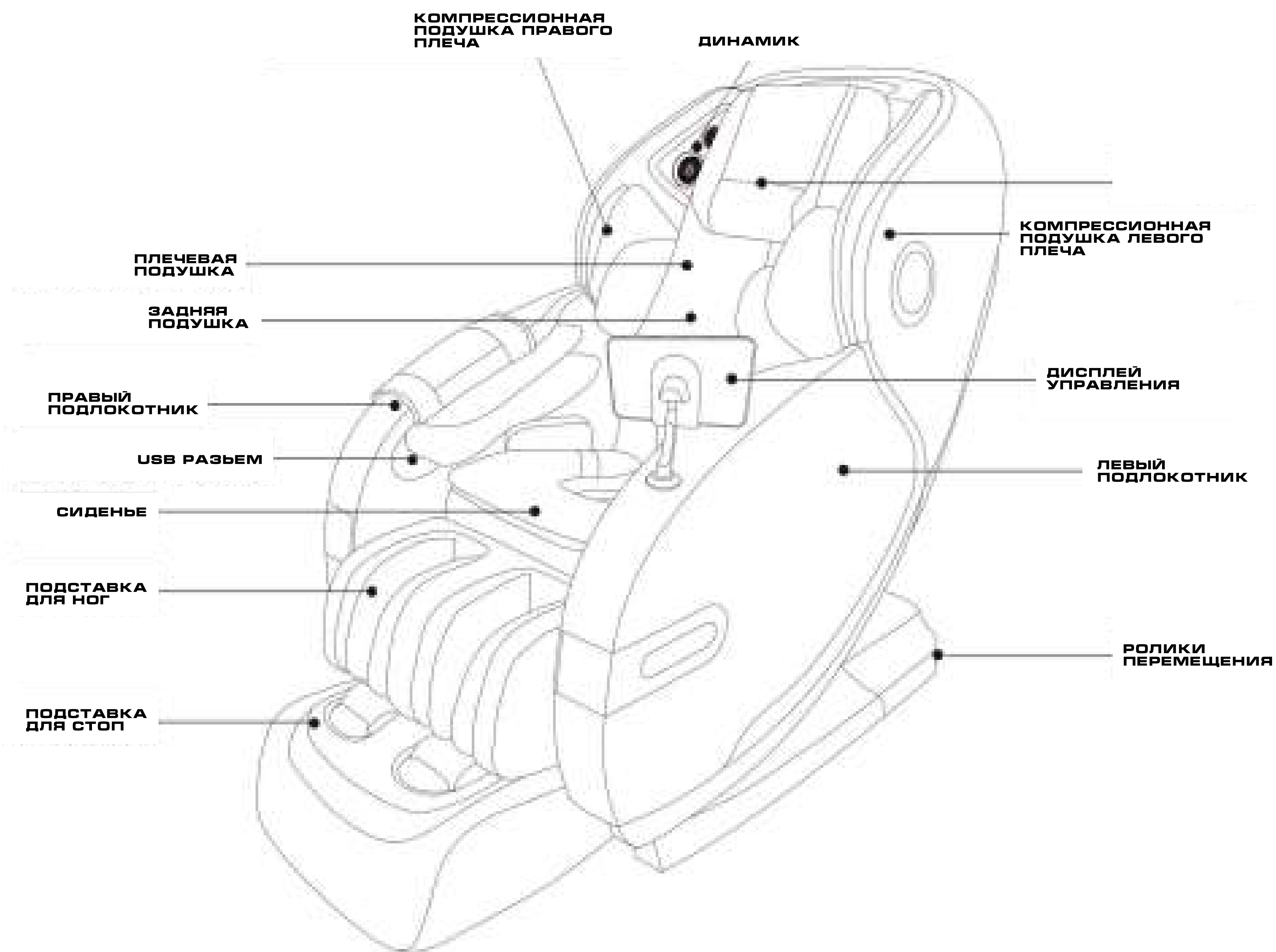

ВНЕШНИЙ ВИД

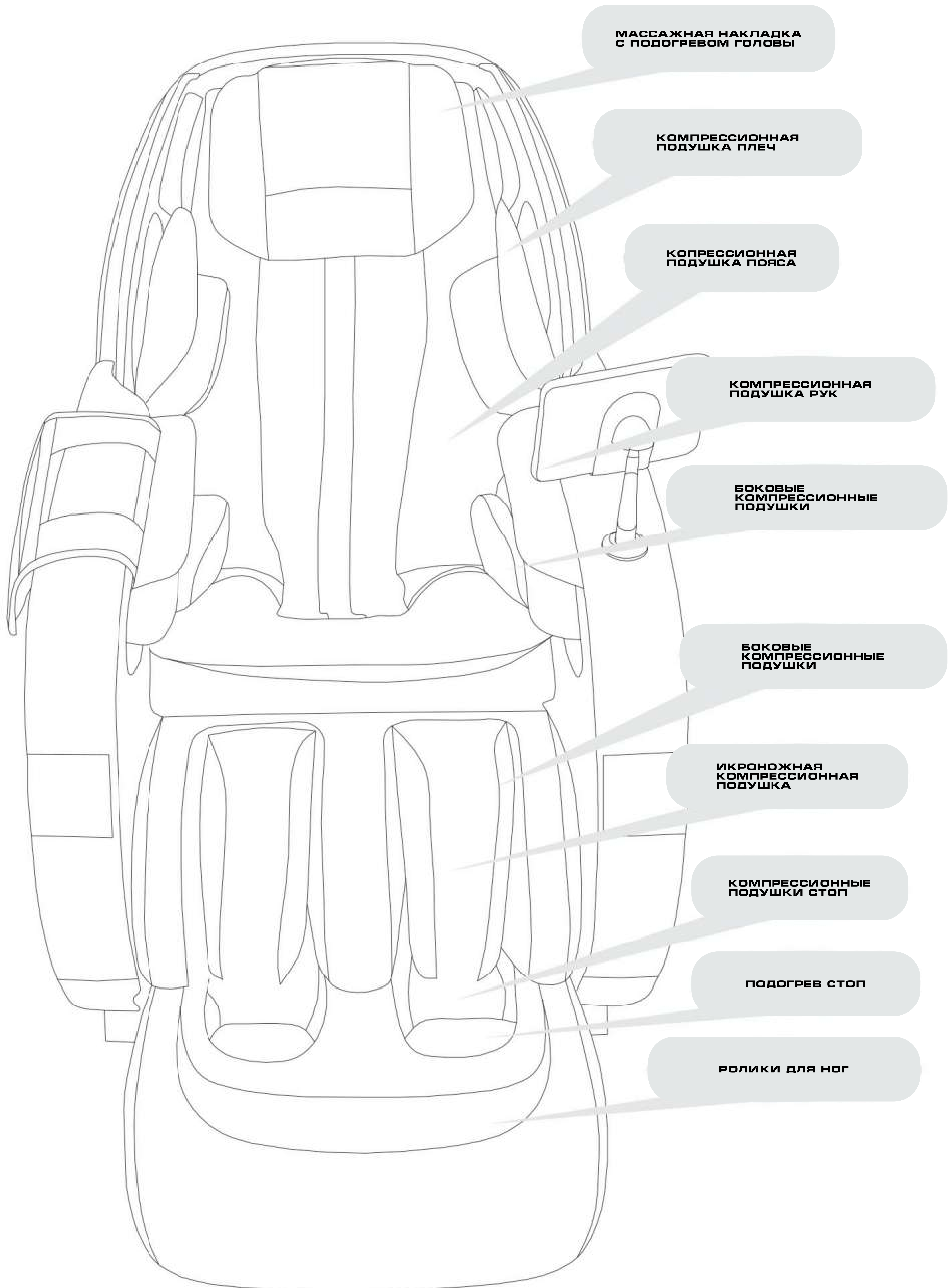

II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 1.** 3D МАССАЖ: ШЕИ, СПИНЫ, ПЛЕЧ И ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТАЛИИ. ПРОГРАММА ИМИТИРУЕТ МЕТОДИКИ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ.
- 2.** ФУНКЦИЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ АКУПУНКТУРНЫХ ТОЧЕК ПОМОГАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ТОЧНЫЙ МАССАЖ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕМ.
- 3.** УНИКАЛЬНАЯ КИТАЙСКАЯ РАЗОГРЕВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПОВЫШАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБЛЕГЧАЕТ БОЛИ В ТЕЛЕ.
- 4.** ПРИМЕНЯЯ ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА, ДАННОЕ КРЕСЛО ПОЗВОЛИТ ВАМ В ПОЛНОЙ МЕРЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ МЯГКИМ МАССАЖЕМ ВСЕГО ТЕЛА ОТ ГОЛОВЫ ДО НОГ.
- 5.** ФУНКЦИЯ "НЕВЕСОМОСТИ" МОЖЕТ ЭФФЕКТИВНО ОБЛЕГЧИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ, ПОЗВОЛИТ ОЩУТИТЬ НАСТОЯЩУЮ НЕВЕСОМОСТЬ.
- 6.** ФУНКЦИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ ВПЕРЕД НА 10 CM ОТ СТЕНЫ. СПИНКА И РАМА СИДЕНЬЯ МОГУТ ДВИГАТЬСЯ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕСЛО С МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЕЙ ПРОСТРАНСТВА.
- 7.** BLUETOOTH ПОЗВОЛЯЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С МАССАЖНЫМ КРЕСЛОМ С ПОМОЩЬЮ МАБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА. ТАКЖЕ КРЕСЛО МОЖЕТ ВОСПРОИЗВОДИТЬ МУЗЫКУ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА.
- 8.** ФУНКЦИЯ ПОЛНОГО РАССЛАБЛЕНИЯ НОГ В КОМБИНАЦИИ С НЕЖНОЙ КОМПРЕССИОННОЙ ПОДУШКОЙ СТИМУЛИРУЮТ ВАШИ СТУПНИ.
- 9.** КОМПРЕССИОННЫЕ ПОДУШКИ MULTIPLE ВЫПОЛНЯЮТ ИМПУЛЬСИВНЫЙ МАССАЖ ДАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА НА НОГИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ И ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ.
- 10.** ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ В КРОВЕНОСНЫХ КАПИЛЛЯРАХ.
- 11.** НЕСКОЛЬКО ГРУПП КОМПРЕССИОННЫХ ПОДУШЕК В РАЙОНЕ ПОЯСА И СИДЕНЬЯ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБЕРТЫВАНИЯ ТАЛИИ, ЯГОДИЦ И БЕДЕР, ВЫПОЛНЯЮТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МАССАЖ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ НА РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ТЕЛА, ЧТО МОМЕНТАЛЬНО СНИМАЕТ УСТАЛОСТЬ.
- 12.** НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КРЕСЛА МОЖНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ, ОНА МОЖЕТ ВЫДВИГАТЬСЯ И ВТЯГИВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ 15 CM, ЧТО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮДЯМ РАЗНОГО РОСТА.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 13.** МАССАЖ ГОЛОВЫ С КОМПРЕССИОННОЙ ПОДУШКОЙ СНИМАЕТ УСТАЛОСТЬ ГОЛОВЫ, ТЕЛА.
- 14.** УПРАВЛЯЙТЕ ВАШИМ КРЕСЛОМ С КОМФОРТОМ С ПОМОЩЬЮ ЖК-КОНТРОЛЛЕРА С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ.

ВНИМАНИЕ

- 1.** ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.
- 2.** СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ И СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

III. ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

! ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- ЛЮДЯМ С ОСТЕОПОРОЗОМ, ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНКОВ И ОСТРЫМИ БОЛЕЗНЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ТАКИЕ КАК РАСТЯЖЕНИЯ МЫШЦ.
- ЛЮДЯМ С СЕРДЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ ИЛИ ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРИ ТЕЛА.
- БЕРЕМЕННЫМ ИЛИ НЕЗДОРОВЫМ ЛЮДЯМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.
- ЛЮДЯМ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА.
- ЛЮДЯМ С НАРУШЕНИЯМИ ВОСПРИЯТИЯ.
- ЛЮДЯМ СТАРШЕ 80 ЛЕТ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
- ДЕТЯМ И ЛЮДЯМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ.
- ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СПИТЕ В КРЕСЛЕ
- НЕ САДИСЬ В КРЕСЛО МОКРЫМИ

! ТРАВМООПАСНОСТЬ:

- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЯДОМ С КРЕСЛОМ НЕТ ДЕТЕЙ, ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ.
- ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫ ПОЧУСТВОВАЛИ НЕДОМОГАНИЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ.
- ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ДЕЛАЙТЕ СИЛЬНЫЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ, НЕ МАССИРУЙТЕ ЖИВОТ И КОЛЕНИ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ МАССАЖЕ ШЕИ.
- ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДЕТЯМ И ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИГРАТЬ НА СПИНКЕ ИЛИ ПОДЛОКОТНИКЕ.
- ЛЮДЯМ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К ТЕПЛУ ИЛИ СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЕЙ, НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.

! ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

- ВСТАВЬТЕ ВИЛКУ КРЕСЛА В ИСПРАВНУЮ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВИЛКА ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЕНА В РОЗЕТКУ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ.
- ПЕРЕД ВЫКЛЮЧЕНИЕМ КНОПКИ ПИТАНИЯ, ОСТАНОВИТЕ ВСЕ ФУНКЦИИ МАССАЖА.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ, КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО.
- ШНУР ПИТАНИЯ, ВИЛКУ, РОЗЕТКУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ОБРЫВЕ ИЛИ НЕПЛОТНОМ КОНТАКТЕ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ МОЩНОСТЬ, КРОМЕ НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (100-240V).
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЮБОЙ ОБОРВАННЫЙ, ЗАВЯЗАННЫЙ, СКРУЧЕННЫЙ, С ВИДИМЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ИЛИ ЗАЖАТЫЙ ТЯЖЕЛЫМ ГРУЗОМ ШНУР ПИТАНИЯ.
- НЕ ДВИГАЙТЕ КРЕСЛО ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАССАЖНЫМ КРЕСЛОМ, ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДМЕТЫ ЗАКРЫВАЮТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ КРЕСЛА БЕЗ НАГРУЗКИ.



ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ УТЕЧКИ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ И НЕ ХРАНИТЕ КРЕСЛО ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ, НАПРИМЕР РЯДОМ С БАССЕЙНОМ ИЛИ ВАННОЙ КОМНАТОЙ.
- ДЕРЖИТЕ КРЕСЛО И ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВСЕ ВРЕМЯ СУХИМ.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

КОГДА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СГОРЕЛ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И ОТСОЕДИНИТЕ ШНУР. ОТКРЫВ КРЫШКУ, ЗАМЕНИТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ТАКОЙ ЖЕ РАЗМЕР ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ, ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ СТАРЫЙ, ЗАТЕМ ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ.

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫЗВАТЬ ЭЛЕКТРИКА, ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ОБРАТИТЕСЬ К ДИЛЕРУ ИЛИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
- ЕСЛИ ШНУР ПИТАНИЯ ИЛИ ВИЛКА ПОВРЕЖДЕННЫ, НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО, А ОБРАТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КРЕСЛО САМОСТОЯТЕЛЬНО.
- ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.




ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- УСТАНОВИТЕ КРЕСЛО НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА РАССТОЯНИИ 10 СМ ОТ СТЕНЫ, ЧТОБЫ БЫЛО ДОСТАТОЧНО МЕСТА ДЛЯ НАКЛОНА ВВЕРХ И ВНИЗ.
- МАКСИМАЛЬНОЕ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ - 20 МИНУТ. 5 МИНУТ НА КАЖДУЮ ПОЗИЦИЮ, НАЧИНАЯ С ЛЕГКОГО МАССАЖА. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ПОЗИЦИИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ.
- ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ ПОЛОЖИТЬ В КАРМАН ИЛИ НА КРОНШТЕЙН.
- ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВСТАВИТЬ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ВЫКЛ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО С РАСПУЩЕННЫМИ ВОЛОСАМИ
- НЕ КЛАДИТЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩИ В КАРМАН ПРИ МАССАЖЕ ЯГОДИЦ И СУСТАВОВ
- НЕ КЛАДИТЕ РУКИ МЕЖДУ РАБОТАЮЩИМИ МАССАЖНЫМИ ГОЛОВКАМИ
- НЕ ЗАСОВЫВАЙТЕ РУКИ ИЛИ НОГИ В ЗАЗОР МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕСЛО БЕЗ ОДЕЖДЫ ИЛИ В ТОНКОЙ ОДЕЖДЕ. ТОНКАЯ ОДЕЖДА МОЖЕТ УЛУЧШИТЬ МАССАЖНЫЙ ЭФФЕКТ, НО ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ.
- ДЕРЖИТЕ КРЕСЛО ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕПЛА, ВЛАГИ, ОСТРЫХ ИЛИ РАЗЪЕДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КРЕСЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОДЕЯЛО ИЛИ ДРУГИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА.
- НЕ ПОМЕЩАЙТЕ В ПРОСТРАНСТВО С БОЛЬШОЙ ЗАПЫЛЕННОСТЬЮ ИЛИ АГРЕССИВНОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ.
- НЕ СТАВЬТЕ КРЕСЛО В НЕБОЛЬШИЕ ПОМЕЩЕНИЯ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В МЕСТАХ С ПЛОХОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА.
- ДЕРЖИТЕ КРЕСЛО ПОДАЛЬШЕ ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.
- НЕ СТАВЬТЕ КРЕСЛО НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД СОЛНЦЕ ИЛИ В ДРУГИЕ МЕСТА С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕСЛО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.

IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


ШАГ 1. РАСПАКОВКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

1. ДОСТАНЫТЕ КОРОБКИ С АКСЕССУАРАМИ И ОСНОВНОЕ КРЕСЛО ИЗ КАРТОННОЙ КОРОБКИ.
2. УБЕДИТЕСЬ О НАЛИЧИИ ВСЕХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

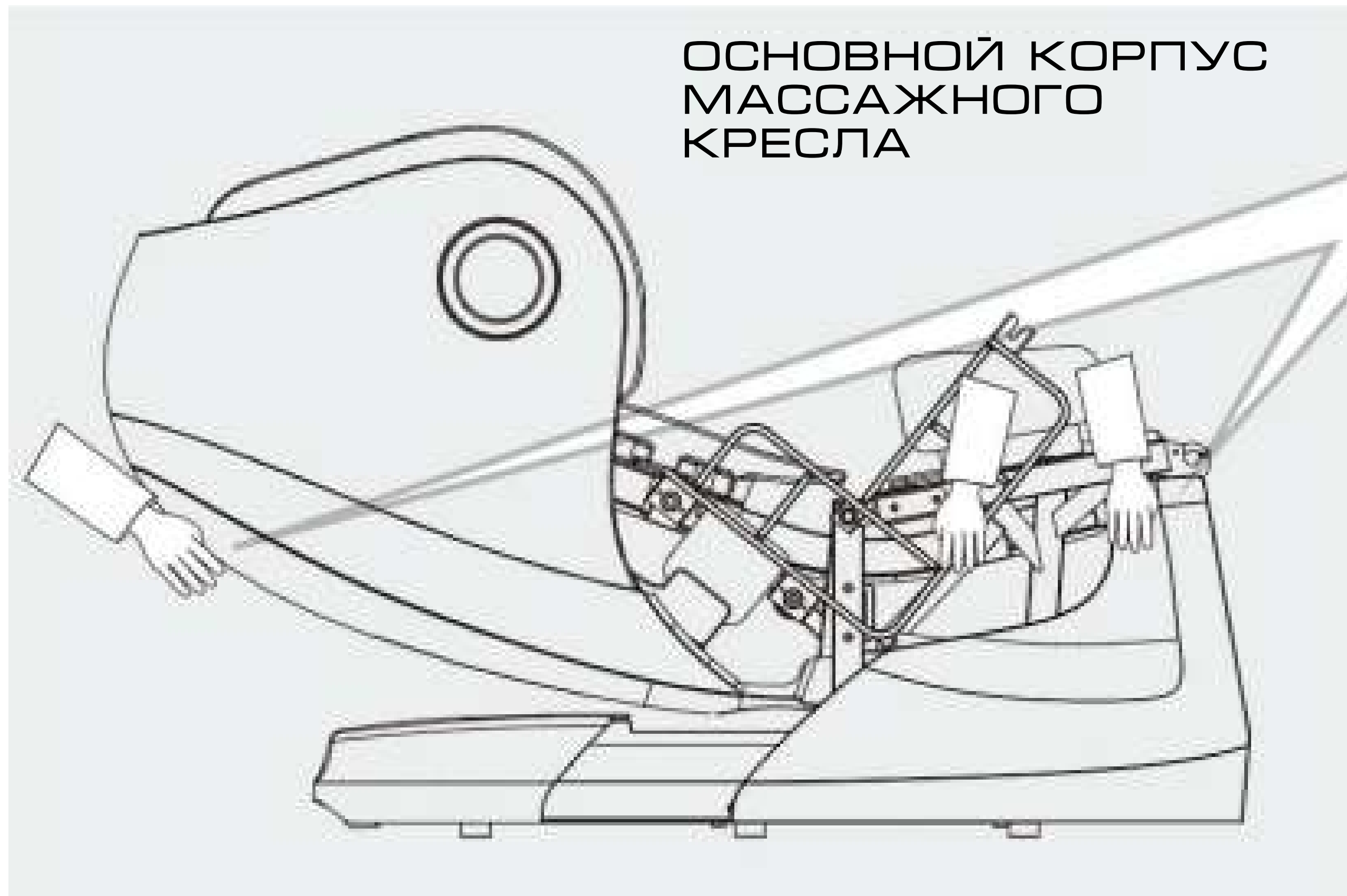


ВОЗЬМИТЕСЬ ЗА
МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ
РАМУ И ЗА ЗАДНЮЮ
КРЫШКУ, ЗАТЕМ
ВЫНЬТЕ КОРПУС
МАССАЖНОГО
КРЕСЛА ИЗ
КОРОБКИ.


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

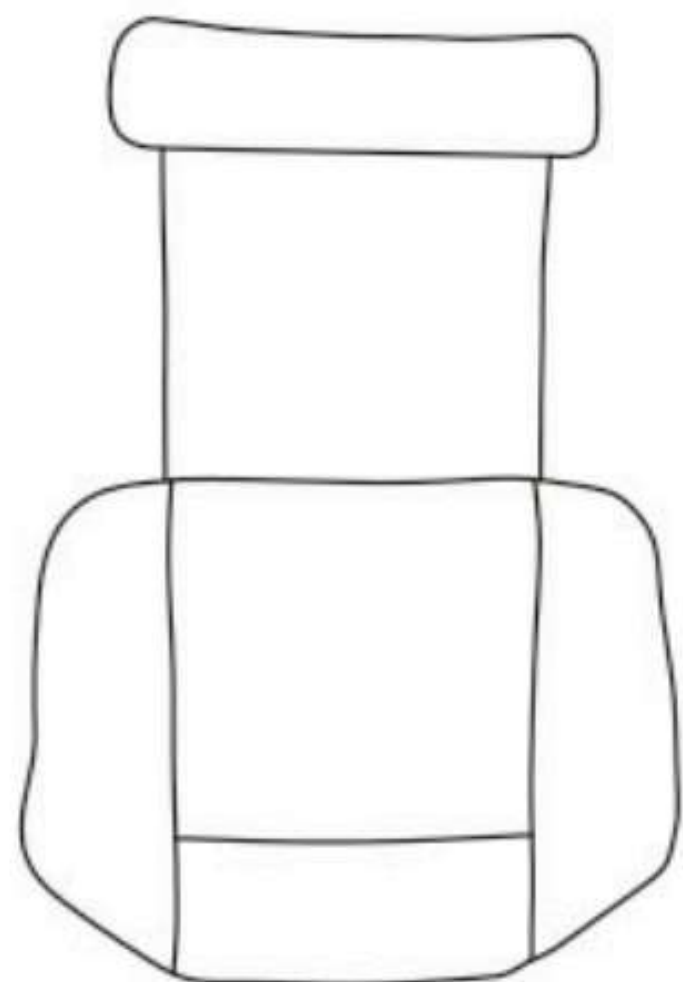


**НАКЛАДКА
ДЛЯ ГОЛОВЫ**

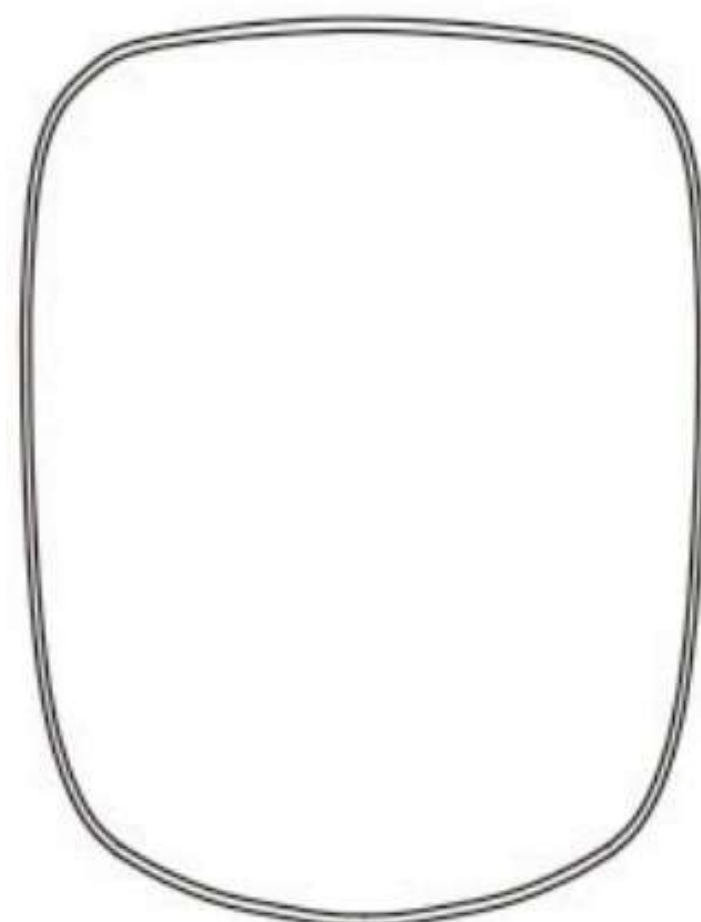


**ПЛЕЧЕВАЯ
ПОДУШКА**

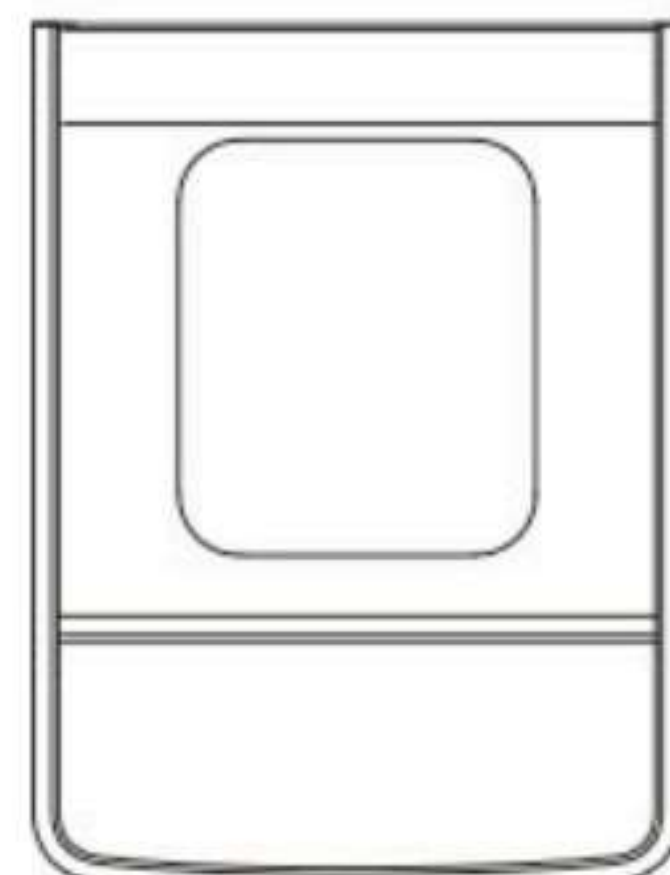


**КАРМАН ДЛЯ
ТЕЛЕФОНА**

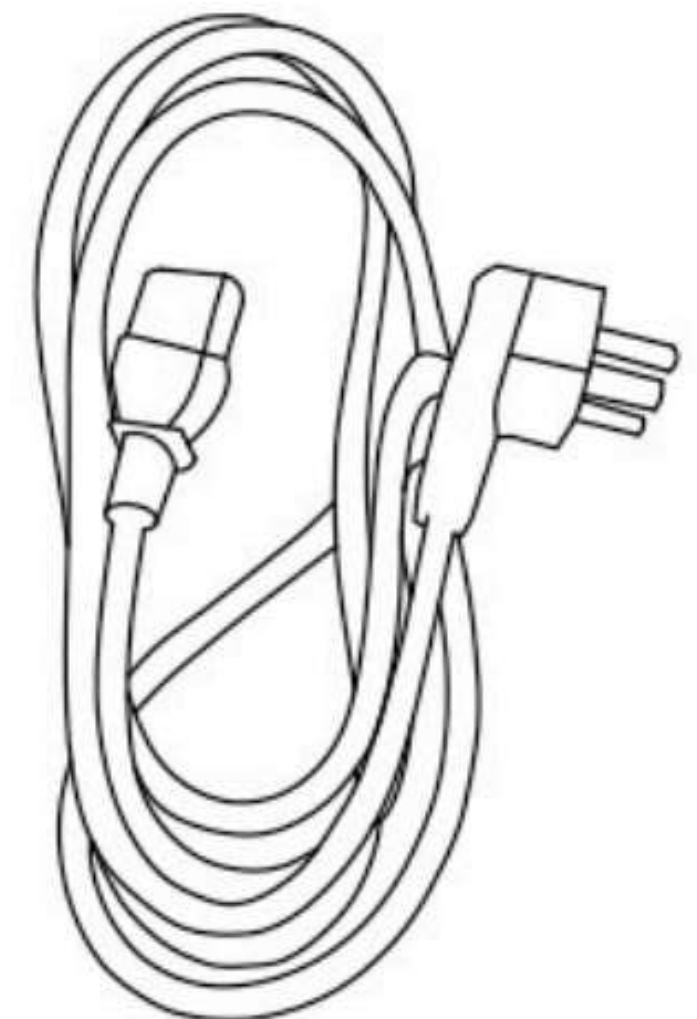


**КАБЕЛЬ
ПИТАНИЯ**

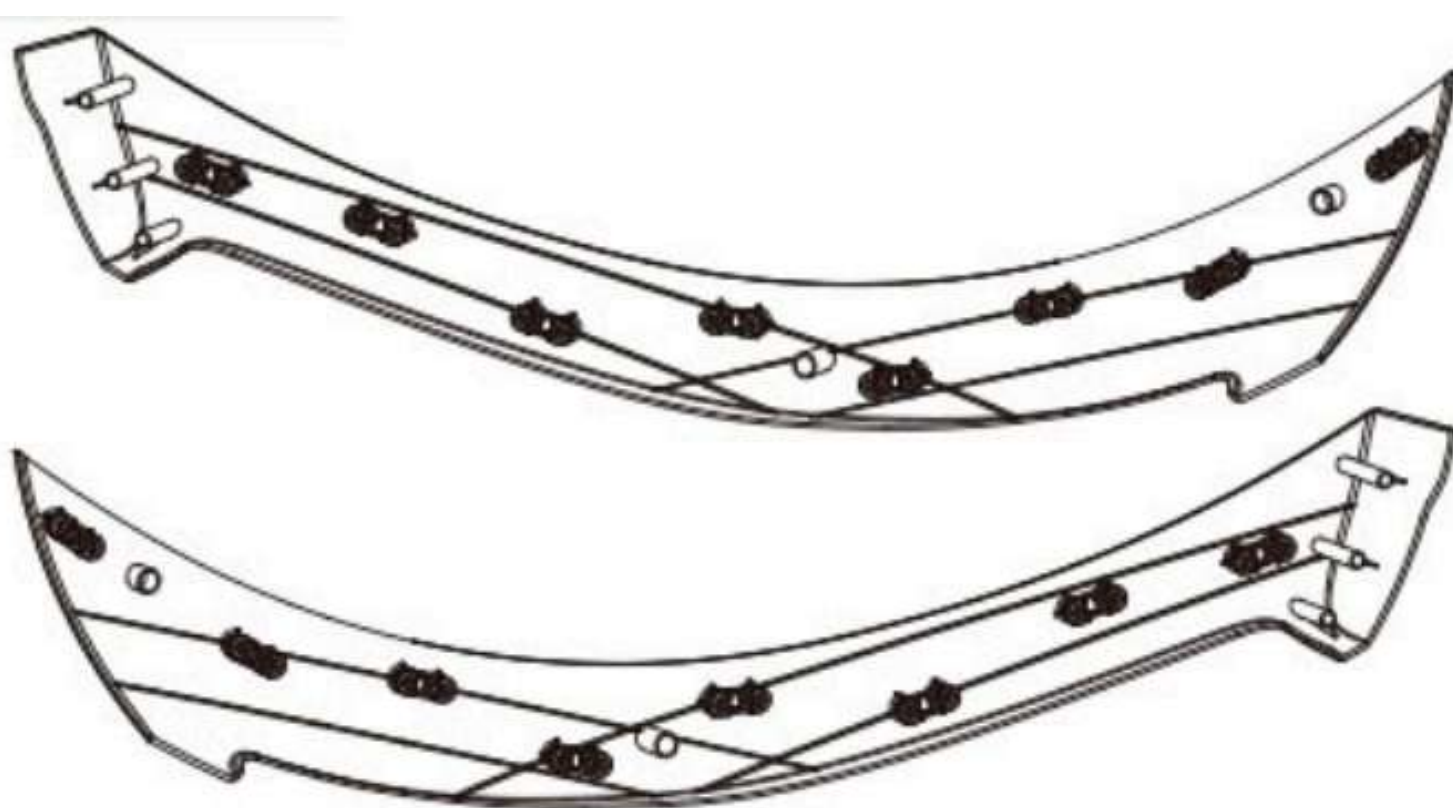


**НАРУЖНЫЕ БАМПЕРА
ЛЕВОГО / ПРАВОГО
ПОДЛОКОТНИКА**

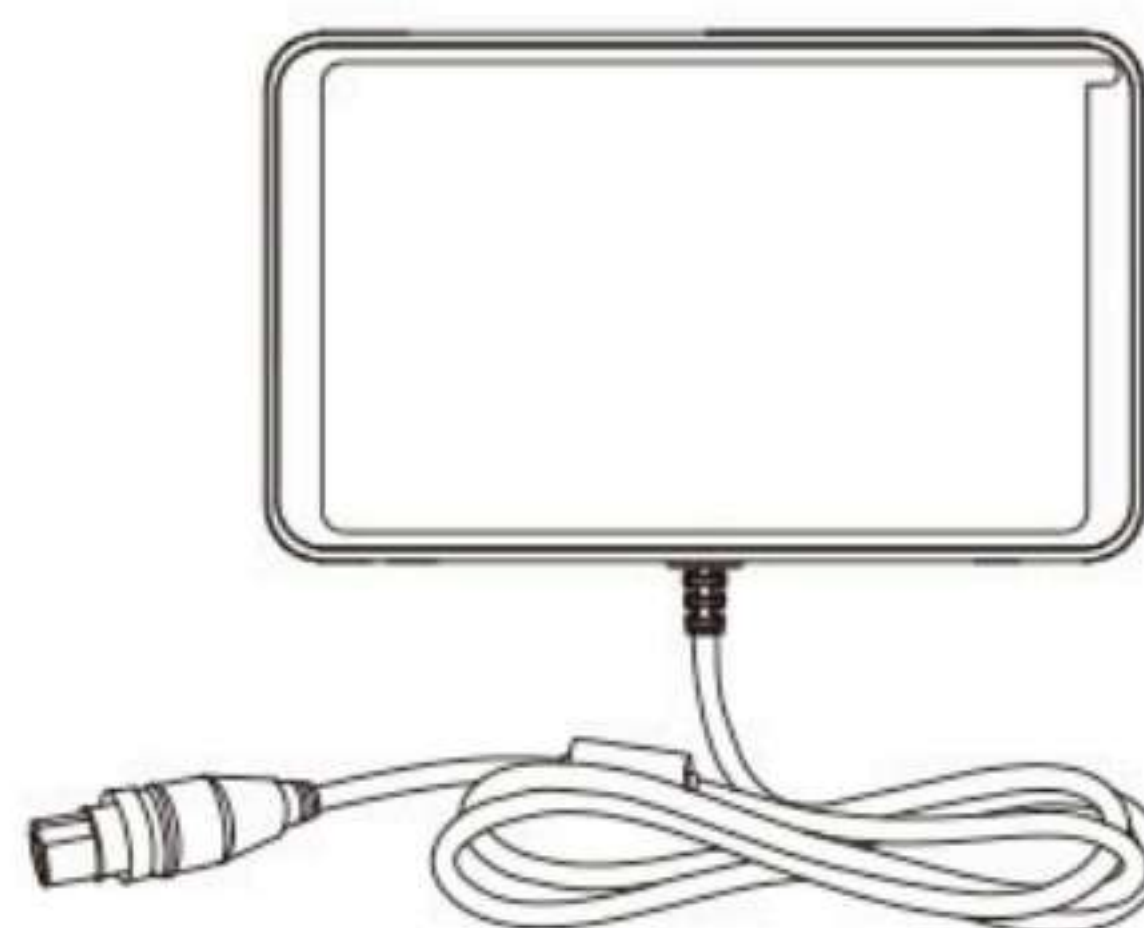

**КОНСОЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ**

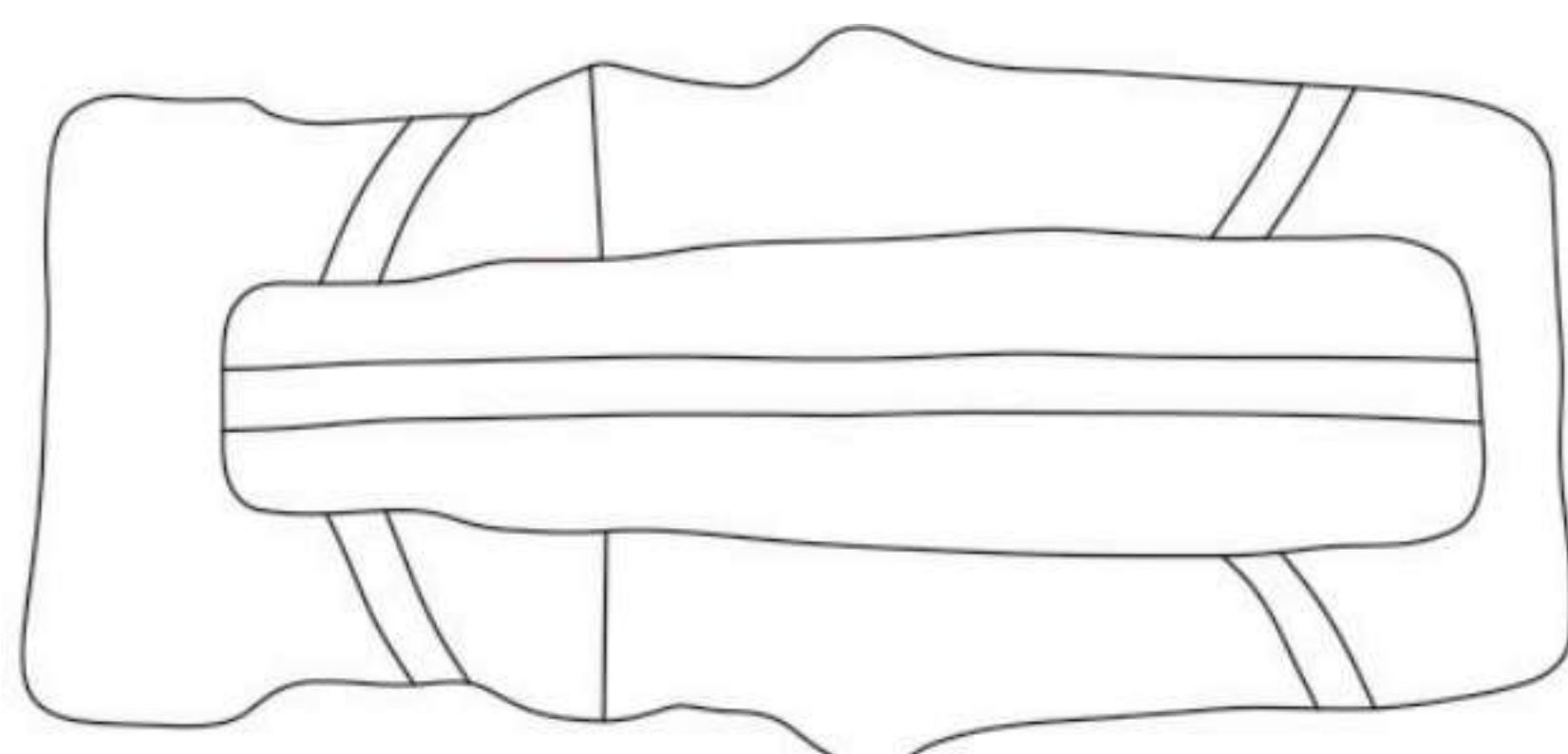


**ЗАДНЯЯ
НАКИДКА**

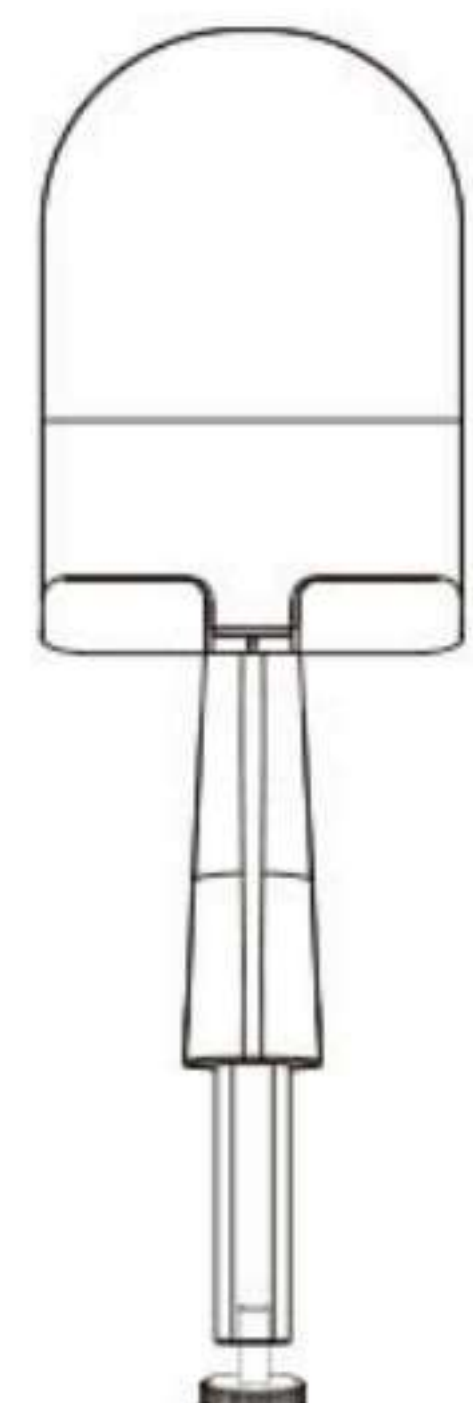

**КРЕПЛЕНИЕ
ПОД КОНСОЛЬ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


- 3.** ДОСТАНЬТЕ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ПОДЛОКОТНИК ИЗ КАРТОННОЙ КОРОБКИ, ПОЛОЖИТЕ ПОДЛОКОТНИК НА СТОЛ ИЛИ РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЦАРАПИН).

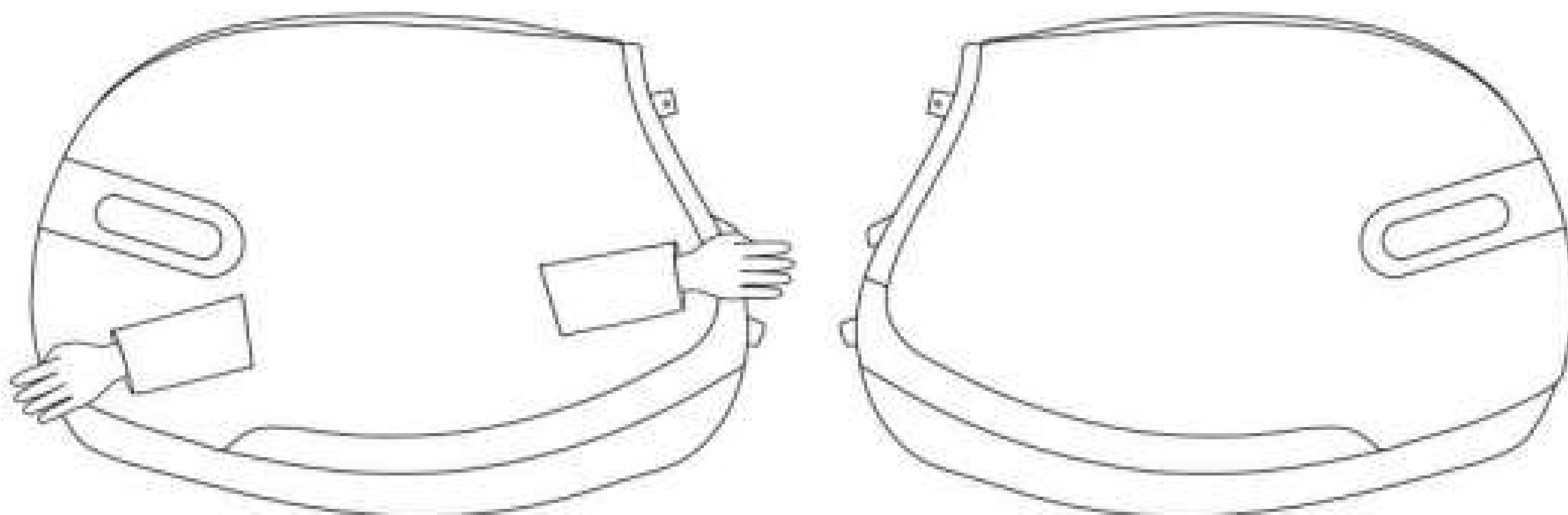

ЛЕВЫЙ

ПРАВЫЙ

- 4.** ДОСТАНЬТЕ УСТРОЙСТВО ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ ИЗ КАРТОННОЙ КОРОБКИ, ПОДЦЕПИТЕ ДВЕ СТОРОНЫ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ СПЕРЕДИ И СЗАДИ И ВЫНЬТЕ ИХ.

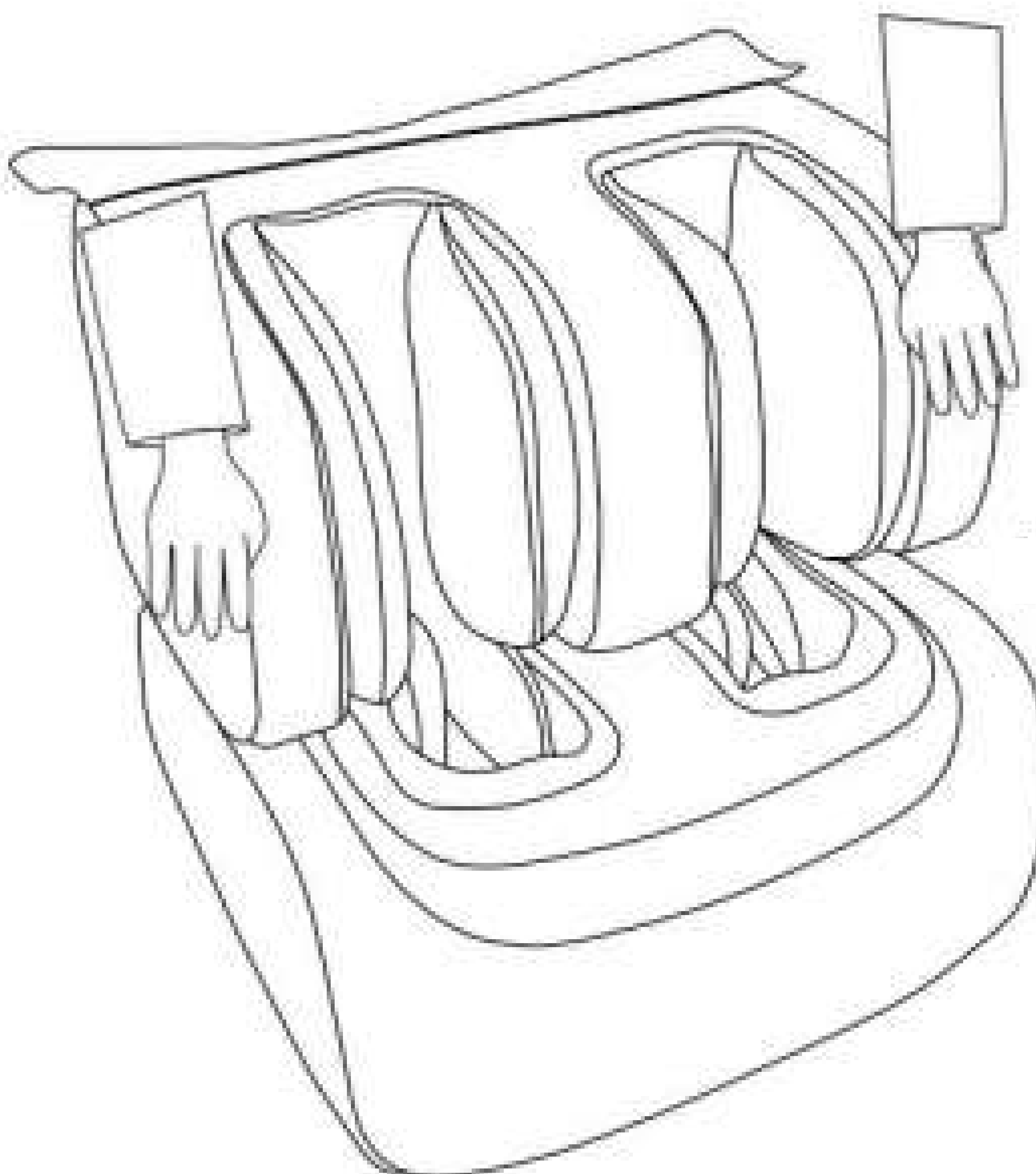

ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 2. СБОРКА ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ


1. ВЫКРУТИТЕ БОЛТ ИЗ ПОДВЕСКИ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ.
2. ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ВОЗДУШНЫЕ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ВОЗДУШНЫМИ СОПЛАМИ ОСНОВНОГО КОРПУСА.
3. СОЕДИНИТЕ ВИЛКУ КАБЕЛЯ И РОЗЕТКУ.
4. ПОДНИМИТЕ ЩИТ ВАЛА ВРАЩЕНИЯ НА ВЕШАЛКИ, ПОДНИМИТЕ ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ РУКАМИ, ВСТАВЬТЕ ВАЛ ВРАЩЕНИЯ В ВЕШАЛКИ НА ОСНОВНОМ КОРПУСЕ И ОПУСТИТЕ ЩИТ ВАЛА ВРАЩЕНИЯ ВНИЗ.
5. ПЛОТНО ЗАКРУТИТЕ ВИНТ.
6. СОЕДИНИТЕ КОЖАНУЮ ЧАСТЬ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ С СИДЕНЬЕМ С ПОМОЩЬЮ ЛИПУЧКИ.



ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВОЗДУШНОЙ ТРУБЫ И КАБЕЛЕЙ НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЙТЕ ИХ ВМЕСТЕ.

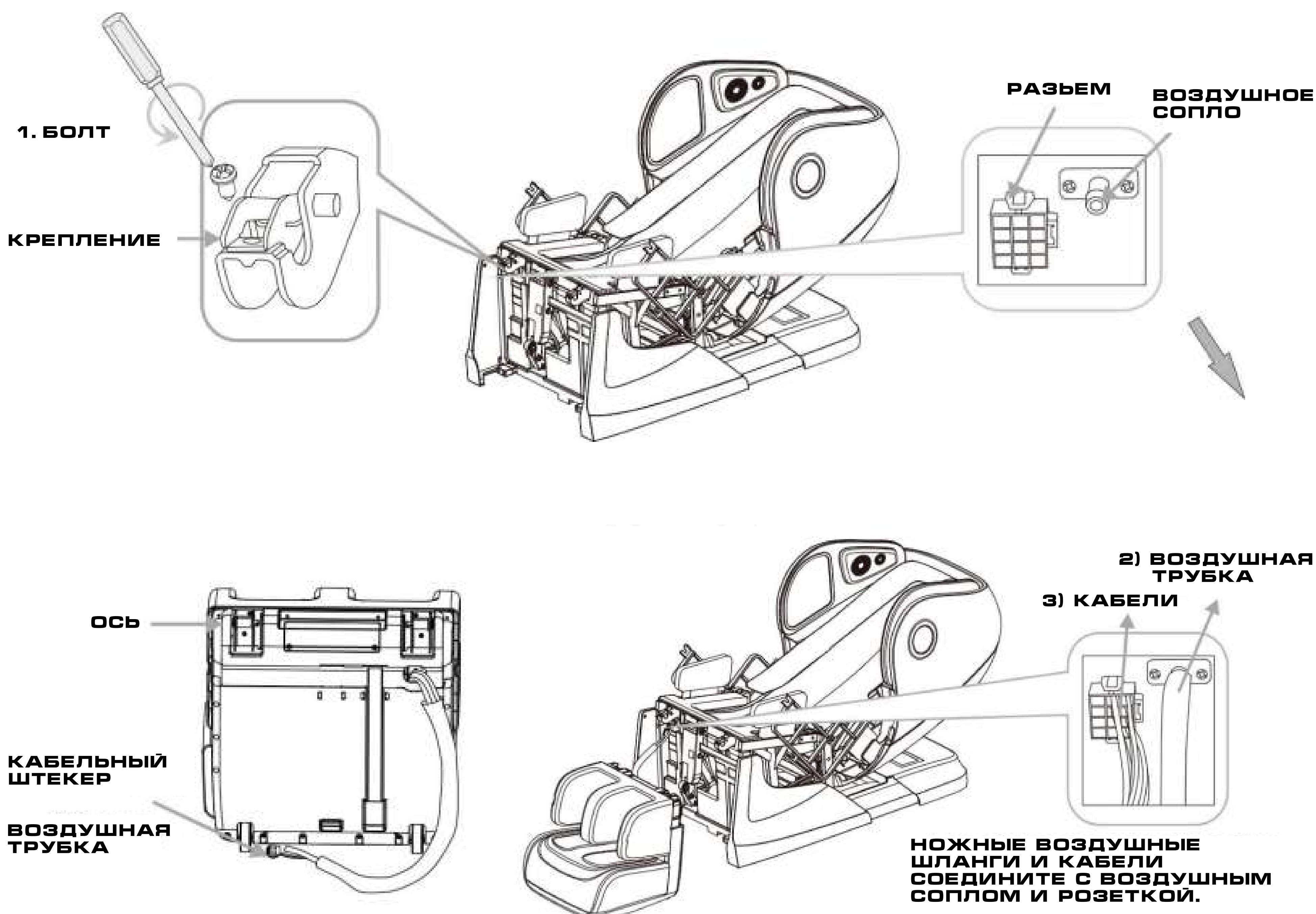

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

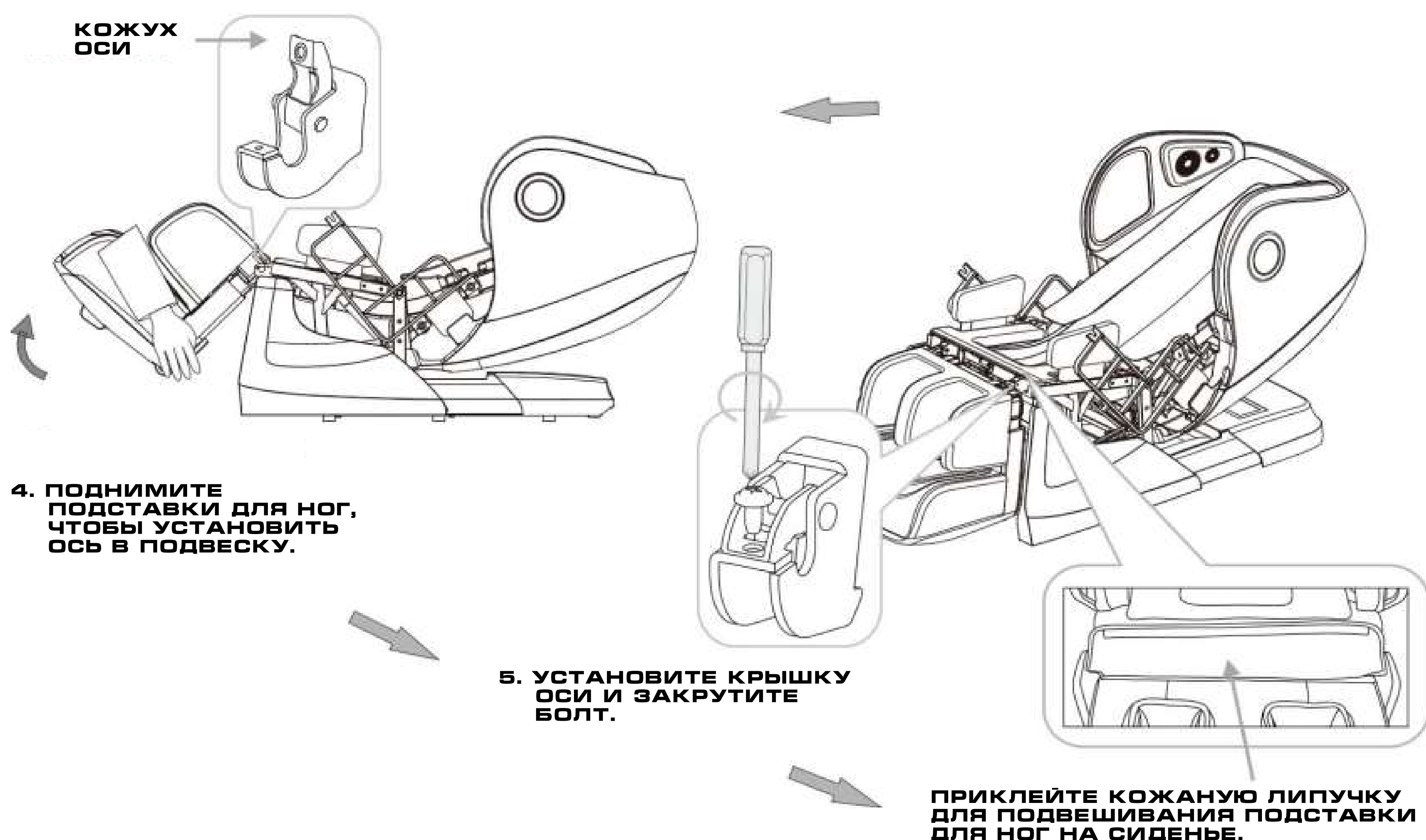


ШАГ 3. СБОРКА ЛЕВОГО И ПРАВОГО ПОДЛОКОТНИКА

1. ВСТАВЬТЕ ЕГО ВО ВРАЩАЮЩУЮСЯ ПОДСТАВКУ СБОКУ КОРПУСА КРЕСЛА И ОТОДВИНЬТЕ НАЗАД.
2. ВСТАВЬТЕ ШТЕКЕР КАБЕЛЯ В РАЗЪЕМ.
3. ПОДСОЕДИНИТЕ ВОЗДУШНЫЙ КРАН С МАРКИРОВКОЙ "1", А ВОЗДУШНУЮ ТРУБКУ "2" СОЕДИНИТЕ С ВОЗДУШНЫМ КРАНОМ С МАРКИРОВКОЙ "2".
4. ВСТАВЬТЕ 3 КРЕПЕЖНЫХ ШТИФТА НАРУЖНОЙ ЧАСТИ ПОДЛОКОТНИКА В 3 КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО ПОДЛОКОТНИКА И ЗАСТЕГНИТЕ В ЗАЦЕЛОК.
5. ВСТАВЬТЕ 2 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЧАСТИ ЗАДНЕГО ПОДЛОКОТНИКА В КРЕПЕЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ НА ЗАДНЕМ ОСНОВНОМ КОРПУСЕ, А КРЕПЕЖНУЮ ЧАСТЬ ВВЕРХ ВСТАВЬТЕ В ЗАЗОР МЕЖДУ ПЛЕЧЕВОЙ РАМОЙ И КОРПУСОМ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ.
6. СНИМИТЕ РЕЗИНОВУЮ ЗАГЛУШКУ ПОДЛОКОТНИКА, ПЛОТНО ЗАКРУТИТЕ ВИНТЫ ВНУТРИ ОТВЕРСТИЯ, ЗАТЕМ ПЛОТНО НАДЕНЬТЕ РЕЗИНОВУЮ ЗАГЛУШКУ.




ВНИМАНИЕ: НЕ СЖИМАЙТЕ ВОЗДУШНЫЕ ТРУБКИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УТЕЧКЕ ВОЗДУХА ИЛИ НЕСТАБИЛЬНОЙ РАБОТЕ ПНЕВМАТИКИ. ПОЖАЛУЙСТА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ФИКСИРОВАННАЯ ПЛАСТИНА И ПРОВОД ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАДЕЖНО ПОДКЛЮЧЕНЫ, ИНАЧЕ ПОДЛОКОТНИК МОЖЕТ УПАСТЬ ИЛИ USB НЕ СМОЖЕТ ЗАРЯДИТЬСЯ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

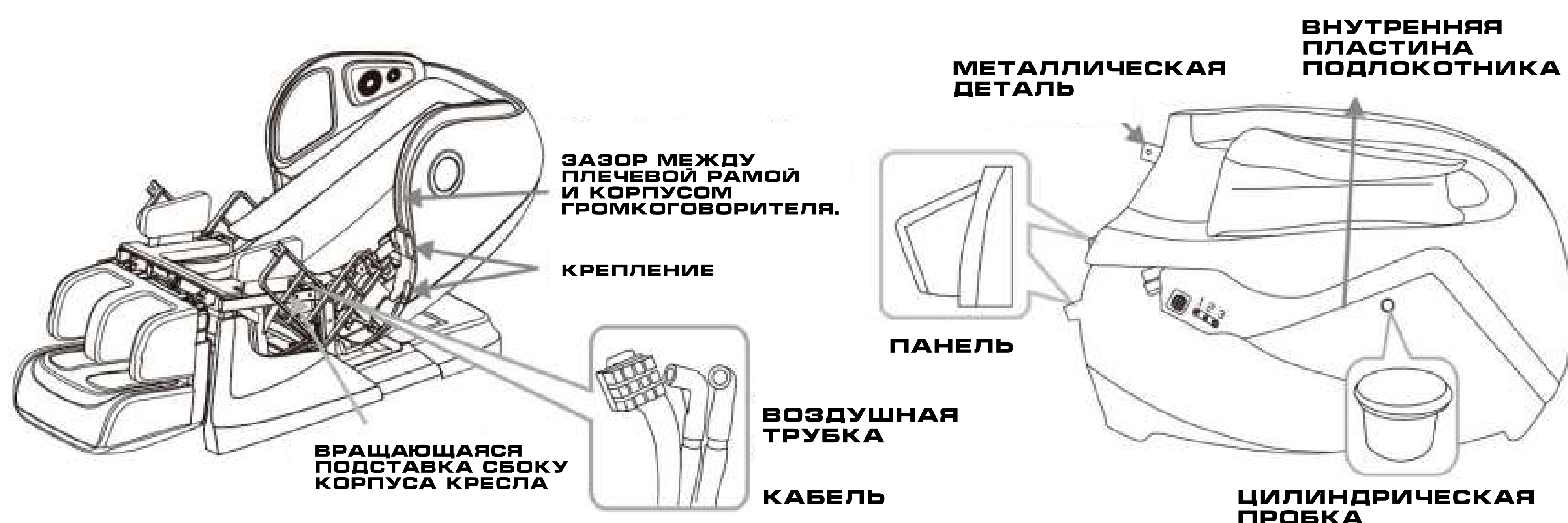

ЭТАПЫ СБОРКИ

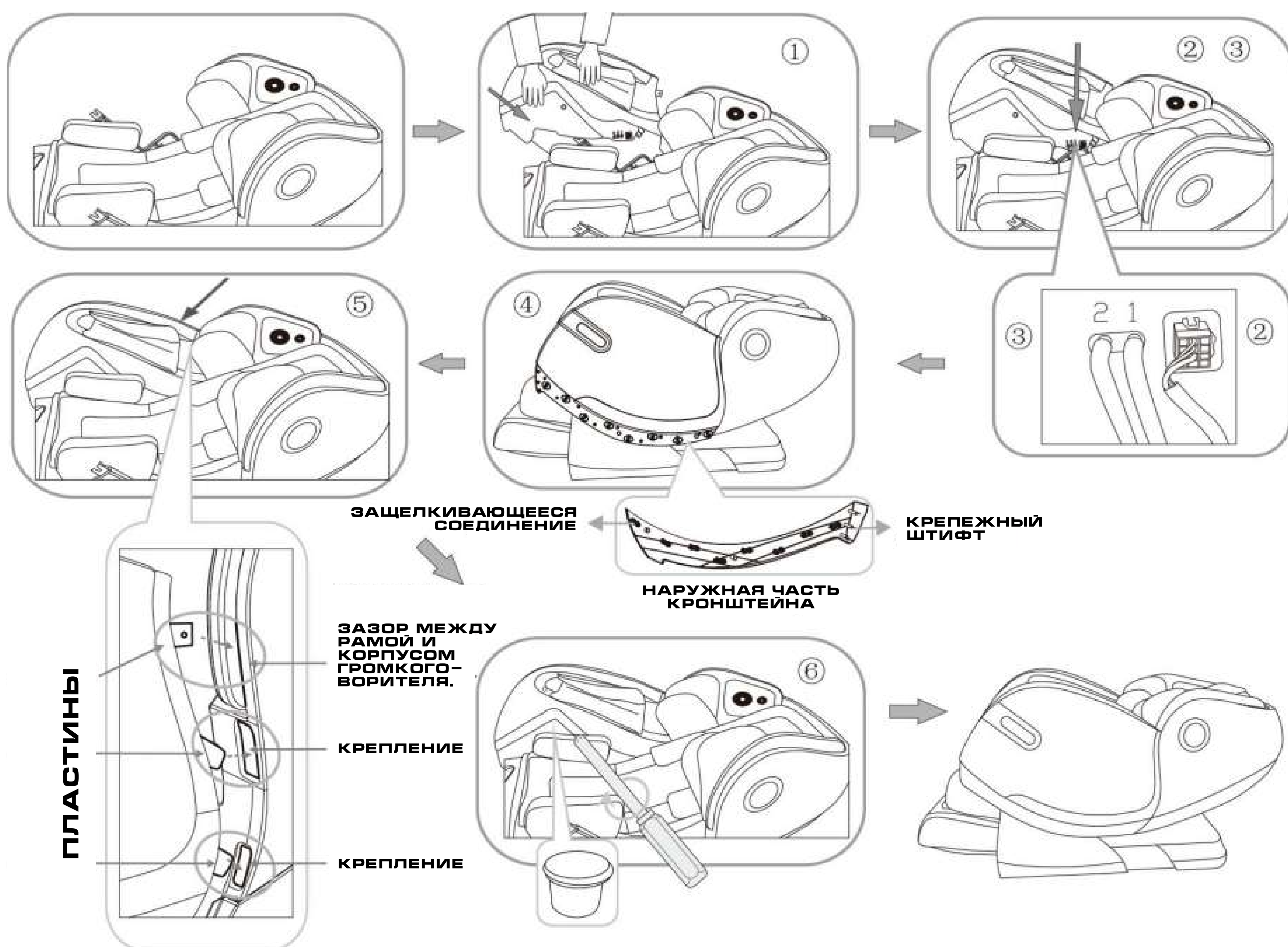


ШАГ 4. УСТАНОВИТЕ ОПОРНЫЙ СТОЛЬ РЕГУЛЯТОРА СТОЛА И КАРМАН ДЛЯ СИДЕНЬЯ

1. ВСТАВЬТЕ ЛИПУЧКУ КАРМАНА СИДЕНЬЯ ЧЕРЕЗ ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ПРАВОМ ПОДЛОКОТНИКЕ, ПРИКЛЕЙТЕ ЕЕ НА ДРУГУЮ ЛИПУЧКУ, ЗАТЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬ ТЕЛЕФОН, ЧАСЫ, КЛЮЧИ И Т.Д. В КАРМАН ДЛЯ УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
2. ВСТАВЬТЕ ОПОРНУЮ СТОЙКУ ДЛЯ ПЛАНШЕТА В ЛЕВЫЙ ПОДЛОКОТНИК, ПРИ УСТАНОВКЕ ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ФОРМУ МЕЖДУ СТОЙКОЙ И ОТВЕРСТИЕМ НА ПОДЛОКОТНИКЕ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

3. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ОПОРНОГО СТОЛБА, С ПОМОЩЬЮ ВИНТА **M6*16** ЗАТЯНИТЕ ЕГО С ВЕРХНЕЙ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ ПОДЛОКОТНИКА.
4. ПОЛОЖИТЕ ПЛАНШЕТ НА ОПОРНЫЙ СТОЛБ.
5. ПОДКЛЮЧИТЕ ЛИНИЮ ПЛАНШЕТА К МАССАЖНОМУ КРЕСЛУ С ПОМОЩЬЮ ГНЕЗДА ЛИНИИ, КОТОРОЕ НАХОДИТСЯ НА ЛЕВОЙ СТОРОНЕ ЧАСТИ СИДЕНЬЯ, ЗАТЕМ ЗАТЯНИТЕ ВИНТ-ГАЙКУ.

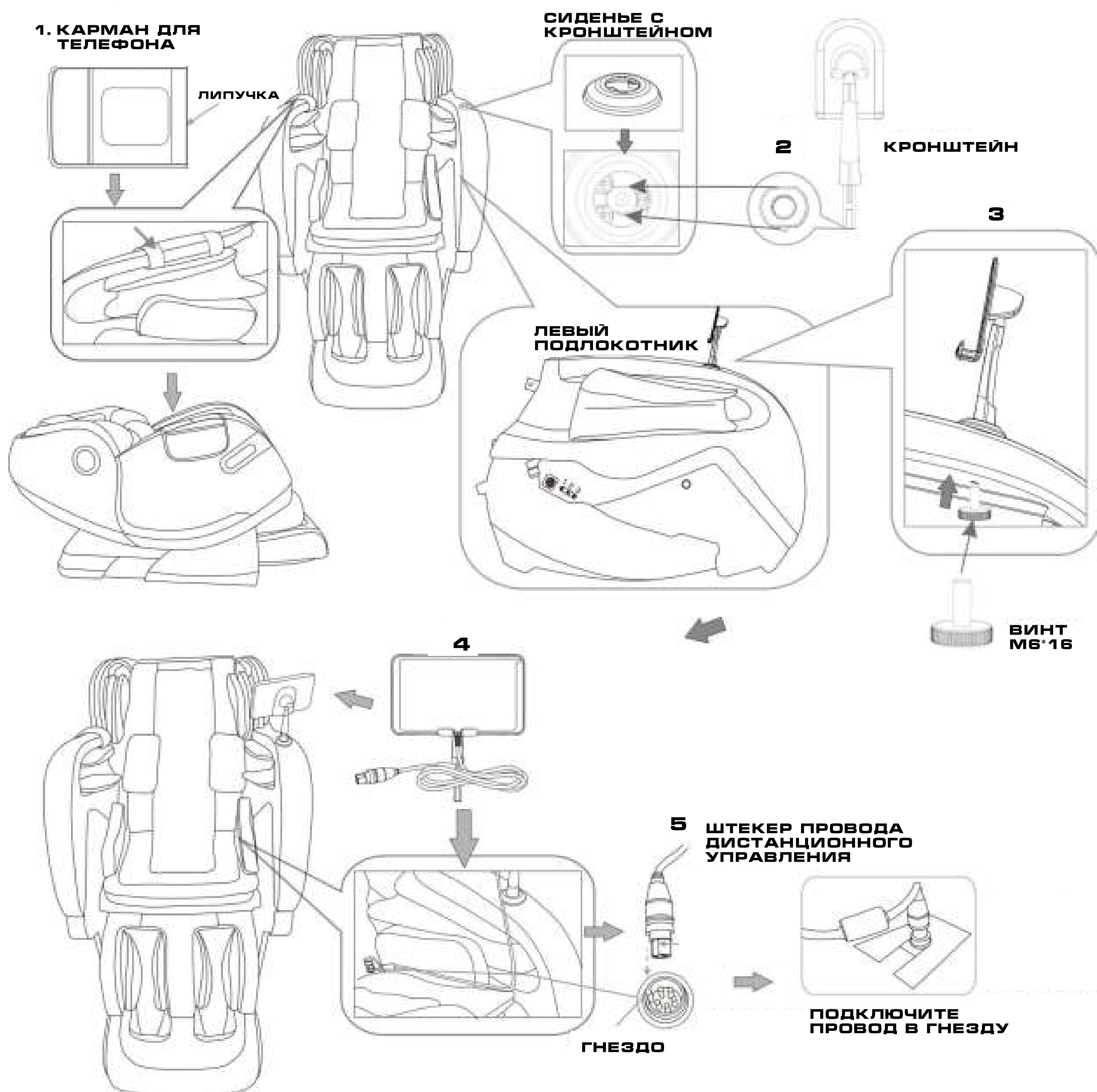


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 5. УСТАНОВИТЕ ОПОРНЫЙ СТОЛБ РЕГУЛЯТОРА СТОЛА И КАРМАН ДЛЯ СИДЕНЬЯ


ПОЛОЖИТЕ ПОДУШКУ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ, ПОДУШКУ ДЛЯ ПЛЕЧ, ПОДУШКУ ДЛЯ ГОЛОВЫ НА СПИНКУ И СОЕДИНИТЕ ДВЕ ЧАСТИ С ПОМОЩЬЮ МОЛНИИ И ЛИПУЧКИ.

РЕКОМАНДАЦИЯ

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕЛА ДЛЯ КОМФОРТНОГО МАССАЖА, КОГДА ВЫ СИДИТЕ НА КРЕСЛЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАЙТЕ ТАК, ЧТОБЫ НИЖНИЙ ОБОД ПОДУШЕЧКИ ДЛЯ ГОЛОВЫ БЫЛ ВРОВЕНЬ С ВАШИМИ УШАМИ.

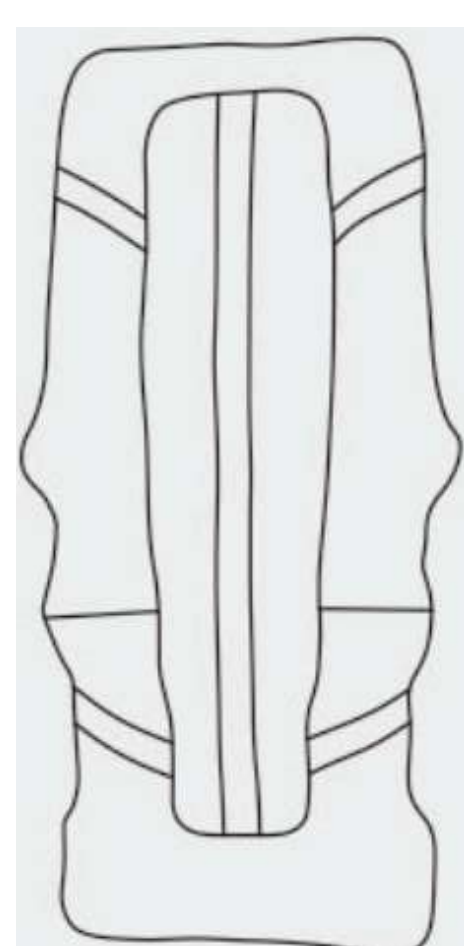

**ПОДУШКА
ЗАДНЕГО
СИДЕНЬЯ**

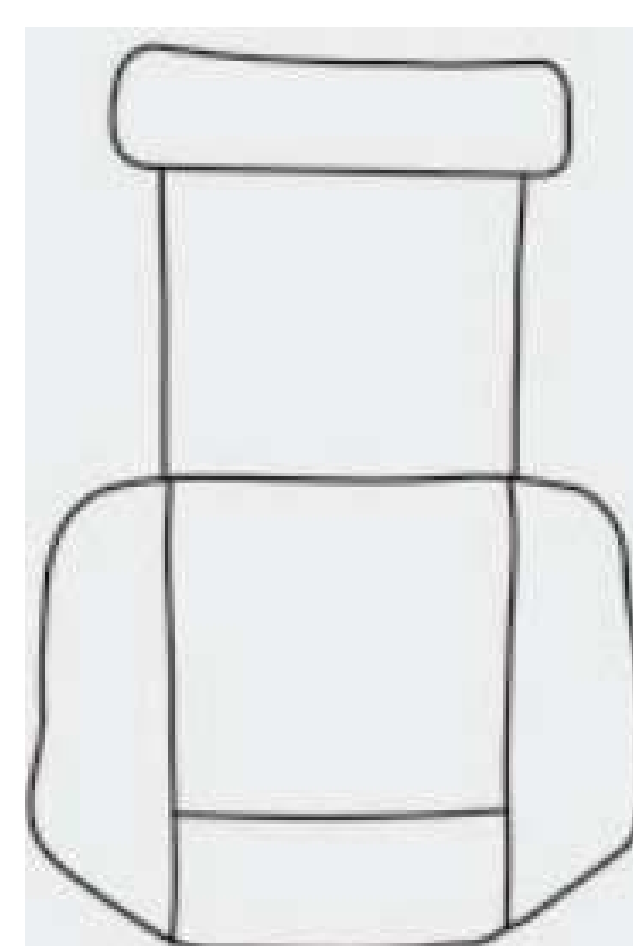


**НАКЛАДКА
ПОД ГОЛОВУ**



**ПОДУШКА
ПОД ПЛЕЧИ**



ПРИ УСТАНОВКЕ ПОДУШКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ: ЧТОБЫ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПОДУШКИ СПИНКИ СИДЕНЬЯ СОВПАДАЛА СО СРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ СПИНКИ СИДЕНЬЯ

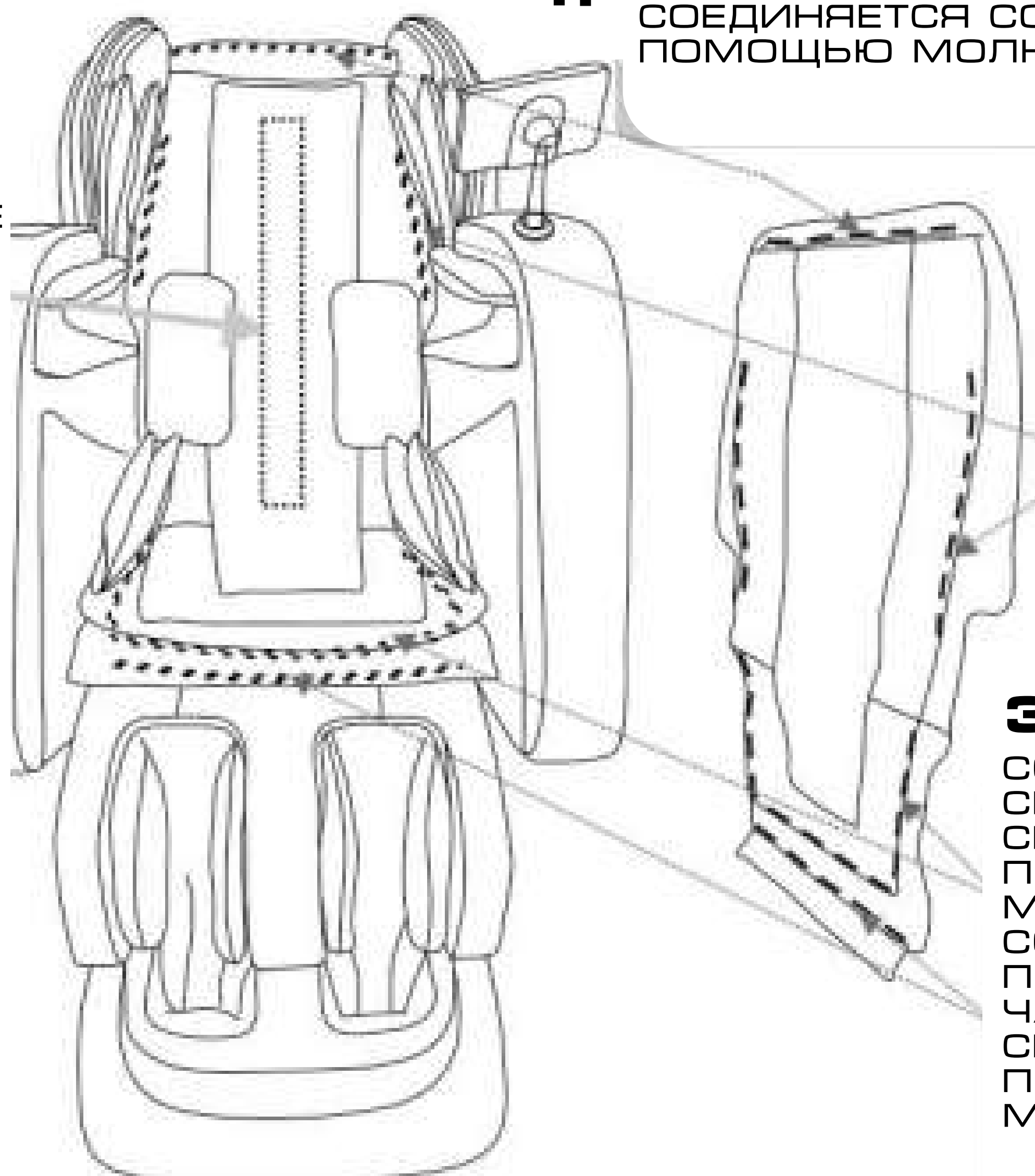


1. ПОДУШКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ СОЕДИНЯЕТСЯ СО СПИНКОЙ С ПОМОЩЬЮ МОЛНИИ.

2. ПОДУШКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ СОЕДИНЯЕТСЯ С БОКОВЫМИ СТОРОНАМИ СПИНКИ С ПОМОЩЬЮ МОЛНИИ

3. СОЕДИНИТЕ СПИНКУ С СИДЕНЬЕМ ПРИ ПОМОЩИ МОЛНИИ И СОЕДИНИТЕ ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ С СИДЕНЬЕМ ПРИ ПОМОЩИ МОЛНИИ.

5.
ЗАСТЕГНИТЕ
МОЛНИЮ НА
ПОДУШКЕ
И ПЛЕЧЕВОЙ
ЧАСТИ ВМЕСТЕ

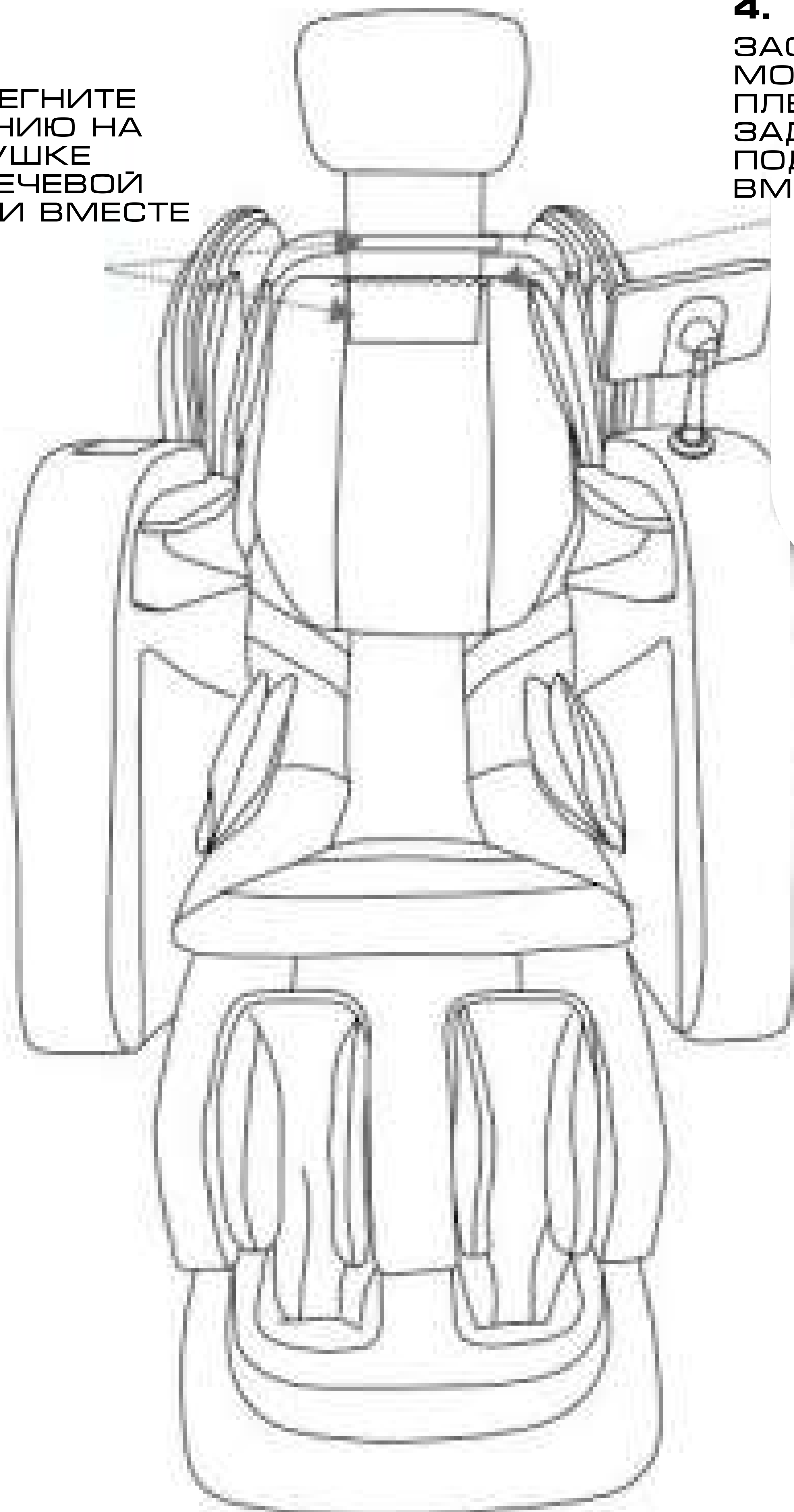

4.
ЗАСТЕГНИТЕ
МОЛНИЮ НА
ПЛЕЧЕВОЙ И
ЗАДНЕЙ
ПОДУШКАХ
ВМЕСТЕ


V. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ШАГ 6. ЗАПУСК МАССАЖНОГО КРЕСЛА

1. ВСТАВЬТЕ КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ В ОТВЕРСТИЕ А НА БЛОКЕ ПИТАНИЯ, КАК ПОКАЗАНО НА ПРАВОМ РИСУНКЕ.
2. ВСТАВЬТЕ ВИЛКУ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ В РОЗЕТКУ.
3. ВКЛЮЧИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗА КОРОБКОЙ ПИТАНИЯ.
(ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ "О/И", НАЖМИТЕ I ВНИЗ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ЕГО).
4. ВЫКЛЮЧИТЕ. КРЕСЛО ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
5. ВЫБЕРИТЕ ФУНКЦИЮ МАССАЖА С ПОМОЩЬЮ РУЧНОГО РЕГУЛЯТОРА, ЗАТЕМ НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ИМ.
6. В ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ USB-ПОРТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ЗАРЯДКИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ. НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ.



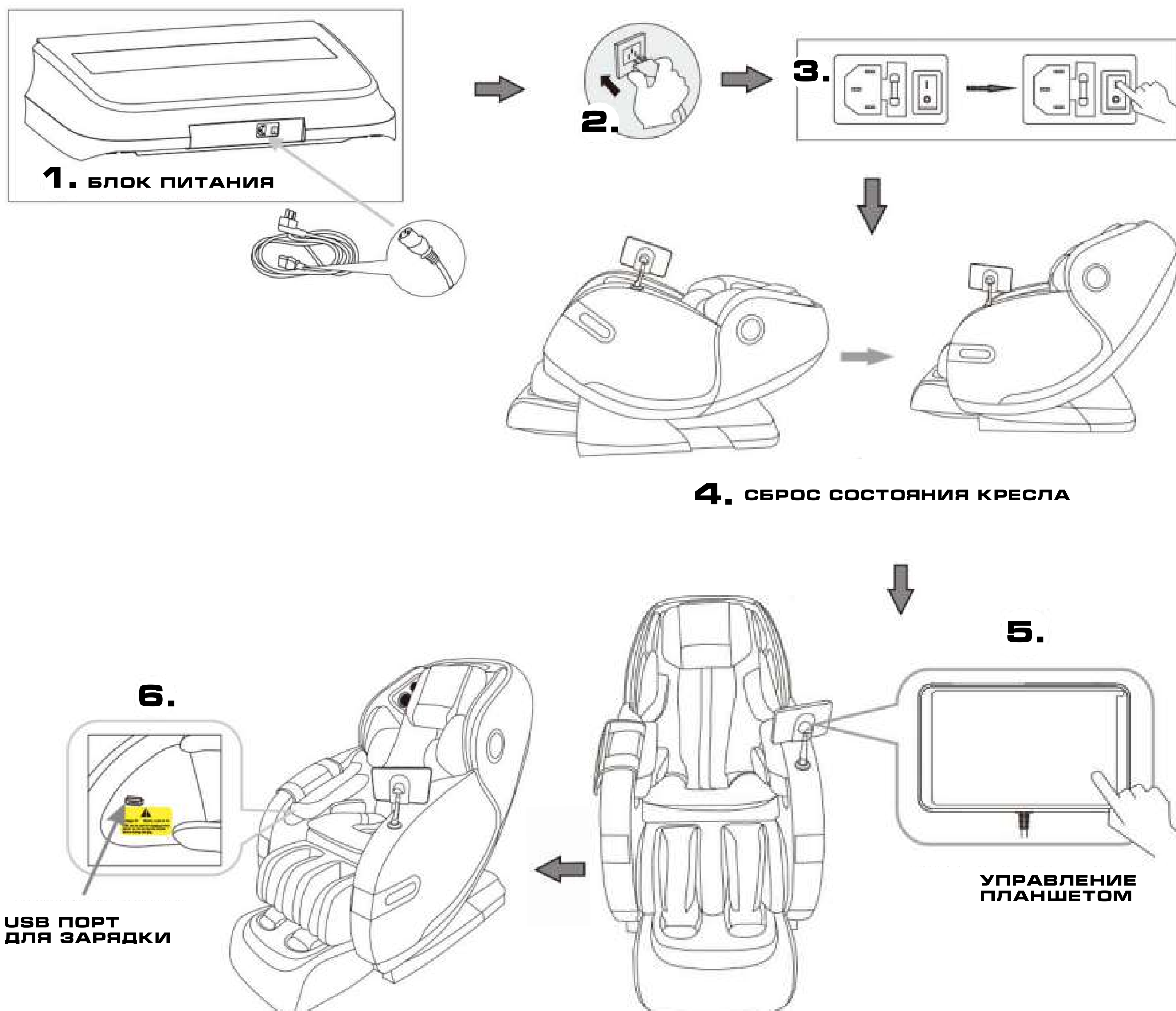


УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫНИМАТЬ ВИЛКУ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ИЗ РОЗЕТКИ.




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕД МАССАЖЕМ

-  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТУЛ В ТАКИХ МЕСТАХ КАК БАССЕЙН, ВАННАЯ КОМНАТА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ УТЕЧКИ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
-  НЕ ЛЕЖИТЕ ПОД СОЛНЕЧНЫМ СВЕТОМ ИЛИ РЯДОМ С ПЛИТОЙ ИЛИ ДРУГИМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРЧИ ОБИВКИ.
-  ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТУЛ НА РОВНОМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ СТУЛ НЕ УПАЛ, НЕ ШУМЕЛ ИЛИ НЕ ВОЗНИКЛИ ДРУГИЕ НЕОЖИДАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ


• ПРОВЕРЬТЕ МЕСТО:

ПРОВЕРЬТЕ ОБЛАСТЬ, КОГДА СПИНА И НОГИ ВЫТЯНУТЫ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВОКРУГ НЕТ ЛЮДЕЙ, ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ИЛИ ДРУГИХ ВЕЩЕЙ

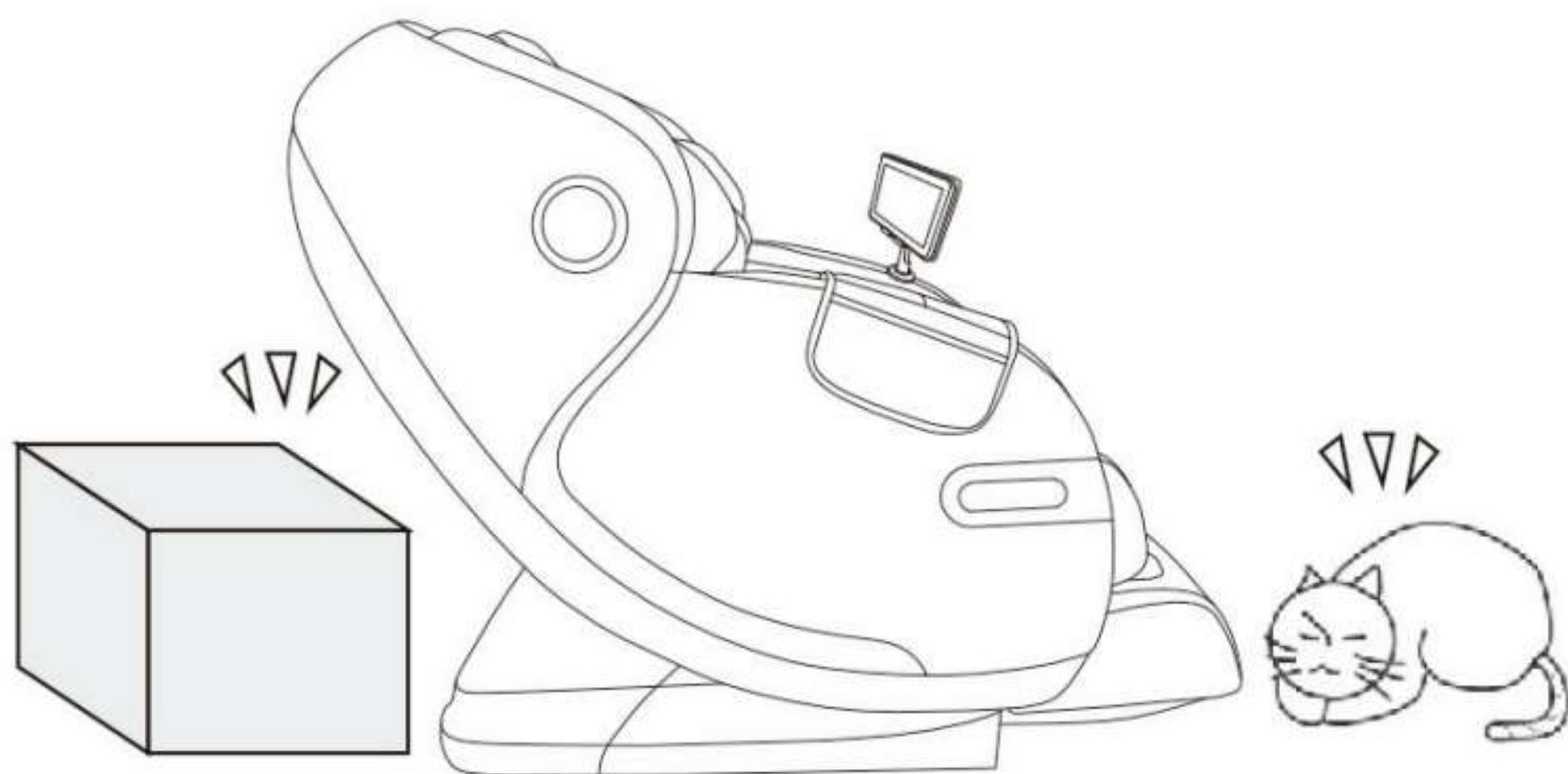

• ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, ШТЕКЕР:

1. ВОВРЕМЯ ОЧИЩАЙТЕ ВИЛКУ ОТ ПЫЛИ (ИСПОЛЬЗУЯ СУХУЮ ТКАНЬ)
2. ПРОВЕРЬТЕ ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ОБРЫВА, ИЗГИБА, РАСТЯЖЕНИЯ, ШНУРА ИЛИ ПРИЖИМАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ВЕЩЬЮ.

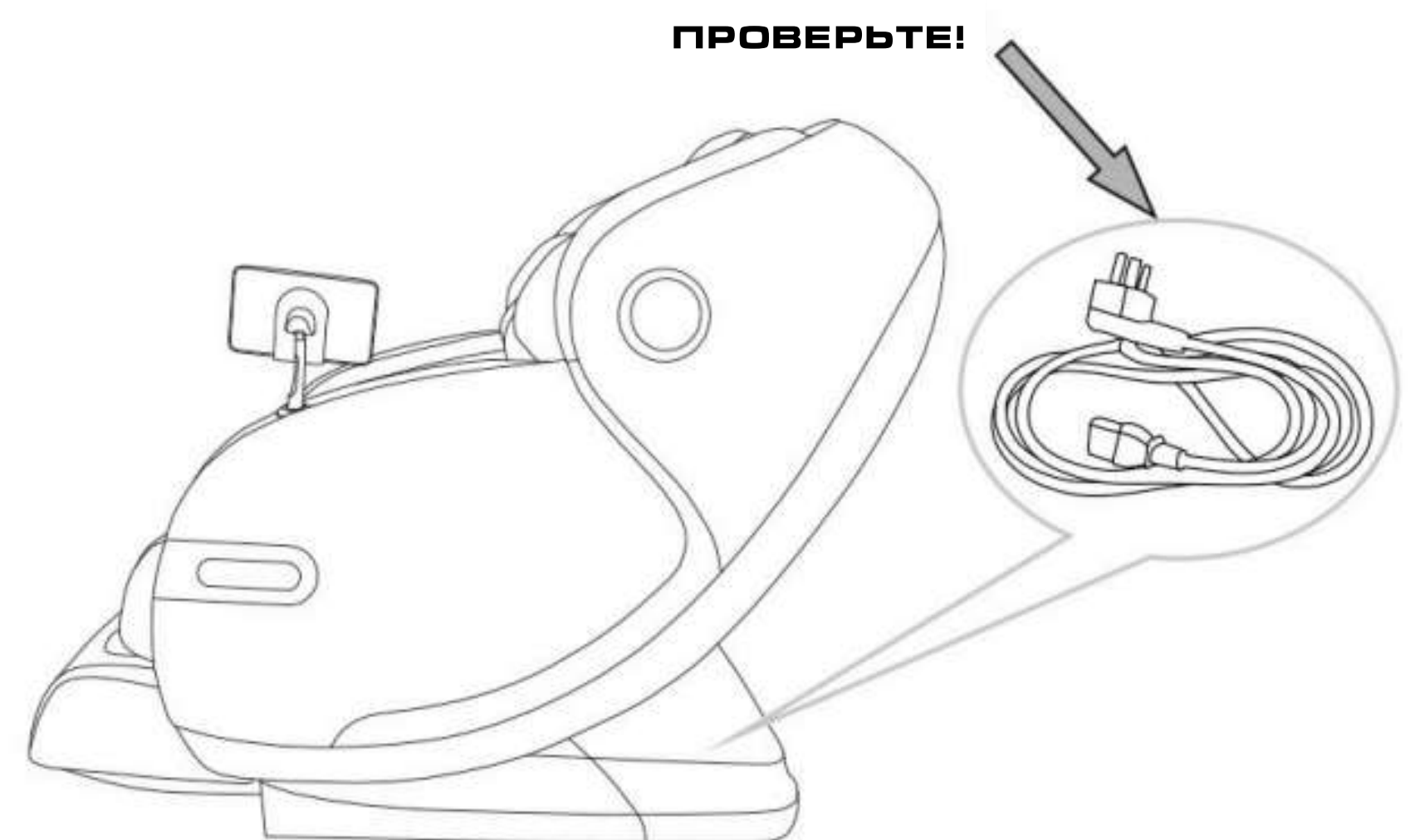

ПРОВЕРЬТЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ

- РАЗМЕР ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТУЛА.

МИНИМУМ 10СМ ОТ СТЕНЫ



НЕ МЕНЕЕ 30СМ ПЕРЕД НОГАМИ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ

КОГДА СПИНКА ИЛИ ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ОТКИДЫВАЕТСЯ ИЛИ ВЫДВИГАЕТСЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА

1) ОТСУТСТВИЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ИЛИ ВЕЩЕЙ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

2) ПРОВЕРИТЬ РАЗМЕР МЕСТА

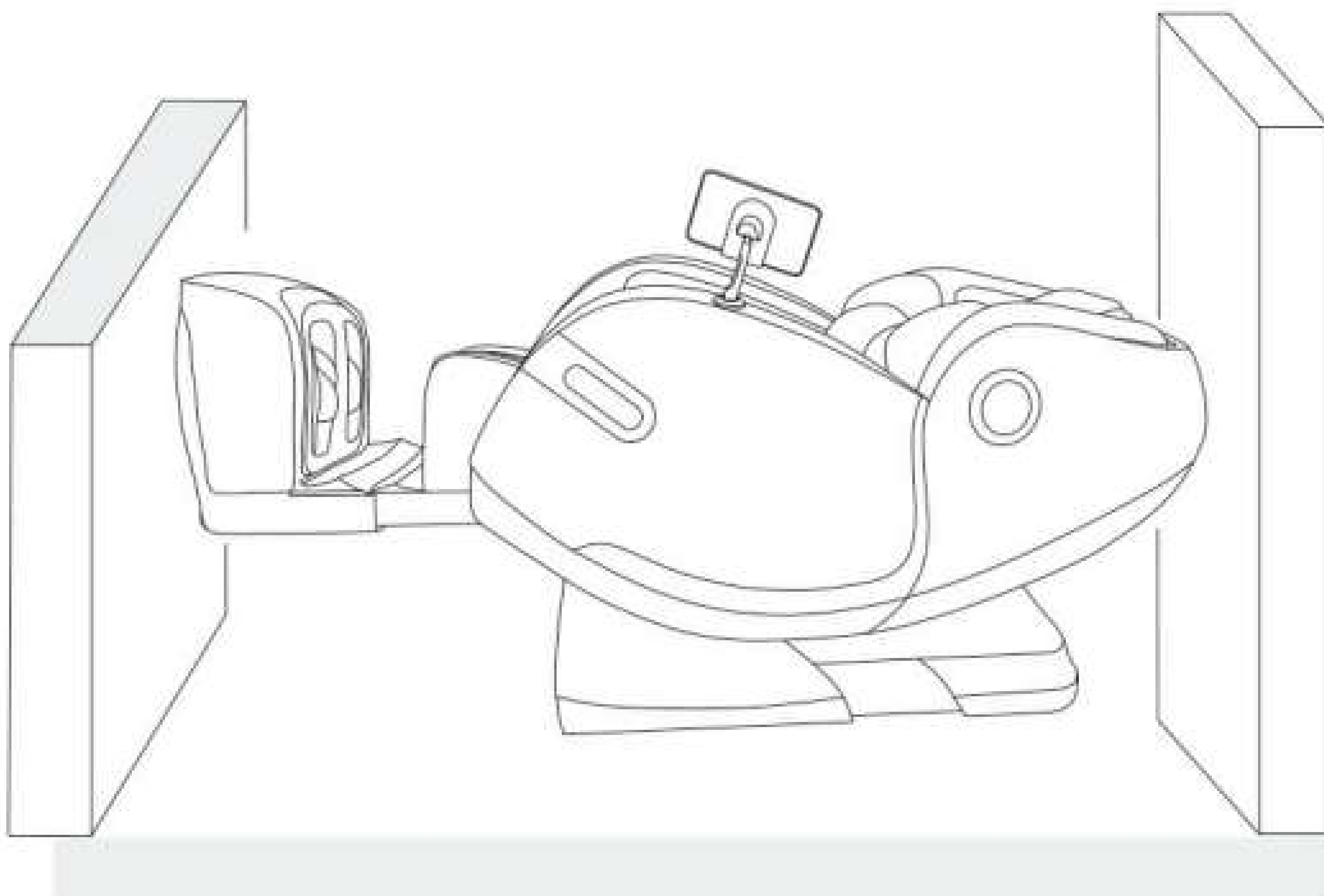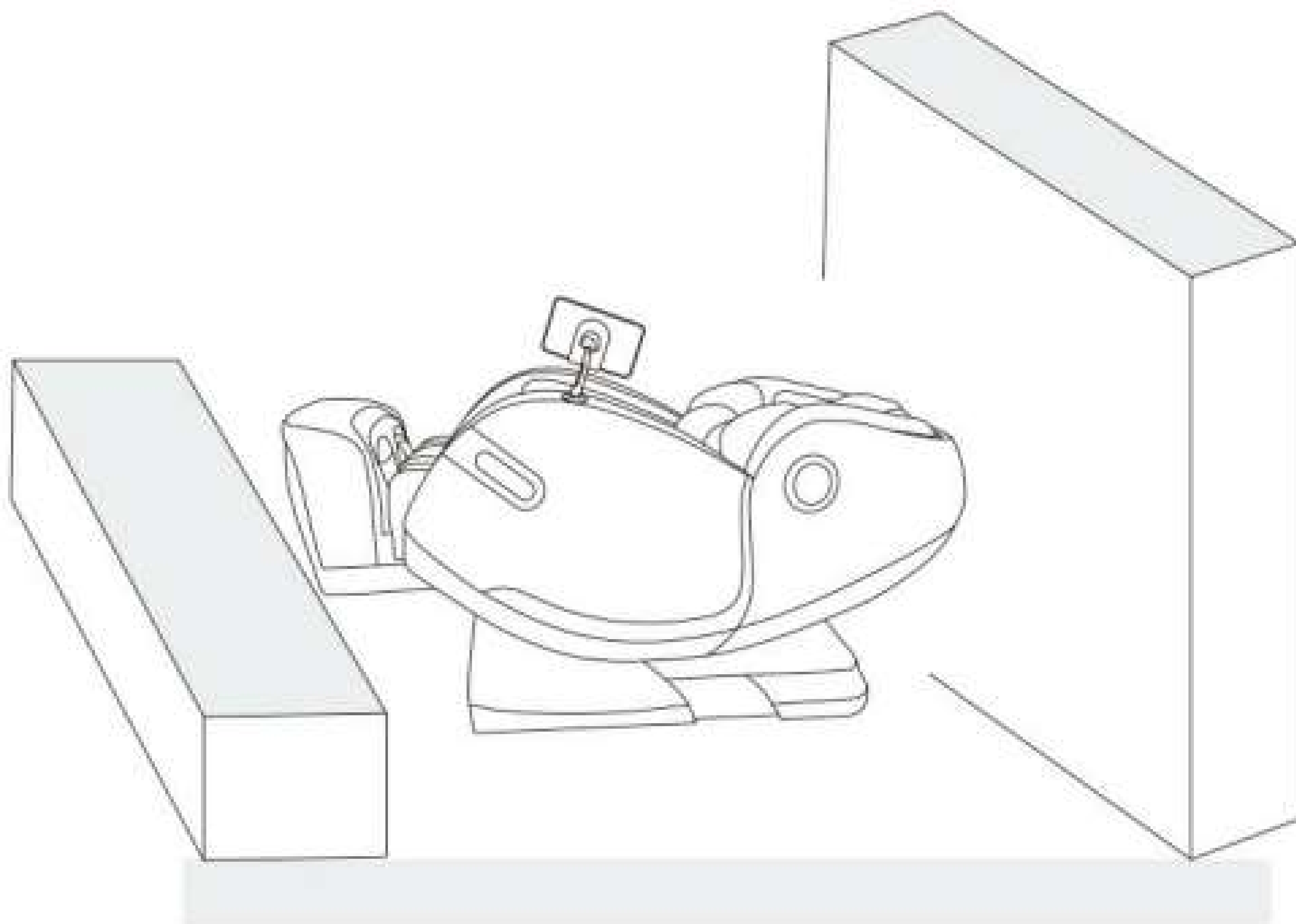

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КАК ПЕРЕДВИНУТЬ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО:

НЕ ДВИГАЙТЕ КРЕСЛО В ТО ВРЕМЯ КОГДА ОН РАБОТАЕТ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

КАК ДВИГАТЬ:

СВЯЖИТЕ КАБЕЛИ И ПОЛОЖИТЕ ИХ НА СИДЕНЬЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ДВИЖЕНИИ.


ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ТОЛКАТЬ СТУЛ, ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РОЛИКИ, ЕСЛИ ПОЛ ДЕРЕВЯННЫЙ ИЛИ ИЗ ДРУГОГО ЛЕГКО ПОВРЕЖДАЕМОГО МАТЕРИАЛА, ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ЕЩЕ 2 ЧЕЛОВЕКА.

УБЕДИТЕСЬ ЧТО ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО И ВИЛКА НЕ КАСАЕТСЯ ПОЛА

ВНИМАНИЕ!

ПОДНИМИТЕ ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ. ЗАТЕМ ПОДТОЛКНИТЕ СТУЛ К МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ И ПОСТАВЬТЕ ЕГО.

 **ПОЖАЛУЙСТА, ДЕРЖИТЕ ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ, КОГДА ПЕРЕМЕЩАЕТЕ СТУЛ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ КАКИХ-ЛИБО ЦАРАПИН НА КОЖЗАМЕНИТЕЛЕ**



РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕД МАССАЖЕМ:

- ПЕРЕД РЕГУЛИРОВКОЙ, ПОЖАЛУЙСТА, УБЕДИТЕСЬ ЧТО МАССАЖНАЯ ГОЛОВКА НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СИДЕНЬЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СЕСТЬ НА СТУЛ.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ, ВЫЗВАННЫХ НЕПРАВИЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ МАССАЖНОЙ ГОЛОВКИ.

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ АКУПУНКТУРНЫЕ ТОЧКИ

- ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК АКУПУНКТУРЫ, ЕСЛИ МАССАЖНАЯ ГОЛОВКА НЕ МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЫСОТЫ ПЛЕЧА, ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЫСОТЫ ПЛЕЧА ВЫБЕРИТЕ ПО УМОЛЧАНИЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ

ПРАВИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

ВАША СПИНА РАСПОЛОЖЕНА НА СПИНКЕ СТУЛА, ГОЛОВА РАСПОЛОЖЕНА НА ПОДУШКЕ. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗДАЕТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ТОЧКИ АКУПУНКТУРЫ, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ МИКРОРЕГУЛИРОВКА, ПРОСТО НАЖМИТЕ КНОПКУ ВВЕРХ / ВНИЗ


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЕРЕД РЕГУЛИРОВКОЙ:

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РОЛИКИ МАССАЖНОГО АППАРАТА УПИРАЮТСЯ В ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ СПИНКИ, ЗАТЕМ МЕДЛЕННО СЯДЬТЕ НА СТУЛ.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ, ВЫЗВАННЫХ НЕПРАВИЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ МАССАЖНОЙ ГОЛОВКИ.

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТОЧЕК АКУПУНКТУР ЕСЛИ МАССАЖНАЯ ГОЛОВКА НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ПОЛОЖЕНИЕ ПЛЕЧА, ОНА ПО УМОЛЧАНИЮ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА В СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ.

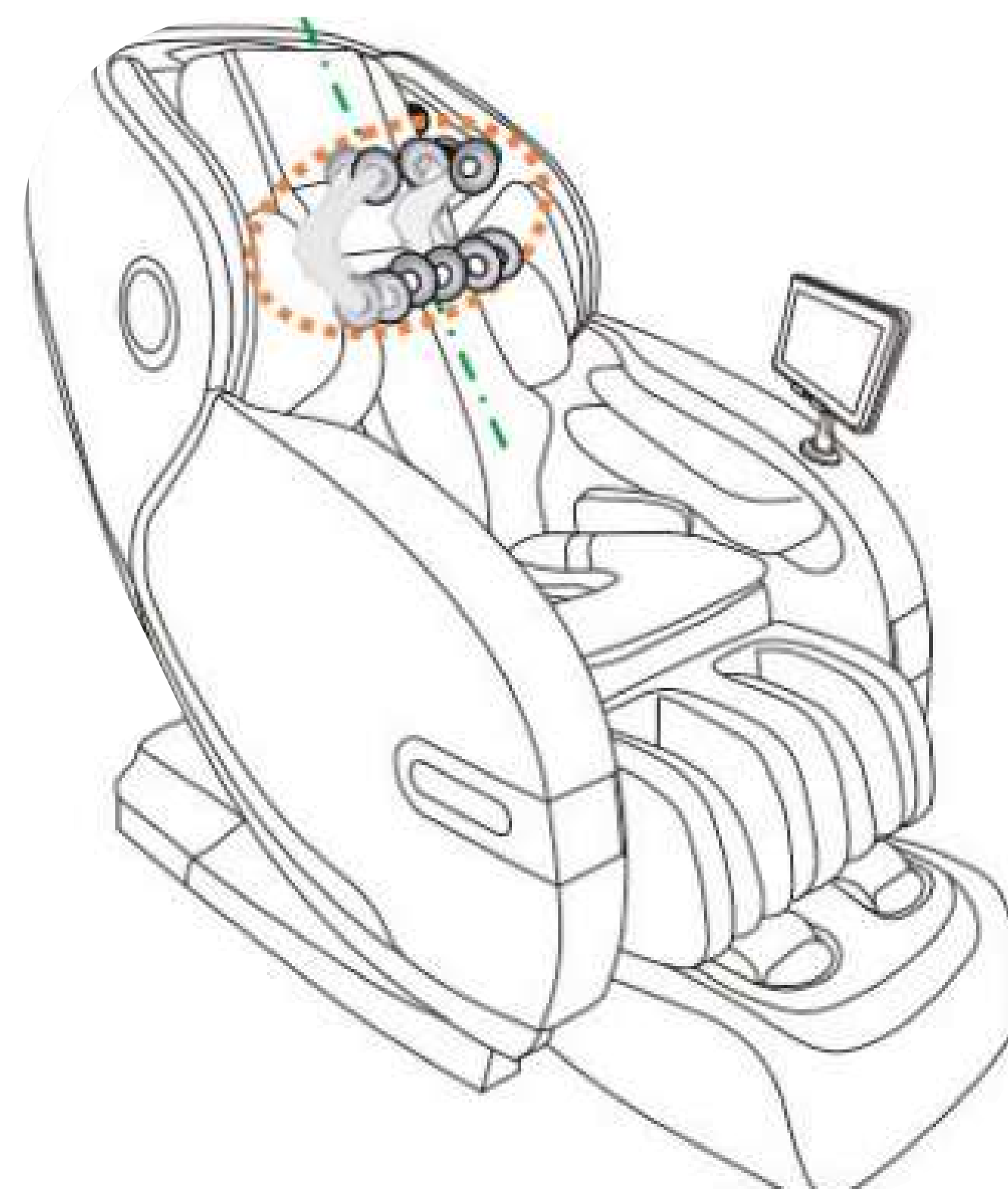

ПРАВИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ:

СПИНА ПРИЖИМАЕТСЯ К СПИНКЕ СТУЛА, ГОЛОВА ПРИЖИМАЕТСЯ К ПОДУШКЕ.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДСКАЖЕТ, КОГДА НАЧНЕТ РАБОТАТЬ СКАНИРОВАНИЕ ТЕЛА, КОГДА ВЫ УСЛЫШИТЕ "ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ", ВЫ МОЖЕТЕ НАЖАТЬ КНОПКУ ВВЕРХ/ВНИЗ НА КОНТРОЛЛЕРЕ, ЧТОБЫ ВРУЧНУЮ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ПЛЕЧ.



ИЗБЕГАЙТЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛЕЧ, ЧТО ПОВЛИЯЕТ НА КОМФОРТ МАССАЖА.



ИНТЕНСИВНЫЙ МАССАЖ:

- ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО МАССАЖ НЕДОСТАТОЧНО СИЛЬНЫЙ, ВЫ МОЖЕТЕ УБРАТЬ ПОДУШКУ И ПЛЕЧЕВУЮ ПОДУШКУ.

- ПОСКОЛЬКУ КРЕСЛО ТЯЖЕЛОЕ, ОН МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ ВАШЕ ПОКРЫТИЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛОЖИТЕ ОДЕЯЛО ИЛИ ДРУГИЕ МЯГКИЕ ВЕЩИ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ВАШ ПОЛ.

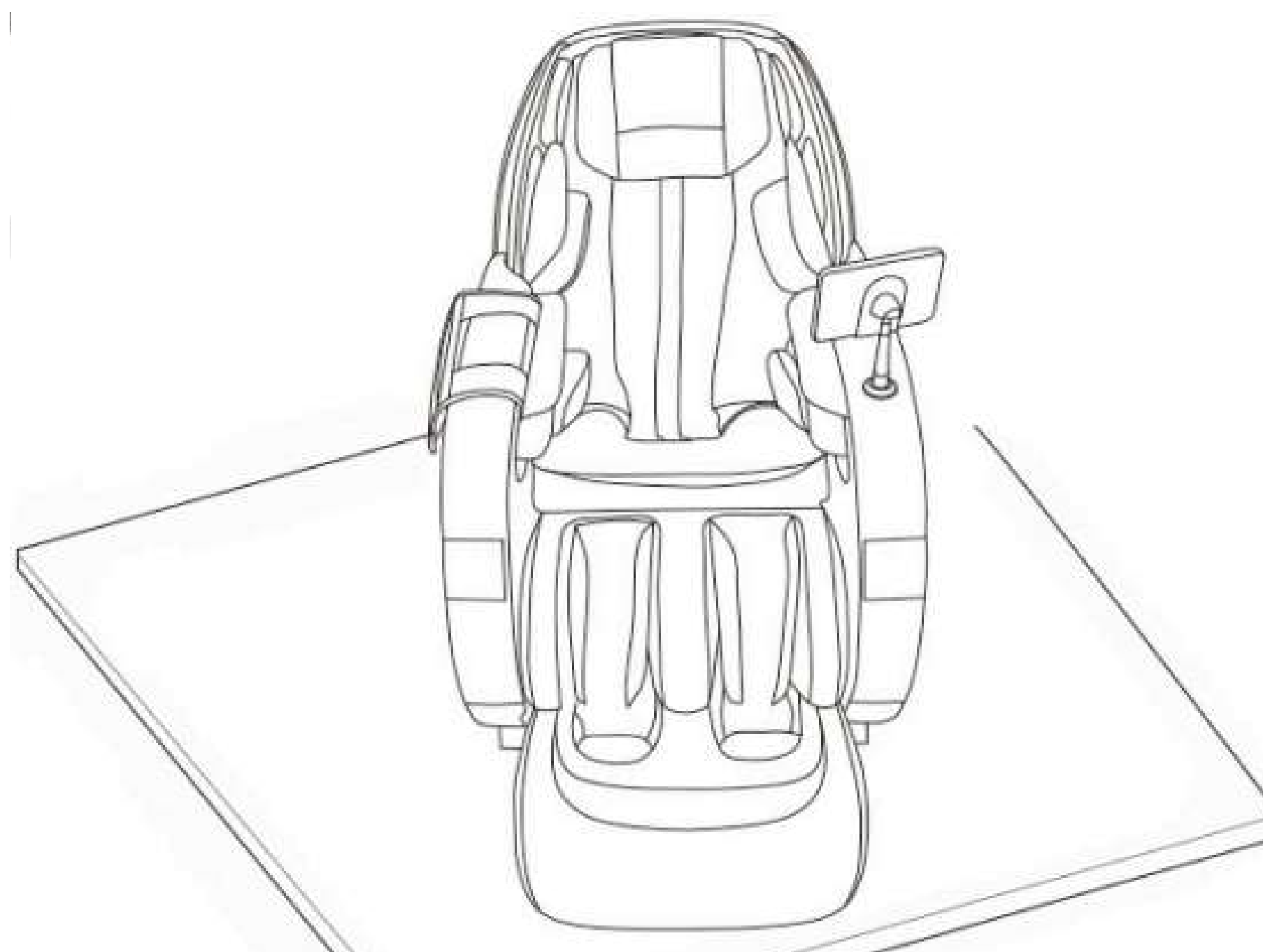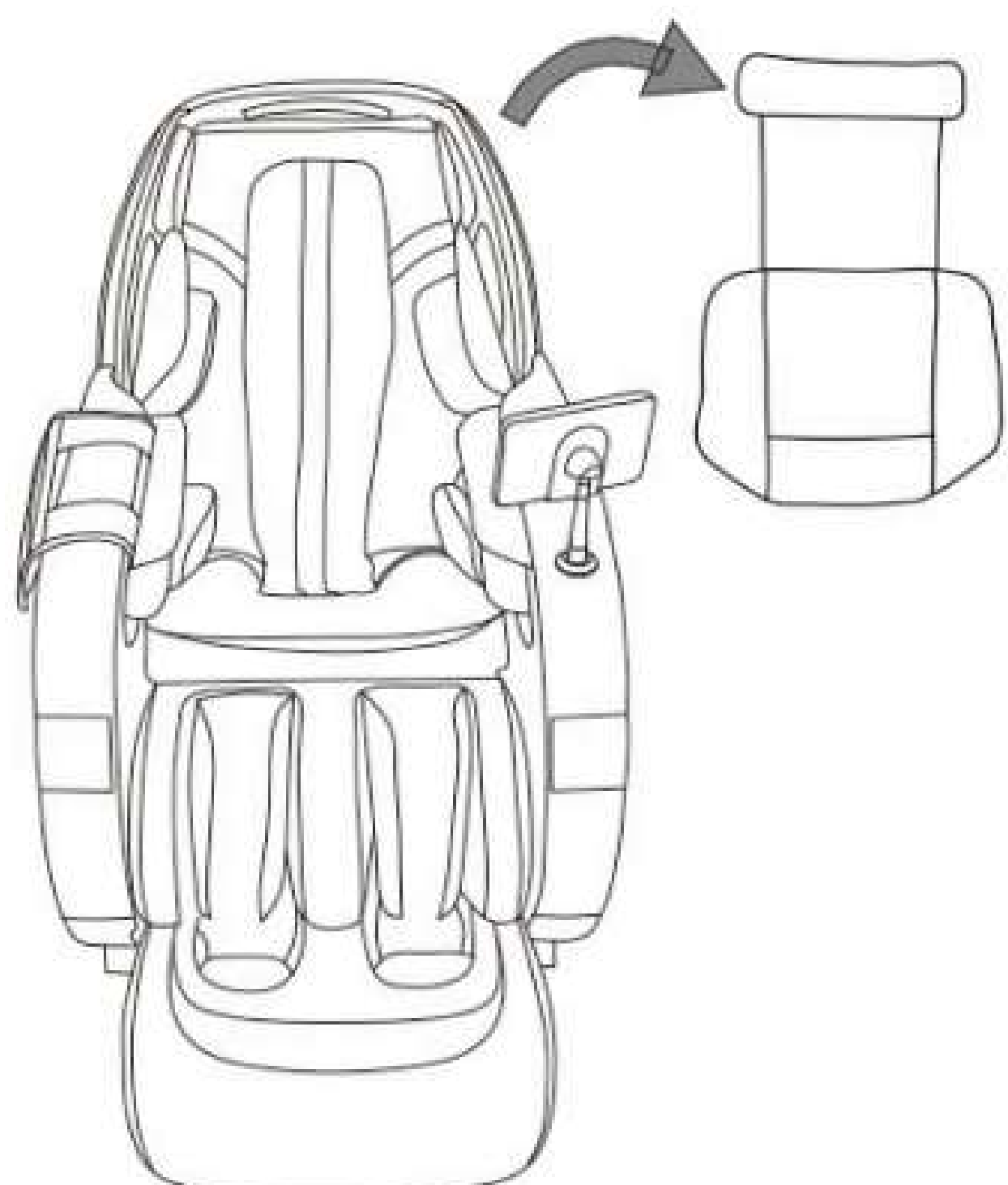

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЕРХНЕЕ ЛИЦО ПЛАНШЕТНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ




ПЛАНШЕТ

СЕНСОРНЫЙ ЖК-ЭКРАН



1. ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ КРЕСЛА В СЕТЬ ПЛАНШЕТ ВКЛЮЧИТСЯ ПО УМОЛЧАНИЮ И ОТОБРАЗИТ ИНТЕРФЕЙС ЗАГРУЗКИ. ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВОЙДИТЕ В ОСНОВНОЙ ИНТЕРФЕЙС И НАЖМИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ НА ПРАВОМ КОНЦЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИ ПЛАНШЕТА, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ДИСПЛЕЙ ПЛАНШЕТА.

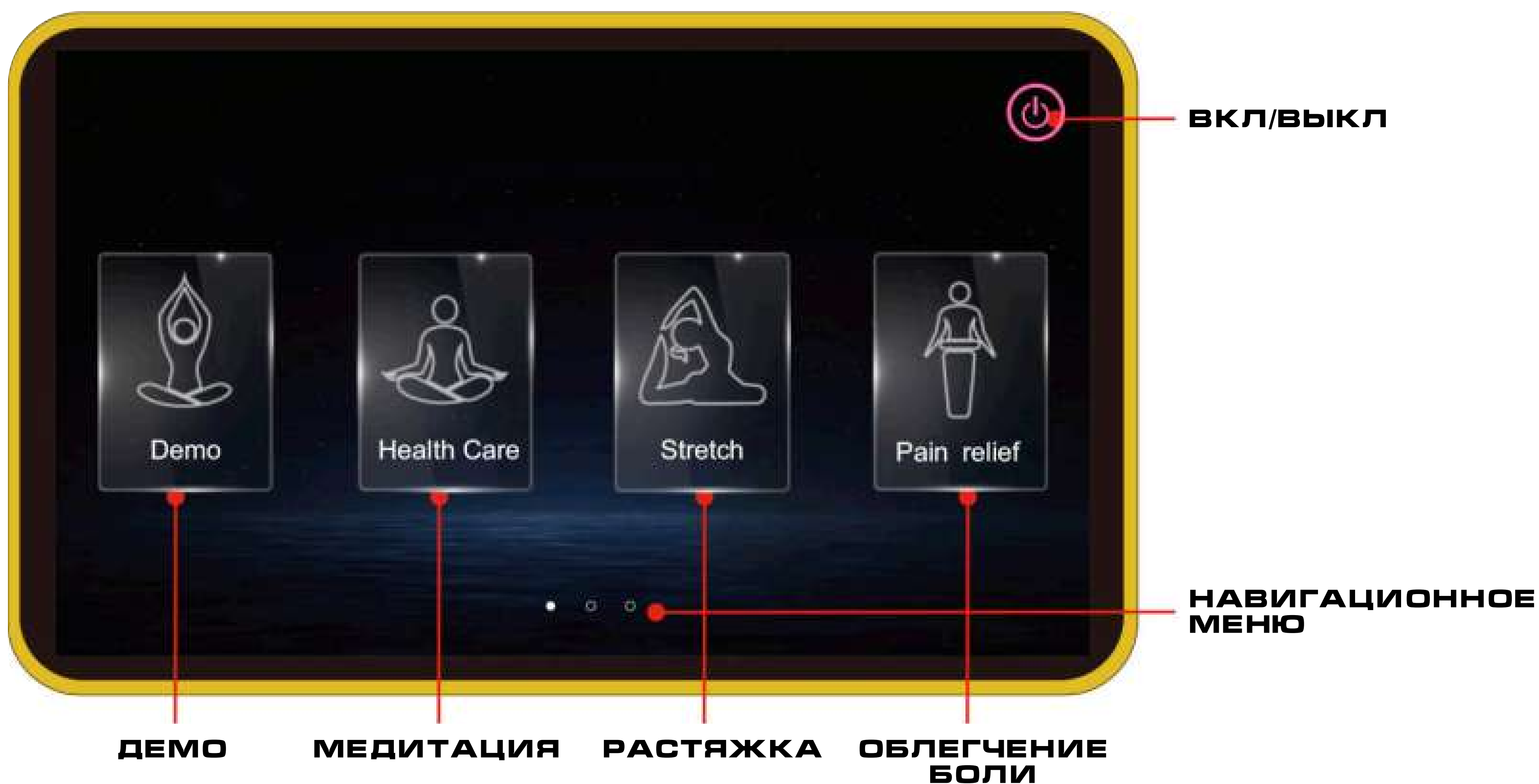

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



1. В СОСТОЯНИИ **ON**, НАЖМИТЕ НА ЭТОТ ЗНАЧОК, ЧТОБЫ ВОЙТИ В РЕЖИМ DEMO, ВРЕМЯ РАБОТЫ ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ ЭТОЙ АВТОПРОГРАММЫ СОСТАВЛЯЕТ 8 МИНУТ.




2. В СОСТОЯНИИ **ON**, НАЖМИТЕ НА ЭТОТ ЗНАЧОК, ЧТОБЫ ВОЙТИ В РЕЖИМ РАСТЯЖКИ, ВРЕМЯ РАБОТЫ ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ ЭТОЙ АВТОПРОГРАММЫ СОСТАВЛЯЕТ 20 МИНУТ.




3. В СОСТОЯНИИ **ON**, НАЖМИТЕ НА ЭТОТ ЗНАЧОК, ЧТОБЫ ВОЙТИ В РЕЖИМ ЗДОРОВЬЯ, ВРЕМЯ РАБОТЫ ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ ЭТОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ СОСТАВЛЯЕТ 20 МИНУТ.



4. В СОСТОЯНИИ **ON**, НАЖМИТЕ НА ЭТОТ ЗНАЧОК, ЧТОБЫ ВОЙТИ В РЕЖИМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ, МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ЭТОЙ АВТОПРОГРАММЫ - 20 МИНУТ.

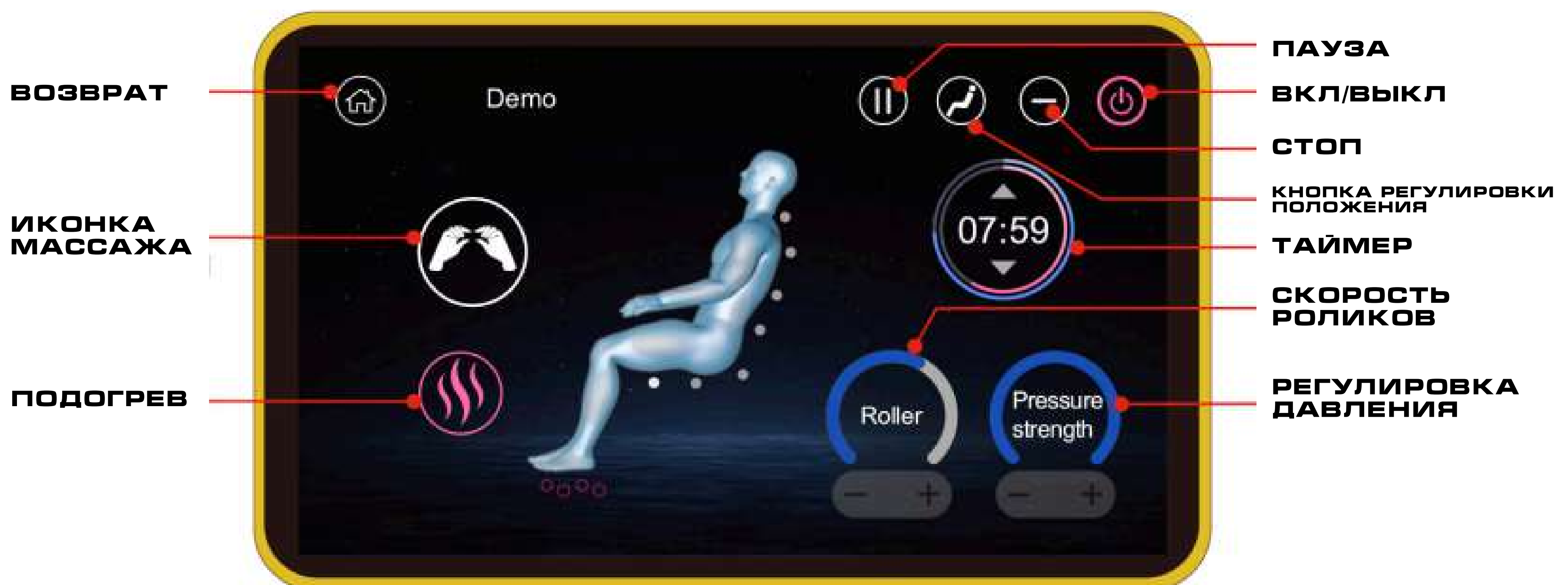

"**ВОЗВРАТ**" – НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ.

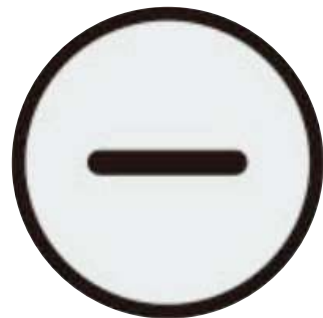

"**СТОП**" – НАЖМИТЕ НА ЭТОТ ЗНАЧОК, МАССАЖ ПРЕКРАТИТСЯ, И ДИСТАНЦИОННЫЙ ВИНТ ВЕРНЕТСЯ В ОСНОВНОЙ ИНТЕРФЕЙС.



НАЖМИТЕ КНОПКУ ПИТАНИЯ, ОН СТАНЕТ РОЗОВОГО ЦВЕТА, И ФУНКЦИЯ МАССАЖА МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА НОРМАЛЬНО.



НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПАУЗА", ФУНКЦИЯ МАССАЖА БУДЕТ ОСТАНОВЛЕНА, ЗАТЕМ ПЕРЕКЛЮЧИТЕСЬ НА ЭТУ КНОПКУ НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ ЕЩЕ РАЗ, ФУНКЦИЯ МАССАЖА БУДЕТ ЗАПУЩЕНА СНОВА.



ПОСТУКИВАНИЕ



РАСТИРАНИЕ



НАЖАТИЯ



ШИАЦУ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



"ПРОГРЕВ" ПО УМОЛЧАНИЮ ВЫКЛЮЧЕН. НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ "ПРОГРЕВ".

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ РОЛИКОВ, ИМЕЕТ ДВА УРОВНЯ - БЫСТРЫЙ И МЕДЛЕННЫЙ.




КНОПКУ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ, НАЖМИТЕ И ВОЙДИТЕ В ИНТЕРФЕЙС РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ.

ВРЕМЯ МАССАЖА И КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ, ПОКАЗЫВАЕТ ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ФУНКЦИИ МАССАЖА, КЛАВИША СО СТРЕЛКОЙ ВВЕРХ И ВНИЗ МОЖЕТ ДОБАВИТЬ ИЛИ УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ.



РЕГУЛИРОВКА СИЛЫ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО ДНА С 4 УРОВНЯМИ.

ПОЛОЖЕНИЕ МАССАЖА ТЕЛА, (ЭКРАН МОЖЕТ ПОКАЗЫВАТЬ ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ, РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ, СОСТОЯНИЕ ПОДОГРЕВА)

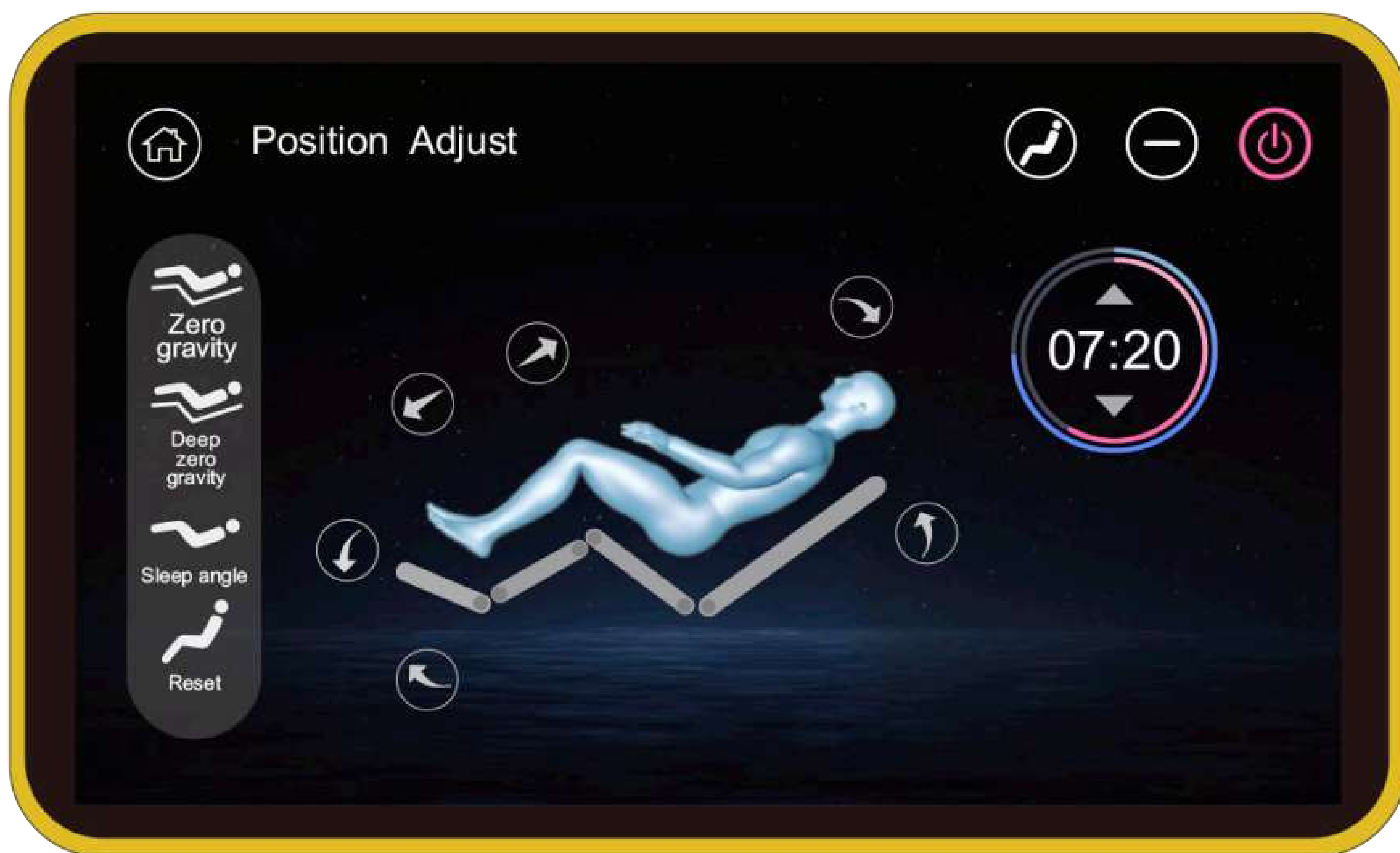

ЗНАЧОК НУЛЕВОЙ ГРАВИТАЦИИ, НАЖМИТЕ НА НЕГО, ЧТОБЫ ОН ЗАГОРЕЛСЯ, ЧТОБЫ ВОЙТИ В ФУНКЦИЮ НУЛЕВОЙ ГРАВИТАЦИИ, СПИНА ЛЯЖЕТ, А ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ ПОДНИМУТСЯ ВВЕРХ.



ЗНАЧОК УГЛА, НАЖМИТЕ НА НЕГО, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ В УГОЛ СНА, СПИНКА ЛОЖИТСЯ, А ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ ПОДНИМАЮТСЯ ВВЕРХ.



ЗНАЧОК УГЛА, НАЖМИТЕ НА НЕГО, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ В УГОЛ СНА, СПИНКА ЛОЖИТСЯ, А ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ ПОДНИМАЮТСЯ ВВЕРХ.



ЗНАЧОК ГЛУБОКОЙ НУЛЕВОЙ ГРАВИТАЦИИ, НАЖМИТЕ НА НЕГО, ЧТОБЫ ЗАГОРЕЛСЯ СВЕТ, ЧТОБЫ ВОЙТИ В УГОЛ ГЛУБОКОЙ НУЛЕВОЙ ГРАВИТАЦИИ, СПИНКА ЛОЖИТСЯ, А ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ ПОДНИМАЮТСЯ ВВЕРХ.


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
НОГ ВВЕРХ

ПОЛОЖЕНИЕ
НОГ ВНИЗ

ПОДСТАВКА
ДЛЯ НОГ ВНИЗ

ПОДСТАВКА
ДЛЯ НОГ ВВЕРХ

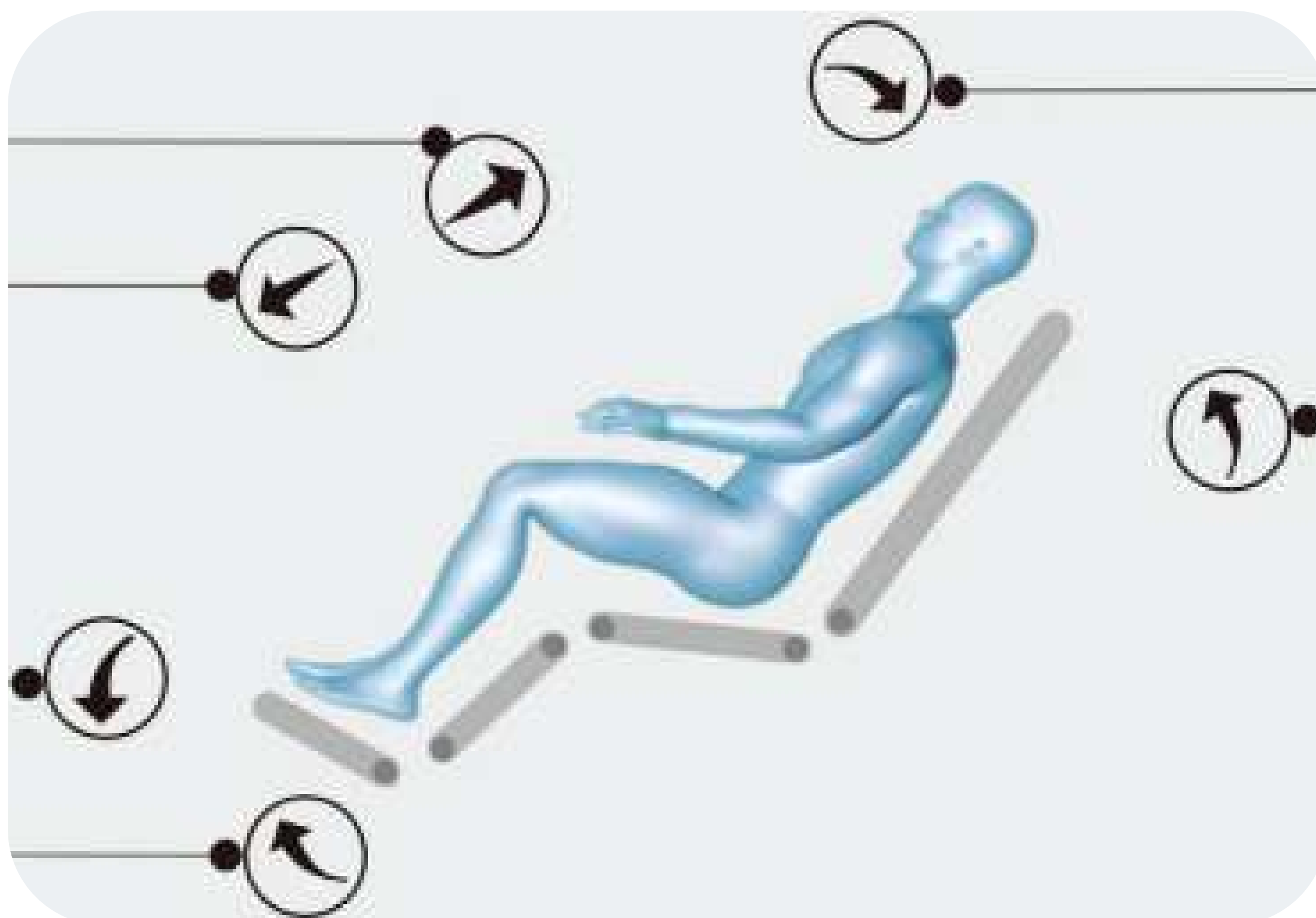

СПИНКА ВНИЗ,
А ПОДСТАВКИ
ДЛЯ НОГ ВВЕРХ

СПИНКА
ПОДНИМАЕТСЯ
ВВЕРХ, А
ПОДСТАВКИ
ДЛЯ НОГ
ОПУСКАЮТСЯ
ВНИЗ



ВКЛ/ВЫКЛ

НАВИГАЦИ-
ОННОЕ МЕНЮ

РУЛАКС

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
МАССАЖ


РУЧНОЙ
МАССАЖ

ДРУГОЕ




ИНТЕРФЕЙС (РЕЛАКС)

В СОСТОЯНИИ ON, НАЖМИТЕ НА НЕГО, ЗНАЧОК ЗАГОРИТСЯ, ВОЙДИТЕ В РЕЖИМ РАССЛАБЛЯЮЩЕГО МАССАЖА, ВРЕМЯ РАБОТЫ ПО УМОЛЧАНИЮ СОСТАВЛЯЕТ 20 МИНУТ.

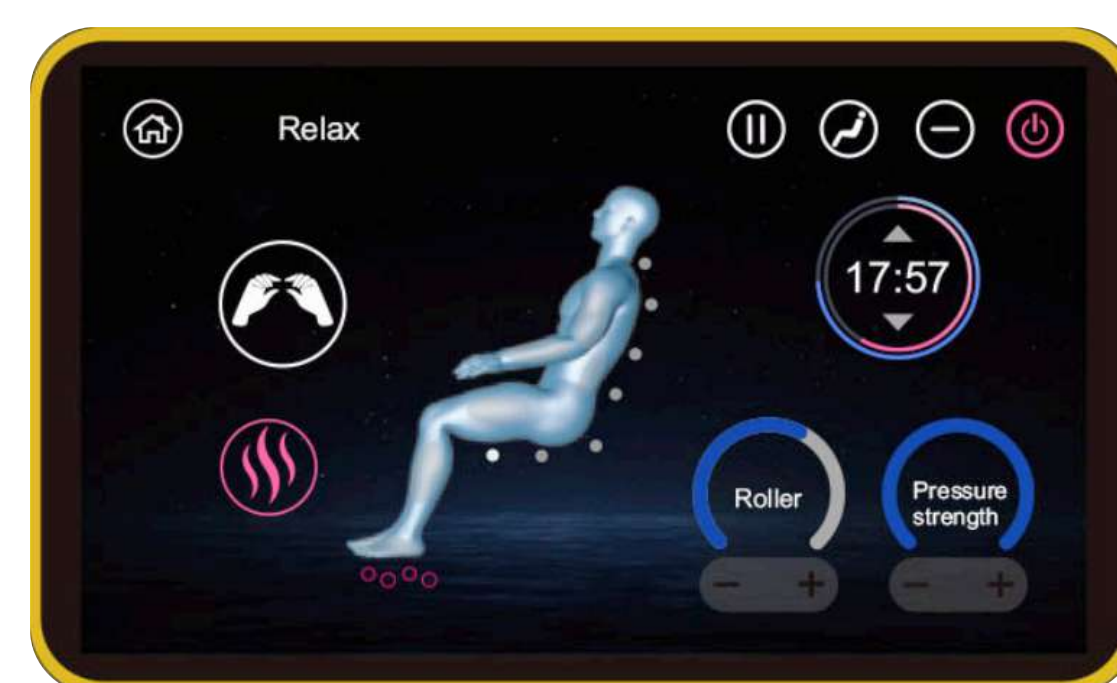

ИНТЕРФЕЙС (СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАССАЖ)

В СОСТОЯНИИ ON, НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ЧТОБЫ ВОЙТИ В РЕЖИМ SPECIAL MASSAGE, 7 СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОПРОГРАММ НА ВАШ ВЫБОР. (ПОДРОБНЕЕ СМ. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС).

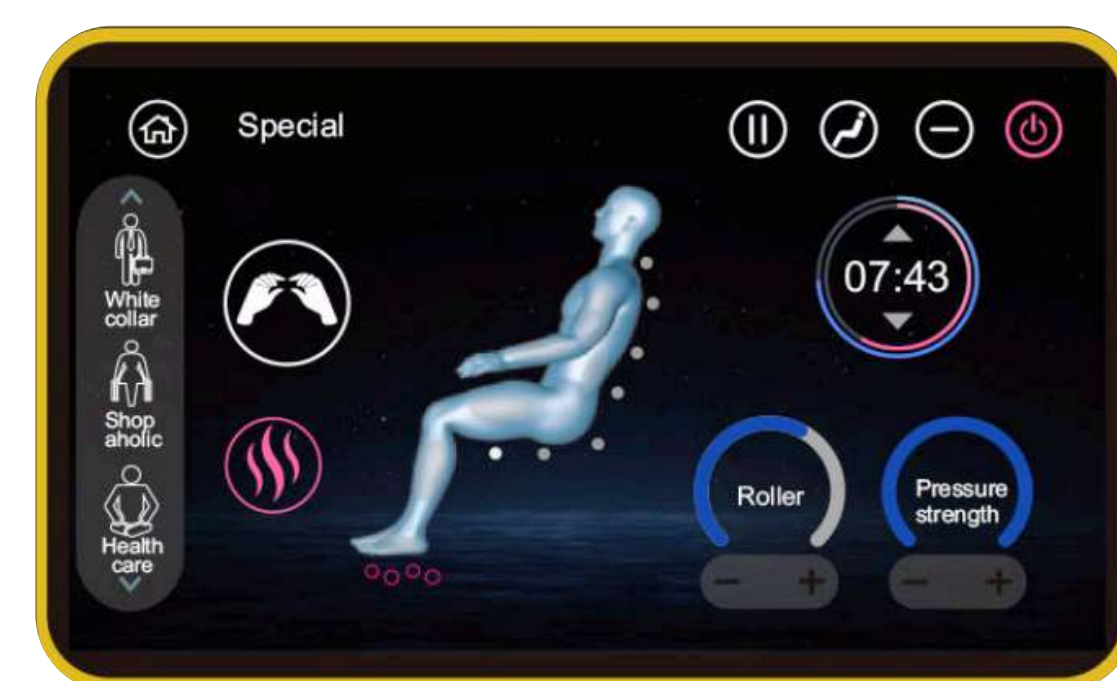

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





ИНТЕРФЕЙС (РУЧНОЙ)

В СОСТОЯНИИ ON, НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ ДЛЯ ВХОДА В РУЧНОЙ ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ. (ПОДРОБНЕЕ СМ. ВВЕДЕНИЕ В РУЧНОЙ ИНТЕРФЕЙС).



ИНТЕРФЕЙС (РУЧНОЙ)

В СОСТОЯНИИ ON, НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ ДЛЯ ВХОДА В ИНТЕРФЕЙС ПЕРСОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА. (ПОДРОБНЕЕ СМ. ВВЕДЕНИЕ В ИНТЕРФЕЙС ПЕРСОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА).

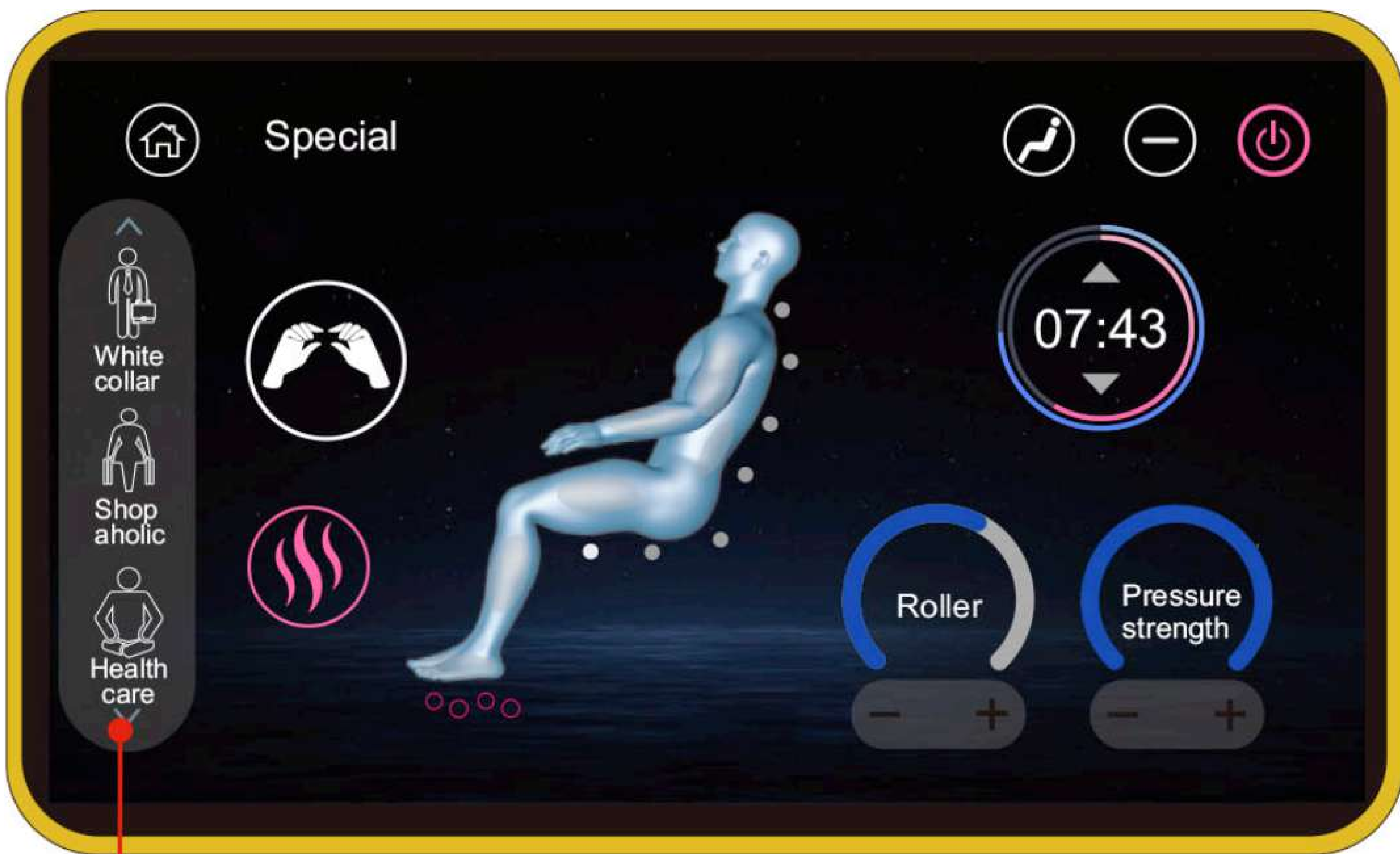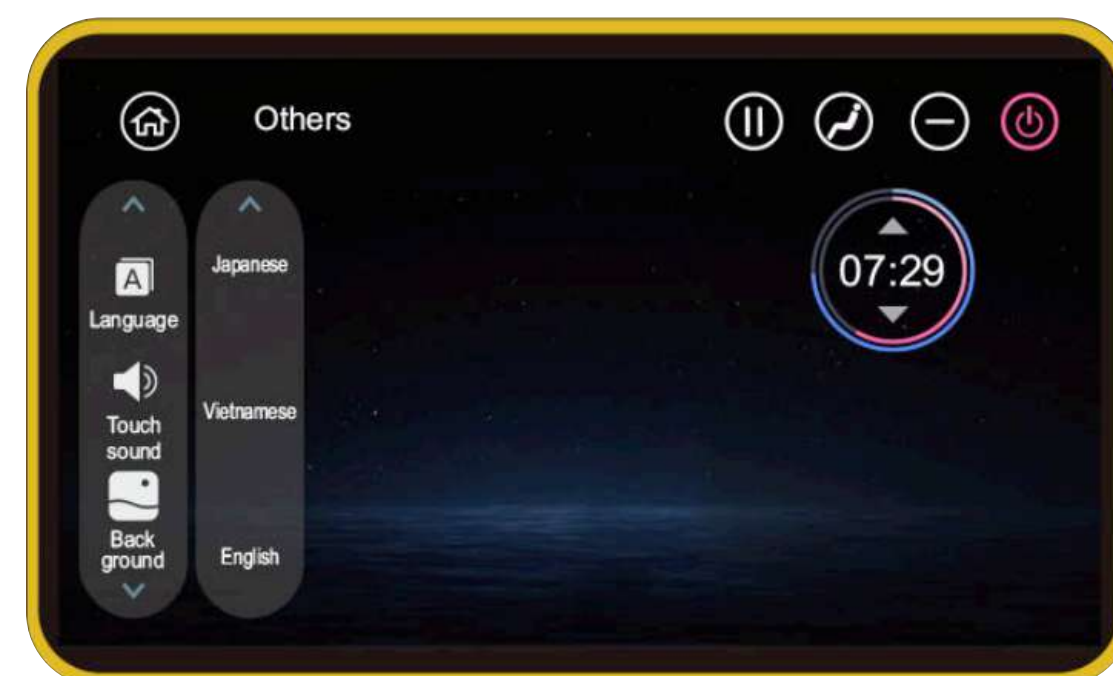

ЗОНА ДЕМОНСТРАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО МАССАЖА




В СОСТОЯНИИ ON, ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА ЭТУ КНОПКУ, ЗНАЧОК ЗАГОРАЕТСЯ, "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК" ВКЛЮЧЕН.

В СОСТОЯНИИ ON, ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА ЭТУ КНОПКУ ЗАГОРАЕТСЯ ИКОНКА, "ШОПОГОЛИК" СЧИТАЕТСЯ ВКЛЮЧЕННЫМ.

В СОСТОЯНИИ ON, НАЖМИТЕ НА НЕГО, ИКОНКА ЗАГОРИТСЯ, "ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ" БУДЕТ ВКЛЮЧЕНА.


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

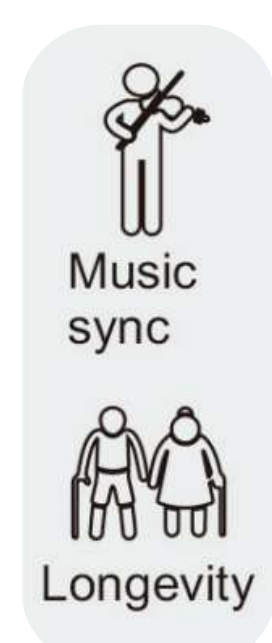

В СОСТОЯНИИ ON, ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА ЭТУ КНОПКУ, ЗНАЧОК ЗАГОРАЕТСЯ, "MUSIC SYNS" ВКЛЮЧАЕТСЯ.



В СОСТОЯНИИ ON, ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА ЭТУ КНОПКУ ЗНАЧОК ЗАГОРАЕТСЯ, "ДОЛГОЛЕТИЕ" ВКЛЮЧЕНО.

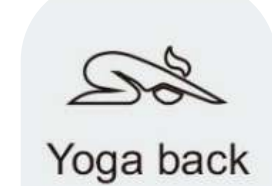

В СОСТОЯНИИ ON, ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА ЭТУ КНОПКУ, ЗНАЧОК ЗАГОРАЕТСЯ, "YOGA BACK" ВКЛЮЧАЕТСЯ.




В СОСТОЯНИИ ON, ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА ЭТУ КНОПКУ, ИКОНКА ЗАГОРАЕТСЯ, "СПОРТСМЕН" ВКЛЮЧЕН.



ЗОНА ОТОБРАЖЕНИЯ РУЧНОГО МАССАЖА

ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ РЕЖИМА

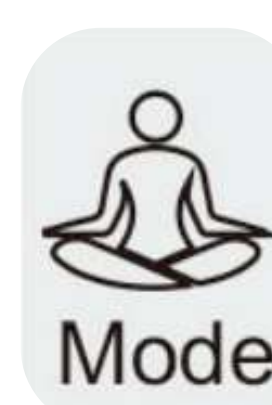

В СОСТОЯНИИ ON, ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА ЭТУ КНОПКУ ЗАГОРАЕТСЯ ЗНАЧОК, ПОЯВЛЯЕТСЯ МЕНЮ, В КОТОРОМ ОТОБРАЖАЮТСЯ ПОСТУКИВАНИЕ, ПОСТУКИВАНИЕ, РАЗМИНАНИЕ, ШИАЦУ, KNEAD&TAP ПЯТЬ ВИДОВ МАССАЖНЫХ ТЕХНИК.





ЗОНА ОТОБРАЖЕНИЯ
РУЧНОГО МАССАЖА

ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ
РЕЖИМА



ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, И ПОЯВИТСЯ МЕНЮ ЧАСТЕЙ: ВСЕ ТЕЛО, ПЛЕЧИ, СПИНА, ТАЛИЯ, СИДЕНЬЕ И ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА; НАЖМИТЕ КНОПКУ "ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА", ПОЯВИТСЯ КНОПКА ВВЕРХ И ВНИЗ, ВЫ МОЖЕТЕ НАСТРОИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ МАССАЖА ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ. НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПОЛОЖЕНИЕ" ЕЩЕ РАЗ, ПЛАНШЕТ СНОВА ВЕРНЕТСЯ К ЭТОМУ ИНТЕРФЕЙСУ.

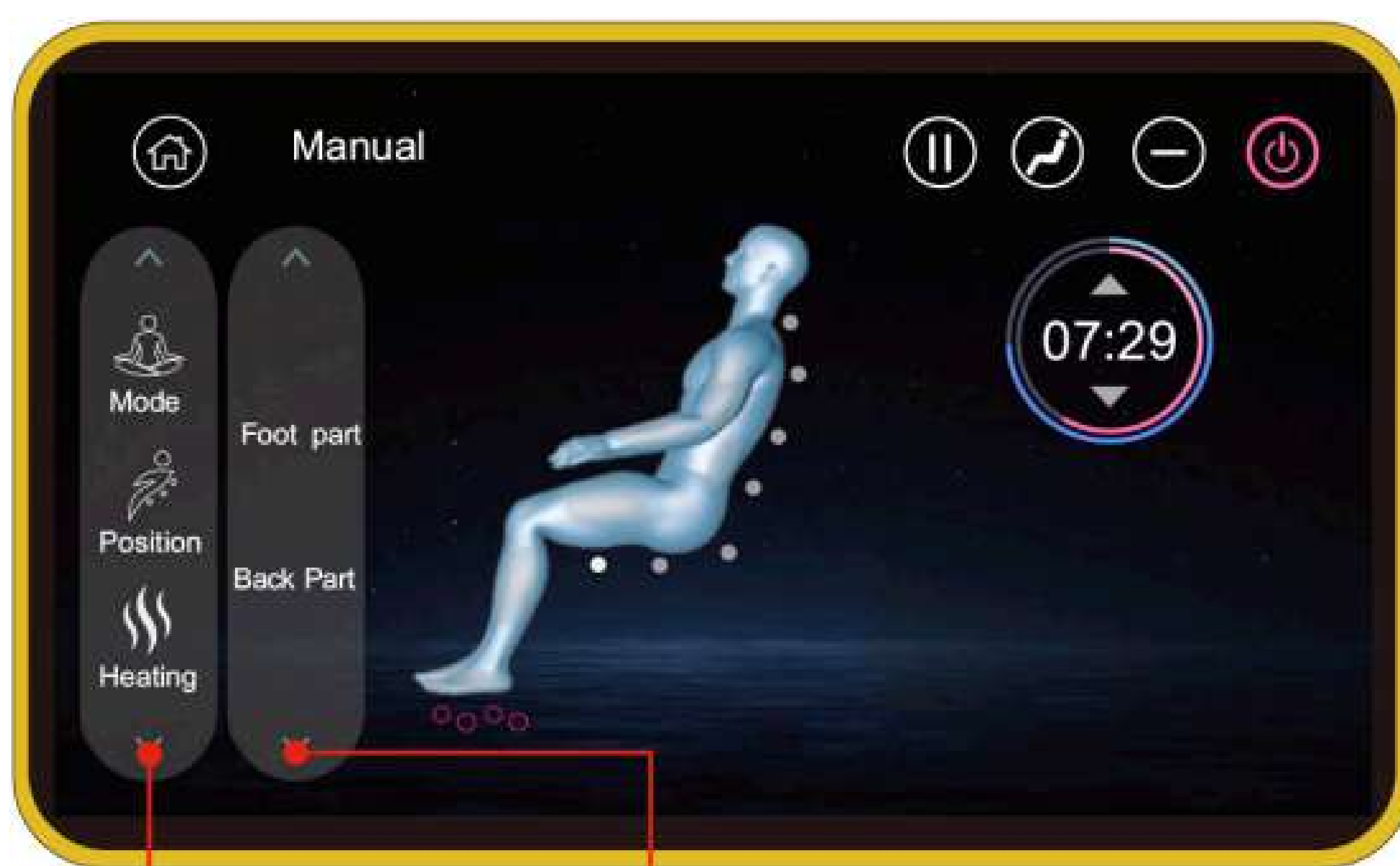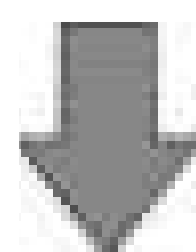


ЗОНА ОТОБРАЖЕНИЯ
РУЧНОГО МАССАЖА

ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ
РЕЖИМА



ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НАЖМИТЕ НА ЭТУ КНОПКУ, И ПОЯВИТСЯ МЕНЮ, ПОКАЗЫВАЮЩЕЕ "НОЖНЫЕ ЧАСТИ" И "ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ". НАЖМИТЕ НА КНОПКУ КАЖДОЙ ЧАСТИ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ ПОДОГРЕВА.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

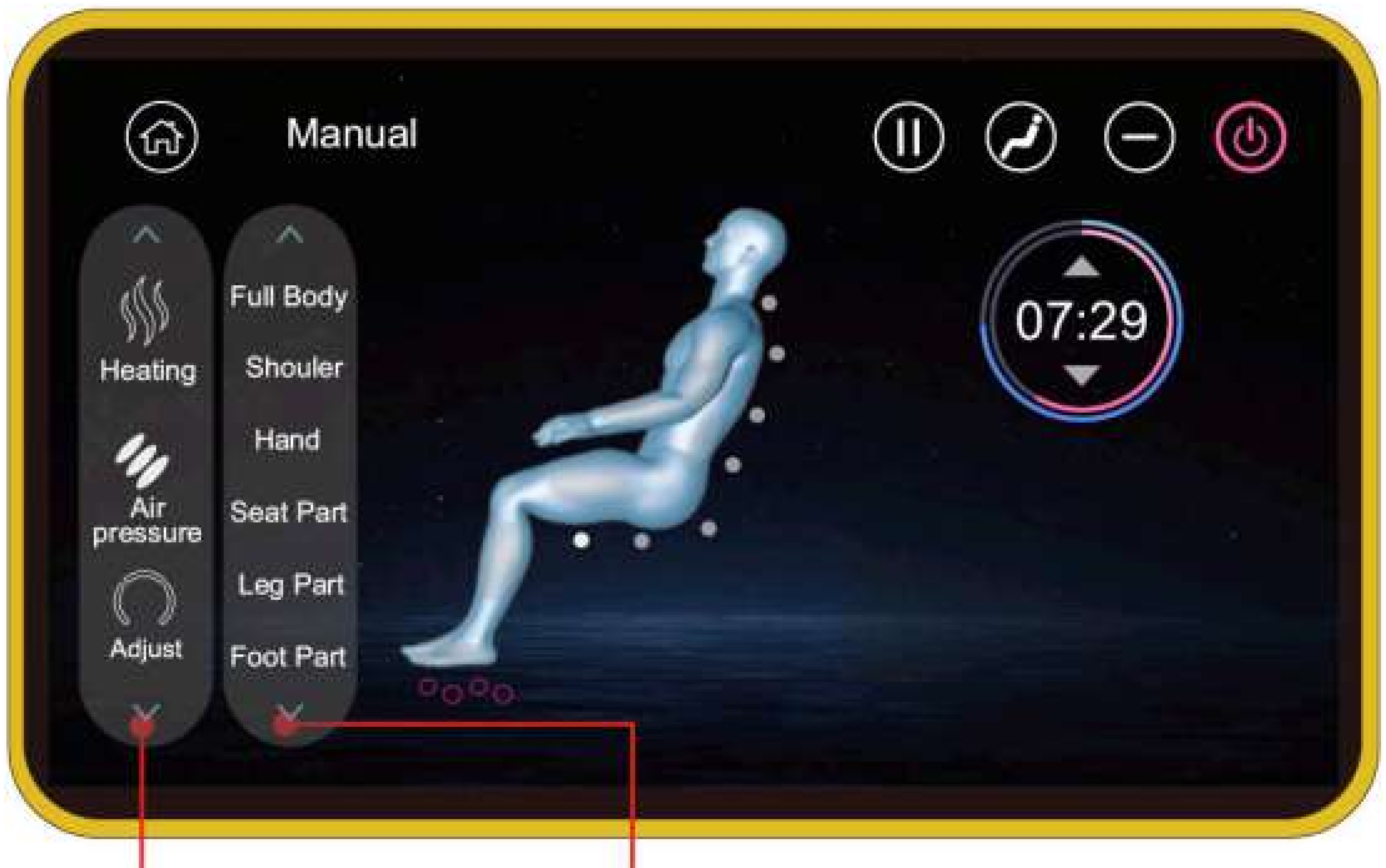


ЗОНА ОТОБРАЖЕНИЯ
РУЧНОГО МАССАЖА

ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ
РЕЖИМА



ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ, НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ И ПОЯВИТСЯ МЕНЮ, В КОТОРОМ ПОКАЗАНО ПОЛНОЕ ТЕЛО, ПЛЕЧО, РУКА, ЧАСТЬ СИДЕНЬЯ, ЧАСТЬ НОГИ, КНОПКА ЧАСТИ НОГИ, НАЖМИТЕ КНОПКУ КАЖДОЙ ЧАСТИ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ НАГРЕВА.

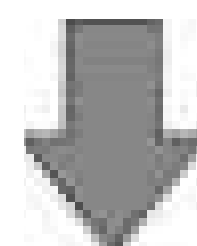


ЗОНА ОТОБРАЖЕНИЯ
РУЧНОГО МАССАЖА

4D
РЕГУЛИРОВКА

ОБЛАСТЬ
ОТОБРАЖЕНИЯ
РЕГУЛИРОВКИ

РЕГУЛИРОВКА
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

РЕГУЛИРОВКА
СКОРОСТИ
ВРАЩЕНИЯ
РОЛИКОВ

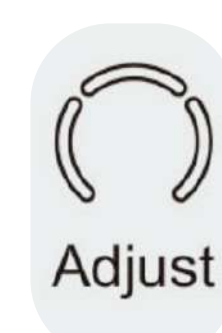

В СОСТОЯНИИ ON, НАЖМИТЕ НА ЗНАЧОК ЗАГОРАЕТСЯ, ПАЛЕЦ ЖЕСТКИЙ СЛАЙД СЛЕВА НАПРАВО, ЧТОБЫ НАСТРОИТЬ "СКОРОСТЬ" "4D ШИРИНА", ВРЕМЯ, 4D, ДАВЛЕНИЕ СИЛА, СКОРОСТЬ РОЛИКА. 4D ИМЕЕТ 4 УРОВНЯ, ШИРИНА 3 УРОВНЯ, СКОРОСТЬ РОЛИКА 2 УРОВНЯ. НАЖМИТЕ "+", "-", ЧТОБЫ НАСТРОИТЬ.




ЗОНА ОТОБРАЖЕНИЯ
РУЧНОГО МАССАЖА

ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ
РЕЖИМА




Language

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, НА ЭКРАНЕ ПОЯВЯТСЯ ТРИ ЯЗЫКА: ЯПОНСКИЙ, ВЬЕТНАМСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ.

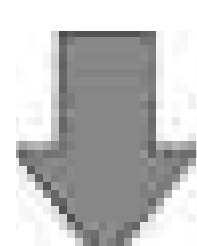

ЗОНА ОТОБРАЖЕНИЯ
РУЧНОГО МАССАЖА


ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ
РЕЖИМА

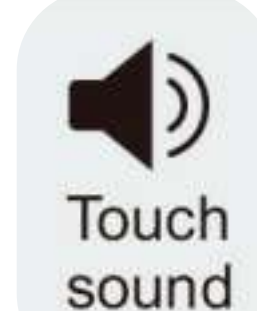

Touch
sound




В СОСТОЯНИИ ON, НАЖМИТЕ НА ЗНАЧОК ЗАГОРАЕТСЯ, ПАЛЕЦ ЖЕСТКИЙ СЛАЙД СЛЕВА НАПРАВО, ЧТОБЫ НАСТРОИТЬ "СКОРОСТЬ" "4D ШИРИНА", ВРЕМЯ, 4D, ДАВЛЕНИЕ СИЛА, СКОРОСТЬ РОЛИКА. 4D ИМЕЕТ 4 УРОВНЯ, ШИРИНА 3 УРОВНЯ, СКОРОСТЬ РОЛИКА 2 УРОВНЯ. НАЖМИТЕ "+", "-", ЧТОБЫ НАСТРОИТЬ.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

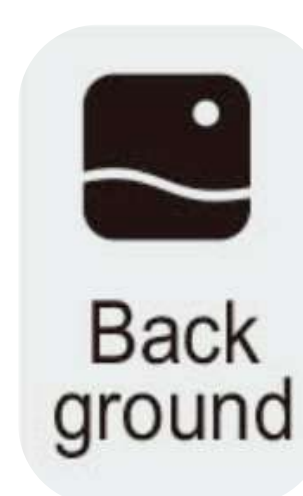

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ, НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ОНА ПОКАЖЕТ ФОНОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС, ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ФОН СООТВЕТСТВЕННО.


ЗОНА ОТОБРАЖЕНИЯ РУЧНОГО МАССАЖА

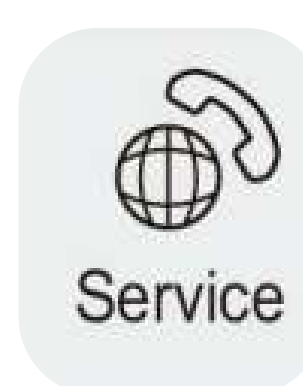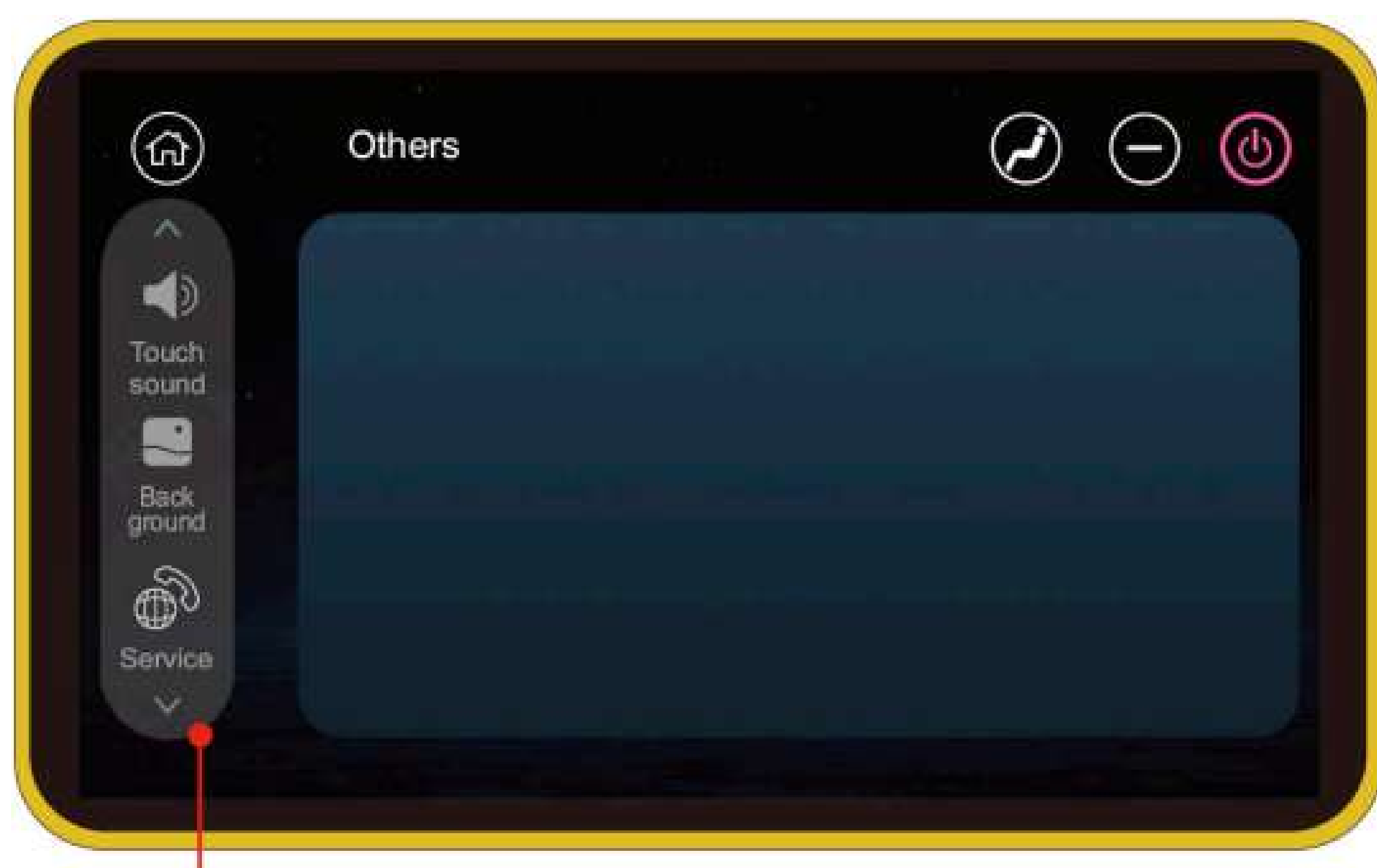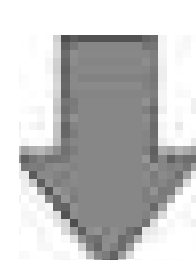

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ, НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ, ОНА ПОКАЖЕТ ФОНОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС, ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ФОН СООТВЕТСТВЕННО.

ЗОНА ОТОБРАЖЕНИЯ РУЧНОГО МАССАЖА


СКАНИРОВАНИЕ ТЕЛА

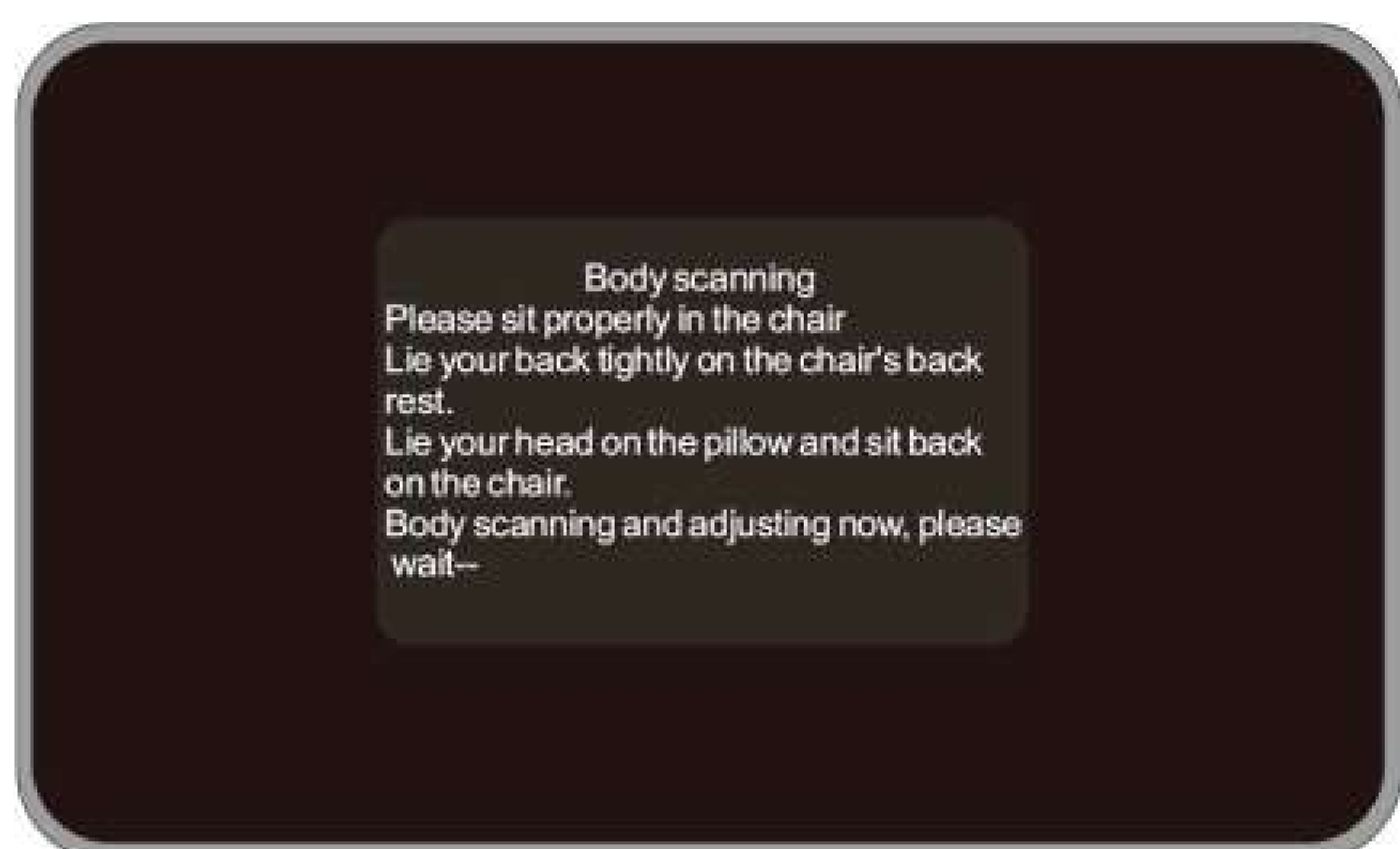

ПОСЛЕ СКАНИРОВАНИЯ ТЕЛА ОТОБРАЗИТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ИНТЕРФЕЙС





VI. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

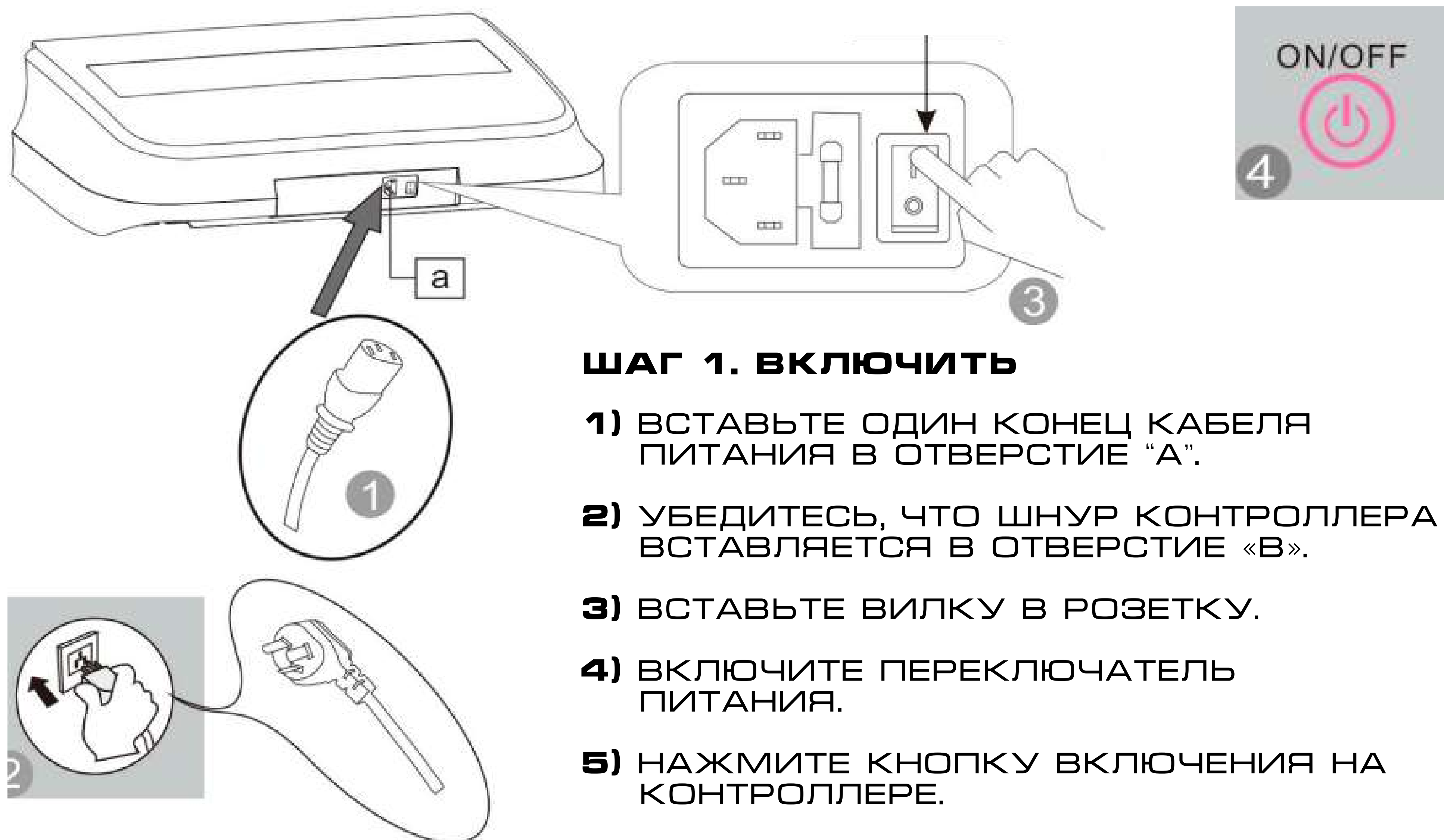

ШАГ 2. МАССАЖ

- 1) РАБОТАЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА.
- 2) КОГДА МАССАЖ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ, ПРИ ЭТОМ НА КОНТРОЛЛЕРЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ «ВЫКЛЮЧЕНИЕ», КОНТРОЛЛЕР ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 3-5 СЕКУНД.

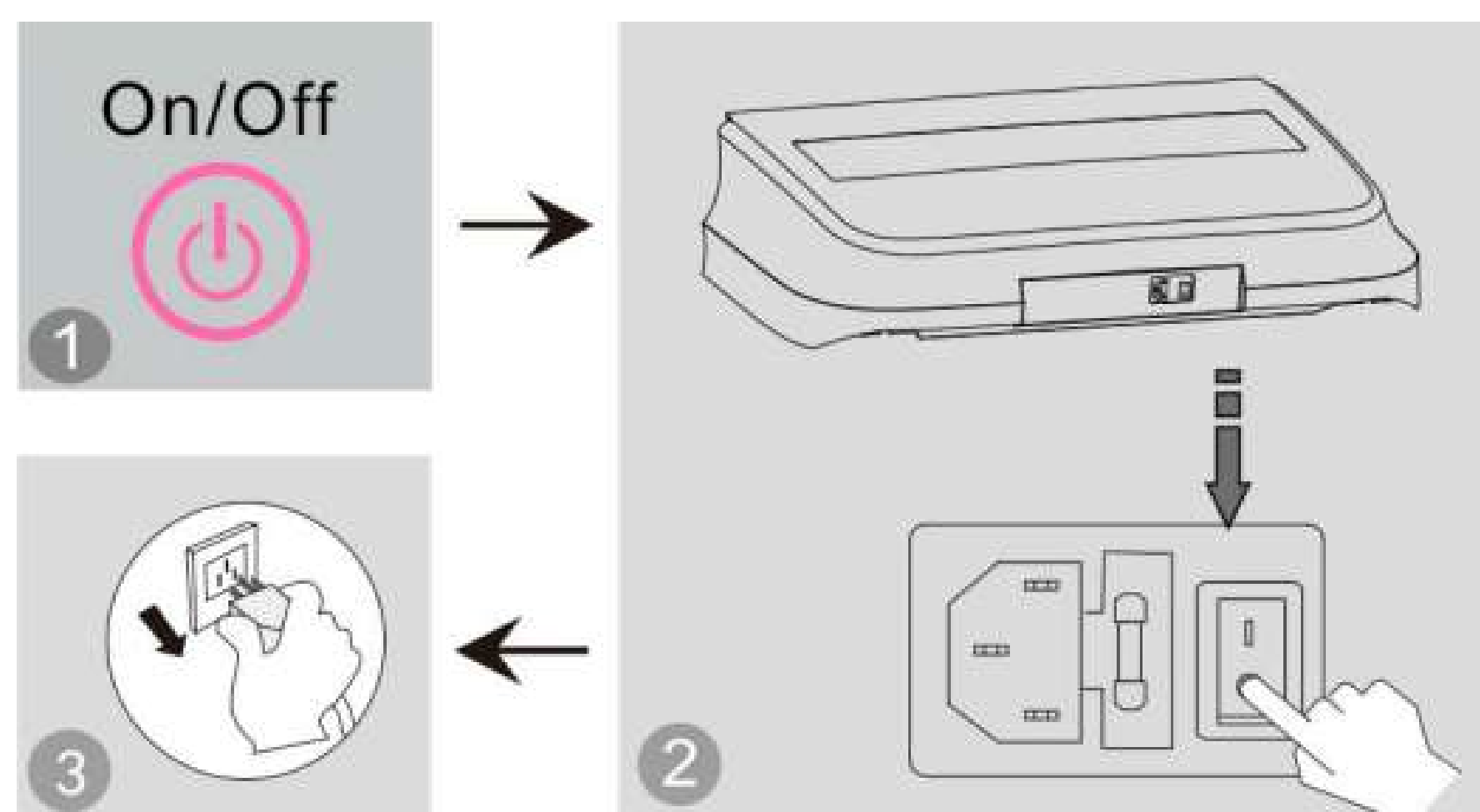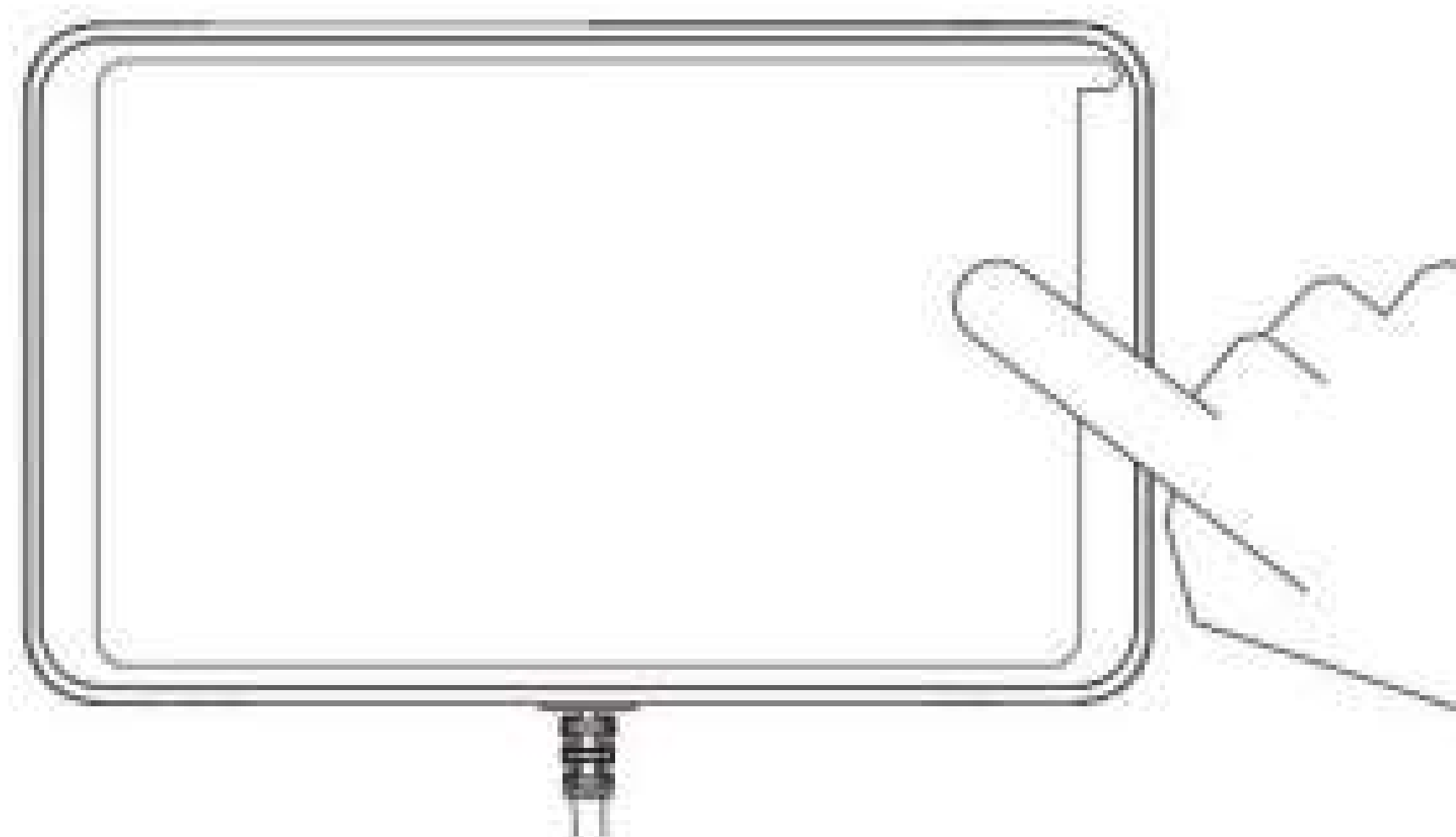

ШАГ 3. ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ

- 2) ВЫКЛЮЧИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНКИ КРЕСЛА ПОСЛЕ ТОГО, КАК РОЛИКИ ОСТАНУТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ХРАНЕНИЯ.

- 1) КОГДА КРЕСЛО ВКЛЮЧЕНО, НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ, ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО, И ОНО АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕЗАПУСТИТСЯ.

- 3) ВЫЙДИТЕ ВИЛКУ ШНУРА ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- 1) ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДТЯНИТЕ ПОДУШКУ, СПИНКУ И Т. Д., ЧТОБЫ МАТЕРИАЛ НЕ ПОВРЕДИЛСЯ, ЕСЛИ ЕСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОТКЛЮЧИТЕ КРЕСЛО И ПРОВЕДИТЕ РЕМОНТ.
- 2) ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО К ПРАВИЛЬНОЙ РОЗЕТКЕ.

ВНИМАНИЕ:



- 1) ПЕРЕД ТЕМ КАК СЕСТЬ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МЕЖДУ ПОДЛОКОТНИКОМ, СПИНКОЙ И КРЕСЛА НЕТ ЗАЩЕМЛЕНИЙ.
- 2) ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КРЕСЛО НАХОДИТСЯ В ИСХОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
- 3) НЕ СТОЙТЕ НА НЕМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ:

- ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ВВЕРХ И СПИНКА ВНИЗ (НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ НА КОНТРОЛЛЕРЕ, СПИНКА ОПУСКАЕТСЯ, А УПОР ДЛЯ НОГ ПОДНИМАЕТСЯ. ОСОЗНАЙТЕ, ЧТО ЭТА КНОПКА, СПИНКА И УПОР ДЛЯ НОГ ПЕРЕСТАЮТ ДВИГАТЬСЯ, УГОЛ ЗАФИКСИРОВАН В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ.)

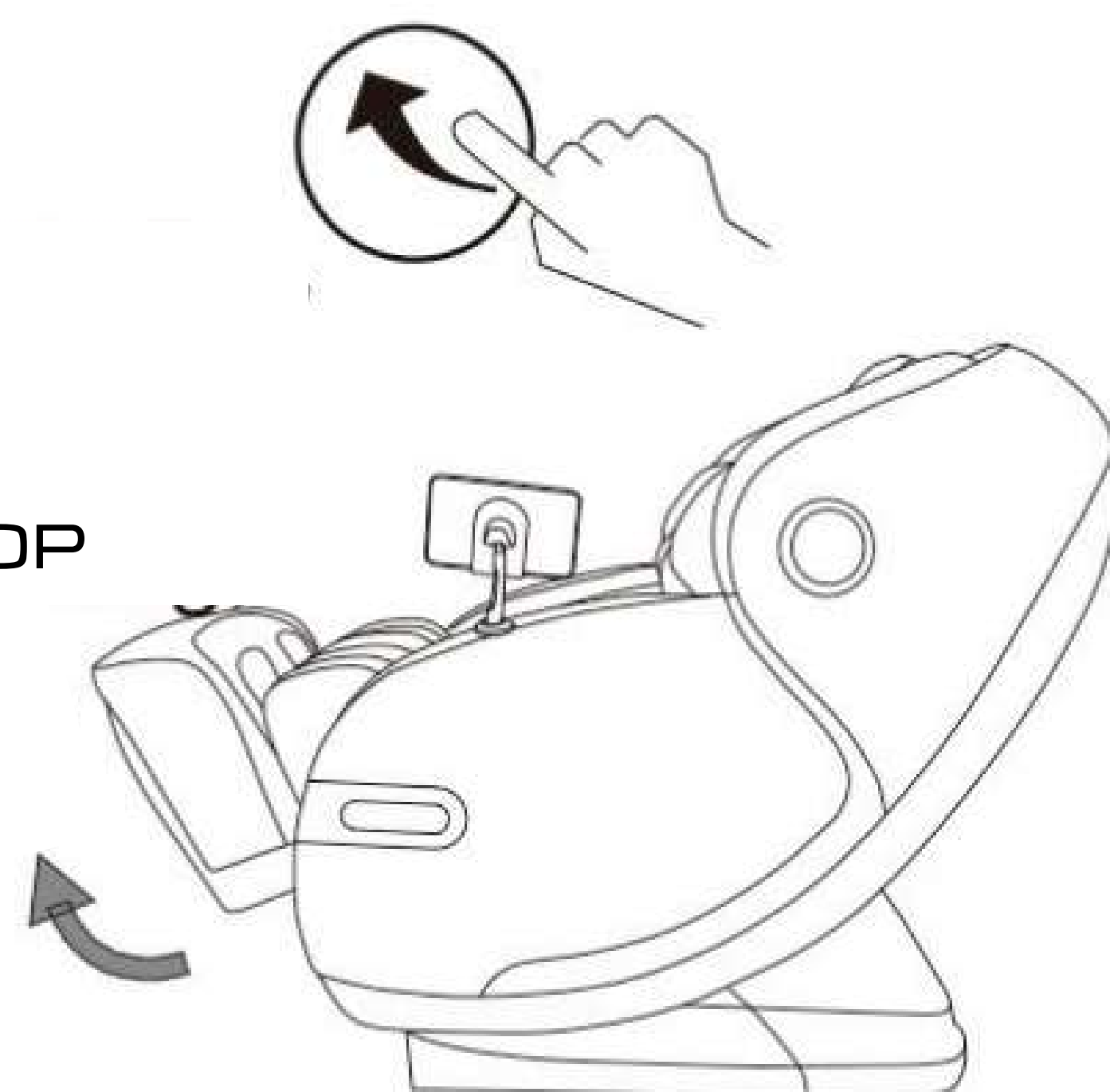


- ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ВНИЗ И СПИНКА ВНИЗ (НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ НА КОНТРОЛЛЕРЕ, СПИНКА ПОДНИМЕТСЯ, А УПОР ДЛЯ НОГ ОПУСТИТСЯ. ОСОЗНАЙТЕ, ЧТО ЭТА КНОПКА, СПИНКА И УПОР ДЛЯ НОГ ПЕРЕСТАЮТ ДВИГАТЬСЯ, УГОЛ ЗАФИКСИРОВАН В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ.)

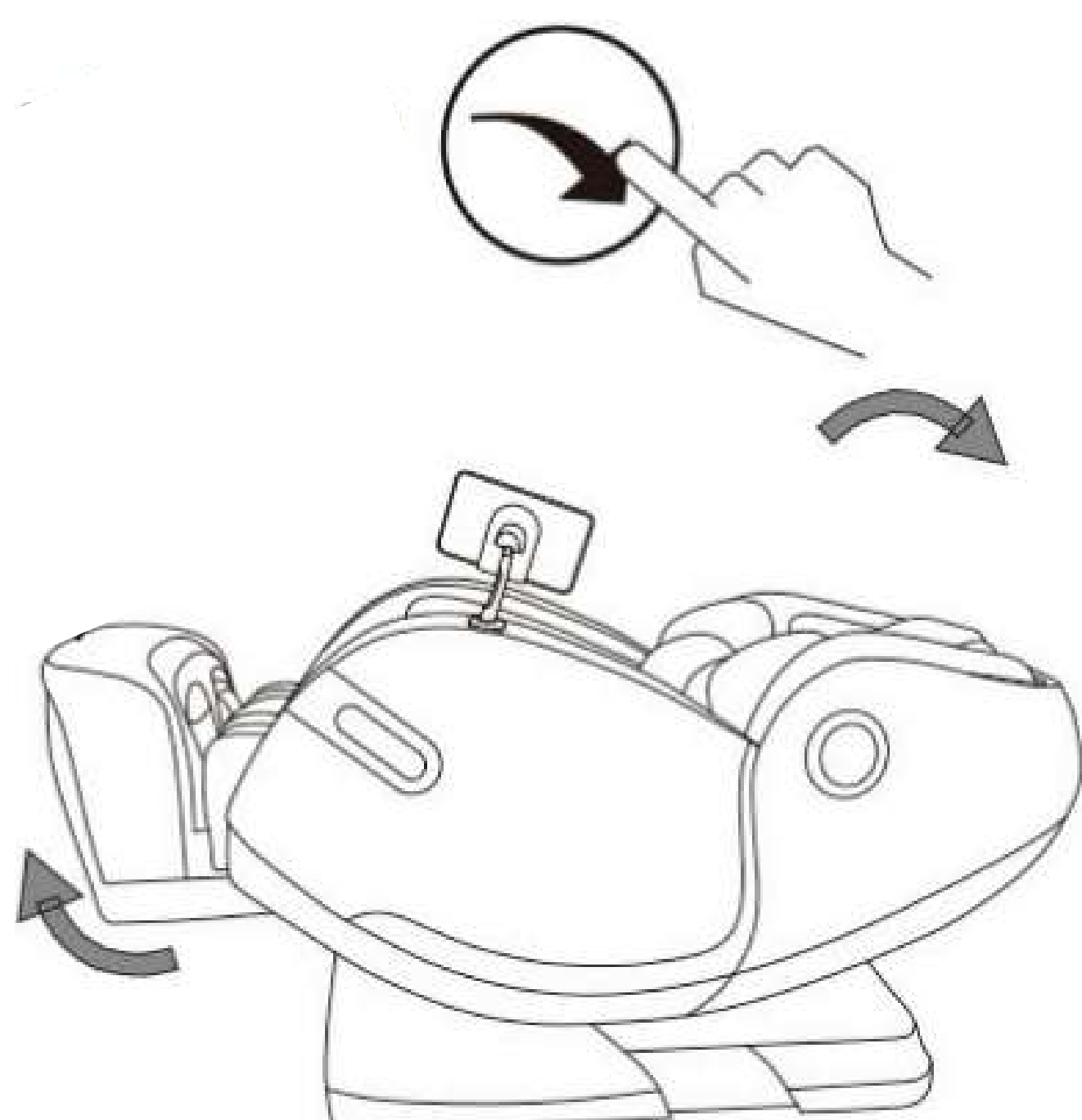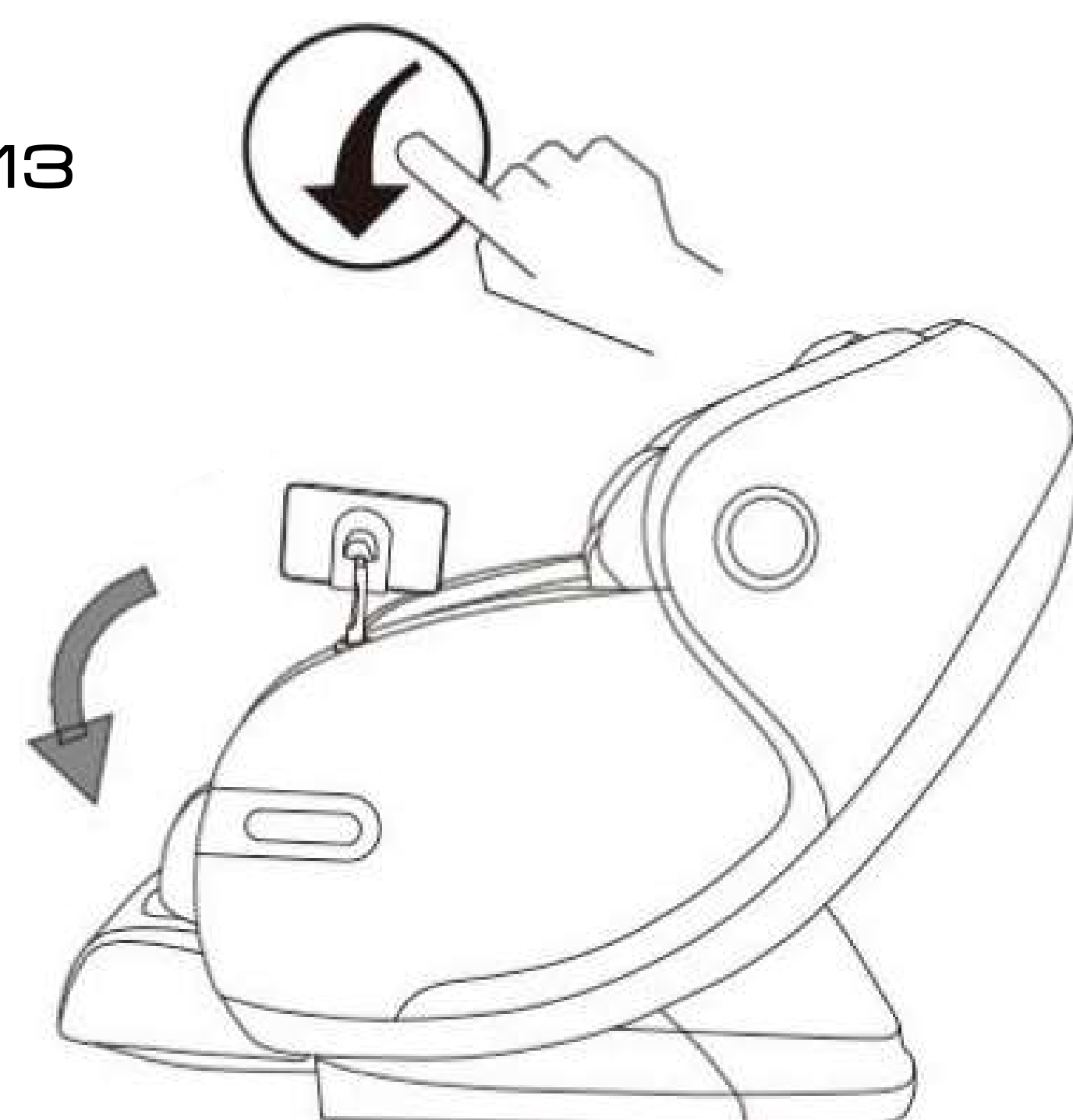

- ОПОРА ДЛЯ НОГ ВНИЗ (НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ НА ПОДСТАВКЕ ДЛЯ НОГ КОНТРОЛЛЕРА. ОТПУСТИТЕ КНОПКУ УПОРА ДЛЯ НОГ, ОСТАНОВИТЕ ДВИЖЕНИЕ, УГОЛ ЗАФИКСИРОВАН В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

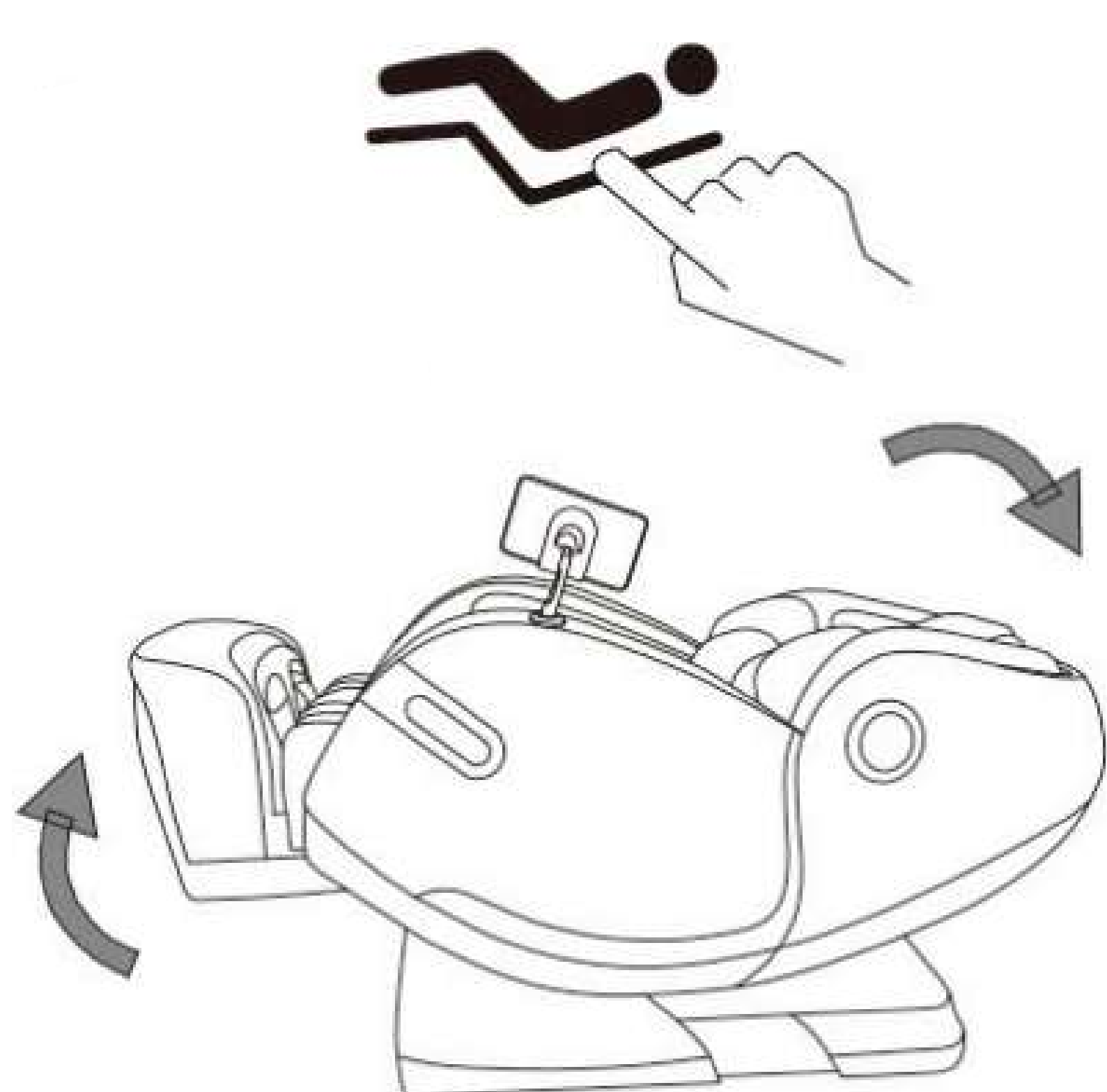


- ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ВНИЗ И СПИНКА ВНИЗ (НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ НА КОНТРОЛЛЕРЕ, СПИНКА ПОДНИМЕТСЯ, А УПОР ДЛЯ НОГ ОПУСТИТСЯ. ОСОЗНАЙТЕ, ЧТО ЭТА КНОПКА, СПИНКА И УПОР ДЛЯ НОГ ПЕРЕСТАЮТ ДВИГАТЬСЯ, УГОЛ ЗАФИКСИРОВАН В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ.)




- ОПОРА ДЛЯ НОГ ВВЕРХ (НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ НА ПОДНЯТОЙ ПОДСТАВКЕ ДЛЯ НОГ КОНТРОЛЛЕРА. ОТПУСТИТЕ КНОПКУ УПОРА ДЛЯ НОГ, ОСТАНОВИТЕ ДВИЖЕНИЕ, УГОЛ ЗАФИКСИРОВАН В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ)

СОВЕТЫ: ZERO-ГРАВИТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С NASA КОСМИЧЕСКОЙ КАПСУЛЫ РАССЛАБИТЬСЯ ТЕОРИИ, ЧЕРЕЗ СПИНУ, СИДЕНЬЕ, ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ Т.Е. РАЗДЕЛ МУЛЬТИ УГОЛ ИЗМЕНЯЕМЫЙ, ЧТО ДЕЛАЕТ ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ВВЕРХ И СИДЕНЬЕ ВНИЗ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ УГОЛ $128 (+/-7)$ ГРАДУСОВ МЕЖДУ ТЕЛОМ И ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ. ПУСТЬ СЕРДЦЕ И КОЛЕНА НАХОДЯТСЯ НА ОДНОМ УРОВНЕ, СНИЖАЯ ДАВЛЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ ДО САМОГО НИЗКОГО, НО ВСЕ ДАВЛЕНИЕ ТЕЛА БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ НА ЯГОДИЦЫ, А БЛАГОДАРИ КОНСТРУКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ZERO GRAVITY, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЫНУЖДЕННАЯ ЗОНА ОТ ТЕЛА И МАССАЖНОГО КРЕСЛА, ПОЭТОМУ ВСЕ СИЛЫ МОГУТ БЫТЬ РАССЕЯНЫ НА МАССАЖНОМ КРЕСЛЕ, СНИЖАЯ ДАВЛЕНИЕ НА СЕРДЦЕ И ПОЗВОНОЧНИК, РЕАЛИЗУЯ ЛУЧШИЙ ОПЫТ МАССАЖА ZERO GRAVITY. СОЗДАЕТ ПОЛНОСТЬЮ РАССЛАБЛЯЮЩУЮ, ЕСТЕСТВЕННУЮ И КОМФОРТНУЮ ПОЗУ ДЛЯ МАССАЖА.


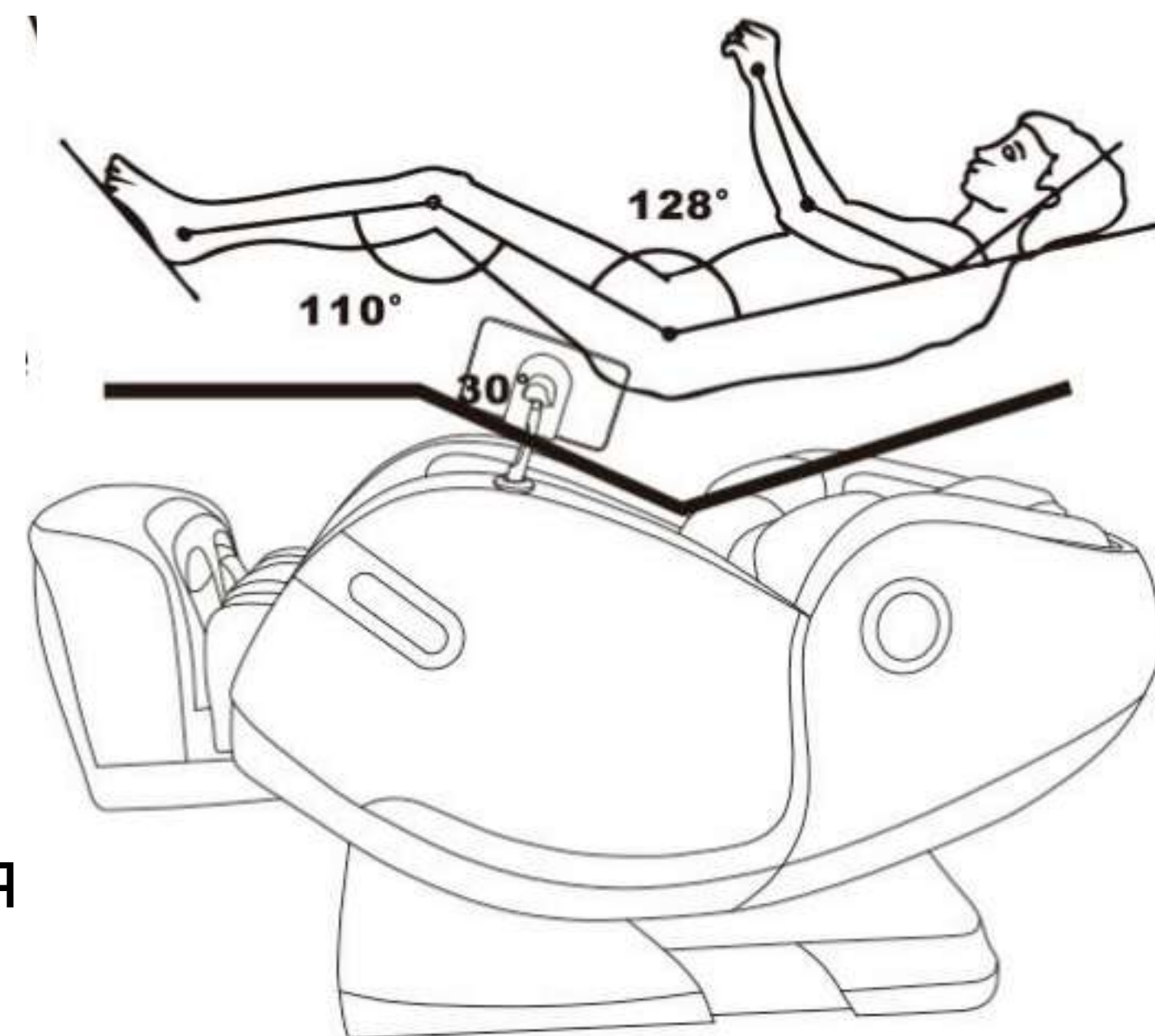


- 1) ПОЖАЛУЙСТА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПРЕДЕЛАХ ДОСЯГАЕМОСТИ СПИНКИ НЕТ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ПРЕДМЕТОВ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕОЖИДАННОЙ ТРАВМЫ ИЛИ ПОТЕРИ ИМУЩЕСТВА.
- 2) ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ СПИНКИ СЛЕДИТЕ ЗА ЗАЗОРОМ МЕЖДУ СПИНКОЙ И ПОДЛОКОТНИКОМ.
- 3) КОГДА ОПОРА ДЛЯ НОГ ДВИЖЕТСЯ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВСТАВАЙТЕ И НЕ ОТХОДИТЕ ОТ КРЕСЛА, НЕ ОСТАНОВЛИВАЙТЕ ДВИЖЕНИЕ ОПОРЫ ДЛЯ НОГ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЛУЧАЕВ ПОВРЕЖДЕНИЯ КРЕСЛА
- 4) ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

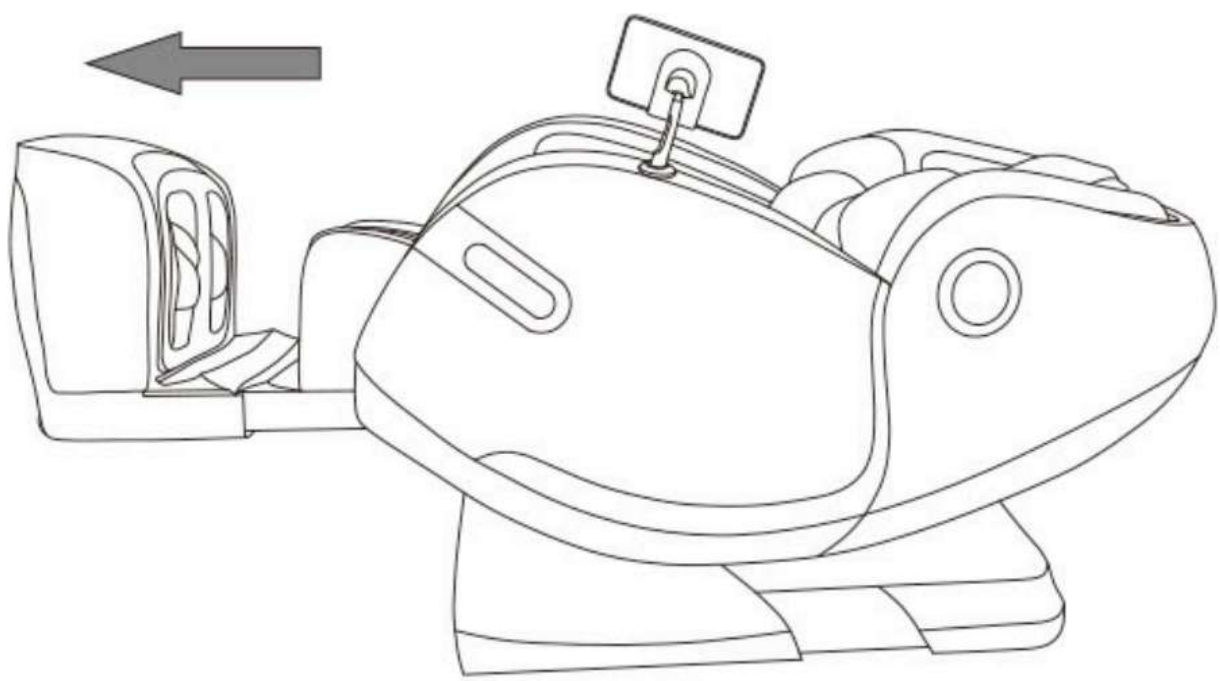


- ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ ВЫДВИГАЕТСЯ И ЗАДВИГАЕТСЯ НА 20 CM АВТОМАТИЧЕСКИ.

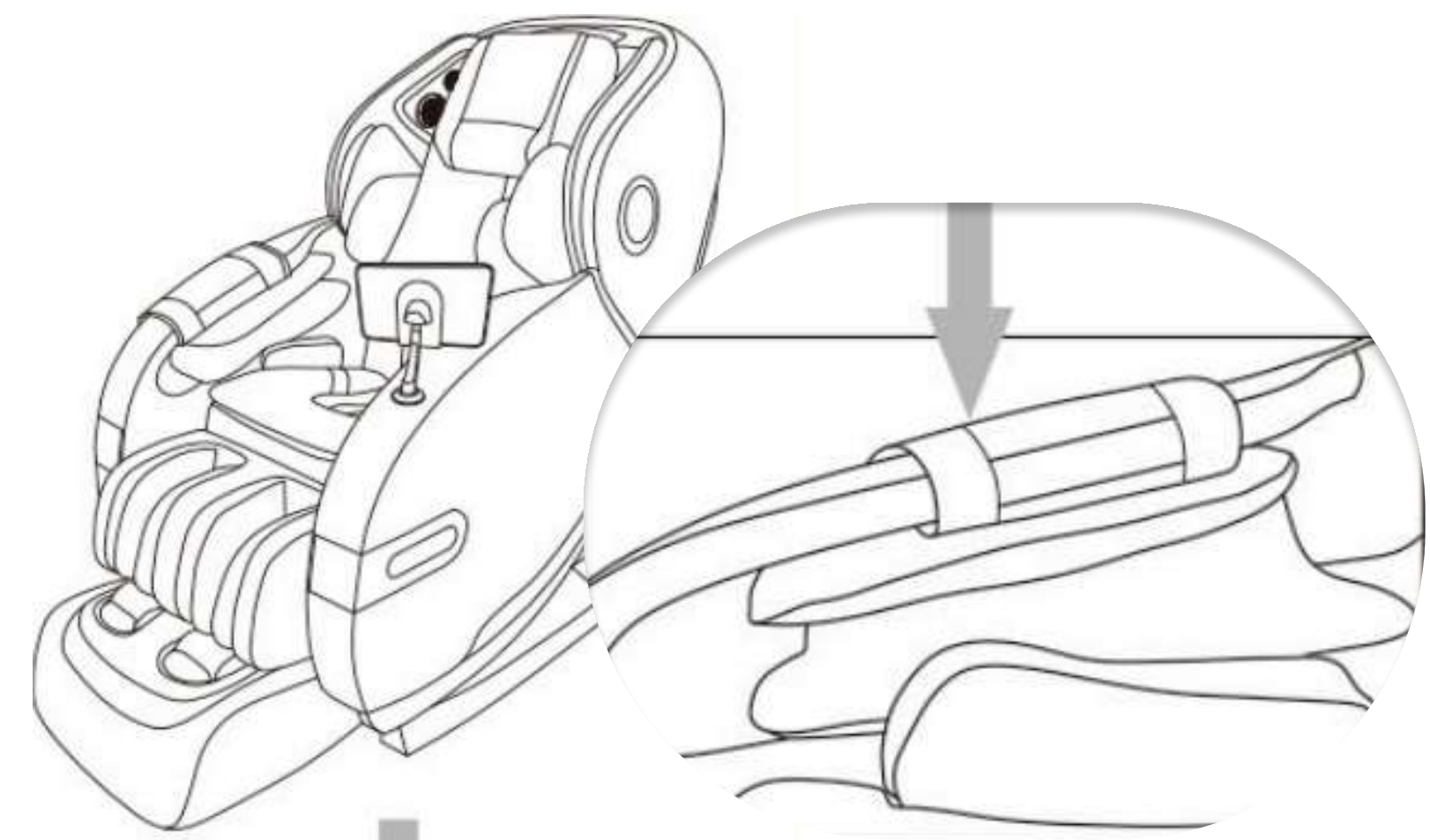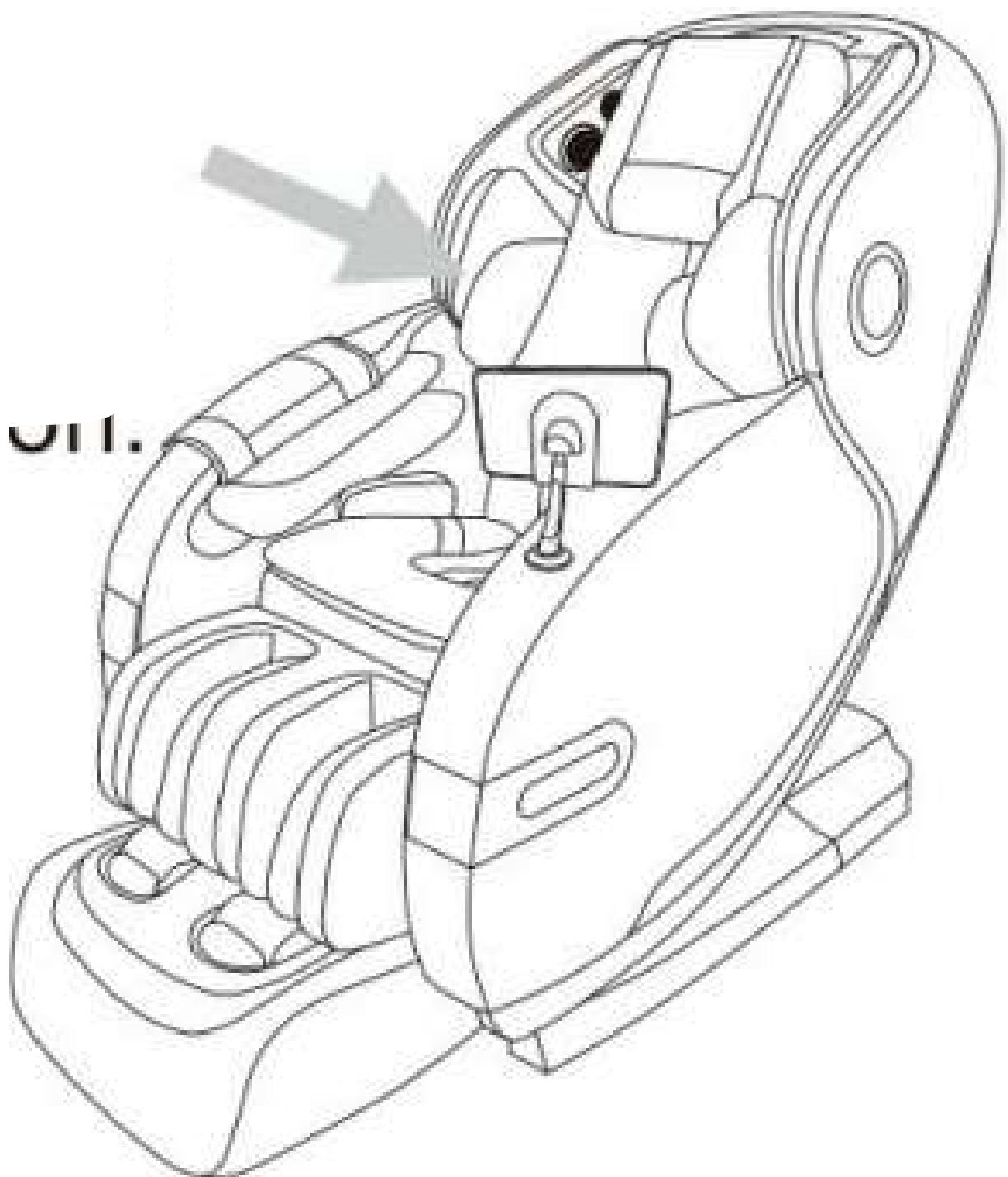


- МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ИСПОЛЬЗУЕТ ПОДЛОКОТНИКИ ТИПА КОСМИЧЕСКОЙ КАПСУЛЫ, СО ВСТРОЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ ИМПУЛЬСНОГО МАССАЖА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА. ПОМЕСТИТЕ РУКИ МЕЖДУ ПОДЛОКОТНИКАМИ. ПОСЛЕ НАПОЛНЕНИЯ ВОЗДУХОМ ДОСТИГАЕТСЯ РАЗМИНАЮЩИЙ МАССАЖ РУК И КИСТЕЙ. РУКИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ КОМФОРТНЫЙ МАССАЖ ПРИ ЛЮБОМ УГЛЕ НАКЛОНА КРЕСЛА.

- МНОГОСЛОЙНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ОБОИХ ПЛЕЧАХ, ПОМОГАЯ ВЫПОЛНЯТЬ ФУНКЦИЮ РАСТЯЖКИ. МАССАЖНЫЕ РОЛИКИ 4D ПРОДВИГАЮТ ВАШЕ ТЕЛО ВПЕРЕД, А ВОЗДУШНЫЕ ПОДУШКИ ЗАХВАТЫВАЮТ ПЛЕЧИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ МАКСИМАЛЬНУЮ РАСТЯЖКУ ВСЕГО ТЕЛА.

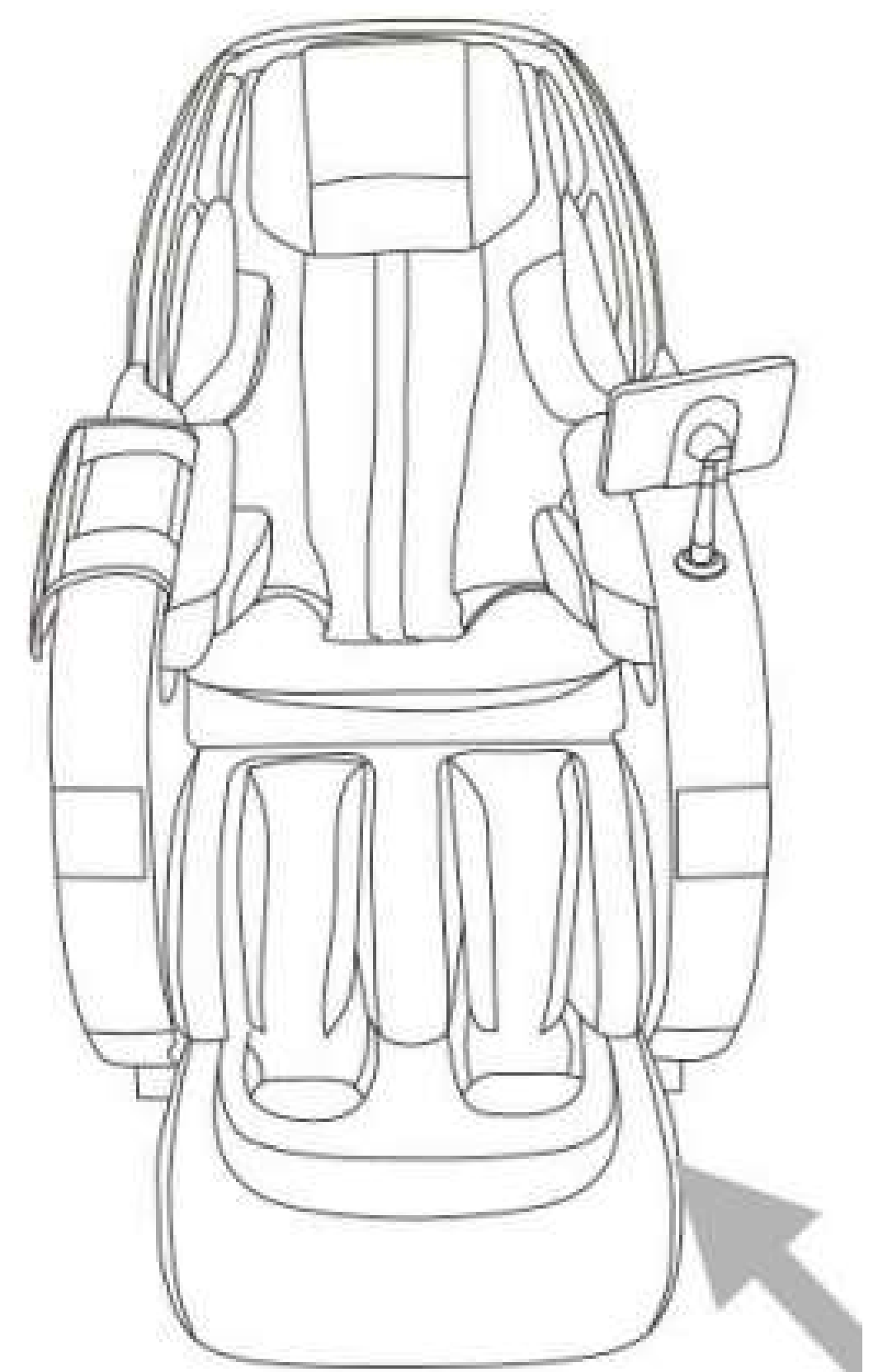



- ИННОВАЦИОННО РАЗРАБОТАННАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ ТЕХНИКА РАЗМИНАНИЯ НОГ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ЕДИНСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ РАЗМИНАНИЯ ПИЩИ, В СОЧЕТАНИИ С НАГРЕВАНИЕМ НОГ, ОНА МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЛУЧШИЙ ОПЫТ МАССАЖА НОГ, ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

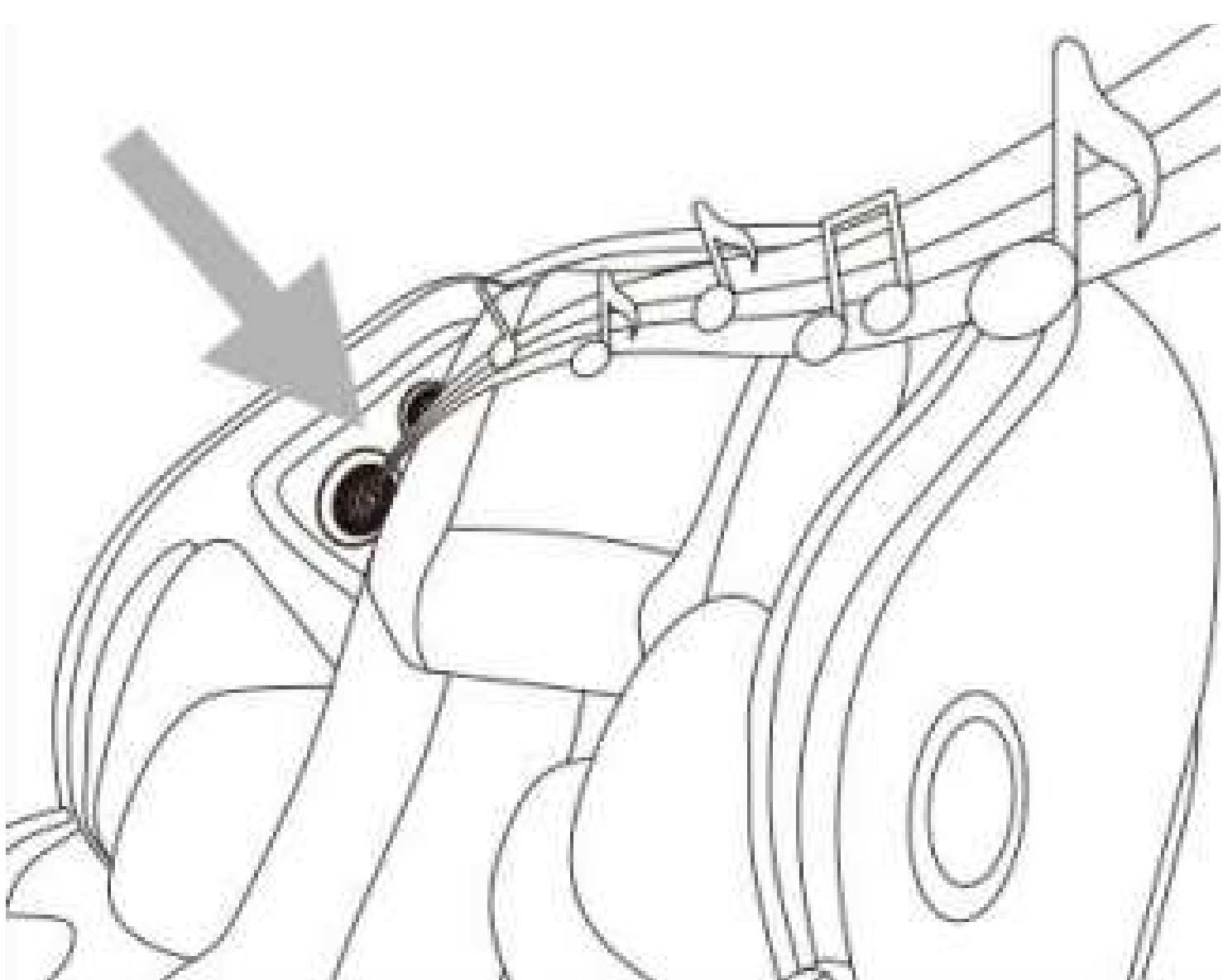

- В ПОДГОЛОВНИКЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ДИНАМИКИ. БЕСПРОВОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЛЕЕР BLUETOOTH ПОЗВОЛЯЕТ ИНТЕГРИРОВАТЬ МУЗЫКУ В ТЕХНИКУ МАССАЖА С ПОМОЩЬЮ СИНХРОННОЙ ТЕРАПИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ РОЛИКАМ МАССИРОВАТЬ ВАС В ТАКТ МУЗЫКЕ. РАССЛАБЛЕНИЕ ПОД СОБСТВЕННЫЕ МЕЛОДИИ УЛУЧШИТ СОСТОЯНИЕ КРОВИ И СНИМЕТ УСТАЛОСТЬ.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1) УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ЗОНЕ СПИНКИ И УПОРА ДЛЯ НОГ НЕТ ЛЮДЕЙ, ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ИЛИ ЧЕГО-ЛИБО ЕЩЕ.**

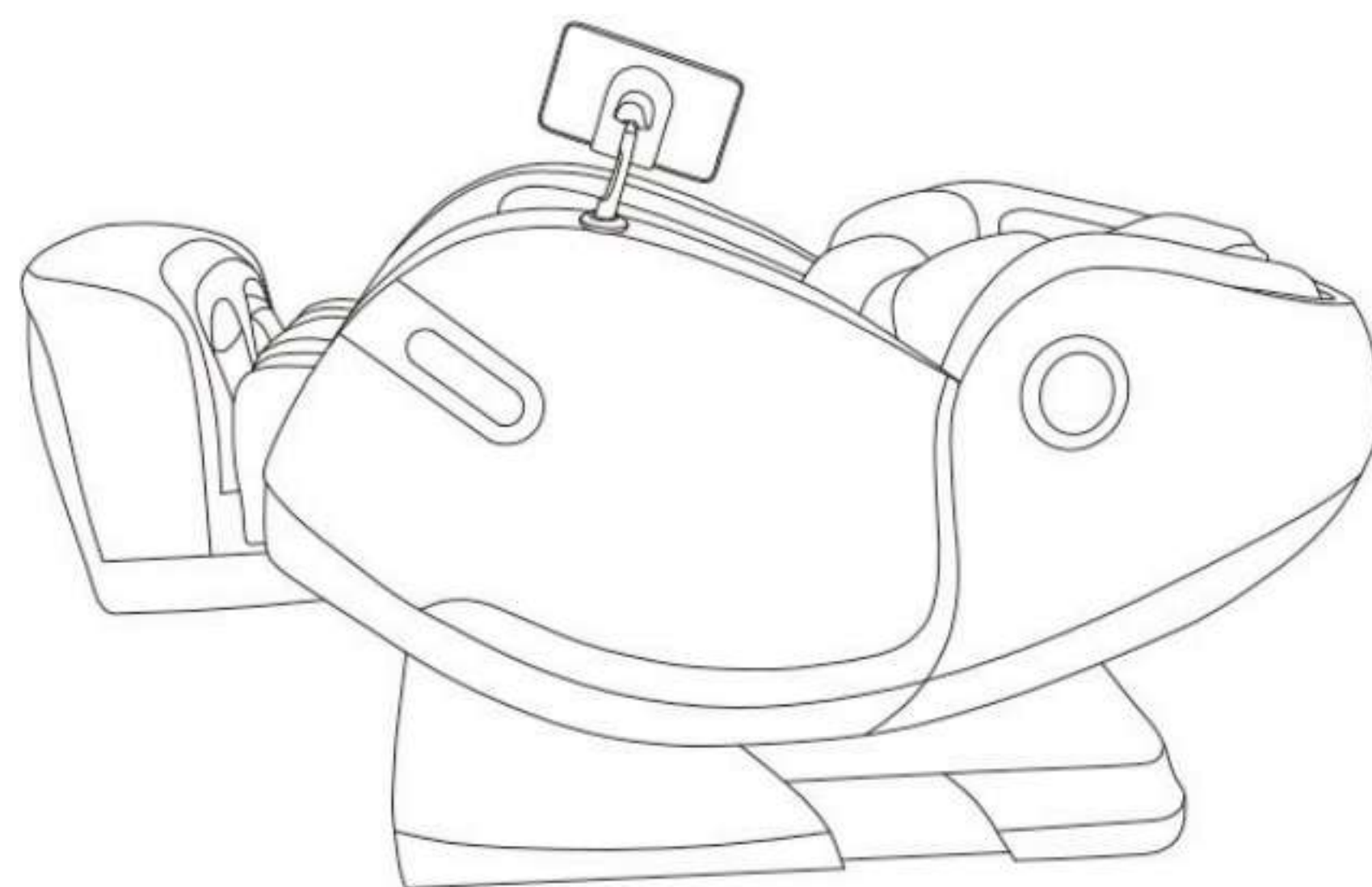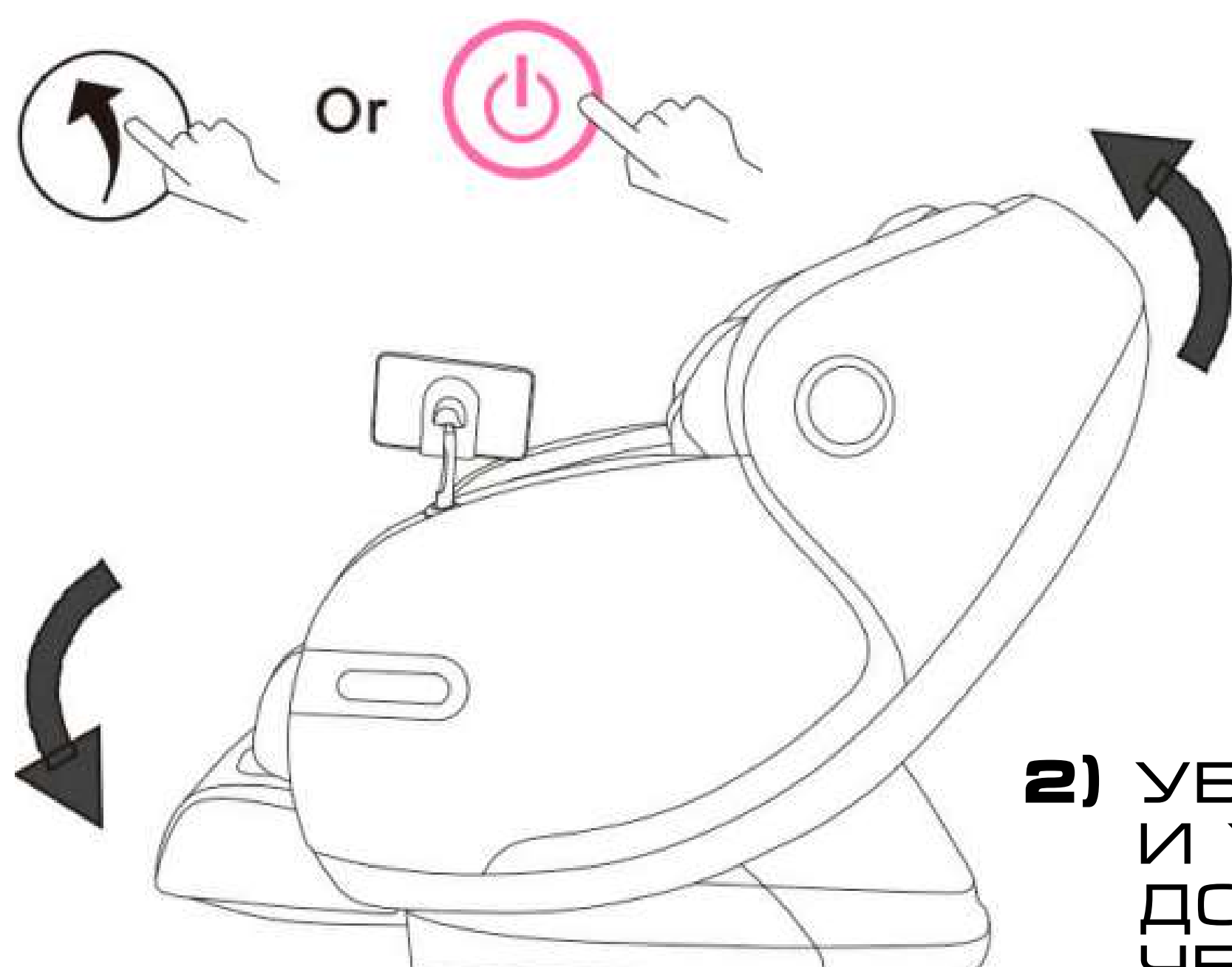


- 2) УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ЗОНЕ СПИНКИ И УПОРА ДЛЯ НОГ НЕТ ЛЮДЕЙ, ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ИЛИ ЧЕГО-ЛИБО ЕЩЕ.**


- 3) ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ КРЕСЛА В ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖИТЕ КОНТРОЛЛЕР В КАРМАН В ЛЕВОМ ПОДЛОКОТНИКЕ.**

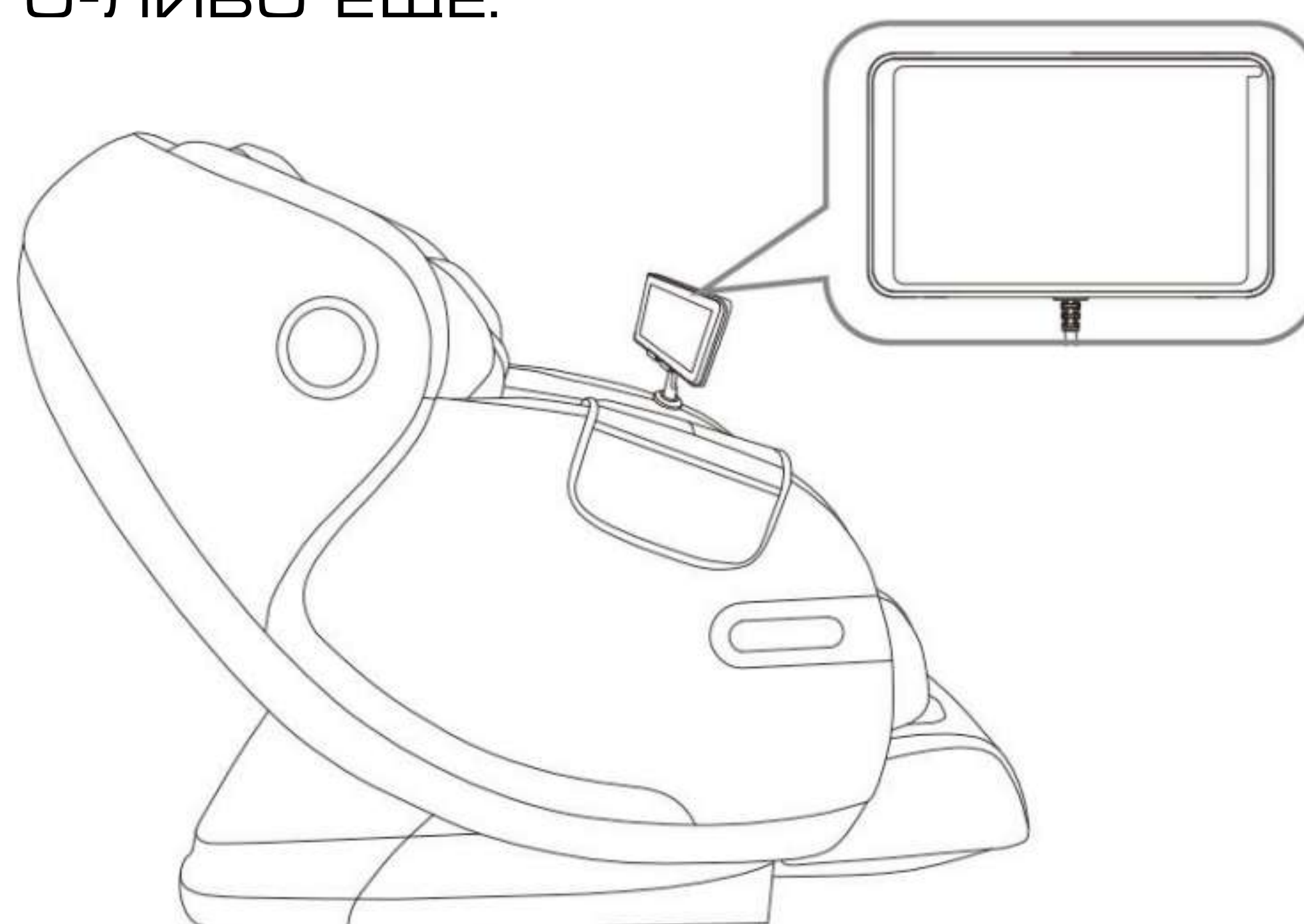

- 4) ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ**

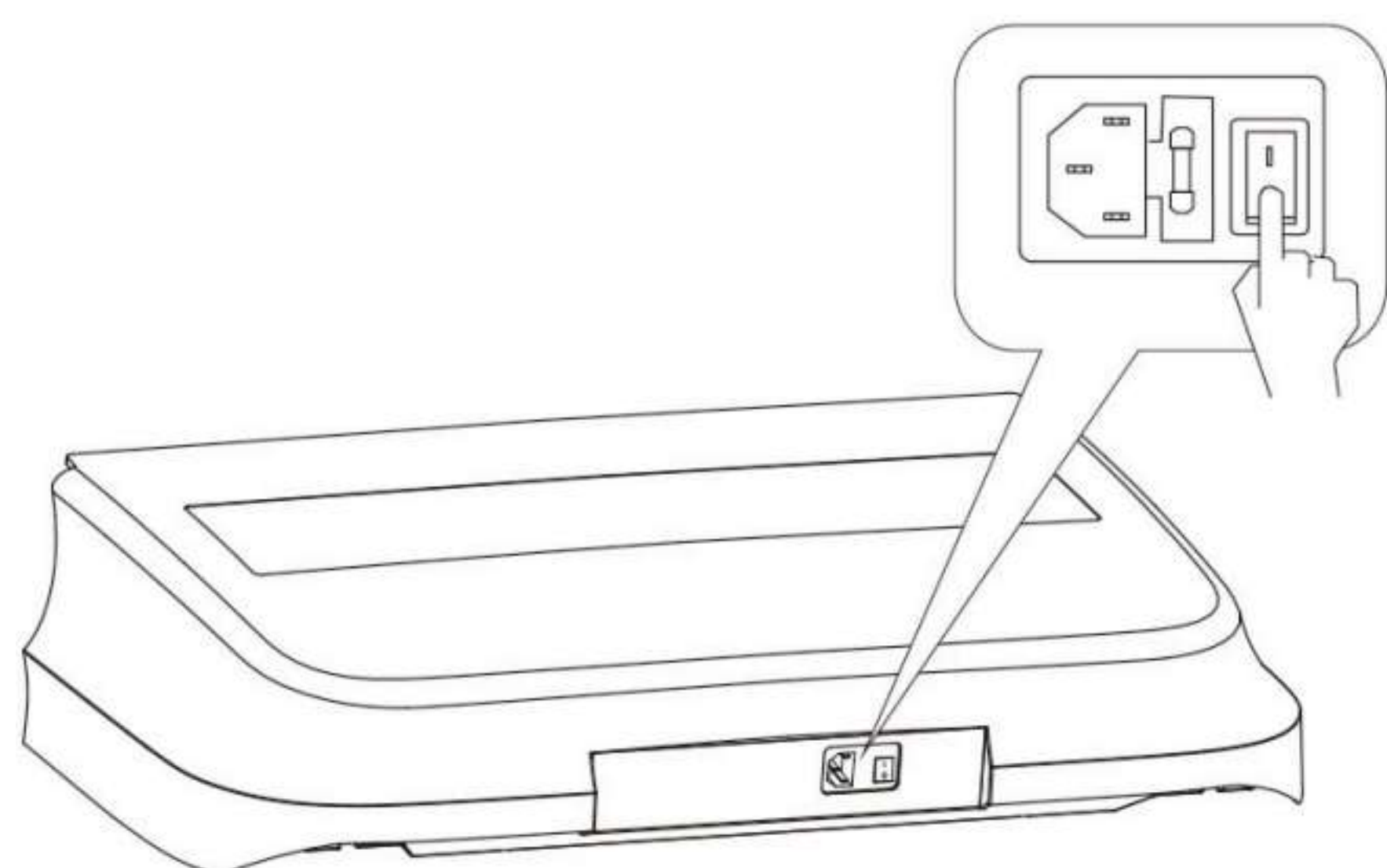

- 5) ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ РОЗЕТКИ (ВНИМАНИЕ: ДЕРЖИТЕ ВИЛКУ В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ)**

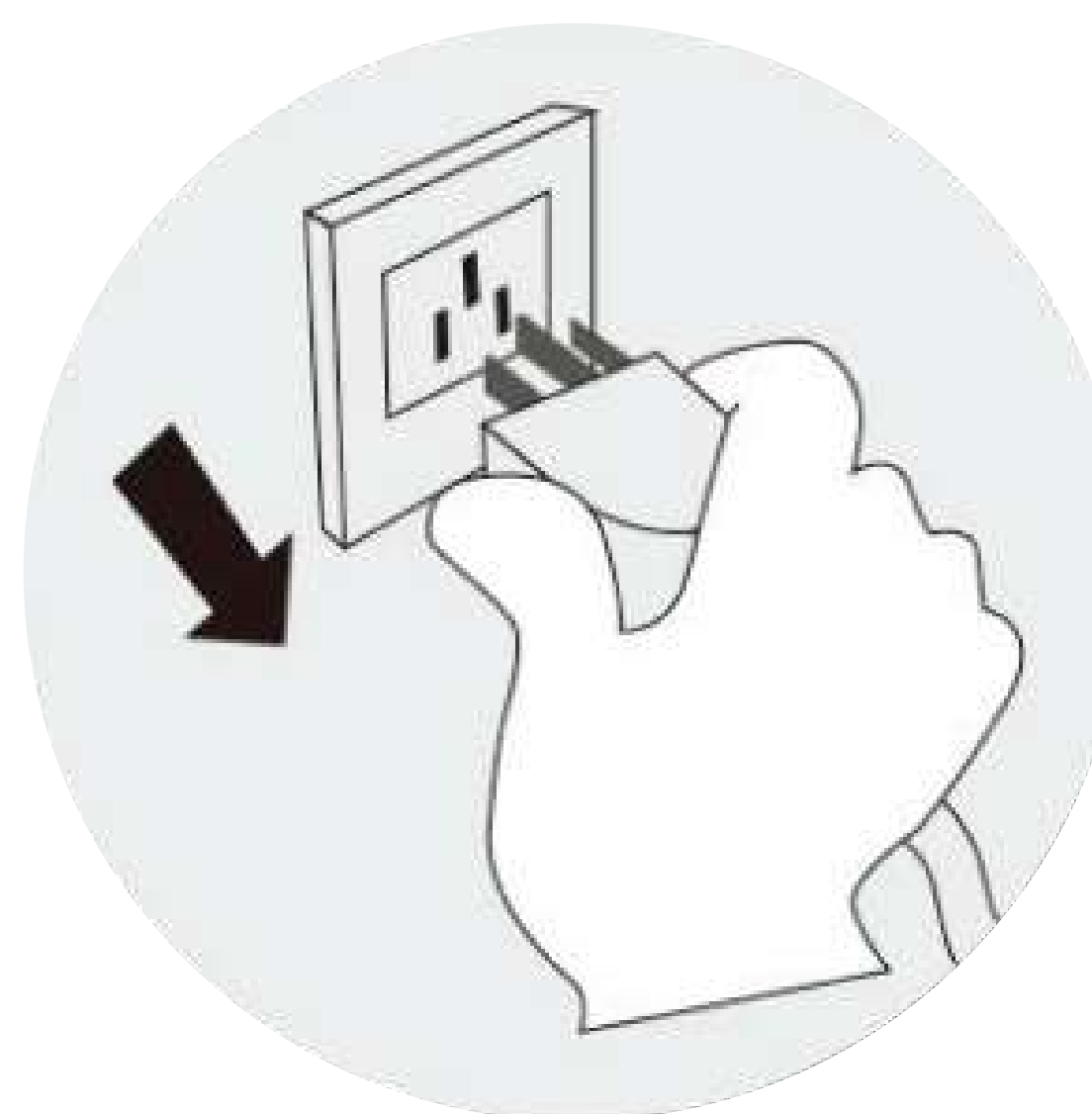


ВНИМАНИЕ:

- ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЖМИТЕ ВКЛ / ВЫКЛ, ЧТОБЫ ЗАВЕРШИТЬ ВСЕ МЕТОДЫ МАССАЖА И ДОЖДАТЬСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ДЕТЯМ ИЛИ ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ.
- ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ, ГРЯЗИ, ИЗБЕГАЙТЕ ПОВРЕЖДЕНИИ ИЗОЛЯЦИИ.

VII. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ КОЖА

АККУРАТНО ПРОТРИТЕ МЯГКОЙ И СЛЕГКА СУХОЙ ТКАНЬЮ.

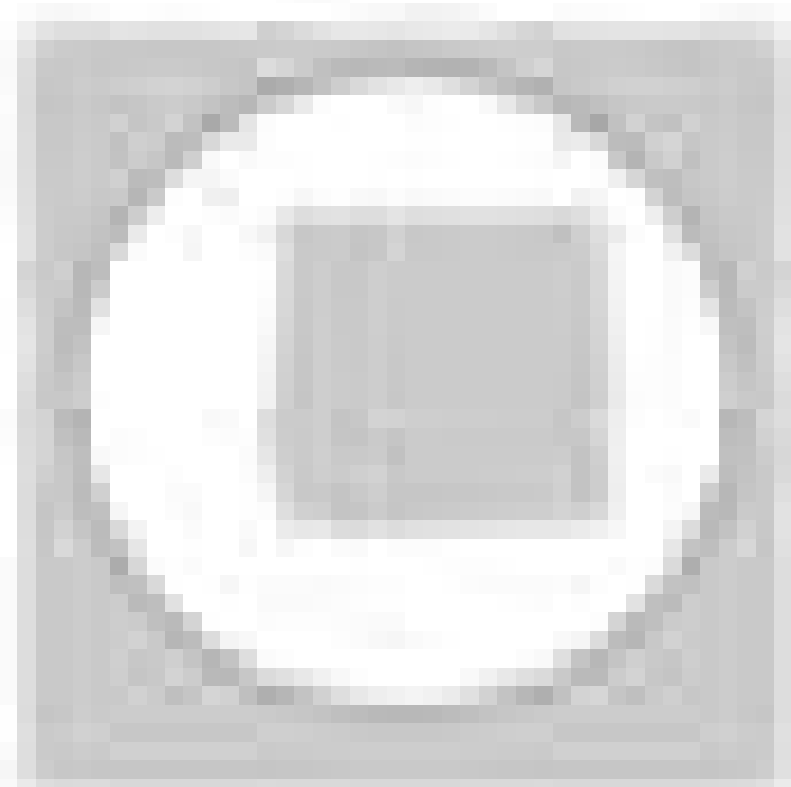

(ХИМИЧЕСКИЕ ИЛИ МЕДИЦИНСКИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ЗАПРЕЩЕНЫ)



ЕСЛИ КОЖА ГРЯЗНАЯ

- 1) ОКУНИТЕ МЯГКУЮ ТКАНЬ В 3-5% РАСТВОР НЕЙТРАЛЬНОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА, ОТОЖМИТЕ И АККУРАТНО ОЧИСТИТЕ ПЯТНО НА ПОВЕРХНОСТИ.
- 2) ОБИВКУ ПОСТИРАТЬ, ОТЖАТЬ И ПРОТЕРЕТЬ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ.



- 3) ПРОТРИТЕ ЕГО МЯГКОЙ ТКАНЬЮ
- 4) ДАТЬ ВЫСОХНУТЬ (ВОЗДУХОДУВКА ЗАПРЕЩЕНА)

ТКАНЬ

- 1) СМОЧИТЕ ТКАНЬ СЛАБЫМ НЕЙТРАЛЬНЫМ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ, ОТОЖМИТЕ ЕЕ И ОЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРИАЛА.
 - (РАЗБАВИТЕЛЬ, ГАЗ, СПИРТ ЗАПРЕЩЕНЫ). ПОЧИСТИТЕ ГРЯЗНЫЕ ДЕТАЛИ СЛАБЫМ НЕЙТРАЛЬНЫМ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ (ИЗБЕГАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ ЧИСТКИ)
- 2) ЧРЕЗМЕРНАЯ ОЧИСТКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ТКАНЕВОГО МАТЕРИАЛА.
- 3) ПРОТРИТЕ СМОЧЕННОЙ ВОДОЙ, НО ВЫЖАТОЙ ТКАНЬЮ.
- 4) МОЖНО СУШИТЬ.



ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ


- 1) СМОЧИТЕ ТКАНЬ НЕЙТРАЛЬНЫМ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ, ОТОЖМИТЕ И ПРОТРИТЕ
- 2) ПРОТРИТЕ СМОЧЕННОЙ ВОДОЙ, НО ВЫЖАТОЙ ТКАНЬЮ.
- 3) МОЖНО СУШИТЬ




ОЧИСТИТЕ КОНТРОЛЛЕР

- 1) ПОСЛЕ ОТЖИМА ПРОТРИТЕ МЯГКОЙ ТКАНЬЮ
- 2) МОЖНО СУШИТЬ

ПРОПЕЛЛЕНТ, РАЗБАВИТЕЛЬ
ИЛИ СПИРТ ЗАПРЕЩЕНЫ

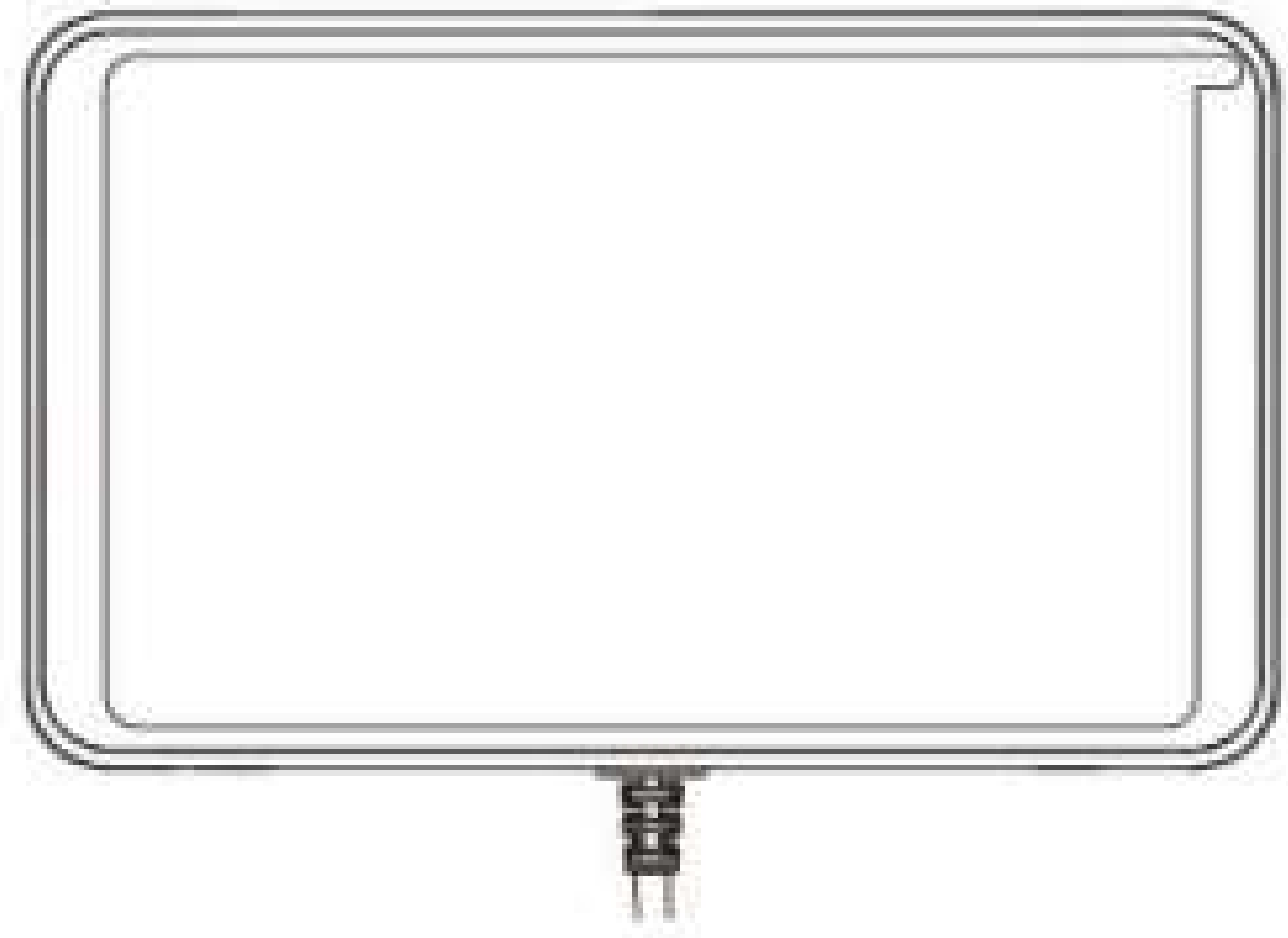


О ЧИСТКЕ

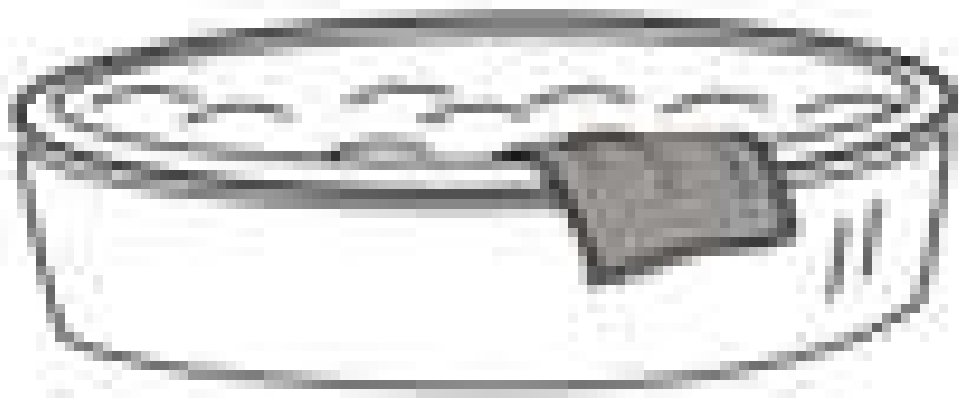

- ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ВИЛКЕ МОКРЫМИ РУКАМИ.
 - ВСТАВЛЯЯ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РУКИ СУХИЕ.
- В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ОЖОГ.

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

TELEGRAM:

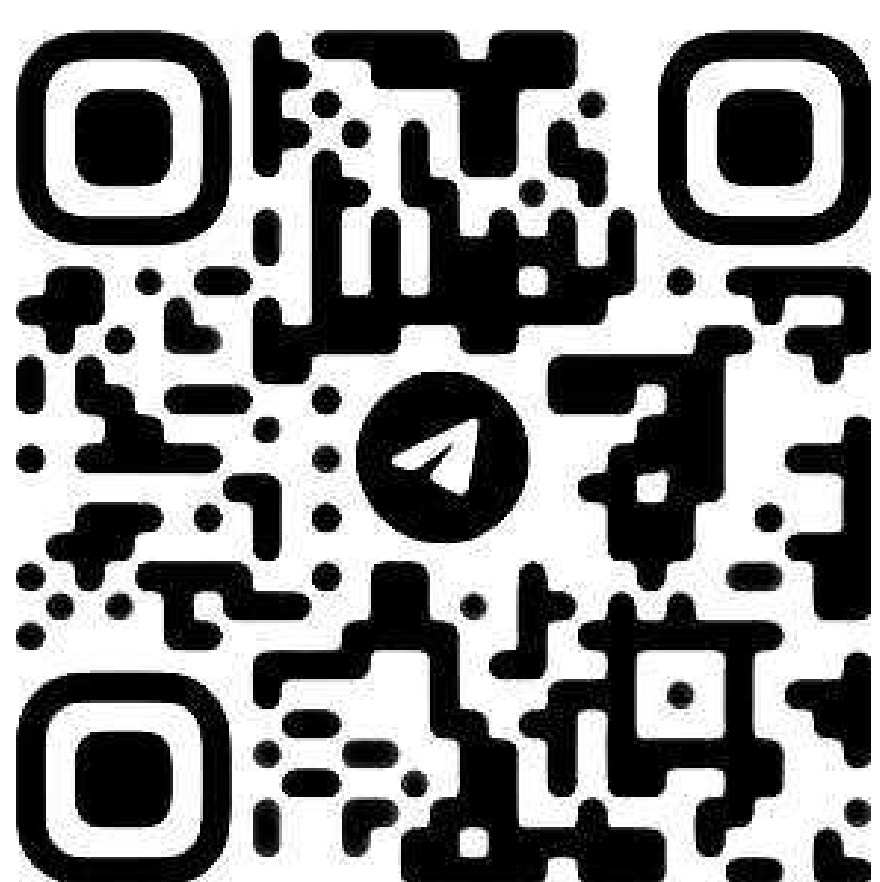

ВКОНТАКТЕ:



PINTEREST:



YOUTUBE:



VIII. РУКОВОДСТВО ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
МАССАЖНОЕ КРЕСЛО НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ.	ПРОВЕРЬТЕ, ВКЛЮЧЕН ЛИ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОГО УПРАВЛЕНИЯ
	НЕ ВЫБРАНА ФУНКЦИЯ МАССАЖА	ВЫБЕРИТЕ ФУНКЦИЮ МАССАЖА
	ПРОВЕРЬТЕ, ПЛОХОЙ ЛИ КОНТАКТ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ.	УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВИЛКА И РОЗЕТКА ПОДКЛЮЧЕНЫ
	ПРОВОД ИЛИ ВИЛКИ ПОВРЕЖДЕНЫ	ОБРАТИТЕСЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ИЛИ НАЗНАЧЕННОМУ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕМОНТА.
	СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	ЗАМЕНИТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТОЙ ЖЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.
	ЧТО-ТО НЕ ТАК С ВНУТРЕННЕЙ СХЕМОЙ	ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К НАЗНАЧЕННОМУ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕМОНТА.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ МАССАЖА СЛЫШЕН ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	ЭТО ЗВУК ВОЗДУШНОГО НАСОСА, ДВИГАТЕЛЯ И МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ	НОРМАЛЬНЫЙ ЗВУК, НЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬ НА НЕГО ВНИМАНИЕ.
РАЗЛИЧНАЯ ВЫСОТА ЛЕВОГО РОЛИКА И ПРАВОГО РОЛИКА	РОЛИКИ МАССАЖНЫЕ РАБОТАЮТ ПОСМЕННО	НОРМАЛЬНО, НЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬ НА ЭТО ВНИМАНИЕ
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗВУК ВНЕЗАПНО СТАНОВИТСЯ НАМНОГО ГРОМЧЕ	ПРОВЕРЬТЕ, НЕ СВЯЗАНО ЛИ ЭТО С ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ	ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ЧТОБЫ МАССАЖЕР ОСТАВАЛСЯ В ПОКОЕ БОЛЕЕ ПОЛУЧАСА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАБОТАТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ.
	ИЗ-ЗА ДОЛГОЙ РАБОТЫ ИЗНОШЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ. ЭТО НОРМАЛЬНО	ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К НАЗНАЧЕННОМУ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕМОНТА.

РУКОВОДСТВО ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ФУНКЦИЯ МАССАЖА ВНЕЗАПНО ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	ВНЕЗАПНО ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ	ПОДКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО С НОВА
	ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ ИСТЕКЛО	ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ЧТОБЫ МАССАЖЕР ОСТАВАЛСЯ В ПОКОЕ БОЛЕЕ ПОЛУЧАСА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАБОТАТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ.
НИ СПИНКУ, НИ ОПОРУ ДЛЯ НОГ НЕЛЬЗЯ ОПУСТИТЬ	ПРОВЕРИТЬ, НЕТ ЛИ ПРЕПЯТСТВИЙ; КРЕСЛО ПЕРЕГРУЖАЕТСЯ; В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ИНОГДА МАССАЖНЫЙ АППАРАТ МОЖЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕСТАТЬ РАБОТАТЬ	УСТРАНИТЕ ПРЕПЯТСТВИЯ; ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ЧТОБЫ МАССАЖЕР ОТДЫХАЛ БОЛЕЕ ПОЛУЧАСА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАБОТАТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ
КРЕСЛО НЕ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	ЧРЕЗМЕРНАЯ РАБОТА; ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ИСТЕКЛО	ОБРАТИТЕСЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ, НАЗНАЧЕННОМУ ИЛИ АВТОРИЗОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ЗАМЕНЫ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД, ВИЛКА ОТДАЕТ ТЕПЛО	КРЕСЛО МОЖЕТ РАБОТАТЬ С ПЕРЕГРУЗКОЙ	ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ЧТОБЫ МАССАЖЕР ОСТАВАЛСЯ В ПОКОЕ БОЛЕЕ ПОЛУЧАСА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАБОТАТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ.
	ДРУГОЙ НЕНОРМАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ	ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К НАЗНАЧЕННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.



ПРИМЕЧАНИЕ:

ЕСЛИ ПРОБЛЕМА НЕ ВЫЗВАНА ВЫШЕУКАЗАННОЙ ПРИЧИНОЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫКЛЮЧИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ И ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ЗАТЕМ ОБРАТИТЕСЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ИЛИ АГЕНТУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ РЕМОНТА ВАШЕГО КРЕСЛА.

IX. УСЛОВИЯ И СРОКИ ГАРАНТИИ

- 1.** УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ТОВАРА И ДОВОДЯТСЯ ДО ПОКУПАТЕЛЯ ПРОДАВЦОМ В НАСТОЯЩЕМ ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОВАРА.
- 2.** НА ВСЕ ТОВАРЫ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ ПРОДАВЦА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ НА ТОВАР УКАЗАН В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ, ВЫДАННОМ ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА.
- 3.** ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРИНЯТЬ ТОВАР У ПРОДАВЦА ПО КОМПЛЕКТАЦИИ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ, ЗАФИКСИРОВАВ ФАКТ ПРИЕМА В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ; ПРОВЕРИТЬ ПОЛНОТУ ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА. ПРЕТЕНЗИИ ПО НЕКОМПЛЕКТУ И МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ОБНАРУЖЕННЫМ ПОСЛЕ ПРИЁМА ТОВАРА У ПРОДАВЦА, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И БУДУТ УСТРАНЕНЫ ЗА СЧЁТ ПОКУПАТЕЛЯ.
- 4.** ГАРАНТИЯ НА ТОВАР ДЕЙСТВУЕТ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ВСЕХ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРИ УСЛОВИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕГУЛЯРНОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ВЛАДЕЛЬЦА ТРЕНАЖЕРА.
- 5.** СРОК СЛУЖБЫ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ СОСТАВЛЯЕТ 7 ЛЕТ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДУЕМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
- 6.** ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
 - НЕИСПРАВНОСТИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ, ВЫЗВАННЫЕ ВНЕШНИМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ И ХИМИЧЕСКИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ (СКОЛЫ, ЦАРАПИНЫ, ТРЕЩИНЫ, ПЯТНА И Т.П.);
 - КОМПОНЕНТЫ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ЕСТЕСТВЕННОМУ ИЗНОСУ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ КОТОРЫХ ВОЗНИКЛА ВСЛЕДСТВИЕ ИХ ИЗНОСА И СТИРАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НОРМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ПОРУЧНИ ИЗ ПЕНОРЕЗИНЫ, ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ И БАТАРЕЯ, НАКЛЕЙКИ, СПИНКИ, СИДЕНИЯ И ВАЛИКИ ИЗ КОЖЗАМЕНИТЕЛЯ (ПОРОЛОНА, ПЕНОРЕЗИНЫ), ЩЁТКИ И ПОДШИПНИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ПОДШИПНИКИ ВАЛОВ, КНОПОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ КОНСОЛИ И РУЧЕК УПРАВЛЕНИЯ;
 - ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ И ОПЕРАЦИИ РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ ОПЕРАЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ: СМАЗКА ПРИВОДОВ И ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, ЧИСТКА И СМАЗКА ДЕКИ, ЧИСТКА ВАЛОВ, ЧИСТКА ШКИВА И ПРИВОДНОГО РЕМНЯ, ЦЕНТРОВКА И НАТЯЖЕНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА И ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ, ЗАМЕНА ЩЁТОК, ПОДШИПНИКОВ И ЧИСТКА КОЛЛЕКТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ПРОТЯЖКА БОЛТОВ СОЕДИНЕНИЙ ТРЕНАЖЕРА, КАЛИБРОВКА (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ТАК КАК ПЕРЕОДИЧНОСТЬ И ОБЪЁМ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕНАЖЕРА);
 - ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ТОВАРА: НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА КОНСОЛИ, ЦЕНТРОВКА И НАТЯЖЕНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА, УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ, ЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ;
 - ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ПОЖАР, НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ЗАТОПЛЕНИЕ, НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И Т.Д.).

УСЛОВИЯ И СРОКИ ГАРАНТИИ

7. ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ В ХОДЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ РЕМОНТА ТОВАРА;
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИБО В СВЯЗИ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ В ЦЕЛЯХ УДОВОЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО МОДЕЛЬЮ ТОВАРА;
- ПРОНИКНОВЕНИЕ ЖИДКОСТИ, ПЫЛИ, НАСЕКОМЫХ И ДРУГИХ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ ВНУТРЬ ТОВАРА (МОТОРНЫЙ ОТСЕК, КОНСОЛЬ, ДЕКА);
- ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА (ОТСУТСТВУЕТ НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ, ДАТА ПРОДАЖИ, ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ТОВАРА, ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ НЕ ОРИГИНАЛЬНОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА;
- ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЫЗВАНЫ НЕСООТВЕТСТВИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ДРУГИМИ ВНЕШНИМИ ФАКТОРАМИ (КЛИМАТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ);
- ЕСЛИ НЕДОСТАТОК ТОВАРА ЯВИЛСЯ СЛЕДСТВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ И/ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, АКСЕССУАРОВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ, НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИЛИ НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМАТОВ ИНФОРМАЦИИ.

8. ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОБМЕНЕ ИЛИ ВОЗВРАТЕ ТОВАРА НЕОБХОДИМО СОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

- КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА, ВКЛЮЧАЯ УПАКОВОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (КОРОБКА, ЭЛЕМЕНТЫ УПАКОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И Т.Д.);
- СОХРАНЕНИЕ ТОВАРНОГО ВИДА ТОВАРА (ОТСУТСТВИЕ ЦАРАПИН, ПОТЕРТОСТЕЙ И Т.Д.);
- НАЛИЧИЕ ОРИГИНАЛА ТОВАРНОГО ЧЕКА, ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

9. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СКРЫТЫМИ ДЕФЕКТАМИ ТОВАРА. ДАННЫЕ ВИДЫ РАБОТ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ПО УТВЕРЖДЕННОМУ ПРЕЙСКУРАНТУ. ДИАГНОСТИКА ЗАЯВЛЕННОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ПОКРЫВАЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ХАРАКТЕР ЗАЯВЛЕННОЙ НЕИСПРАВНОСТИ.

10. СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОВАРА, ОПИСАННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРИЛАГАЕМОЙ К НЕМУ, МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ КАК САМИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ТАК И СПЕЦИАЛИСТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

11. ЕСЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА В РЕГИОНАХ ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРА ИЛИ ЕГО ЧАСТЕЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПРОДАВЦА, ИЛИ ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ КОМАНДИРОВКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРОДАВЦА, ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ВОЗЛАГАЮТСЯ НА ПОКУПАТЕЛЯ.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ГАРАНТИИ



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТЕ В КАРТОЧКЕ ТОВАРА ПРИОБРЕТЕННОЙ МОДЕЛИ

- * **УЗЛЫ ДВИЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ** - ДЕКА, ВАЛЫ БЕГОВОГО ПОЛОТНА, ШКИВ С ОСЬЮ, СЕРВОПРИВОД, КОНСОЛЬ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ (ССВ, РСВ), ПУЛЬСОМЕРЫ, ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (МСВ, ИНВЕРТОР), ГЕНЕРАТОР, КАБЕЛИ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА, ШЛЕЙФЫ, ЭКСЦЕНТРИКИ, ПРИВОДЫ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЁРОВ: ШКИВ, ПОДШИПНИКИ, ВТУЛКИ, РОЛИКИ, СИЛОВЫЕ БЛОКИ, ГРУЗОВЫЕ СТОЙКИ; МАГНИТНАЯ СИСТЕМА НАГРУЗКИ, МАХОВИК, ФИКСАТОРЫ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЙ.
- ** **ДЕТАЛИ ИЗНОСА** - БЕГОВОЕ ПОЛОТНО, ПРЫЖКОВЫЙ МАТ, ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ, КНОПОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЖУХИ И ЗАГЛУШКИ, БОКОВЫЕ НАКЛАДКИ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК, ТРОСЫ И РЕМНИ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЁРОВ, ЭЛАСТОМЕРЫ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК, ЗАЩИТНАЯ СЕТКА БАТУТА, ТРОС РЕГУЛИРОВКИ НАГРУЗКИ.
- *** **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** - ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ И БАТАРЕИ, НАКЛЕЙКИ, ОБИВКА ИЗ КОЖЗАМЕНИТЕЛЯ, НАБИВКА СИДЕНИЙ И ВАЛИКОВ (ПОРОЛОН, ПЕНОРЕЗИНА), ЩЁТКИ И ПОДШИПНИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, КНОПОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ КОНСОЛИ И РУЧЕК УПРАВЛЕНИЯ.

ДОМАШНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЛИЧНОГО, СЕМЕЙНОГО, ДОМАШНЕГО ИЛИ ИНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

ПОЛУКОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ИЛИ В ИНЫХ ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИЧНЫМ, СЕМЕЙНЫМ, ДОМАШНИМ И ИНЫМ ПОДОБНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ: ОТЕЛИ, САНАТОРИИ, ШКОЛЫ, ДЮСШОР, ДОМА ОТДЫХА.

КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ИЛИ В ИНЫХ ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИЧНЫМ, СЕМЕЙНЫМ, ДОМАШНИМИ ИНЫМ ПОДОБНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ: ФИТНЕС-КЛУБЫ, СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ.

ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

ТЕЛЕФОН: 8 (800) 777-79-21
ПОЧТА: INFO@KOENIGSMANN.RU

ИЛИ НА САЙТЕ ПЕРЕИДЯ ПО QR-КОДУ





**BE FIT
BE KOENIGSMANN**

KOENIGSMANN.RU